


waterpik^{TM/MC}

**WaterpikTM
SonicTM
Toothbrush STW
Series**

**Szczoteczka
Soniczna
WaterpikTM
SonicTM
STW-03**

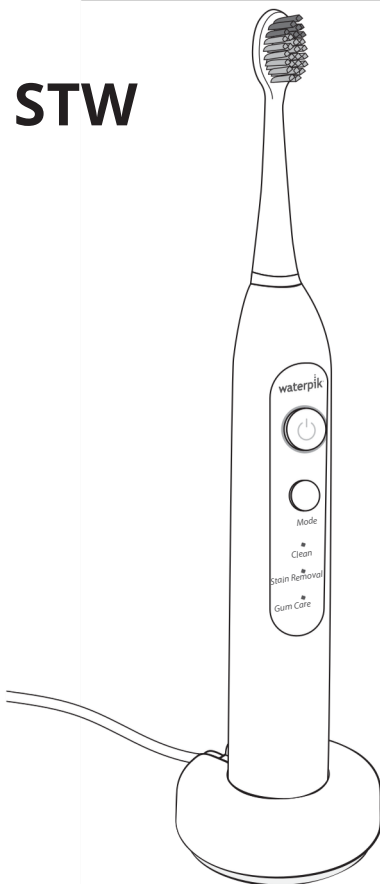

www.waterpik.pl

OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

- Produkt przeznaczony jest do użytku domowego.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

- Nie stosuj urządzenia podczas kąpieli.
- Nie umieszczaj i nie przechowuj produktu w miejscu, w którym może упаść lub zostać wciągnięty do wanny lub zlewu.
- Nie umieszczaj oraz nie wrzucaj urządzenia do wody lub innego płynu.
- Nie sięgaj po produkt, który wypadł do wody. W takim wypadku natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie dotykaj dostarczonego przez producenta zasilacza USB (kabla USB) mokrymi rękami.
- Odłącz zasilanie USB (dostarczone przez producenta), gdy urządzenie nie jest używane.
- Sprawdź przewód ładowający dostarczony przez producenta (kabel USB), pod kątem uszkodzeń powstałych przed pierwszym użyciem oraz w trakcie eksploatacji produktu.

OSTRZEŻENIE:

Aby ograniczyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej odpowiednie instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

*** Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.**

- Używaj tego produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji lub zaleceniami stomatologa.
- Nie używaj tego produktu, jeśli ma uszkodzoną obudowę, przewód lub wtyczka nie działają prawidłowo, jeśli zostały upuszczone lub uszkodzone, lub wpadły do cieczy. Skontaktuj się z serwisem PolcardBis pod numerem 734 109 938 lub na stronie www.waterpik.pl
- Do ładowania tego produktu wymagana jest ładowarka USB, posiadająca przynajmniej certyfikat bezpieczeństwa (IPX4, klasa II) o znamionowym napięciu wyjściowym 5,0 V DC, maks. 1,0 A.
- Nie podłączaj tego urządzenia do sieci napięciowej, który różni się od napięcia podanego na urządzeniu lub ładowarce.
- Trzymaj przewód ładowający z dala od gorących powierzchni.
- Nie stosuj urządzenia na zewnątrz ani w miejscach, w których występuje aerozol oraz w miejscach, w których stosuje się produkty (w sprayu) lub podaje się tlen.

- Używaj wyłącznie końcówek wymiennych szczoteczki oraz akcesoria zalecane przez WaterPik, Inc., określone w niniejszej instrukcji obsługi
- W przypadku uszkodzenia przewodu ładującego należy go wymienić.
- Jeśli lekarz zalecił Ci przyjęcie antybiotyku przed zabiegami stomatologicznymi, powinieneś skonsultować się ze swoim dentystą przed użyciem tego urządzenia lub jakiegokolwiek innego środka wspomagającego higienę jamy ustnej.
- Przed użyciem urządzenia należy zdjąć biżuterię z ust.
- Nie należy stosować urządzenia w przypadku otwartej rany na języku lub w ustach.

- Upewnij się, że styki przewodu, urządzenia i zasilacz jest czysty i suchy podczas ładowania urządzenia.
- Nie narażaj baterii ani urządzenia na działanie nadmiernych temperatur.
- Stosowanie past do zębów zawierających nadtlenek może spowodować uszkodzenie plastikowej obudowy tego produktu.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Opis produktu	5
Pierwsze kroki z Sensonic™	6
Pielęgnacja szczoteczki Sensonic™	7
Pielęgnacja baterii szczoteczki do zębów	8
utylizacja/recykling baterii i usuwanie baterii	
Warranty Information	10

SYMBOLS

Następujące symbole mogą pojawić się na Twoim produkcie i/lub opakowaniu. Niektóre z tych symboli mogą nie być istotne w Twoim regionie i są wymienione wyłącznie w celach informacyjnych.

Symbol	Definicja	Symbol	Definicja
	Zapoznaj się z instrukcją obsługi		Nie zanurzaj urządzenia w żadnym płynie.
	Producent		Nie używaj tego urządzenia pod prysznicem, w wannie i nie zanurzaj w żadnym płynie.
IPX7 or IPX4	Kod ochrony przed wnikaniem		Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej
	Sprzęt klasy II IEC		Oznakowanie zgodności CE
	Odłączany zasilacz		Ocena zgodności w Wielkiej Brytanii
	Napięcie prądu stałego (DC)		Znak zgodności z przepisami
	Napięcie prądu przemiennego (AC)		Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Szczoteczka Sensonic™


1. Końcówka szczoteczki Sensonic™
2. Przycisk zasilania szczoteczki do zębów
3. Wskaźnik ładowania LED
4. Przycisk trybu szczoteczki do zębów
5. Wskaźnik trybu LED
6. Baza ładująca
7. Kabel do ładowania USB
8. Etui podróżne na szczoteczkę do zębów

7



Kabel do ładowania USB
20030405-2 (Biały)

8

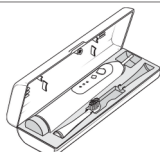


Etui podróżne
20031437-1 (Biały)

Końcówka szczoteczki Sensonic™

(1 sztuka w zestawie)


Końcówki szczoteczki*

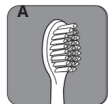

*Wymieniaj co 3 miesiące

Wymienne końcówki szczoteczek można nabyć online na stronie

www.waterpik.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 600 895 430

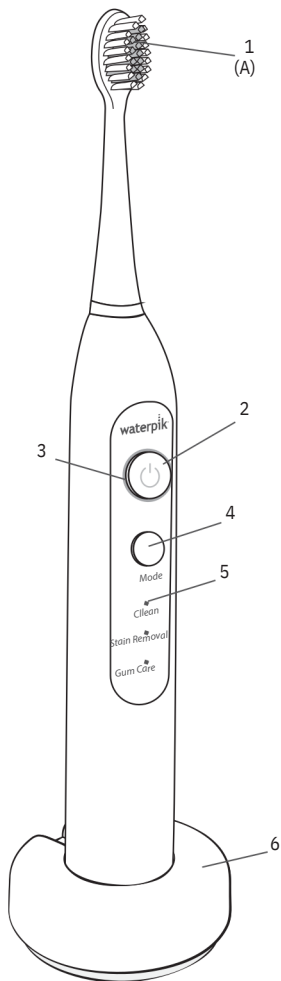


Szczoteczka Sensonic™




Baza ładująca
20031405-1 (Biały)

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW SENSONIC™

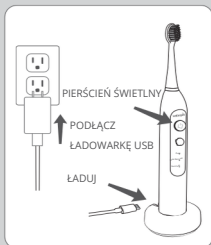

Ładowanie szczoteczki Sonic™

Przed pierwszym użyciem ładuj szczoteczkę przez 4 godziny. Pierścień świetlny na ręczce będzie migał podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu wszystkie światła wyłączą się. Pierścień świetlny będzie świecił na czerwono, gdy bateria będzie bliska rozładowania. Pełne naładowanie wystarczy na około 2 tygodnie typowego użytkowania (2 minuty szczotkowania dwa razy dziennie). **Uwaga:** Zapoznaj się z sekcją WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA™, aby uzyskać informacje na temat wymaganych specyfikacji ładowarki ściennej USB.


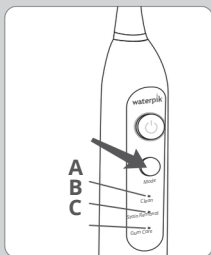


Tryby

- Czystość: Wyjątkowa skuteczność codziennego czyszczenia.
- Usuwanie plam: Delikatnie usuwa plamy powierzchniowe.
- Masaż dziąseł: delikatnie wzmacnia stymulację dziąseł.

Szczotkowanie Sonic™

- Nasunij główkę szczoteczki na uchwyt i mocno dociśnij.
- Umieść główkę szczoteczki w ustach przed włączeniem urządzenia.
- Wybierz tryb, naciskając przycisk trybu.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ustaw szczoteczkę wzdłuż linii dziąseł pod kątem 45 stopni.
- Używaj lekkiego nacisku z małymi, powolnymi ruchami do przodu i do tyłu, obejmując jeden lub dwa zęby na raz.
- Quad Timer: Szczoteczka do zębów utworzy krótką przerwę co 30 sekund, aby przypomnieć Ci o przejściu do następnego kwadrantu ust.
- 2-minutowy timer: Szczoteczka wyłączy się automatycznie po 2 minutach pracy.

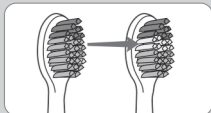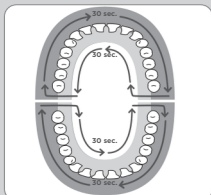

Włosie szczoteczki zmienia kolor z zielonego na żółty, gdy nadchodzi czas wymiany. (Aby uzyskać optymalną wydajność, wymieniaj główki szczoteczki co 3 miesiące.)



Czyszczenie

1. Po każdym użyciu wyłącz urządzenie, zdejmij głowicę szczoteczki z uchwytu i opłucz głowicę szczoteczki pod bieżącą wodą.
2. Wytrzyj uchwyt do sucha po każdym użyciu.
3. Okresowo czyść krążek ładujący, najpierw odłączając urządzenie, a następnie przecierając wilgotną szmatką.

Konserwacja serwisowa

Elektryczne szczoteczki do zębów Waterpik™ nie mają żadnych elementów elektrycznych, które mogą być serwisowane przez konsumenta, i nie wymagają rutynowej konserwacji serwisowej.

Aby uzyskać informacje o wszystkich częściach i akcesoriach, odwiedź stronę **www.waterpik.pl**

Możesz również zadzwonić pod nasz numer obsługi klienta:

+ 48 600 895 430 lub (89) 533 87 77

We wszelkiej korespondencji należy podawać numery seryjne i modele.

Numery te znajdują się na podstawie lub uchwycie szczoteczki do zębów.

Masz jeszcze pytania? Odwiedź stronę www.waterpik.pl

Pielęgnacja baterii

Jeśli szczoteczka ma być przechowywana przez dłuższy okres czasu (sześć miesięcy lub dłużej), należy ją w pełni naładować przed przechowywaniem. Nie narażaj baterii ani urządzenia na działanie nadmiernych temperatur.

Utylizacja/recykling baterii



Ten produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Akumulator nie jest wymienny. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wyrzucaj go do odpadów gospodarstwa domowego.

Prosimy o oddanie go do recyklingu w najbliższym punkcie recyklingu lub zabranie do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, aby przestrzegać lokalnych i krajowych przepisów.

Zużytą baterię należy niezwłocznie zutylizować. Trzymać z dala od dzieci. Nie rozmontowywać i nie wrzucać do ognia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z lokalnym działem gospodarki odpadami.

UWAGA: Akumulator nie podlega wymianie, należy go wyjąć dopiero po zakończeniu okresu eksploatacji produktu. Proces ten jest nieodwracalny i powoduje unieważnienie gwarancji na produkt.

Wymowanie akumulatora

Aby wyjąć akumulator do recyklingu, należy go całkowicie rozładować przed wyjęciem.

Przestrzegaj podstawowych środków ostrożności podczas wykonywania poniższej procedury.

Pamiętaj, aby chronić oczy, dłonie, palce i powierzchnię, na której pracujesz.




1. Rozładuj akumulator, naciskając przycisk BRUSH, aż silnik przestanie działać.
2. Przygotuj ręcznik lub szmatkę, młotek, płaski śrubokręt i obcinaczki do drutu.
3. Wymij i wyrzuć głowicę szczoteczki. Całkowicie przykryj uchwyt ręcznikiem lub szmatką.
4. Jedną ręką przyciśnij górną część uchwytu do powierzchni roboczej i uderz uchwyt obudowy wokół dolnego obwodu ze wszystkich stron, aby zwolnić zatrzask zaślepki. Kontynuuj uderzanie i obracanie uchwytu, aż zaślepka zostanie zwolniona.
5. Wymij wewnętrzne elementy, obracając uchwyt do góry nogami, a następnie odblokuj plastikowe zaczepy i wysuń wewnątrz z obudowy zewnętrznej.
6. Wewnętrzne komponenty powinny się wysunąć, gdy uchwyt jest ustawiony do góry nogami. Jeśli tak się nie stanie, powtórz kroki 5 i 6, aż komponenty zostaną zwolnione.
7. Wymij akumulator z obudowy. Przetnij przewody akumulatora po jednym.
8. Poddaj baterię recyklingowi i zutylizuj ją prawidłowo.

Pozostałe części produktu również należy odpowiednio zutylizować.

OSTRZEŻENIE:

NIE przecinaj obu przewodów akumulatora jednocześnie.

NIE rozbieraj, nie przebijaj, nie uderzaj, nie ściskaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia.

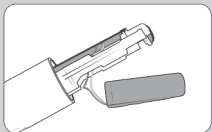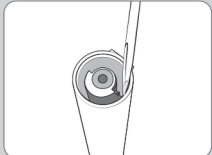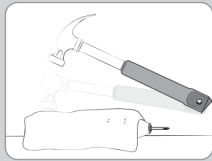

INFORMACJE O GWARANCJI

SERWIS I GWARANCJA 12 miesięcy

POLKARD Bis Sp. z o.o. gwarantuje pierwszemu nabywcy nowego urządzenia, że jest ono wolne od wad wykonania i materiałowych w ciągu 1-go roku od daty zakupu urządzenia. Należy zachować i przedłożyć dowodu zakupu urządzenia oraz prawidłowo wypełnioną gwarancję w oryginale. POLKARD Bis Sp. z o.o. naprawi lub wymieni jakąkolwiek część urządzenia, która w naszej opinii jest wadliwa zakładając, iż urządzenie było użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem, nie zostało celowo uszkodzone, ani naprawiane poza autoryzowanymi punktami serwisowymi i było używane zgodnie z powyższą instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje końcówek irygatora.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania, należy skontaktować się z serwisem:

POLKARD BIS Sp. z o.o. ul. M. Kotańskiego 2, 10-166 Olsztyn, tel/fax 089/5338777, tel. 089/5334850

w celu naprawy lub wymiany urządzenia.

Koszty dostarczenia urządzenia do naprawy pokrywa nabywca natomiast zwrot urządzenia po naprawie gwarancyjnej odbywa się na koszt serwisu.

Urządzenie dostarczane jest w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Jeżeli urządzenie zostanie zarejestrowane w ciągu 14 dni od daty zakupu na stronie,
www.rejestracja.polkardbis.pl, zostanie ono objęte 2 letnią gwarancją.

Producent:

WaterPik Inc.

1730 East prospect Road Fort

Collins, CO 80553-0001 USA

Data zakupu:

Nr Seryjny:

Dystrybucja w Polsce:

Pieczęć i podpis sprzedawcy



Polkard bis

Polkard Bis Sp. z o.o.

ul. Marka Kotańskiego 2

10-166 Olsztyn

www.polkardbis.pl

e-mail: handel@polkardbis.pl

Jak używać?

