



ALPHA

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

Dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa przed rozpoczęciem korzystania z masażera prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją Obsługi, w szczególności z Instrukcjami Bezpieczeństwa zawierającymi przeciwwskazania do stosowania urządzenia.

OPIS URZĄDZENIA

Masażer karku z elektrostymulacją to urządzenie, które działając bezpośrednio na nerwy czuciowe wspiera regenerację, pomaga eliminować ból oraz wzmacnia mięśnie.

Użytkownik ma do dyspozycji 4 techniki masażu, 6 trybów, 16 poziomów intensywności oraz 3 poziomy mocy przyjaznego dla skóry gorącego kompresu.

W urządzeniu zastosowano szereg rozwiązań prozdrowotnych oraz ułatwiających korzystanie z produktu:

Technologia wykrywania impedancji skóry automatycznie dopasowuje siłę impulsu do charakterystyki skóry użytkownika.


Technologia inteligentnego dopasowania elektrod 3D dzięki której w trakcie sesji masażu kręgosłup szyjny znajduje się pod wygodnym kątem pochylecia (15° - 30°)

Technologia podwójnej konwersji częstotliwości VTP o niskiej i średniej częstotliwości służąca do łagodzenia zmęczenia oraz ćwiczenia mięśni.


Promieniowanie światłem czerwonym o długości fal 630-650nm zapewnia głębokie (10-15mm) napromieniowanie tkanki mięśniowej wspomagające pozbycie się dolegliwości bólowych i regenerację tkanek.

Gorący kompres ze światła podczerwonego (8-14 μ m) jednolicie i stabilnie ogrzewa kręgosłup szyjny.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

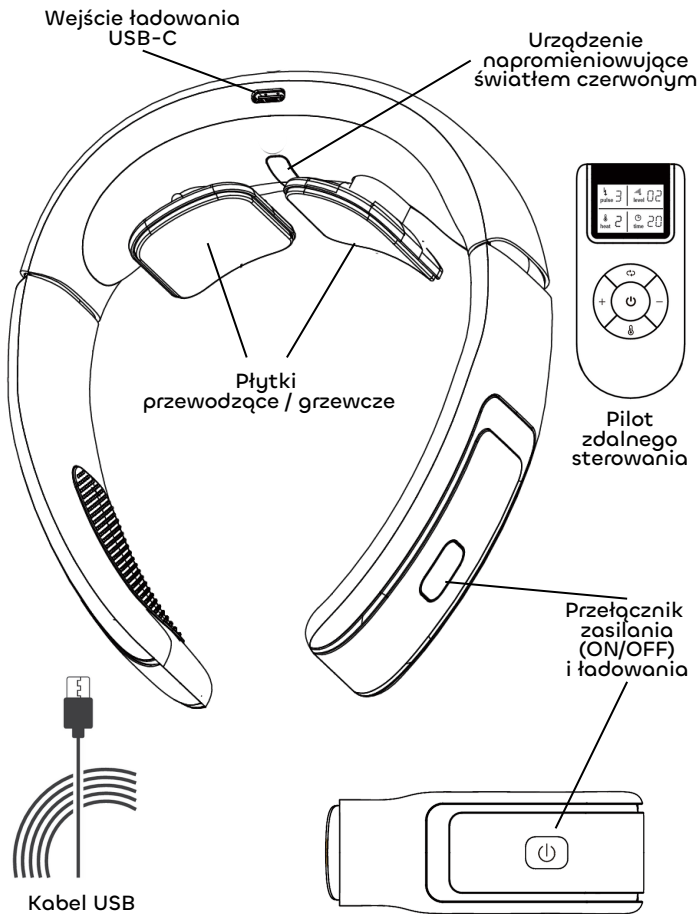

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

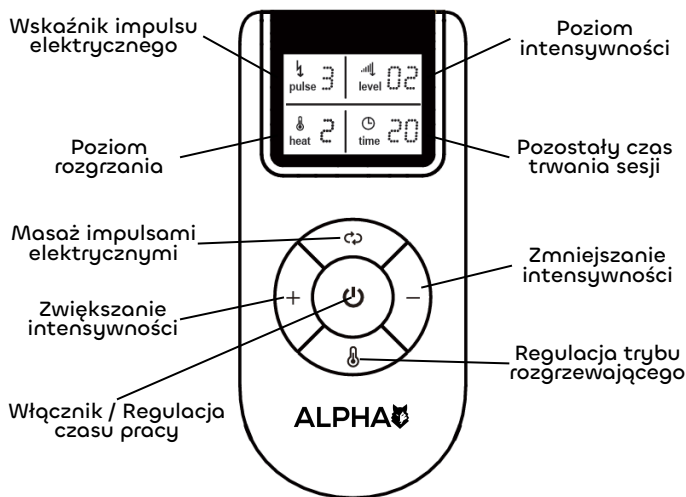

Urządzenie może być zasilane przy pomocy wbudowanego akumulatora lub przy pomocy kabla USB podłączonego do ładowania.

Aby uruchomić masażer, należy najpierw założyć go na szyję, a następnie nacisnąć przycisk ON/OFF zlokalizowany na prawym uchwycie. Urządzenie uruchamia się w trybie czuwania.

UWAGA!

Przed użyciem należy zwilżyć skórę szyi lub nałożyć żel na powierzchnię elektrod. Nie należy nakładać elektrod na suchą skórę. Gdy masażer wykryje suchość skóry, ograniczy intensywność masażu pulsacyjnego i wyemituje ostrzeżenie (8 ciągłych sygnałów dźwiękowych), dopóki skóra nie zostanie nawilżona, aby uniknąć dyskomfortu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć masażer. Dioda LED zaświeci się i urządzenie wyda 1 dźwięk. W tym momencie uruchomi się w domyślnym programie, czyli w trybie pulsacyjnym "1" na poziomie "00" oraz z gorącym kompresem na poziomie "2" z czerwonym światłem, z czasem ustawionym na 15 minut.

Następnie przy pomocy pilota zdalnego sterowania można dostosować żdaną technikę i intensywność masażu. Gdy urządzenie pomyślnie odbierze sygnał przekazany przy pomocy pilota zdalnego sterowania, usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Tryby 1-6 są dostępne po naciśnięciu przycisku 

Dostępnych jest łącznie 6 trybów masażu:

Tryb 1: automatyczny	Tryb 4: rolowanie
Tryb 2: automatyczny	Tryb 5: ugniatanie
Tryb 3: "skrobanie"	Tryb 6: ubijanie

Tryby 1 i 2 automatycznie przełączają swoje programy co minutę.

Naciśnij przycisk "+", aby zwiększyć intensywność o 1 poziom. Aby zmniejszyć intensywność, naciśnij przycisk "-". Urządzenie łącznie posiada 16 poziomów intensywności. Domyślnie urządzenie uruchamia się na poziomie 0.

Naciśnij przycisk  aby uruchomić rozgrzewającą funkcję gorącego kompresu.

"0" oznacza brak rozgrzewania, "1" delikatne rozgrzewanie, "2" średnie rozgrzewanie, "3" mocne rozgrzewanie. Domyślnie urządzenie ustawione jest na "2". Funkcja terapii światłem czerwonym jest włączana lub wyłączana jednocześnie z trybem rozgrzewania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

NIE MOŻNA URUCHOMIĆ PRODUKTU

Masażer nie jest w trybie gotowości:

Naciśnij przycisk ON/OFF aby przejść do trybu gotowości w celu sterowania za pomocą kontrolera.

Baterie pilota są rozładowane:

Jeśli wyświetlacz nie podświetla się, należy wymienić baterie CR2032 w pilocie na nowe.

Akumulator nie jest wystarczająco naładowany:

Jeżeli akumulator jest rozładowany, naładuj go.

Urządzenie nie ładuje się prawidłowo:

Jeżeli dioda LED nie świeci się podczas ładowania oznacza to, że kabel nie jest podłączony prawidłowo.

WYŚWIETLACZ DZIAŁA, ALE URZĄDZENIE NIE PRACUJE

Elektrody nie dotykają bezpośrednio skóry odcinka szyjnego kręgosłupa:

Elektrody masażera muszą bezpośrednio dotykać skóry odcinka kręgosłupa szyjnego, aby urządzenie działało poprawnie.

Pomiędzy elektrodą a skórą są włosy, odzież lub akcesoria:

Jeżeli tak, należy usunąć lub oddzielić te elementy.

Intensywność masażu nie została wybrana:

Domyślnie po uruchomieniu urządzenia poziom intensywności jest najniższy, należy zwiększyć intensywność masażu

URZĄDZENIE NIE ŁADUJE SIĘ

Kabel ładowania nie został odpowiednio podpięty:

Sprawdź, czy kabel został odpowiednio podpięty oraz czy urządzenie reaguje na ładowanie.

Zasilacz używany do ładowania jest inny niż 5.0V:

Jeżeli używany zasilacz ma napięcie DC inne niż 5.0V, zweryfikuj to i użyj odpowiedniego, aby naładować urządzenie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W TRAKCIE MASAŻU POJAWIA SIĘ MROWIENIE

Elektrody nie przylegają ściśle do skóry:

Zwilż skórę wilgotnym ręcznikiem przed dociśnięciem elektrod i dostosuj odpowiednią intensywność oraz tryb masażu.

Masaż jest zbyt długi:

Optymalny czas komfortowego masażu to 10-20 min., nie częściej niż 2x dziennie.

Masaż jest zbyt intensywny:

Jest to częsty powód mrowienia, należy zmniejszyć intensywność masażu.

Reakcja alergiczna:

W przypadku niewielkiego podrażnienia należy skrócić czas masażu, natomiast w przypadku poważnego podrażnienia należy przerwać stosowanie, skonsultować się z lekarzem i zastosować leczenie odczułające.

Zimna pogoda i sucha skóra:

Zwilż skórę i powierzchnię elektrody wilgotnym ręcznikiem.

Użytkowanie po nieprzespanej nocy:

Ze względu na spadek elektrolitów wstrzymaj się z użytkowaniem produktu do momentu, aż w pełni się zregenerujesz.

Biżuteria lub włosy dotykają elektrod:

Zdejmij biżuterię i oddziel włosy, które mogą powodować nieprzyjemne mrowienie.

ELEKTROSTYMULACJA JEST ZBYT SŁABA

Elektrody nie są wystarczająco dociśnięte do skóry:

Docisnij elektrody i zwiększ intensywność masażu.

Elektrody mają zabrudzenia:

Oczyść powierzchnię elektrod.

Akumulator nie jest wystarczająco naładowany

Jeżeli bateria jest słaba, naładuj urządzenie.

STEROWANIE



Gdy urządzenie jest włączone naciśnij krótko przycisk , aby wybrać interwał czasowy, zakres wyboru wynosi 5-30 minut; każde naciśnięcie przetacza o jeden interwał czasowy, domyślny czas trwania sesji to 15 minut.

Aby zatrzymać masaż należy przycisnąć przycisk .Urządzenie wyda jeden sygnał dźwiękowy, a pasek LED zgaśnie.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA



Gdy masażer wyda trzykrotnie sygnał dźwiękowy oznacza to, że poziom naładowania baterii jest niski. Wtedy należy podłączyć urządzenie do ładowania za pomocą dołączonego kabla USB, w przeciwnym razie wyłączy się automatycznie.

Pełne naładowanie zajmuje około 2 godzin i wystarcza na ok. 5 dni użytkowania po ok. 30 min dziennie, w zależności od trybów oraz intensywności.

Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas użytkowane, zaleca się naładować akumulator raz w miesiącu. Pomoże to uniknąć skrócenia żywotności baterii.

Gdy podświetlenie pilota miga lub pilot nie jest czuły, zaleca się wymianę baterii (CR2032, 3V). Żywotność baterii to około 3 miesiące. Zaleca się używanie masażera maksymalnie 1-2 razy dziennie przez nie więcej niż 20 minut za każdym razem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Podczas czyszczenia urządzenie musi być wyłączone.
- Urządzenie należy czyścić suchą szmatką.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z cieczą.
- Nie wolno stosować detergentów do czyszczenia urządzenia.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i obrażeń ciała oraz uszkodzenia produktu należy używać urządzenia zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- Należy trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła, promieniowania słonecznego, silnego promieniowania elektromagnetycznego, wilgotnych miejsc.
- Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z wodą.
- Zabrania się korzystania z urządzenia, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona.
- Do ładowania należy używać tylko oryginalnego kabla dołączonego do zestawu.
- Nie wolno we własnym zakresie dokonywać żadnych modyfikacji sprzętu.
- Rozmontowywanie urządzenia jest zabronione.
- Nie wolno zostawiać uruchomionego urządzenia samego w trakcie pracy.
- Nie wolno zostawiać urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
- Przed każdym uruchomieniem należy dokładnie sprawdzić urządzenie.
- Urządzenie może pracować tylko w temperaturze dodatniej, maksymalnie w temperaturze 40 stopni Celsjusza.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

- Nigdy nie używaj produktu jednocześnie z medycznymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak rozruszniki serca, sztuczne płucoserce i inne podtrzymujące życie medyczne urządzenia elektroniczne oraz elektrokardiografy, ponieważ może to prowadzić do zagrożenia zdrowia. Jeśli urządzenie chirurgiczne o wysokiej częstotliwości i ten masażer są używane jednocześnie na pacjencie, może dojść do oparzeń w miejscu poddawanym zabiegowi, a urządzenie może zostać uszkodzone; moc wyjściowa masażera może być niestabilna, jeśli urządzenie jest używane w pobliżu urządzeń terapeutycznych wykorzystujących fale krótkie lub mikrofałe (około 1 m).
- Kobiety w ciąży, osoby z wrażliwą skórą, chorobami serca, nieprawidłowym ciśnieniem krwi, nowotworami złośliwymi, pacjenci z chorobami naczyń mózgowych, ostrymi chorobami lub osoby pod opieką lekarza i ze zdiagnozowanymi chorobami powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem produktu.
- Nie należy używać masażera podczas kąpieli lub snu.
- Nie należy pozostawiać urządzeń do użytku przez dzieci lub osoby bez pełni władz intelektualnych.
- Osoby z zaburzoną percepcją temperatury lub z chorobami skóry nie mogą korzystać z urządzenia.
- Jeśli użytkownik produktu chce zmienić położenie masażera na szyi podczas użytkowania musi go najpierw wyłączyć, w przeciwnym razie może wystąpić silne podrażnienie.
- Intensywność impulsu powinna być dostosowana do akceptowalnego poziomu; zwiększenie intensywności niekoniecznie poprawi komfort masażu, a wysoki poziom intensywności może wywoływać silny dyskomfort.

Jeżeli w trakcie korzystania z urządzenia na skórze pojawią się czerwone punkty, należy przerwać stosowanie urządzenia na 3-5 dni. Zaczerwienienie powinno samoczynnie zniknąć. W przeciwnym razie należy skonsultować się z lekarzem.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Gospodarstwo domowe spełnia bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.

Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Zużyte urządzenia muszą być oddane w miejsca specjalnie do tego wyznaczone, bądź oddawane przy zakupie nowego urządzenia 1 za 1 zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny.



Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektyw unijnych - została wystawiona dla niego deklaracja zgodności z normami europejskimi.

SPECYFIKACJA

Masażer szyi z elektrostymulacją model: NECKLAX

Źródło zasilania: 5V DC 1000mA

Wyprodukowano w P.R.C. dla /

Moc wejściowa: 5W

importer:

Bateria litowa: 3,7 V DC, 1500 mAh

Alpha Trading Group

Czas ładowania: ok. 2 godz.

D. Szewczyk M. Cender sp. k.

Częstotliwość powtarzania impulsów: 1-1000Hz

Kościuszki 100

Częstotliwość modulacji impulsów: 6K-9KHz

26-500 Szydłowiec

Szerokość impulsu: 20-400µs

www.alphastore.pl

Przebieg impulsu: Fala kwadratowa

info@alphastore.pl

Temperatura kompresji na gorąco: +38°C ~ + 45°C

(przy temp. otoczenia 25°C)

Długość fali światła czerwonego: 630~650 nm

KARTA GWARANCYJNA

1. Gwarancja obejmuje jedynie produkty zakupione bezpośrednio u Producenta.
2. Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku zakupu detalicznego.
3. Gwarancja na Produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy i nie przedłuża się w przypadku wymiany lub naprawy Produktu.
4. Gwarancja obejmuje okres od daty zakupu Produktu.
5. Naprawa Produktu zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia Produktu.
6. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę Produktu na wolny od wad, jeżeli producent stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
7. Jeśli tylko część Produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części Produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części Produktu.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

1. Usterki wynikających ze stosowania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz odbiegających od normalnych zastosowań.
2. Uszkodzeń będących następstwem używania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem, np.:
 - uszkodzeń fizycznych/estetycznych, uszkodzeń powierzchni, modyfikacji
 - użytkowania Produktu z akcesoriami innymi niż zalecane przez Producenta
 - uszkodzeń spowodowanych samodzielnym serwisowaniem urządzenia
 - zmian i przeróbek bez zgody Producenta
 - Uszkodzeń spowodowanych wielokrotnym zatrzymywaniem urządzenia zbyt dużą siłą nacisku
3. Materiału, który po pewnym czasie użytkowania wyciera się
4. Ładowarki
5. Uszkodzenia w przypadku pożaru lub przegrzania, zalania lub zawilgotnienia, kontaktu z chemikaliami, zatkania otworów wentylacyjnych, grzewczych, promieniowania, działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.

Zgłoszenie gwarancyjne może zostać dostarczone drogą elektroniczną na adres: info@alphastore.pl lub listownie na adres: Alpha Trading Group D. Szewczyk. M. Gender sp. k. Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa z dopiskiem: zgłoszenie gwarancyjne

 Do zgłoszenia gwarancyjnego należy dołączyć kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego dokonanie zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną.

KARTA GWARANCYJNA

Dane kontaktowe Klienta:

imię i nazwisko: _____

adres dostawy: _____

telefon kontaktowy: _____

e-mail: _____

Dane reklamowanego produktu:

nazwa produktu:

.....

model:

.....

Dane określające datę, miejsce i wartość dokonanego zakupu:

Rodzaj i data stwierdzonej usterki:



