

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Wciśnij przycisk **ON/OFF**, aby uruchomić termometr. Produkt włączył się prawidłowo, jeżeli słychać krótki sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie symbole: .
2. Następnie wyświetli się ostatnio zmierzona temperatura z literą „M” w prawym rogu.
3. W momencie, gdy pojawi się litera „L” i migający °C oznacza to, że termometr jest gotowy do pomiaru temperatury.
4. Sygnał dźwiękowy oraz zatrzymanie migania °C oznacza, że pomiar temperatury został zakończony.
5. Wciśnij przycisk **ON/OFF**, aby wyłączyć urządzenie, w innym przypadku urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach.

WYKONANIE POMIARU

Pomiar temperatury pod pachą: wytrzymaj pachę suchym ręcznikiem i umieść końcówkę sondy w dole pachowym. Ułóż rękę w odpowiedniej pozycji. (Orientacyjny czas pomiaru: 2 minuty, o jego zakończeniu poinformuje sygnał dźwiękowy).

Pomiar temperatury w ustach: umieść końcówkę sondy pod językiem jak najbliżej jego początku. Upewnij się, że termometr się nie przesuw. Zamknij usta i oddychaj normalnie. (Orientacyjny czas pomiaru: 1 minuta, o jego zakończeniu poinformuje sygnał dźwiękowy).

Pomiar temperatury w odbycie: Nałóż na sondę pewną ilość żelu na bazie wody. Delikatnie włóż końcówkę termometru do odbytu, najwyżej do połowy długości. (Orientacyjny czas pomiaru: 1 minuta, o jego zakończeniu poinformuje sygnał dźwiękowy).

WYMIANA BATERII

Wymiana baterii jest konieczna, gdy na ekranie, w dolnym prawym rogu, pojawi się symbol baterii.  Aby wymienić baterię zdejmij pokrywę baterii, pociągnij uchwyt baterii i wymień ją na alkaliczną 1,5V LR41 lub jej odpowiednik AG3 z tlenkiem srebra.


Instrukcja wymiany baterii:



1. Zdejmij pokrywę baterii.



2. Wyciągnij uchwyt baterii na odległość około 18mm.

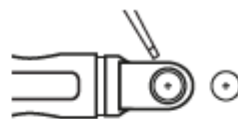

3. Użyj pasującego narzędzia, aby wyjąć starą baterię i wymienić ją na nową.

2500 pomiarów
1 bateria



CZYSZCZENIE

Przed użyciem i po każdym użyciu przetrzyj termometr miękką szmatką nasączoną roztworem alkoholu izopropylowego lub zimną wodą z mydłem. Moduł może być zanurzany w wodzie lub alkoholu. Nie zamaczaj przez dłuższy okres czasu i nie sterylizuj wrzątkiem, gazem lub w autoklawach parowych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Termometr powinien być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Podczas mierzenia temperatury nie chodź, nie biegaj i nie rozmawiaj.
3. Jeśli termometr nie jest używany, przechowuj go w ochronnym pudełku lub w suchym i bezpiecznym miejscu.
4. Nie wystawiaj termometru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, kurzu oraz ekstremalnych temperatur.
5. Nie gotuj, unikaj upadków i prób samodzielnych napraw termometru.
6. Nigdy nie dokonuj samodzielnych napraw termometru i nie otwieraj obudowy, chyba że wymieniasz baterię.