

## TERMOMETR FLEXI SOFT

Termometry CONTROLY to jakość, precyzja, niezawodność i – najważniejsze - komfort użytkowania. Wszystkie nasze produkty odpowiadają międzynarodowym standardom i spełniają normy wymagane dla wyrobów medycznych. Seria THERMOSOFT to niezwykle przyjemne w dotyku, elastyczne końcówki o optymalnym przekroju utrzymujące stałą temperaturę – jest to szczególnie ważne w przypadku pomiaru temperatury w odbycie, ale także w ustach i pod pachą.

### Pamiętaj!

Wynik będzie różnił się, w zależności od miejsca pomiaru.

Z medycznego punktu widzenia pomiar w odbycie jest najbardziej precyzyjny.

### Temperatura ciała w zależności od miejsca pomiaru

| miejsce pomiaru     | pod pachą | w ustach | w odbycie |
|---------------------|-----------|----------|-----------|
| średnia temperatura | 36,4°C    | 36,6°C   | 37,0°C    |
| gorączka            | 37,0°C    | 37,6°C   | 38,0°C    |

W przypadku pomiaru rektalnego, końcówkę termometru należy wprowadzić do odbytu maksymalnie na głębokość 2 cm!

### SPECYFIKACJA

Zakres pomiaru: 32°C – 42,9°C

Wyświetlenie niskiej temperatury: <32°C, symbol L°C

Wyświetlenie wysokiej temperatury: ≥43°C, symbol H°C

Dokładność: 35 – 42°C ± 0,1°C (w temperaturze otoczenia o zakresie 18°C – 28°C).

Dokładność wyświetlana: 0,1°C

Sygnal prawidłowej temperatury: 10 długich sygnałów dźwiękowych w ciągu 10 sekund

Sygnal gorączki: (>37,8°C): 30 krótkich sygnałów dźwiękowych w ciągu 10 sekund

Automatyczne wyłączenie: po ok. 10 minutach

Bateria: AG3 lub LR41

Żywotność baterii: ok. 2500 cykli

Wymiary: 125mm x 19mm x 11mm

Waga: około 9,8g wraz z baterią


Warunki działania: Temperatura 10°C – 40°C

Wilgotność 30% - 85% RH

Warunki przechowywania: Temperatura -20°C – 60°C

Wilgotność 25% - 90% RH

### SCHEMAT URZĄDZENIA

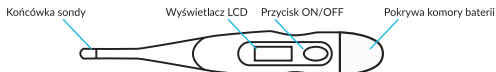

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Wciśnij przycisk **ON/OFF**, aby uruchomić termometr. Produkt włączył się prawidłowo, jeżeli słychać krótki sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie symbole:



2. Następnie wyświetli się ostatnio zmierzona temperatura z literą „M” w prawym rogu.

3. W momencie, gdy pojawi się litera „L” i migający °C oznacza to, że termometr jest gotowy do pomiaru temperatury.

4. Sygnał dźwiękowy oraz zatrzymanie migania °C oznacza, że pomiar temperatury został zakończony.

5. Wciśnij przycisk **ON/OFF**, aby wyłączyć urządzenie, w innym przypadku urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach.

### WYKONANIE POMIARU

**Pomiar temperatury pod pachą:** wytrzymaj pachę suchym ręcznikiem i umieść końcówkę sondy w dole pachowym. Ułóż rękę w odpowiedniej pozycji. (Orientacyjny czas pomiaru: 2 minuty, o jego zakończeniu poinformuje sygnał dźwiękowy).

**Pomiar temperatury w ustach:** umieść końcówkę sondy pod językiem jak najbliżej jego początku. Upewnij się, że termometr się nie przesuw. Zamknij usta i oddychaj normalnie. (Orientacyjny czas pomiaru: 1 minuta, o jego zakończeniu poinformuje sygnał dźwiękowy).

**Pomiar temperatury w odbycie:** Nałóż na sondę pewną ilość żelu na bazie wody. Delikatnie włóż końcówkę termometru do odbytu, najwyżej do połowy długości. (Orientacyjny czas pomiaru: 1 minuta, o jego zakończeniu poinformuje sygnał dźwiękowy).

## WYMIANA BATERII

Wymiana baterii jest konieczna, gdy na ekranie, w dolnym prawym rogu, pojawi się symbol baterii. Aby wymienić baterię zdejmij pokrywę baterii, pociągnij uchwyt baterii i wymień ją na alkaliczną 1,5V LR41 lub jej odpowiednik AG3 z tlenkiem srebra.

### Instrukcja wymiany baterii:


1. Zdejmij pokrywę baterii.



2. Wyciągnij uchwyt baterii na odległość około 18mm.



3. Użyj pasującego narzędzia, aby wyjąć starą baterię i wymienić ją na nową.

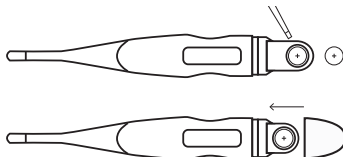

## CZYSZCZENIE

Przed użyciem i po każdym użyciu przetrzyj termometr miękką szmatką nasączoną roztworem alkoholu izopropylowego lub zimną wodą z mydłem. Moduł może być zanurzany w wodzie lub alkoholu. Nie zamaczaj przez dłuższy okres czasu i nie sterylizuj wrzątkiem, gazem lub w autoklawach parowych.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Termometr powinien być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Podczas mierzenia temperatury nie chodź, nie biegaj i nie rozmawiaj.
3. Jeśli termometr nie jest używany, przechowuj go w ochronnym pudełku lub w suchym i bezpiecznym miejscu.
4. Nie wystawiaj termometru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, kurzu oraz ekstremalnych temperatur.
5. Nie gotuj, unikaj upadków i prób samodzielnych napraw termometru.
6. Nigdy nie dokonuj samodzielnych napraw termometru i nie otwieraj obudowy, chyba że wymieniasz baterię.

Data opracowania instrukcji: 02.06.2022

Produkt zgodny z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz normą dotyczącą medycznych urządzeń elektrycznych EN 60601-1-2



**INFOLINIA**  
**801 000 977**  
**www.controly.pl**



The company has passed ISO 13485:2016  
quality system certification

Model: KFT-03  
Wyrób medyczny **CE 0123**



Kangfu Medical Equipment Factory No. 380 Ningkang  
East Road, Yueqing, Zhejiang 325600, China



Luxus Lebenswelt GmbH  
Kochstr. 1, 47877 Willich, Germany



Importer:  
Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.  
Aleja Stanów Zjednoczonych 61a  
04-028 Warszawa

Wersja 5