

SONIC TOOTHBRUSH
SHONA
SONIC **VISION PRO**




SH074766

Instrukcja Obsługi

1.Wprowadzenie do produktu

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, aby móc prawidłowo z niego korzystać. Ten produkt to szczoteczka soniczna do zębów z kamerą. Urządzenie można podłączyć do telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń, a stan higieny zębów można zobaczyć za pomocą aplikacji. Można także robić zdjęcia lub filmy, które zapewnią jasne wskazówki graficzne i podstawę leczenia.

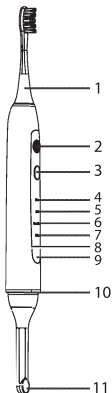

- 1 - Wymienna główka szczoteczki
- 2 - Wyłączanie/Włączanie/Robienie zdjęć
- 3 - Przełączanie intensywności
- 4 - Tryb czyszczenia
- 5 - Tryb delikatny
- 6 - Tryb intensywny
- 7 - Tryb wybielania
- 8 - Tryb polerowania
- 9 - Wskaźnik baterii
- 10 - Połączenie kamerki ze szczoteczką
- 11 - Kamera

2. Środki ostrożności

Aby uniknąć ryzyka awarii, porażenia prądem, obrażeń pożaru, uszkodzenia sprzętu i mienia, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

- (1) Ten produkt ma wbudowaną baterię. Nie należy wkładać produktu do ognia ani wystawiać go na działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie baterii.
- (2) Nie używać tego produktu podczas ładowania.
- (3) Nie używać tego produktu, gdy wtyczka USB z kamerą nie jest podłączona. Tylko po prawidłowym podłączeniu wtyczki produkt spełnia wymogi wodoodporności.
- (4) Nie umieszczać kamery w wilgotnym środowisku lub w cieczy, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zanurzeniem w wodzie. Wtyczka kamery powinna być sucha
- (5) Nie należy samodzielnie modyfikować ani naprawiać tego produktu.
- (6) Korzystając z aplikacji do robienia zdjęć jako podstawy do diagnozy i leczenia należy wybrać odpowiednią placówkę dentystyczną.
- (7) Nie upuszczać ani nie uderzać produktu.
- (8) Nie ładuj tego produktu bez nadzoru przez długi czas, maksymalnie to urządzenie można ładować przez 12 godzin.

3. Funkcje Przycisków

Przed podłączeniem do kamery, funkcja urządzenia jest taka sama jak zwykłej szczoteczki sonicznej do zębów.

- Przyciśnięcie przycisku zasilania przez 2s spowoduje włączanie/wyłączenie urządzenia.
- Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania umożliwia szybką zmianę trybów.
- Krótkie naciśnięcie przycisku intensywności, aby zmienić moc.
- Po podłączeniu kamery zaświecą się LEDY, po podłączeniu aplikacji wskaźnik baterii świeci się na zielono, a kontrolka miga.

4. Wprowadzenie do aplikacji


Krok 1

Skanuj QRcode w Twoim telefonie, pobierz aplikację (slylż) i zainstaluj.





Krok 2

Otwórz wejście USB i podłącz kamerę do korpusu szczoteczki.

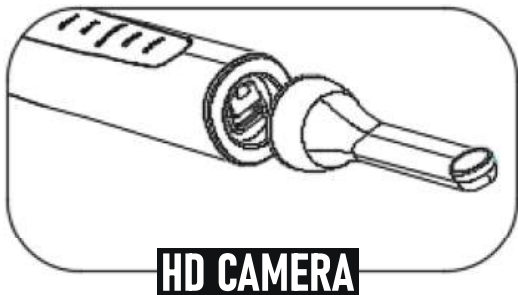

Krok 3

Otwórz aplikację. Wyświetli się komunikat: „Nie połączono”, następnie kliknij: „Start”. Spowoduje to przejście do strony WLAN. Znajdź DentalCam-XXXX i połącz się.

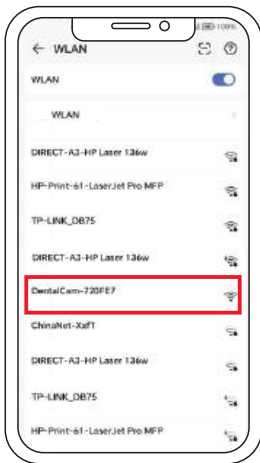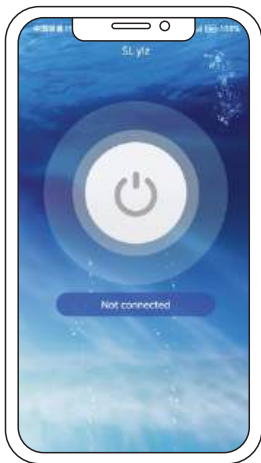

Krok 4

Wróć do aplikacji. Po wyświetleniu się komunikatu: „Połączono” kliknij w ikonę: „Start”, aby włączyć podgląd z kamery.



5. Czyszczenie i konserwacja

(1) Czyszczenie obiektywu:

Obiektyw jest wodoodporny i możemy go przecierać suchą lub zwilżoną szmatką.

Wtyczka nie jest wodoodporna i nie należy wkładać całego obiektywu do wody!

(2) Czyszczenie korpusu szczoteczki:

Jest to dozwolone, gdy slot USB jest prawidłowo zaślepiiony, bądź posiada on prawidłowo założoną kamerę.

Model: Sonic Vision PRO

Moc wejściowa: DC5V 1A

Napięcie: 3.7V

Pojemność baterii: 1500mAh

Moc: 1.5W

Wodoodporność: IPX7

SONIC TOOTHBRUSH
SHONA
SONIC **VISION PRO**

WWW.SHONA.PL

DYSTRYBUTOR/
IMPORTER/
PRODUCENT:
KAMAKS SP. Z O.O.
UL. POKRZYWNO 4A
61-315 POZNAŃ
POLSKA

MADE IN PRC
SH074766

