

Urządzenie do peelingu kawitacyjnego

Beauty Refresh Scrub



Instrukcja obsługi

Droga Klientko/Drogi Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu.

Poniższa instrukcja została przygotowana w oparciu o najnowszą wiedzę w zakresie kosmologii. Przeprowadzi Cię ona krok po kroku, przez zabieg peelingu kawitacyjnego, tak abyś mogła/mógł w pełni skorzystać z mocy urządzenia i cieszyć się efektami na długo.

O produkcie

Garett Beauty Refresh Scrub to wielofunkcyjne urządzenie do peelingu kawitacyjnego, służące do bezinwazyjnego oczyszczania skóry, zwięzania porów, złuszczenia zrogowaciałego naskórka, wygładzania zmarszczek mimicznych oraz wprowadzania substancji aktywnych w głąb skóry. Urządzenie łączy w sobie trzy tryby pracy - peeling kawitacyjny, sonoforezę i funkcję elektrostymulacji EMS.

KIERUNKI DZIAŁANIA:

- oczyszczenie skóry twarzy, dekoltu czy też pleców
- złuszczenie martwego naskórka
- zmniejszenie trądziku
- rozjaśnienie przebarwień
- zmniejszenie widoczności zaskórników, zamknięcie porów
- pobudzenie syntezy kolagenu
- spłycenie zmarszczek
- odżywienie i nawilżenie skóry
- lifting skóry
- wygładzenie szorstkiej skóry
- poprawa mikrokrążenia
- poprawa kolorytu cery

WSKAZANIA:

- dla każdego rodzaju cery
- skóra ze skłonnościami do trądziku
- trądzik różowaty
- skóra z zaskórnikami
- sucha skóra
- przebarwienia
- drobne zmarszczki mimiczne
- skóra przetłuszczająca się

PRZECIWWSKAZANIA:

- ciąża i okres karmienia piersią
- ostre stany zapalne skóry
- choroby autoimmunologiczne
- epilepsja
- zaburzenia krzepnięcia krwi
- fotodermatozy i choroby pęcherzowe skóry
- choroby nowotworowe
- mocna opalenizna
- otwarte rany
- zmiany skórne (żylaki, pieprzyki, znamiona), w obrębie miejsca zabiegowego
- aktywna ropna postać trądziku, egzema
- rozrusznik serca
- implanty np. dentystyczne, metalowe płytki
- nie stosować z preparatami złuszczącymi, peelingi chemiczne, mechaniczne, kwasy
- nie stosować z olejkami eterycznymi
- opryszczka
- nie stosować w przypadku korzystania z zabiegów medycyny estetycznej (botoks, wypełniacze)
- alergię
- przebyte operacje plastyczne
- nie stosować po zabiegu woskowania
- nie stosować po zabiegu mikrodermabrazji
- nie stosować po zabiegach z użyciem kwasów bądź innych peelingsów chemicznych
- choroby serca
- choroby wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze skóry
- stany chorobowe organizmu, gorączka
- bezpośrednio po korzystaniu z sauny, solarium lub ekspozycji na słońce

Funkcje produktu

1. KAWITACJA - fale ultradźwiękowe, w kontakcie ze zwilżoną skórą, powodują rozbicie i odrywanie się martwego naskórka. W efekcie odsłonięta zostaje młodsza warstwa skóry - pozbawiona brudu, łoju i zanieczyszczeń gotowa na przyjęcie składników aktywnych, zawartych w preparatach kosmetycznych. Zabieg zapewnia odświeżenie, rozjaśnienie, wygładzenie i regenerację skóry. Poprawia mikrokrążenie skóry oraz usuwa zaskórniki.

2. SONOFOREZA - jest to zabieg wykorzystujący fale ultradźwiękowe, polegający na wprowadzaniu w głąb skóry substancji czynnych, dobranych odpowiednio do jej rodzaju i potrzeb. Ultradźwięki przenikając w głąb tkanek wytwarzają ciepło powodując, odprężenie skóry i mięśni. Zabieg z użyciem sonoforezy to dla skóry delikatny,

głęboki masaż, poprawiający krążenie krwi oraz limfy, a także regenerację komórek i ich metabolizm. Zabieg można wykonywać 2 razy w tygodniu, w serii 6-12 zabiegów, a serię co 3 miesiące.

Prądy EMS: Dzięki wykorzystaniu elektrostymulacji poprawia się cyrkulacja krwi i zachodzi usuwanie zbędnych produktów metabolicznych. Polepsza się zasilanie mięśni w tlen, mięśnie się rozluźniają co ma znaczący wpływ na zmniejszenie widoczności zmarszczek.

Opis produktu



Specyfikacja produktu

Nazwa produktu: Garrett Beauty Refresh Scrub	
Częstotliwość drgań: 25 kHz	Napięcie: 3,7 V
Pojemność baterii: 250 mAh	Czas ładowania: ok. 120 min
Waga produktu (netto): 80 g	Wymiary: 175 x 85 x 38 mm


Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

Instrukcja użytkowania

- Zdejmij biżuterię zarówno z rąk (zegarek, pierścionki), jak i z miejsca zabiegowego (łańcuszek, kolczyki).
- Nie trzymaj urządzenia w jednym miejscu na skórze, podczas zabiegu łopatką musi być w ciągłym ruchu.
- Do wykonania peelingu skóra musi być zwilżona.
- Możesz spryskać całą twarz lub zwilżyć płatkami kosmetycznym nasączonym wodą lub tonikiem. W czasie zabiegu systematycznie zwilżaj skórę.
- W trakcie zabiegu wycieraj łopatkę z nadmiaru płynu i zanieczyszczeń.
- Nie przyciskaj łopatkę mocno do skóry. Pracuj powoli i delikatnie, **pod kątem 45 stopni do skóry**. W trakcie zabiegu skóra może ulec zaczerwienieniu, które zniknie po kilku minutach.
- Nie pracuj urządzeniem w okolicach oczu, tarczycy i kręgów szyjnych.
- **Zabieg powinien trwać łącznie max. 15 minut, każdy tryb pracy urządzenia trwa 5 minut.**
- Zaleca się korzystanie z urządzenia, co 7 - 14 dni. Efekty sa zauważalne już po pierwszym zabiegu. W celu podtrzymania i wzmocnienia efektów zaleca się wykonanie serii 5 - 10 zabiegów.
- Każdy z trybów możesz wykonywać osobno, w zależności od potrzeb skóry. Pamiętaj jednak, że składniki aktywne lepiej wnikają w skórę, która została złuszczona. Zabiegi możesz wykonywać również na plecach czy dekolcie (po uprzednim wykluczeniu chorób serca).
- Wykonuj ruchy pionowe zawsze od dołu do góry bądź poziome, zaleca się kierunek ruchów od środka twarzy do zewnątrz.
- Aby wprowadzić substancje aktywne za pomocą urządzenia należy je obrócić i przyłożyć łopatkę pod kątem 45 stopni do skóry i poruszać kolistymi ruchami. Do wprowadzania substancji aktywnych użyj ampułek, serum bądź koncentratów o konsystencji żelowej dostosowanych do potrzeb Twojej skóry bądź po aplikacji ulubionego serum, nałóż na twarz żel do ultradźwięków. Ułatwi to wnikanie składników w głąb skóry i zapewni poślizg głowicy. W celu włączenia urządzenia przytrzymaj włącznik przez ok. 3 sekundy. Rozpocznie się tryb nawilżania. Naciskając ponownie, zmienisz pracę na kolejny tryb. Przytrzymaj ponownie przycisk włączania/wyłączania aby wyłączyć urządzenie.
- ⚠ **Pamiętaj, że tylko regularne stosowanie urządzenia przyniesie oczekiwane efekty, a cykliczność zabiegów pozwoli je utrzymać przez długi czas.**

Porady dla użytkowników

Kierunki prowadzenia łopatką po twarzy podczas zabiegu

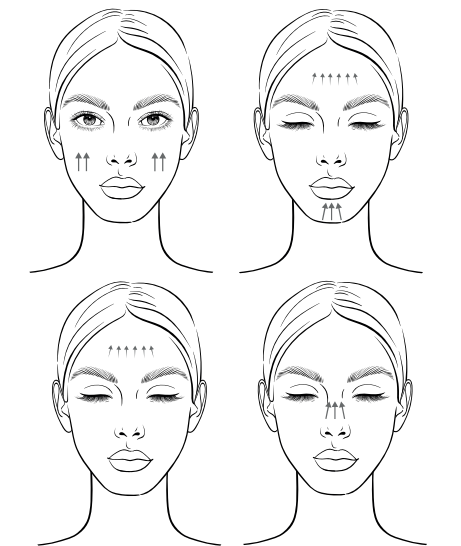

Zaleca się wykonywanie procedury peelingu raz w tygodniu dla cery tłustej i mieszanej. Raz na 2 tygodnie dla cery suchej oraz wrażliwej.

Tryby pracy

TRYB CLEANSING - peeling ultradźwiękowy

- **Funkcje:** oczyszczanie
- **Czas zabiegu:** 15 min
- **Kosmetyki:** woda
- **Opis:** Peeling ultradźwiękowy to skuteczny zabieg stymulujący do pielęgnacji skóry twarzy w każdym wieku. Skóra jest delikatnie i powoli złuszczana i oczyszczana bez rozciągania lub mechanicznego uszkodzenia. Regularne używanie powoduje, że znika trądzik, normalizuje się praca gruczołów łojowych, odnawia się górna warstwa naskórka, a skóra staje się zauważalnie bardziej miękka i elastyczna.



• Przebieg:

1. Wykonaj demakijaż twarzy. **Polecamy do tego szczoteczkę soniczną Garrett Beauty Multi Clean.**
2. Nawilżaj twarz wodą za pomocą wacika, za każdym razem gdy skóra przestaje być wilgotna.
3. Włącz urządzenie.
4. Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, bądź od środka na zewnątrz twarzy, wzdłuż przebiegu mięśni, pod kątem 45 stopni. Pracuj zawsze na mokrej skórze.
5. Wyłącz urządzenie i oczyść łopatkę bądź przejdź do dalszego trybu wprowadzania.

TRYB LIFTING - peeling ultradźwiękowy + EMS


- **Funkcje:** oczyszczanie z elektrostymulacją
- **Czas zabiegu:** 15 min
- **Kosmetyki:** woda
- **Opis:**
Peeling ultradźwiękowy to skuteczny zabieg stymulujący do pielęgnacji skóry twarzy w każdym wieku. Skóra jest delikatnie i powoli złuszczana i oczyszczana bez rozciągania lub mechanicznego uszkodzania. Dzięki elektrostymulacji (EMS) skóra uelastycznia się i napina niwelując przy tym jej owisłość oraz zwiększa absorpcję składników odżywczych. Elektrostymulacja uruchamia się przez jednoczesne dotknięcie bocznych detektorów funkcji EMS.

• Przebieg:

1. Wykonaj demakijaż twarzy. **Polecamy do tego szczoteczkę soniczną Garrett Beauty Multi Clean (pomiń, jeśli kontynuujesz zabieg).**
2. Nawilżaj twarz wodą za pomocą wacika, za każdym razem gdy skóra przestaje być wilgotna.
3. Włącz urządzenie i naciśnij 2 razy przycisk zmiany trybów, aby uruchomić tryb lifting.
4. Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, bądź od środka na zewnątrz twarzy, wzdłuż przebiegu mięśni, pod kątem 45 stopni. Pracuj zawsze na mokrej skórze. W trakcie zabiegu przecieraj skórę mokrym płatkami.
5. Wyłącz urządzenie i oczyść łopatkę bądź przejdź do dalszego trybu wprowadzania.

TRYB MOISTURIZING + EMS - właczanie substancji aktywnych

- **Funkcje:** sonoforeza/elektrostymulacja EMS
- **Czas zabiegu:** 15 min
- **Kosmetyki:** substancja aktywna (serum, ampulka, koncentrat dostosowany do potrzeb Twojej skóry)
- **Opis:**
Metoda polega na włączaniu substancji aktywnych oraz

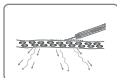

- na stymulacji mięśni, uelastycznia, napina skórę, niwelując jej owisłość, zwiększa absorpcję składników odżywczych. Elektrostymulacja EMS uruchamia się przez jednoczesne dotknięcie bocznych detektorów funkcji EMS.
- **Przebieg:**
 1. Wykonaj demakijaż twarzy (pomiń, jeśli kontynuujesz zabieg).
 2. Zaaplikuj na twarz serum/ampulkę/koncentrat o konsystencji żelowej. Żel do USG pomaga w wprowadzaniu składników z ampulek i serum, można go nałożyć dodatkowo już na ampulkę.
 3. Włącz urządzenie i uruchom tryb **MOISTURIZING**. Przyłóż łopatkę pod kątem 45 stopni (odwróconą w stosunku do trybu peelingu).
 4. Przesuwaj głowicą wzdłuż przebiegu mięśni, od dołu ku górze, od środka twarzy do zewnątrz.
 5. Możesz poczuć lekkie mrowienie/szczypanie skóry.
 6. Po skończonym zabiegu usuń pozostałości kosmetyku z twarzy i urządzenia.
 7. Możesz zaaplikować ulubioną maskę dostosowaną do potrzeb skóry.

Uwagi dla użytkowników

1. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.
3. Nie należy używać urządzenia oraz próbować go odłączyć od gniazda mokrymi rękami.
4. Nie należy niszczyć, modyfikować przewodu zasilającego oraz produktu, ponieważ może to skutkować jego uszkodzeniem.
5. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania i przewodu zasilającego.
6. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki, przewodu zasilającego lub nagrzewania się nawet jednego z elementów.
7. Używanie akcesoriów, które nie są dostarczane z tym produktem, może być niebezpieczne.

8. Nie przechowywać produktu w wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
9. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem firmy Garrett.
10. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym.
- Patrz – przeciwwskazania.**
11. Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci.
12. Po każdym zabiegu oczyść łopatkę i zdezyfekuj wilgotnym płatkami lub chusteczką.
13. Nie polewaj/nie spryskuj bezpośrednio głowicy (łopatki) urządzenia.

Naprawa i konserwacja


1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
2. Po każdym użyciu należy dokładnie wytrzeć produkt. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.
3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne i nie należy myć go wodą.
4. Nie użytkuj urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się regularne ładowanie i przechowywanie urządzenia w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.

Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24 - miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji/dane kontaktowe dostępne na stronie: **www.garett.pl**

Producent:
GARETT
ul. Sandomierska 209
25 - 330 Kielce
www.garett.pl

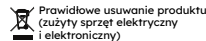

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



CE GARETT SPÓŁKA Z O. O. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/30/UE oraz 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **www.garett.pl**