


Instrukcja użytkowania**OSTRZEŻENIE**

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować danych osobowych bez nadzoru.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- NIE WOLNO używać tego urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone.
- To urządzenie może być zasilane wyłącznie bezpiecznym, bardzo niskim napięciem, które odpowiada oznaczeniu na urządzeniu.
- Jeśli cierpisz na choroby skóry, przed użyciem skonsultuj się z dermatologiem.
- Nie stosować na skaleczenia lub zranioną skórę.

OPIS URZĄDZENIA**ŁADOWANIE**

Podłącz do portu USB za pomocą USB do ładowania.

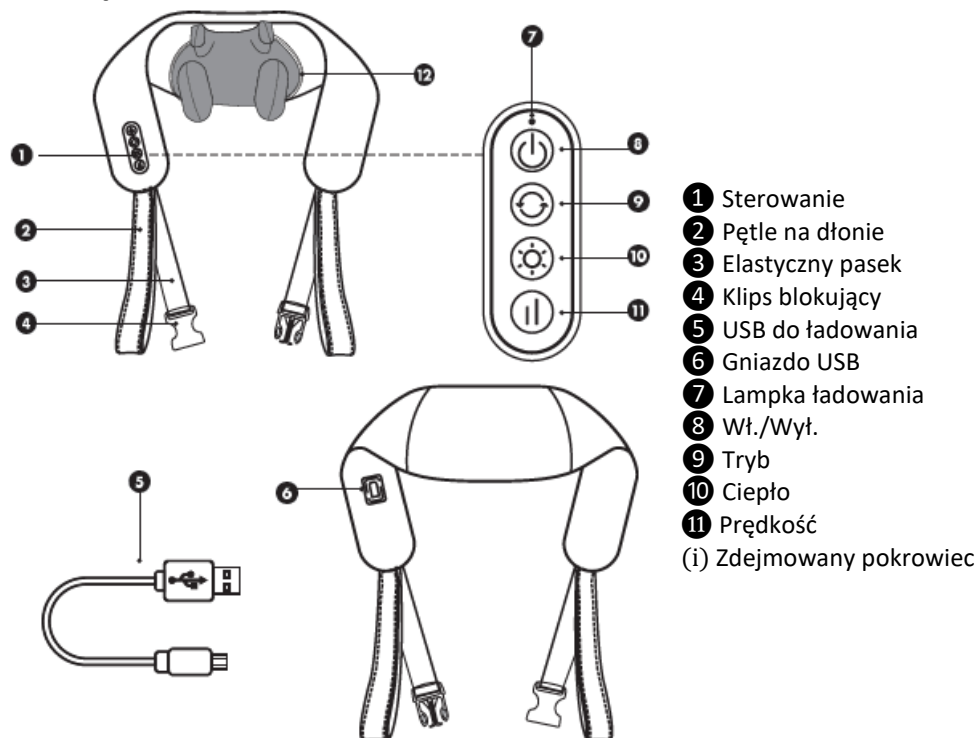

Podczas ładowania kontrolka ładowania będzie świecić na czerwono.
Po pełnym naładowaniu kontrolka ładowania zmieni kolor na zielony.

- Czas ładowania baterii: 3 godziny 30 minut.
- Czas trwania: 1 godzina 20 minut.

Uwaga: Urządzenie nie może być używane podczas ładowania.

PRZED UŻYCIEM



- 1 Umieść paski na szyi i ramionach, upewniając się, że elementy sterujące znajdują się po Twojej prawej stronie.
- 2 Przeciągnij ramiona przez pętle na ramiona.
- 3 Przymocuj klips blokujący za plecami.

UŻYWAĆ

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez dwie sekundy, aby włączyć urządzenie.

Uwaga : Masaż będzie działał przez 10 minut, zanim wyłączy się automatycznie.

- Naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć urządzenie.

TRYB: Naciśnij przycisk Mode i wybierz między delikatnym masażem a masażem tkanek głębokich "Onå".

OGRZEWANIE: Naciśnij przycisk Ogrzewanie, aby włączyć/wyłączyć ogrzewanie.

Uwaga: Gdy funkcja ogrzewania jest aktywna, lampka kontrolna zmienia kolor z czerwonego na zielony

PRĘDKOŚĆ: Aby wybrać jeden z dwóch poziomów prędkości, naciśnij przycisk prędkości.

Uwaga: Aby zwiększyć intensywność, uciskaj przez pętle na ramiona.

PO UŻYCIU

Już po pierwszym użyciu możesz odczuwać lekką sztywność mięśni. Przy regularnym stosowaniu sztywność mięśni zmniejszy się lub zniknie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Zdejmowany pokrowiec (12) można prać w pralce.
Zdejmij, rozpinając i wysuwając głowice masujące.

Instrukcja prania zdejmowanego pokrowca:



- Nie prasować
- Nie używaj wybielacza
- Nie suszyć w suszarce bębnowej
- Nie czyścić chemicznie
- Prać w pralce w temperaturze 30°C lub niższej
- Prać ręcznie w temperaturze 30°C lub niższej

Wytrzyj urządzenie miękką, damp szmatką i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

DYSPOZYCJI



Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2002/96/WE) została wprowadzona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technologii recyklingu w celu zmniejszenia wpływu na środowisko, oszczędzania energii i zasobów oraz zapobiegania rozlewaniu się materiałów niebezpiecznych na wysypiska.

Ten produkt jest klasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny, dlatego po zakończeniu jego eksploatacji należy upewnić się, że jest on prawidłowo utylizowany, zgodnie z wymaganiami władz lokalnych. Produktu NIE wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Poddawaj recyklingowi w sposób odpowiedzialny:

1. Zapoznaj się z lokalnymi wytycznymi miejskimi
2. Oddziel elementy i zutylizuj je w odpowiedni sposób

SPECYFIKACJA

Modelu: BT-MANI

Wejście: 5V 1500mAh 7,5W

Bateria: Li-Ion 11,1 V 1800 mAh 19,98 Wh



Przeczytaj te
instrukcje i zachowaj na przyszłość.



To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
użytku w pomieszczeniach
używać.



Oznacza to, że urządzenie odpowiada prądowi
prawodawstwa dotyczącego produ
leczniczych.



Prąd stały

SKONTAKTUJ SIĘ Z CENTRUM SERWISOWYM:

Wyłączny importer i dystrybutor na Czechy i Słowację:

BORGY CZ, a. s.

Reklamacje / Serwis

Kampus RTK, Zápy 4, 250 01, Republika Czeska

E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz