

SENCOR®

SOC 4110BL
SOC 4111GD



SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW Z ŁADOWANIEM BEZPRZEWODOWYM

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®



SOC 4110BL
SOC 4111GD



A

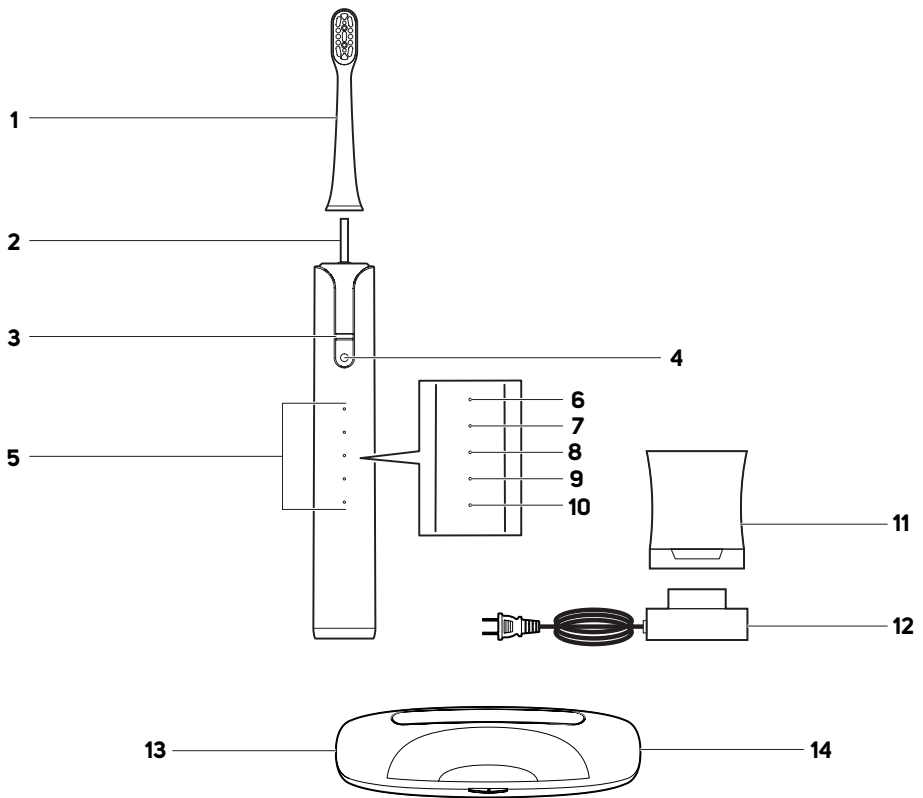

B

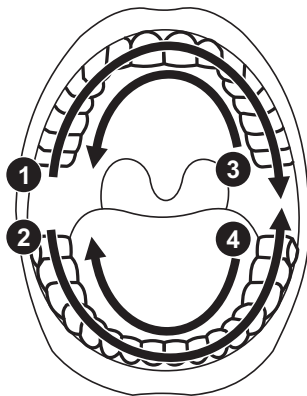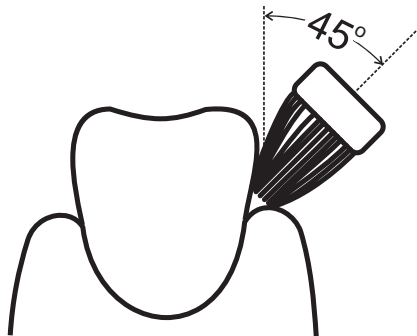

Szczoteczka do zębów z ładowaniem PL bezprzewodowym

Instrukcja obsługi

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

- Osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub psychicznymi oraz bez potrzebnego doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania, mogą używać szczoteczek do zębów, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i uświadamiają sobie ryzyko związane z eksploatacją urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji przeznaczonej do wykonania przez użytkownika.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Części urządzenia, które należy przymocować lub postawić, należy przymocować lub postawić w sposób uniemożliwiający spadnięcie do wody.
- Do ładowania szczoteczki do zębów użyj wyłącznie oryginalnej podstawy ładującej, która dostarczana jest razem z nią. Przed podłączeniem podstawy ładującej do

gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w twoim gniazdku.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Przed podłączeniem podstawy ładowującej do gniazdka elektrycznego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Nie używaj przedłużaczy.
- Chroń bazę do ładowania oraz kabel USB przed kontaktem z wodą. Nie kładź ich w pobliżu naczyń z wodą, jak np. umywalka, wanna itp., nie spryskuj ich wodą, nie zanurzaj ich w wodzie ani nie myj pod bieżącą wodą.
- Przewodu zasilającego podstawy ładowującej nie podłączaj ani nie odłączaj od ładowarki mokrymi rękoma.
- Przestrzegaj, aby wtyczka ładowarki USB, do której jest podłączany kabel USB bazy ładowania nie był w kontakcie z wilgocią, wodą lub innym płynem. Jeżeli mimo wszystko tak się stanie, osusz wtyczkę przed dalszym użyciem.
- Nie odłączaj kabla ładowającego USB od szczoteczki albo od zasilacza USB pociągając za kabel. Mogłoby to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego. Kabel wyciągaj z gniazdka trzymając za wtyczkę.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewód zasilający. Dbaj o to, by kabel nie zwisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej powierzchni lub ostrych przedmiotów.
- Przewód zasilający przechowuj w suchym miejscu.
- Jeżeli kabel zasilający USB albo zasilacz USB jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowanego technika serwisowego lub przez osobę posiadającą właściwe kwalifikacje, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji. Nie wolno używać uszkodzonego kabla zasilającego USB lub uszkodzonego zasilacza USB.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator o długim okresie żywotności, który można wymienić wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym. Nigdy nie próbuj otworzyć urządzenia we własnym zakresie.



Ostrzeżenie:

Nie otwieraj urządzenia w celu wyjęcia akumulatora. Nigdy nie rozłamuj akumulatora, nie rób zwarcia i nie wrzucaj go do ognia. Przy niewłaściwej manipulacji występuje niebezpieczeństwo wycieku substancji toksycznych, pożaru lub wybuchu.

- Zabrania się wykonywania napraw urządzenia we własnym zakresie lub dokonywania jakichkolwiek zmian. Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego, może skutkować utratą gwarancji.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie zanurzaj kabla zasilającego USB ani zasilacza USB w wodzie ani w innych cieczach, nie myj tych części pod bieżącą wodą.
- Jeżeli kabel ładowający albo zasilacz USB wpadnie do wody, w żadnym wypadku nie korzystaj z nich i oddaj je do kontroli do autoryzowanego punktu serwisowego.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA

- Niniejsza szczoteczka do zębów służy do mycia zębów i dziąseł w gospodarstwie domowym. Nie używaj jej do celów komercyjnych lub innych celów, niż do których jest przeznaczona.
- Szczoteczki do zębów ani jej akcesoriów nie narażaj na działanie środowiska zewnętrznego, ekstremalnych temperatur, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani nie umieszczaj jej w pobliżu otwartego płomienia i innych urządzeń lub odbiorników, które mogą być potencjalnym źródłem ciepła.
- Szczoteczki używaj, ładuj i przechowuj w temperaturze pokojowej.
- Z powodów higienicznych powinna być głowica szczoteczki używana tylko przez jednego użytkownika. Głowicę szczoteczki zmieniaj zawsze po upływie 3 miesięcy albo wcześniej, jeżeli widoczne są oznaki zużycia. Używaj wyłącznie oryginalnych zapasowych głowic.
- Szczoteczki ani jej akcesoriów nie wsuwaj do żadnych otworów cielesnych, oprócz jamy ustnej.
- Jeżeli szczoteczki używają dzieci, podczas czyszczenia zębów nadzoruj je, dopóki nie oswoją sobie techniki czyszczenia.
- Jeżeli w przeciągu ostatnich dwu miesięcy odbyłeś zabieg stomatologiczny albo chirurgiczno-dentystyczny, skonsultuj się z swoim dentystą w sprawie użycia wibracyjnej szczoteczki do zębów.
- Jeżeli po użyciu szczoteczki dochodzi do krwawienia z dziąseł i jeżeli krwawienie nie ustępuje nawet po tygodniu używania, skonsultuj się z swoim dentystą.
- Jeżeli twoja pasta do zębów zawiera nadtlenek, sól jadalną albo inny wodorowęglan (często używany w pastach wybielających), oczyść dokładnie po użyciu szczoteczkę i rękojeść.
- Jeżeli użycie szczoteczki powoduje nieprzyjemne albo bolesne uczucia, przestań korzystać ze szczoteczki i ten stan skonsultuj z swoim dentystą.
- Jeżeli masz kardiostymulator albo inne implantowane urządzenie, używanie szczoteczki skonsultuj z swoim lekarzem albo producentem implantu.
- Czyszczenie i konserwację wykonuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja. Szczoteczki ani jej akcesoriów nie myj w zmywarce do naczyń.
- Na szczoteczce do zębów ani jej akcesoriach nie wykonuj żadnych przeróbek. Ingerencja w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad gwarancji jakości.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



LIKWIDACJA AKUMULATORA

Przed likwidacją wyrobu albo jego oddaniem w określonym miejscu zbiorczym zapewnić trzeba, by wyjęty został z niego akumulator. Przed wyjęciem akumulatora trzeba uruchomić odkurzacz i zaczekać do jego wyładowania. Akumulator zawiera substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego i z tego względu nie powinien być wyrzucany razem ze zwykłym odpadem domowym. Jego poprawną likwidację zapewni odpowiednie miejsce zbiorcze.



Stopień ochrony przed porażeniem prądem:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym zabezpiecza podwójna lub wzmacniona izolacja.

Szczoteczka do zębów z ładowaniem

PL bezprzewodowym

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu marki SENCOR, jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z urządzenia.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używasz produktu podobnego rodzaju. Urządzenie należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Zachowaj niniejszą instrukcję do zastosowania w przyszłości. Jeśli będziesz przekazywać urządzenie innej osobie, zapewnij, aby była załączona z urządzeniem niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, abyś nie wyrzucił żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części urządzenia. Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Przed wysyłką urządzenia, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie producenta.

OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|---|---|
| A1 Głowica szczoteczki | ustnej |
| A2 Element łączący | A8 Tryb WHITE – wybielanie zębów |
| A3 Wskaźnik ładowania | A9 Tryb MASSAGE – masaż dziąseł |
| Świeci = przebiega ładowanie | A10 Tryb POLISH – do osiągnięcia maksymalnego połysku zębów |
| Nie świeci = akumulator jest w pełni naładowany lub całkowicie wyladowany | A11 Szklanka |
| A4 Wyłącznik główny/przetącznik trybów czyszczenia | Po umieszczeniu na podstawie ładującej służy do ładowania szczoteczki |
| A5 Wskaźnik LED trybów czyszczenia | A12 Podstawa ładująca |
| A6 Tryb CLEAN – czyszczenie standardowe | A13 USB-C gniazdko dla przewodu zasilającego USB |
| A7 Tryb SOFT – tryb delikatnego mycia dla wrażliwej jamy | A14 Etui podróżne z filtrem UV |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem oplucz głowicę szczoteczki czystą ciepłą wodą.
- Korpus szczoteczki wytrzyj suchą bardzo lekko zwilżoną ścierką. Nigdy nie zanurzaj szczoteczki w wodzie, ani nie czyść pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenie:

Żadnej części szczoteczki ani podstawa ładującej nie można myć w zmywarce do mycia naczyń!



- Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator szczoteczki zgodnie z następującym rozdziałem.

ŁADOWANIE PRZY POMOCY PODSTAWY ŁADUJĄCEJ

- Niniejsza szczoteczka wyposażona jest w bezprzewodowy (indukcyjny) system ładowania, który działa na zasadzie transmisji pól elektromagnetycznym. Wystarczy więc postawić szczoteczke do szklanki z podstawą ładującą i podstawę podłączyć do źródła energii elektrycznej:

- Szklankę z podstawą ładującą umieść na równej i stabilnej powierzchni, a jej przewód zasilający podłącz do gniazdka elektrycznego.
- Wyłączoną szczoteczke umieść we szklance. Automatycznie rozpocznie się ładowanie i wskaźnik LED akumulatora na korpusie szczoteczki się zapali.
- Kiedy tylko dojdzie do naładowania akumulatora, wskaźnik LED zgaśnie.



Ostrzeżenie:

Do szklanki ze szczoteczka nie wkładaj żadnych przedmiotów metalowych. Mogłyby mieć wpływ na proces ładowania i spowodować przegrzanie podstawy ładującej.

Notatka:

Jeżeli ładujesz szczoteczke pierwszy raz po zakupie albo nie korzystałeś z niej powyżej trzech miesięcy, konieczne jest jego ładowanie przez 24 godzin.

Szczoteczka może się podczas pracy zagrzewać. Jest to normalne zjawisko, nie chodzi o usterkę urządzenia.

- Po zakończeniu ładowania zalecamy odłączyć podstawę ładującą od gniazdka.
- Szczoteczka do zębów zaprojektowana jest tak, by na jedno naładowanie wytrzymała regularnie pracować przez 3 tygodnie.
- I choć możesz szczoteczke ładować dopiero po jej wyladowaniu, z powodu utrzymania optymalnej żywotności akumulatora zalecamy ładować go regularnie (np. po 2-3 tygodniach używania).

ŁADOWANIE PRZY POMOCY PODRÓŻNEGO ETUI ŁADUJĄCEGO

- Etui podróżne chroni szczoteczke do zębów i akcesoria przed utratą, zgubieniem, zarysowaniem i zanieczyszczeniem w podróży i w domu. Oprócz tego wyposażone jest w gniazdko USB-C, do którego podłączyć można dostarczony przewód zasilający USB i w razie potrzeby doładować akumulator szczoteczki.
- Umieść szczoteczke w etui.
- Podłącz przewód z końcówką USB-C do etui. Drugi koniec przewodu podłącz do kompatybilnego zasilacza sieciowego USB i ten następnie do gniazdka elektrycznego albo podłącz go do portu USB odpowiedniego urządzenia, jakim jest PC, notebook itp.). Automatycznie rozpocznie się ładowanie i wskaźnik LED akumulatora na korpusie szczoteczki się zapali.
- Kiedy tylko dojdzie do naładowania akumulatora, wskaźnik LED zgaśnie. Odłącz przewód USB od etui podróżnego i od źródła energii elektrycznej.

ZALECENIA DO WYDŁUŻENIA ŻYWOTNOŚCI AKUMULATORA

- Aby akumulator pracował jak najdłużej, ładuj, używaj i magazynuj szczoteczke w temperaturze otoczenia 15-35 °C w suchym środowisku. Niższe albo wyższe temperatury negatywnie wpływają na żywotność akumulatora.
- Jeżeli nie będziesz korzystał ze szczoteczki przez dłuższy czas, naładuj akumulator przynajmniej raz na 6 miesięcy.

OBSŁUGA

PRZYGOTOWANIE DO MYCIA

- Głowicę szczoteczki wsuń na czop łączący korpusu szczoteczki. Pomiedzy korpusem szczoteczki i pierścieniem na dolnej stronie

głowicy pozostanie mała szczelina, co nie oznacza usterki. Podczas zdejmowania szczoteczki postępuj w odwrotnej kolejności.

- Oplucz głowicę szczoteczkę i wprowadź małą ilość pasty do zębów.
- Głowicę szczoteczki włóż do ust i umieść ją pomiędzy zębami i dziąsła.
- Naciśnięciem wyłącznika głównego uruchomisz szczoteczkę.

USTAWIENIE TRYBU MYCIA

- Szczoteczka ma dwa tryby mycia.
CLEAN – tryb do zwykłego czyszczenia zdrowych zębów;
SOFT – oszczędny tryb dla wrażliwych zębów lub części ust;
zalecamy używać w przypadku zwiększonej wrażliwości zębów, szczyki zębów, paradenty, implantów lub innych protez,
WHITE – tryb nadający się do bielenia zębów
MASSAGE – tryb impulsowy do delikatnego masażu dziąsł
POLISH – POLISH – do maksymalnego połysku zębów
Wskaźnik LED wybranego trybu się zapali.
- Pomiędzy trybami przełączasz ponownym naciśnięciem przycisku głównego.
-Po pierwszym naciśnięciu wyłącznika zostanie uruchomiony tryb CLEAN.
-Jeżeli chcesz uruchomić tryb SENSITIVE, musisz w 5 sekund po pierwszym włączeniu ponownie naciśnąć wyłącznik główny.
Zacznie świecić LED kontrolka następnego trybu. Jeśli naciśniesz wyłącznik główny po ponad 5 sekundach pracy, szczotka zatrzyma się.



Notatka:

Szczoteczka pamięta ostatnio użyty tryb, nie jest więc konieczna ponowna aktywacja przez naciśnięcie przełącznika trybów. Jeżeli naciśniesz przełącznik trybów podczas mycia zębów, szczoteczka przełączy się do nowego trybu i zapali się odpowiednia kontrolka. Szczoteczka może się podczas pracy zagrzewać. Jest to normalne zjawisko, nie chodzi o usterkę urządzenia.

POPRAWNY SPOSÓB SZCZOTKOWANIA

- Włosie szczoteczki przykłoż do zębów pod kątem 45° w linii wokół dziąsła, patrz rysunek B. Krótkimi, wolnymi ruchami przesuwaj szczoteczkę do kolejnych zębów. Kiedy tylko umyjesz zewnętrzną stronę prawej połowy łuku zębowego, szczoteczkę przesuń do strony wewnętrznej łuku zębowego. Ponownie postępuj z tyłu do przodu. Wychylenie szczoteczki dopasuj do ułożenia zębów. Podczas czyszczenia wewnętrznej strony przednich zębów trzymaj rękę szczoteczki pionowo tak, by czubek głowicy szczoteczki skierowany był do góry. Na koniec umyj powierzchnię dystalną zębów.
- W identyczny sposób wyczyść prawą połowę łuku dolnego, lewą połowę łuku dolnego a w końcu także lewą połowę łuku górnego. Podczas czyszczenia wewnętrznej strony zębów przednich łuku dolnego trzymaj rękę szczoteczki pionowo tak, by czubek głowicy szczoteczki skierowany był w dół.

TIMER CZYSZCZENIA

- Niniejsza szczoteczka do zębów wyposażona jest w timer, który po każdym 30 sekundach, aż do automatycznego wyłączenia, na krótki czas zatrzyma pracę szczoteczki i w ten sposób ostrzeże cię, że powinieneś rozpocząć mycie kolejnej części twojego uzębienia. W ten sposób jest zapewnione, że wszystkie kwadranty uzębienia będziesz mył tak samo długo.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

- Szczoteczka wyposażona jest w timer, który po 2 minutach pracy automatycznie wyłączy szczoteczkę. To czas zalecany przez dentystów do czyszczenia zębów szczoteczką wibracyjną.

ZAKOŃCZENIE MYCIA

- Jeżeli chcesz zakończyć pracę szczoteczki przed limitem do automatycznego wyłączenia, wystarczy nacisnąć wyłącznik główny, po czym szczoteczka wyłączy się.
- Po każdym użyciu wyczyść szczoteczkę zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Ostrzeżenie:

Przed czyszczeniem musi być szczoteczka zawsze wyłączona i podstawa ładująca odłączona od źródła energii elektrycznej.

Do czyszczenia szczoteczki nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itd. W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia powierzchni.

Żadnej części tej szczotki, podstawy ładującej ani jej przewodu zasilającego nie można myć w zmywarce naczyń!

- Z powodów higienicznych zalecamy czyszczenie szczoteczki do zębów regularnie po każdym użyciu.
- Głowicę szczoteczki dokładnie oplucz pod letnią bieżącą wodą, aby z niej usunąć wszystkie resztki pasty i innych zanieczyszczeń. Jeżeli używasz do mycia zębów pasty wybielającej, zalecamy aplikować na głowicę szczoteczkę kroplę mydła i potem dokładnie ją umyć pod letnią bieżącą wodą. Przynajmniej raz na tydzień zdejmij głowicę szczoteczki z rękocyf i umyj ją pod bieżącą wodą w miejscu, gdzie mocowana jest do rękocyf.
- Wyczyść korpus szczotki lekko wilgotną ściereczką, a następnie wysusz.
- Jeżeli podstawa ładująca jest zanieczyszczona, wytrzyj ją zwilżoną ściereczką, następnie wysusz. Przestrzegaj, aby wtyczka przewodu zasilającego nie była w kontakcie z wodą ani wilgocią.
- Nie susz części szczoteczki nad źródłami ciepła, jakimi są piecze, kuchenka gazowa lub elektryczna itp.

WYMIANA GŁOWICY SZCZOTECZKI

- Głowicę szczoteczki zmieniaj zawsze po upływie 3 miesięcy albo wcześniej, jeżeli widoczne są oznaki zużycia. Używaj wyłącznie oryginalnych zapasowych głowic. Zapasowe głowice są do nabycia u twojego sprzedawcy w zwykłych lub internetowych sklepach.

PRZECZYSZCZANIE

- Jeżeli nie będziesz szczoteczkę używał przez dłuższy czas, umieść wyczyszczoną szczoteczkę i głowicę w suchym, czystym miejscu poza zasięgiem dzieci. Podczas przechowywania, nie narażaj szczoteczki na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierną wilgotność i nie przechowuj jej w nadmiernie zapyłonym środowisku.

DANE TECHNICZNE

Szczoteczka do zębów

Akumulator.....	Li-Ion / 3,7 V / 800 mAh
Czas pracy po pełnym naładowaniu	do 180 min
Poziom hałas	<65 dB(A)
Stopień ochrony przed szkodliwymi skutkami wnikania wody	IPX7
Prędkość drgań	40 000 drgań/minutę

Podstawa ładująca

Wejście.....	100–240 V~, 50–60 Hz, 2,0 W
Stopień ochrony przed szkodliwymi skutkami wnikania wody.....	IPX7
Etui podróżne	
Wejście	USB-C, 5 V, 0,6 A

Deklarowana wartość emisji hałasu urządzenia jest niższa niż 65 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w odniesieniu do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Stopień ochrony przed szkodliwymi skutkami przeniknięcia wody:

IPX7 – Urządzenie chronione jest przed szkodliwymi skutkami wnikania wody przy zanurzeniu do głębokości 1 metra przez czas 30 minut.

**WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM**

Zużyty materiał opakowaniowy odłóż w miejscu zbiórki odpadów, wyznaczonym przez władze lokalne.

**UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNY I
ELEKTRONICZNYCH**

Aby zachować poprawny sposób utylizacji, odnowy i recyklingu produktów tego rodzaju, należy je przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie można przekazać zużyte urządzenie sprzedawcy detalicznemu przy zakupie innego nowego podobnego urządzenia. Poprawną utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku niedotrzymania właściwego postępowania utylizacji tego rodzaju odpadów, zgodnie z krajowymi przepisami, mogą zostać nałożone kary.

Dla podmiotów gospodarczych działających na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską

Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Przed oddaniem urządzenia w punkcie zbiorczym należy wyjąć z urządzenia wbudowany akumulator. Wyjęcie akumulatora zapewni autoryzowany punkt serwisowy. Jeżeli urządzenie zostało już raz rozmontowane w celu ekologicznej utylizacji, nie można go ponownie złożyć.

.....

Zmiana tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.

