

Dziękujemy za zakup Peelingu kawitacyjnego BL-106 firmy .



jest zawsze z Państwem od ponad 75 lat – nasze doświadczenie wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia produktów, które uwzględniają wszystkie najnowsze technologie w diagnostyce i są nieustannie poddawane kontroli jakości. Państwa wybór jest najlepszy z możliwych.

Życzymy Państwu dużo zdrowia. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić prawidłowe działanie tego urządzenia, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

OSTRZEŻENIE

- To urządzenie nie jest zabawką, trzymać je z dala od dzieci.
- Sprawdzić urządzenie przed rozpoczęciem korzystania z niego. Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Jeśli urządzenie jest używane w suchym środowisku, jego obsługa może powodować wytwarzanie ładunków elektrostatycznych. Jest to zjawisko normalne. Nie ma ono wpływu na użytkowanie urządzenia.
- Przewód USB i złącze ładowania należy utrzymywać w suchym stanie.


- Nie używać urządzenia na suchej skórze.
- Nie używać urządzenia wielokrotnie w tym samym miejscu przez krótki czas.
- Nie używać urządzenia z silnymi produktami złuszczącymi, które mają właściwości ściernie lub zawierają granulki.

PRZESTROGA

- Z urządzenia nie powinny korzystać: kobiety w ciąży, karmiące piersią lub w trakcie menstruacji; alergicy; osoby z zaburzeniami nerwu twarzowego; osoby z chorobami serca, ostrymi chorobami lub nowotworami złośliwymi; osoby, które mają złamania lub implanty z metalu, silikonu lub tworzywa sztucznego; osoby noszące elektroniczny sprzęt medyczny; osoby, które przez długi czas przyjmowały leki zawierające hormony steroidowe; osoby z otwartymi ranami, spierzchniętą lub opuchniętą skórą w obszarze użytkowania; osoby z poważnymi chorobami skóry twarzy.
- Nie używać urządzenia na oczach i uszach; wrażliwych obszarach z ranami, egzemą, stanem zapalnym skóry itp.; miejscach poddanych operacji; obszarach z wszczepionym silikonem, metalem, żywicą itp.; obszarach z trądzikiem, owrzodzeniami skóry lub innymi chorobami skóry.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem, jeśli odczuwalny będzie jakikolwiek dyskomfort.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie czyścić urządzenie, aby wydłużyć jego żywotność.
- Nie udostępniać urządzenia innym osobom.
- Nie próbować samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
- Przed użyciem urządzenia należy związać włosy i zdjąć biżuterię, aby uniknąć obrażeń podczas użytkowania.

OPIS URZĄDZENIA

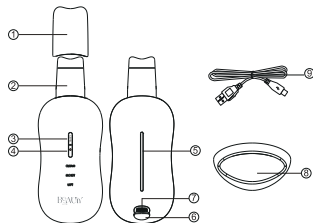

Ilustracja 1

- 01 Silikonowa nasadka ochronna
- 02 Szpatułka ultradźwiękowa
- 03 Przycisk poziomu intensywności
- 04 Przycisk zasilania/trybu
- 05 Pasek czujnika

- 06 Wtyczka pyłoszczelna
- 07 Port ładowania typu C
- 08 Podstawa do przechowywania
- 09 Kabel do ładowania USB typu C


PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Poziom naładowania akumulatora przed pierwszym użyciem jest niski. Należy naładować urządzenie przed rozpoczęciem korzystania z niego.

Urządzenie posiada system alarmowy niskiego poziomu naładowania akumulatora. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, wskaźniki intensywności migną trzy razy, a urządzenie wyłączy się automatycznie.

- Ładowanie urządzenia
 - Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
 - Podłączyć kabel do ładowania do adaptera (adapter nie jest dołączony do zestawu) i podłączyć drugi koniec do gniazda ładowania typu C urządzenia, aby rozpocząć ładowanie. (Ilustracja 2)
 - Podczas ładowania wskaźniki intensywności świecą się cyklicznie. Po pełnym naładowaniu wskaźniki intensywności świecą światłem stałym. Ładowanie urządzenia trwa około 2 godzin.
 - Podczas ładowania można korzystać z urządzenia.

Uwaga: Nie próbować wymieniać akumulatora urządzenia.

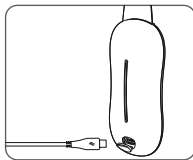

Ilustracja 2

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Aby zapewnić prawidłowe działanie tego urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje przed jego użyciem.

Działanie urządzenia


- Przycisk zasilania/trybu

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/trybu, aby włączyć urządzenie i tryb „CLEAN”. Nacisnąć krótko przycisk zasilania/trybu, aby przełączać między trybami „CLEAN” (OCZYSZCZANIE) -> „MOIST” (NAWILŻANIE) -> „LIFT” (LIFTING). W trybie LIFT nacisnąć przycisk zasilania/trybu, aby wyłączyć urządzenie. Aby wyłączyć urządzenie w dowolnym trybie, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania. (Ilustracja 3)


Urządzenie jest wyposażone w automatyczny timer. Wyłączy się automatycznie po 5 minutach użytkowania.

- Przycisk poziomu intensywności

Po włączeniu urządzenia, wskaźnik intensywności podświetli pierwszy poziom intensywności. Proszę krótko nacisnąć przycisk poziomu intensywności, aby przełączać między poziomami intensywności w cyklu „intensywność 1”, „intensywność 2”, „intensywność 3”. (Ilustracja 4)

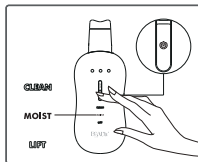

Ilustracja 3

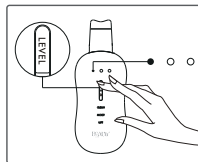



Ilustracja 4

- Zalecane użycie

Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać korpus tak, aby palce/dłoń dotykały paska czujnika z tyłu urządzenia.

- **Tryb CLEAN (OCZYSZCZANIE):**

Zaleca się korzystanie z trybu „CLEAN” 1-2 razy w tygodniu. Nie należy używać tego trybu dłużej niż 5 minut. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy usunąć makijaż i oczyścić twarz. Zwilżyć skórę wodą lub tonikiem. Włączyć urządzenie i wybrać tryb „CLEAN”. Dostosować poziom intensywności do swoich potrzeb. Umieścić przednią (kątową) stronę szpatułki ultradźwiękowej na skórze pod kątem 30°. Powoli przesuwając szpatułkę wzdłuż konturów twarzy, jak pokazano na ilustracji. Korzystanie z tego trybu pomaga głęboko oczyścić skórę. (Ilustracja 5)

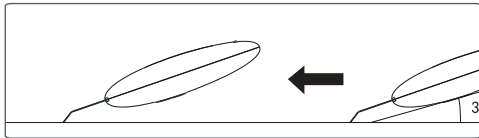
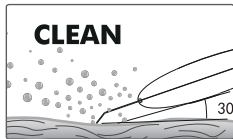


Ilustracja 5

- **Tryb MOIST (NAWILŻANIE):**

Zaleca się korzystanie z trybu „MOIST” 3-5 razy w tygodniu. Nie używać tego trybu dłużej niż 5 minut. Nałożyć kosmetyki do codziennej pielęgnacji skóry. Wybrać tryb „MOIST” i dostosować poziom intensywności. Umieścić tylną (płaską) stronę szpatułki ultradźwiękowej na skórze pod kątem 30°.



Powoli przesuwając szpatułkę wzdłuż konturów twarzy, jak pokazano na ilustracji. Korzystanie z tego trybu pomaga zwiększyć wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry. (Ilustracja 6)

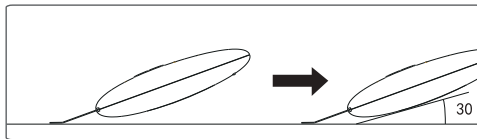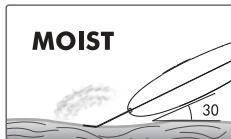

Ilustracja 6

- **Tryb LIFT:**

Zaleca się korzystanie z trybu „LIFT” 3-5 razy w tygodniu. Nie używać tego trybu dłużej niż 5 minut. Po użyciu trybu „MOIST” wybrać tryb „LIFT” i dostosować poziom intensywności. Umieścić tylną część szpatułki ultradźwiękowej na skórze pod kątem 30°. Powoli przesuwając szpatułkę wzdłuż konturów twarzy, jak pokazano na ilustracji. Korzystanie z tego trybu pomaga ujędrnić skórę. (Ilustracja 7)

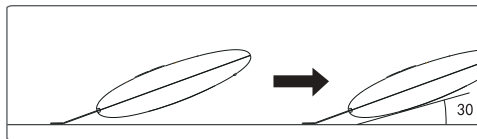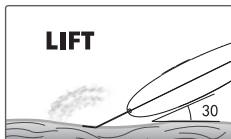

Ilustracja 7

OBSZARY STOSOWANIA


Urządzenie stosować na poniższych obszarach (patrz ilustracja poniżej):



Czoło



Nos

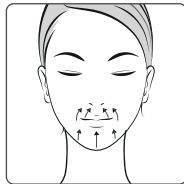

Podbródek i usta



Policzki

Po użyciu wyłączyć urządzenie i wyczyścić szpatułkę ultradźwiękową za pomocą ściereczki do czyszczenia. Następnie kontynuować codzienną pielęgnację skóry.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby zapewnić najlepszą wydajność urządzenia, należy czyścić je czystą, lekko wilgotną ściereczką przed i po każdym użyciu.

- Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Czyszczenie urządzenia: Ostrze szpatułki ultradźwiękowej można umyć wodą, jeśli szpatułka jest skierowana w dół. Nie należy myć szpatułki ultradźwiękowej w taki sposób, aby woda mogła zmoczyć jednostkę główną. Nie zanurzać ani nie myć jednostki głównej wodą lub innymi płynnymi substancjami. Należy ją czyścić czystą, lekko wilgotną szmatką.
- Nie używać smarów, detergentów, środków polerujących ani odświeżaczy powietrza do czyszczenia urządzenia.

PRZECHOWYWANIE

Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowy. Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia przez dłuższy czas w gorącym lub wilgotnym otoczeniu. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać po całkowitym naładowaniu.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Nazwa: Peeling kawitacyjny

Model: BL-106

Wejście: 5 V $\equiv$ 1 A

Typ akumulatora: litowo-polimerowy 3,7 V 500 mAh

Standard wykonawczy: Q/XM 1024-2020

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Po naciśnięciu przycisku zasilania/ trybu urządzenie nie działa	Akumulator (niemal) wyczerpany.	Naładować urządzenie zgodnie z instrukcjami.
Urządzenie nie wytwarza mgły wodnej	Niski poziom naładowania akumulatora.	Naładować urządzenie zgodnie z instrukcjami.
Inne problemy.		Proszę skonsultować się z producentem.

Uwaga: Jeżeli urządzenie wciąż nie działa prawidłowo po zastosowaniu powyższych rozwiązań, zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się z producentem.

UTYLIZACJA

Wbudowany akumulator zawiera substancje, które mogą zanieczyszczać środowisko. Podczas utylizacji tego urządzenia nie wolno wyrzucać go do ogólnych odpadów domowych. Należy zutylizować to urządzenie w oficjalnym punkcie recyklingu, aby przyczynić się do ochrony środowiska.



rok zał. 1949

TECH - MED®

TECHNIKA MEDYCZNA

B. WÓJCİK s-ka jawna

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98

BIURO HANDLOWE: tel.: (22) 654 64 92

SKLEP FIRMOWY: tel.: (22) 654 64 93

SERWIS: tel.: (22) 853 30 10, faks: (22) 620 77 42

www.techmed.pl e-mail: techmed@techmed.pl

Poland, Europe

