

Götze & Jensen



MASAŻER DO KARKU NM500

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Ostrzeżenie:

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, oparzeń, porażenia prądem lub innych urazów, należy przestrzegać poniższej instrukcji:

1. Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania.
2. Podczas czyszczenia lub otwierania urządzenia, należy wyciągnąć wtyczkę od źródła zasilania.
3. Nie należy używać produktu na poduszkach ani pod kocami podczas jego pracy.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5. Urządzenie należy używać zgodnie z instrukcją obsługi. Nie należy używać akcesoriów lub części niezalecanych przez producenta.

Niebezpieczeństwo:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, należy przestrzegać poniższych zasad:

1. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania.
2. W przypadku zamoczenia urządzenia w wodzie, nie należy go dotykać. Należy najpierw odłączyć wtyczkę od źródła zasilania, a następnie dać urządzeniu wyschnąć.
3. Nie należy używać urządzenia podczas kąpieli lub prysznica.
4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
5. Urządzenie należy zasilать tylko i wyłącznie dołączoną do zestawu ładowarką.
6. Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania.
7. Nie należy szarpać ani ciągnąć przewodów.
8. Powierzchnia urządzenia nagrzewa się - osoby z obniżoną wrażliwością powinny zachować szczególną ostrożność.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego niedotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	NM500
Zasilanie:	12 V --- 2 A
Ilość poziomów:	3
Prędkość obrotowa:	2500 obr./min (+/- 200)
Maksymalny moment obrotowy:	218 mN/m
Długość przewodu zasilającego:	ok. 1.4 m
Zasilacz sieciowy	
Napięcie wejściowe:	100-240 V~
Wejściowa częstotliwość:	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe:	11.87 V
Prąd wyjściowy:	2 A
Moc wyjściowa:	23.74 W
Średnia sprawność podczas pracy:	87.81 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %):	82.59 %
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	0.51 W

OPIS URZĄDZENIA

1. Głowice masujące.
2. Przycisk Włącz / Wyłącz.
3. Przycisk zmiany kierunku masażu.
4. Przycisk zmiany prędkości masażu.
5. Przycisk włącz / wyłącz ogrzewanie.
6. Zasilacz.

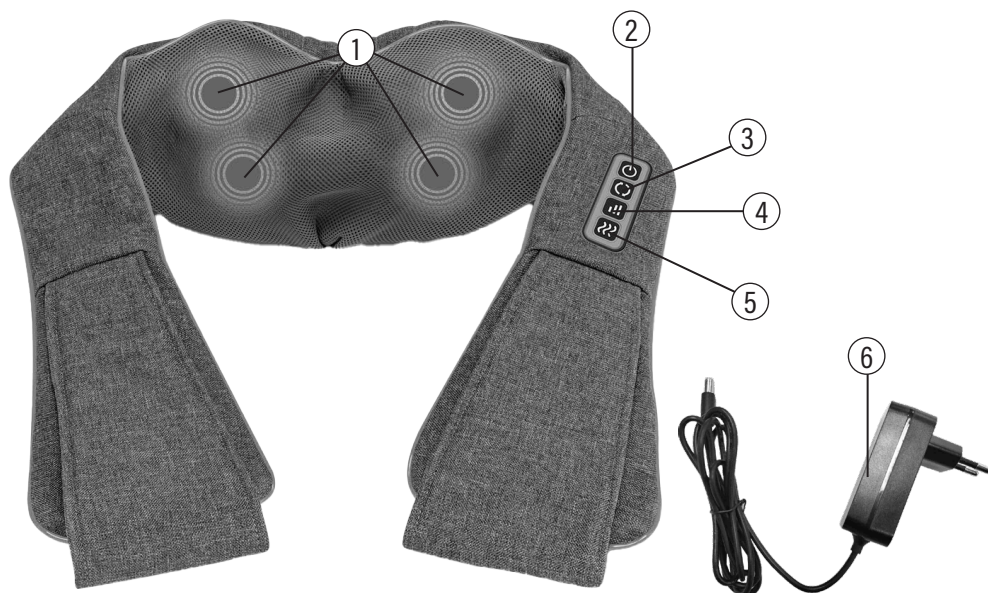

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Podłącz urządzenie do zasilania.
2. Załóż masażer na kark zgodnie z poniższym rysunkiem.



3. Naciśnij przycisk włącz / wyłącz , aby masażer rozpoczął pracę.

4. Funkcja zmiany kierunku

Zmień kierunek obrotu głowic masażera za pomocą przycisku , aby głowice zaczęły obracać się w przeciwną stronę. Po włączeniu masażer pracuje automatycznie - głowice obracają się przez około minutę w jedną stronę, a następnie przez minutę w stronę przeciwną. Po ręcznej zmianie kierunku za pomocą przycisku głowice będą obracać się stale w wybranym kierunku.

5. Funkcja zmiany prędkości

Masażer posiada 3 tryby prędkości masażu, domyślnie rozpoczyna pracę na najwyższym. Aby przełączyć na inny tryb, użyj przycisku zmiany prędkości  - głowice zaczną obracać się szybciej lub wolniej w zależności od wybranego ustawienia.

6. Funkcja ogrzewania

Masażer domyślnie po włączeniu będzie działał z włączonym trybem ogrzewania. Aby go wyłączyć lub włączyć, naciśnij przycisk .

7. Automatyczne wyłączenie

Masażer automatycznie wyłącza się po 15 minutach, aby zapobiec przegrzaniu oraz nadmiernemu pobudzeniu mięśni. Przed rozpoczęciem kolejnej sesji masażu zaleca się odczekać co najmniej 30 minut.

REGULARNY MASAŻ MOŻE POPRAWIĆ FUNKCJE CAŁEGO CIAŁA

- Pomaga złagodzić zmęczenie mięśni spowodowane pracą fizyczną lub ćwiczeniami.
- Pomaga złagodzić ból mięśni karku i ramion.
- Poprawia krążenie krwi, wspomaga metabolizm organizmu.
- Rozluźnia napięte mięśnie i łagodzi stres.
- Poprawia elastyczność mięśni i stawów.
- Pomaga utrzymać zdrowy kręgosłup.
- Wspomaga ogólną kondycję ciała.

Głównym zastosowaniem masażera NM500 jest masaż karku, jednak można go stosować także na różnych częściach ciała, aby złagodzić napięcie mięśniowe i poprawić krążenie. Poniżej przedstawiono przykładowe pozycje użycia urządzenia:




1
Masaż karku – rozluźnia
spięte mięśnie szyi
i ramion.




2
Masaż nóg – łagodzi
zmęczenie łydek i ud po
wysiłku fizycznym.



3
Masaż stóp – wspomaga
relaks po długim dniu
stania lub chodzenia.

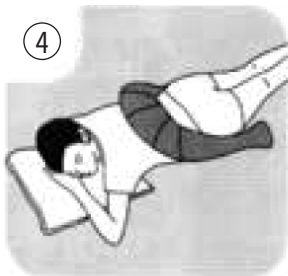

4
Masaż pleców –
przynosi ulgę w odcinku
lędźwiowym i krzyżowym.

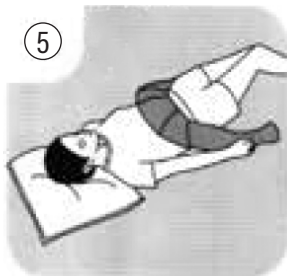

5
Masaż brzucha – delikatnie
stymuluje okolice jamy
brzuszej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz urządzenie od zasilania.

Przed rozpoczęciem czyszczenia zawsze odłącz masażer od prądu i upewnij się, że całkowicie ostygł.

2. Używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.

Do czyszczenia obudowy masażera stosuj miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczkę. Nie używaj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Nigdy nie myj masażera pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj go w cieczy. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia i stanowić zagrożenie dla użytkownika.



4. Regularna kontrola stanu przewodów i wtyczki.

Okresowo sprawdzaj, czy przewód zasilający oraz wtyczka nie są uszkodzone. W przypadku

jakichkolwiek oznak zużycia, przetarć lub uszkodzeń - zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

5. Przechowywanie.

Po użyciu masażera, odłącz go od zasilania i przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła.

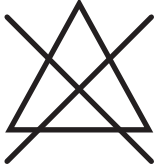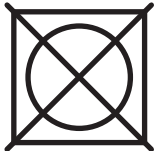SYMBOL	WYJAŚNIENIE
	Nie prać
	Nie wybielać
	Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Nie czyścić chemicznie
	Nie prasować

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do zasilania.	Upewnij się, że wtyczka jest podłączona do zasilania, a przycisk  został wciśnięty.

Podczas używania masażer nagle przestaje działać.	Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do zasilania.	Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona prawidłowo.
	Urządzenie posiada funkcję zabezpieczającą przed przegrzaniem.	Odczekaj 5-10 minut, aby masażer ostygł, zanim go ponownie uruchomisz. Jeżeli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.
	Przewód zasilający jest uszkodzony.	Sprawdź stan przewodu zasilającego. Jeżeli są widoczne przetarcia lub inne uszkodzenia, odłącz urządzenie od zasilania. Skontaktuj się z serwisem.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE MASAŻERA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.1