



16770047

DK	Massagepistol	2
NO	Massasjepistol.....	9
SE	Massagepistol	16
FI	Hierontavasara.....	23
UK	Massage gun.....	29
DE	Massagepistole	36
PL	Masażer pistoletowy	43

www.adexi.eu

WPROWADZENIE

Aby jak najlepiej wykorzystać nowy pistolet do masażu, przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji na przyszłość, aby można było się do niej odwołać w późniejszym terminie.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, wyłącznie jeśli są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru. Należy pilnować dzieci przebywające w pobliżu urządzenia, gdy jest ono używane. Urządzenie nie jest zabawką.
- Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub obsługi (patrz również Warunki gwarancji).

- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku zewnętrznego ani komercyjnego.
- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i transportowe z wnętrza i z zewnątrz urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje żadnych części.
- Upewnij się, że nie ma możliwości pociągnięcia lub potknięcia się o przewód USB urządzenia podczas ładowania.
- Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem i gdy nie jest używane.
- Kabel USB i urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i otwartego ognia.
- Kabel USB nie może być skręcony ani owinięty wokół urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone na podłogę lub do wody lub zostało uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.
- Urządzenie może być podłączone do zasilania USB 5 V wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB. Gwarancja nie obowiązuje, w przypadku podłączenia go do niewłaściwego napięcia.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.

- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
- Nie używaj akcesoriów ani części zamiennych, które nie pochodzą od dostawcy.
- Nie używaj w wannie.
- Nigdy nie należy umieszczać urządzenia w miejscu, w którym może ono spaść lub zostać wciągnięte do wody, np. w umywalce lub wannie.
- Nie używaj urządzenia przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować przegrzanie i skrócić żywotność urządzenia. W przypadku przegrzania należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odczekać, aż całkowicie ostygnie przed ponownym użyciem.


OSTRZEŻENIA MEDYCZNE

- **Urządzenie nie jest przeznaczone do leczenia fizjoterapeutycznego, a jedynie do masażu poprawiającego samopoczucie, rozluźniającego napięte mięśnie i/ lub łagodzącego niewielki ból mięśni. Korzystanie z urządzenia nie może zastąpić profesjonalnego leczenia fizjoterapeutycznego lub medycznego.**
- **W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.**
- **Urządzenie nie może być używane przez osoby z rozrusznikiem serca.**

- Urządzenie nie może być używane przez osoby z problemami z sercem lub bólami nieznanego pochodzenia, a także przez kobiety w ciąży.
- Nie należy używać urządzenia po zażyciu środków przeciwbólowych, rozluźniających lub alkoholu, ponieważ tolerancja na ciepło może być osłabiona.
- Nie używaj urządzenia od szyi w górę ani na wrażliwych obszarach.
- Nie używaj urządzenia bezpośrednio na opuchniętych, objętych stanem zapalnym lub uszkodzonych obszarach skóry.
- Nie używaj urządzenia razem z olejkami, kremami itp.
- Nie używaj urządzenia tuż przed pójściem


spać, ponieważ urządzenie ma działanie stymulujące, które może utrudniać zasypianie.

- Nie używaj urządzenia na tej samej części ciała zbyt długo; przesuwaj urządzenie po większej powierzchni ciała ciągłym ruchem.

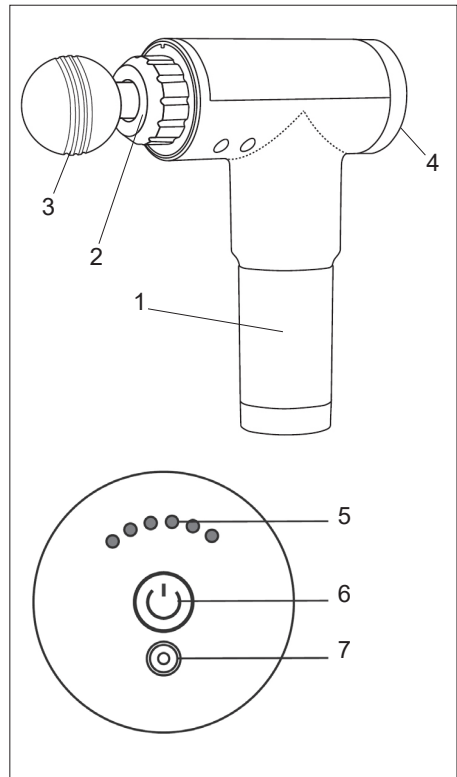

GŁÓWNE KOMPONENTY

1. Uchwyt
2. Gniazdo
3. Głowica masująca
4. Panel sterowania
5. Lampki kontrolne
6. Przycisk włączania/wyłączania z przełącznikiem prędkości
7. Gniazdo ładowania

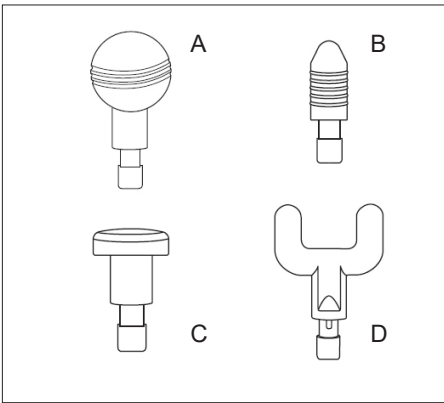


Główce masujące

- A. Okrągła głowica do masażu dużych obszarów mięśni, rąk, pleców, pośladków i nóg
- B. Kulista głowica masująca do głębokiego masażu tkanek i stawów, dłoni i podeszew.
- C. Płaska głowica masująca do masażu wszystkich obszarów mięśniowych i rozluźniania mięśni
- D. Głowica masująca w kształcie widelca do ścięgien Achillesa oraz mięśni szyi i kręgosłupa

ŁADOWANIE

Podłącz gniazdo ładowania (7) urządzenia do ładowarki USB za pomocą dostarczonego kabla USB.

Pełne ładowanie trwa około 3 godzin i zapewnia 60 minut działania.

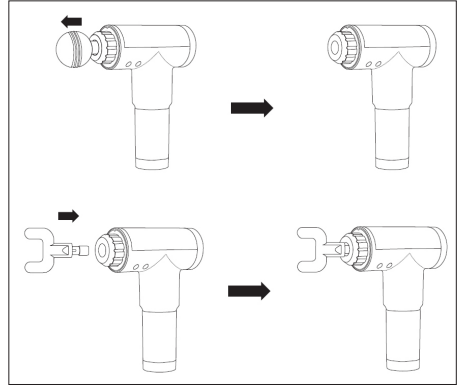

UŻYTKOWANIE

Urządzenie pomaga zwiększyć krążenie krwi, zmniejsza bóle mięśni i wspomaga regenerację po ćwiczeniach.

1. Podłącz wymaganą głowicę masującą (3, A/B/C/D) do gniazda (2) na urządzeniu:
2. Włącz urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania (6). Urządzenie uruchomi się na najniższym ustawieniu prędkości, a lampki kontrolne (5) wskażą wybrane ustawienie prędkości.
3. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania jeden lub więcej razy, aby zmienić ustawienie prędkości lub wyłączyć urządzenie:

Liczba naciśnień	uderzenia/minutę	Poziom dźwięku*
1	2000	43 dB
2	2200	45 dB
3	2400	45.6 dB
4	2600	46.2 dB
5	2800	47 dB
6	3000	47.5 dB
7	0	0 dB

* Mierzone z odległości 1 metra

4. Przytrzymać głowicę masującą (3) przy skórze, mocno trzymając uchwyt urządzenia (1).
5. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy je wyłączyć za pomocą przycisku włączania/wyłączania (6).

CZYSZCZENIE

- Urządzenia nigdy nie wolno wystawiać na działanie wody ani zanurzać w wodzie.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać proszku do szorowania, wełny stalowej ani innych agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki.
- Zdejmowane głowice masujące można myć w ciepłej wodzie z mydłem.
- Przed ponownym założeniem głowic na urządzenie należy upewnić się, że są one całkowicie suche.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że niniejszy produkt Adexi jest oznaczony tym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą

bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych stacji recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić zużyty sprzęt do sprzedawcy, od którego został zakupiony, jeśli kupujesz nowy sprzęt. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie były przestrzegane
- jeśli w urządzenie ingerowano
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innych uszkodzeń
- jeśli urządzenie jest wadliwe z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i konstrukcji, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących użytkowania urządzenia, na które nie można znaleźć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, należy odwiedzić naszą witrynę internetową pod adresem www.adexi.eu.

Dane kontaktowe można również znaleźć na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw, akcesoriów lub części zamiennych.

PRODUKOWANE W CHINACH DLA

Adexi A/S

Lægårdsvej 9C

DK-8520 Lystrup

Dania

www.adexi.dk

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku