

# BeautyMe

## URZĄDZENIE DO PEELINGU KAWITACYJNEGO SSC501

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do pielęgnacji skóry twarzy. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażaj produktu na szkodliwe

2

zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

8. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
9. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
10. Nie stosować w pobliżu wanien, umywalk lub innych zbiorników napełnionych wodą.



11. Ładowanie baterii należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym

4

warunki atmosferyczne.

6. Nie należy ładować urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym

3

pomieszczeniu.

12. Urządzenie nie ma zasilacza sieciowego w zestawie. Należy ładować urządzenie zgodnie z wskazówkami w instrukcji obsługi w sekcji ŁADOWANIE URZĄDZENIA.
13. Należy suszyć ręce przed użyciem.
14. W celu osiągnięcia lepszego efektu należy pielęgnować skórę codziennie w czasie używania tego produktu.
15. Należy używać tylko jednego urządzenia do mechanicznego czyszczenia twarzy.
16. Ultradźwięki to mechaniczna fala wibracyjna o wysokiej częstotliwości, która jest stosowana w kosmetyce. Może wywoływać delikatny

5

efekt rezonansu na skórze przy wibracjach o niskiej energii i wysokiej częstotliwości, zwiększać żywotność komórek, pogłębiać gruczoły potowe i zmniejszyć pory.

17. Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym.
18. Działanie urządzenia różni się w zależności od rodzaju skóry i częstotliwości używania.
19. Jeśli skóra jest alergiczna w wyniku stosowania produktu, należy przestać go używać i skonsultować się z lekarzem.
20. Nie rzucać ani nie uderzać produktem grozi to utratą jego właściwości przewodnictwa EMS.

6

6. Obecność w tkankach ciała obcych metalicznych np.: ortodontyczny aparat korekcyjny-nazębny, rozrusznik serca.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **BeautyMe**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego niedotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

8

## WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO UŻYTKOWANIA

### Wskazania do użytkowania:

1. Zaskórniki i wągrzy.
2. Rozszerzone pory.
3. Trądzik pospolity i różowaty.
4. Zmarszczki.
5. Przebarwienia skóry.
6. Błizny.
7. Utrata elastyczności i jędrności skóry.
8. Rozszerzone naczynia włosowate.
9. Skóra szorstka, zmęczona, szara, odwodniona.
10. Skóra tłusta i przetłuszczająca się.
11. Skóra sucha, złuszcząca się i wrażliwa.

### Przeciwwskazania do stosowania:

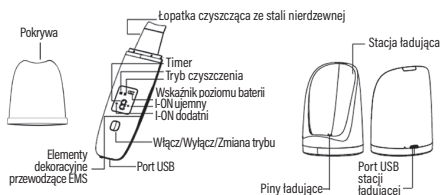
1. Nowotwory i stany po ich operacyjnym usunięciu.
2. Ciąża.
3. Niewydolność krążenia.
4. Stany gorączkowe.
5. Ciężki stan ogólny.

7

## DANE TECHNICZNE

Model:	SSC501
Parametry zasilacza:	Wejście: 100-240V ~ 50/60Hz Wyjście: 5.0V 1.0A
Bateria:	3.7V --- 600mAh Polimerowa Li-Ion
Wejście:	5.0V --- 1.0A
Moc:	2W
Tryb pracy:	4 (głębokie oczyszczanie, lifting i ujędrnienie skóry, I-ON+, I-ON-)
Aksesoria:	Przewód micro-USB, stacja dokująca, silikonowa nakładka
Czas ładowania:	Około 1h
Czas pracy urządzenia:	Około 100min

## OPIS URZĄDZENIA



9

## INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Rozpakuj urządzenie i zdejmij wszelkie folie zabezpieczające.
2. Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przez 3 sekundy przycisku Włącz/Wyłącz.

### UWAGA! ZALECA SIĘ PRZETESTOWANIE SIŁY MIKROPRĄDÓW PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NA TWARZY.

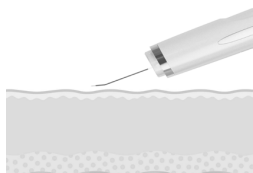
3. Aby zmienić tryb pracy naciskaj kolejno przetącznik trybu czyszczenia.
4. Każda funkcja jest podświetlana niebieską diodą LED w urządzeniu.
5. Po zakończonym czyszczeniu wyłącz urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Włącz/Wyłącz przez 3 sekundy lub odczekaj, aż timer wyłączy się samoczynnie po upływie, po czym przez kolejne 9 minut przeprowadzi proces odkażania światłem.

## FUNKCJE URZĄDZENIA

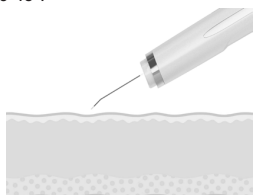
Produkt wspomaga czyszczenie i usuwanie zrogowatej i starzejącej się skóry, głębokie uelastycznienie

10

tej funkcji z serum lub kremem ujędrniającym. Proces ten należy wykonać przykładając łożatkę płasko do skóry.




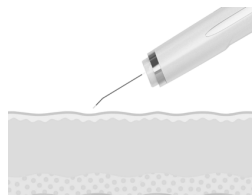
**Oczyszczanie ION+ (jonizacja dodatnia)** - Rozkłada melaninę, usuwa uporczywe zaskórniki, oczyszcza pory, złuszcza martwy i matowy naskórek. Sprawia że skóra staje się młodsza i zdrowsza. Do użycia wraz z tonikiem lub mleczkiem oczyszczającym. Proces ten należy wykonać przykładając łożatkę urządzenia pod kątem około 45°.




12

skóry, poprawia krążenie skóry i metabolizm limfatyczny. Zwiększa zdolności regeneracyjne skóry. Poprzez masaż odżywia skórę.

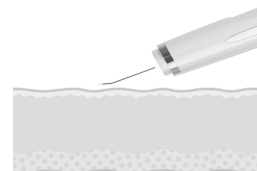
**Głębokie oczyszczenie**  - Łopatką może wytwarzać vibracje o wysokiej częstotliwości 24kHz, aby szybko i delikatnie usunąć zaskórniki, keratynę, trądzik, martwy naskórek czy pozostałości makijażu. Dodaje skórze blasku i elastyczności. Podczas używania funkcji głębokiego oczyszczania można nałożyć żel oczyszczający, aby wytworzyć piankę i usuwać ją za pomocą urządzenia. Proces ten należy wykonać przykładając łożatkę urządzenia pod kątem około 45°.



**Lifting i ujędrnienie skóry**  - EMS aktywuje skórę, wspomaga krążenie krwi i przyspiesza metabolizm skóry, aby była jędrna, gładka i delikatna. Można używać

11

**Właczanie ION- (jonizacja ujemna)** - Dzięki jonom ujemnym wnika głęboko w warstwę naskórka, optymalizując efekty nawilżenia, aby uzyskać sprężystą skórę, zredukować zmarszczki. Działa efektywniej w połączeniu z produktami do pielęgnacji skóry tj. pianka czyszcząca, tonik, krem, olejek oczyszczający. Po dokładnym demakijażu nałóż serum, ampułki witaminowe lub krem przeznaczony do tego typu zabiegów. Do tak przygotowanej skóry przyłóż urządzenie i zacznij oczyszczanie. Proces ten należy wykonać przykładając łożatkę płasko do skóry.



## OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Umyj twarz i upewnij się, że skóra jest dobrze zwilżona. Użyj delikatnego toniku bez alkoholu, hydrolatu lub czystej ciepłej wody.

13

2. Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przez 3 sekundy przycisku Włącz/Wyłącz.
3. Aby zmienić tryb pracy naciskaj kolejno przełącznik trybu czyszczenia.
4. Na wyświetlaczu widoczny jest czas czyszczenia, który zaczyna się od 9 minut i upływa malejąco w dół.
5. Oczyszczanie zacznij od nosa. Zawsze od dołu do góry. Następnie część twarzy od linii żuchwy do linii pod okiem i policzki, zaczynając od dołu ku górze, z obu stron. Kolejnym krokiem jest broda oraz skóra nad ustami i czoło, łopatkę prowadź od dołu do góry.
6. Ułożenie urządzenia dopasuj w zależności od danego trybu.

**UWAGA! NIE PRZYCSKAJ URZĄDZENIA ZA MOCNO DO SKÓRY. NIE ZATRZYMUJ ŁOPATKI W JEDNYM MIEJSCU NA SKÓRZE ZBYT DŁUGO, ALE POWOLI PRZESUWAJ ŁOPATKĘ WZDŁUŻ SKÓRY.**

7. Aby wykonać dodatkowe oczyszczenie naskórka nałóż silikonową nakładkę na łopatkę.

**UWAGA! PRODUKT MOŻE BYĆ UŻYWANY OD 3 DO 5 RAZY W TYGODNIU NIE DŁUŻEJ NIŻ 9 MINUT PODCZAS JEDNEGO UŻYCIA.**

14

4. Podłącz urządzenie poprzez przewód USB do zasilacza. A następnie podłącz urządzenie do gniazda zasilania.
5. Włóż przewód USB do stacji ładującej. Następnie umieść piny urządzenia w stację dokującą, a stację poprzez przewód połącz z zasilaczem sieciowym po czym umieść zasilacz w gnieździe sieciowym.

**UWAGA! W STACJI ŁADUJĄCEJ PO STRONIE PORTU USB ŚWIECI SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY CZERWONA DIODA LED INFORMUJĄCA NAS O GOTOWOŚCI DO PRACY.**

**PAMIĘTAJ, ABY SILIKONOWA ZAWLECZKA PORTU USB, BYŁA ZAWSZE PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANA W URZĄDZENIU.**

6. Podczas ładowania urządzenia na wyświetlaczu migają kolejno jednostki poziomu ładowania baterii.

**UWAGA! JEŻELI BATERIA URZĄDZENIA ZOSTAŁA ZBYT MOCNO ROZŁADOWANA, EKRAŃ MOŻE NIE ZAREAGOWAĆ. NALEŻY WTEDY ODCZEKAĆ KILKA MINUT, ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA I PODŁĄCZYĆ PONOWNIE.**

16

8. Po zakończonym czyszczeniu wyłącz urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Włącz/Wyłącz. Urządzenie po zakończeniu czyszczenia przechodzi do trybu odkażania światłem i naświetla łopatkę przez 9 minut.

**UWAGA! TEN PRODUKT MA FUNKCJĘ AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA SIĘ PO 9 MINUTACH PRACY I 9 MINUTACH ODKAŻANIA. JEŚLI POTRZEBUJESZ GO DODATKOWO WŁĄCZYĆ, NACIŚNIJ PONOWNIE PRZYCSISK ZASILANIA I WYBIERZ ŻĄDANY TRYB.**

## ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Urządzenie można ładować na trzy sposoby: poprzez port USB w komputerze, stację ładującą oraz zasilacz sieciowy.

1. Aby naładować urządzenie, upewnij się, że jest wyłączone.
2. Upewnij się, że urządzenie jest suche przed ładowaniem.

**UWAGA! PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NAŁADUJ BATERIĘ DO PEŁNA.**

3. Podłącz urządzenie poprzez przewód USB do dowolnego portu USB w komputerze.

15

7. Po naładowaniu na wyświetlaczu w sposób ciągły zaświecą się 3 jednostki baterii informujące o zakończeniu ładowania.
8. Nie używaj urządzenia w trakcie ładowania akumulatora. Wydłuży to jego żywotność.

**UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYKCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ, NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:**

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.

17

4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Wyłącz urządzenie.
2. Wyczyść obudowę oraz panel wyświetlacza za pomocą zwilżonej miękkiej ściereczki.

**UWAGA! DO CZYSZCZENIA NI E UŻYWAJ SZORSTKICH MATERIAŁÓW ORAZ OSTRYCH DETERGENTÓW.**

**NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE.**

3. Użyj mokrego ręcznika bądź waty nasączonej alkoholem do wyczyszczenia łopatki.

18

## UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



## MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

20

## PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Bateria w urządzeniu jest rozładowana.	Naładuj urządzenie.
Urządzenie po kilku sekundach wyłącza się.	Słaba bateria w urządzeniu.	Naładuj urządzenie.

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

19

## WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE URZĄDZENIA DO PEELINGU

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

21

6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmę lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

22

23

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

## UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

