

Masażer do oczu

Beauty Glow Eye



Droga Klientko/Drogi Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu.

Poniższa instrukcja została przygotowana w oparciu o najnowszą wiedzę w zakresie kosmologii. Przeprowadzi Cię ona krok po kroku, przez zabieg masażu oczu, tak abyś mogła/mógł w pełni skorzystać z mocy urządzenia i cieszyć się efektami na długo.

O produkcie

Garett Beauty Glow Eye to innowacyjny masażer pod oczy, który równie dobrze sprawdzi się do pielęgnacji okolic oczu i kącików ust. Posiada dwa rodzaje światła czerwone LED o zasięgu 620nm oraz niebieskiego o zasięgu 420nm. Dodatkowym atutem są uprzyjemniające zabieg pulsacyjne wibracje soniczne. Szybki i przyjemny zabieg w połączeniu z relaksującym masażem.

Funkcje produktu

Funkcja wibracji sonicznych: Opracowana specjalnie by wspomagać pracę skóry oraz poprawić efektywność zabiegu. Wibracje o wysokiej częstotliwości przenikają do głębszej warstwy skóry, powodując lepsze wchłanianie substancji odżywczych z stosowanych preparatów. Odprężający masaż pozwala odpocząć zmęczonej skórze i usprawnić jej regenerację. W połączeniu z technologią fototerapii pomaga pozbyć się cieni pod oczami i wygładzić skórę.

Fototerapia: Metoda leczenia światłem znana już była w czasach starożytnych zwana była FOTOODMŁADZANIEM. Dzięki aplikowaniu impulsów silnego światła w głąb skóry, stymuluje odbudowę włókien kolagenowych i elastyny. Przyczynia się do poprawy struktury i regeneracji skóry od wewnątrz.


- **Czerwone światło LED:** Pomaga w poprawieniu ukrwienia, pobudza metabolizm komórek skóry, ma właściwości gojące i zblizniające oraz regeneruje skórę. Zwiększa dotlenienie komórek co wpływa na poprawę elastyczności i sprężystości skóry. Ma zastosowanie do każdego typu cery. Długość fali: 620nm.
- **Niebieskie światło LED:** Wpływa na zmniejszenie nadmiernej produkcji łoju, ma właściwości przeciwzapalne, zapobiega powstawaniu niedoskonałości i przynosi ulgę w podrażnieniach skóry. Ma zastosowanie do każdego typu cery. Długość fali: 477nm.

- KIERUNKI DZIAŁANIA:**
- delikatnie masuje twarz
 - pomaga odnawiać komórki skóry
 - wzmacnia kontur twarzy
 - przyczynia się do lepszego ukrwienia skóry
 - wykorzystuje technologię terapii światłem
 - intensyfikuje wchłanianie preparatów kosmetycznych

- WSKAZANIA:**
- skóra zmęczona
 - zmarszczki mimiczne
 - skóra pozbawiona jędrności
 - skóra sucha
 - zasinienia pod oczami

- PRZECIWSKAZANIA:**
- ciąża i okres karmienia piersią
 - ostre stany zapalne skóry
 - choroby autoimmunologiczne
 - choroby oczu (jaskra, problemy z siatkówką)
 - epilepsja
 - przyjmowanie leków i ziół światłoczułych
 - leczenie ogólne pochodnymi witaminy A
 - uczulenie na światło
 - zaburzenia krzepnięcia krwi
 - fotodermatozy i choroby pęcherzowe skóry
 - skłonność do powstawania bliznowców
 - choroby nowotworowe
 - mocna opalenizna
 - otwarte rany
 - podrażnienia oraz infekcje oczu
 - zmiany skórne (żylaki, pieprzyki, znamiona), w obrębie miejsca zabiegowego
 - aktywna ropna postać trądziku, egzema
 - rozrusznik serca
 - implanty np. dentystyczne, metalowe płytki
 - tatuaże, makijaż permanentny- w obrębie miejsca zabiegowego
 - nie stosować z preparatami złuszczałymi, peelingi chemiczne, mechaniczne, kwasy
 - nie stosować z olejkami eterycznymi
 - opryszczka
 - choroby wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze skóry
 - stany chorobowe organizmu, gorączka
 - bezpośrednio po korzystaniu z sauny, solarium lub ekspozycji na słońce

Opis produktu

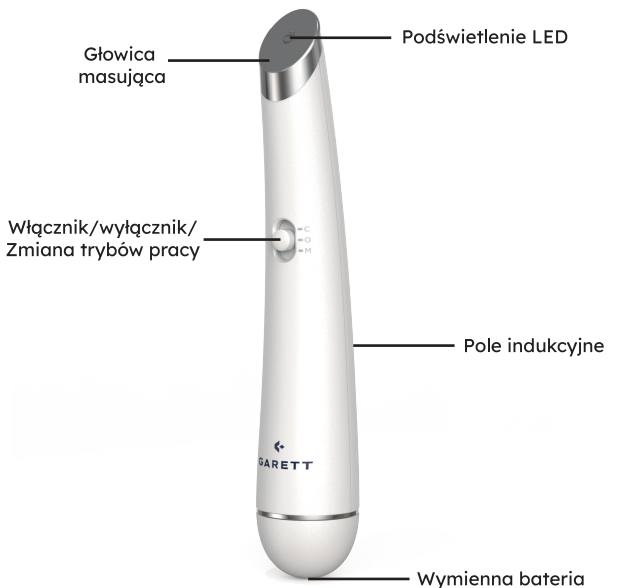

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Garrett Beauty Glow Eye	
Zasilanie: 1 x AA 1,5 V LR6	Autowylączanie: 3 min
Napięcie: 1,5 V	Ilość trybów pracy: 2
Waga produktu (netto): 23 g	Wymiary: 132 x 24 x 24 mm

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

Instrukcja użytkowania

1. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
2. Przed pierwszym użyciem należy zainstalować **baterię AA 1.5V LR6**.
3. Przed zabiegiem należy zdjąć okulary, soczewki oraz biżuterię.
4. **Przed zabiegiem należy dokładnie oczyścić skórę twarzy, rekomendujemy użycie szczoteczki sonicznej Garrett Beauty Clean**
5. Przed rozpoczęciem masażu urządzeniem zalecane jest naniesienie substancji aktywnej w postaci kremu/serum/żelu pod oczy dostosowanego do potrzeb użytkownika.
6. Aby rozpocząć masaż urządzeniem należy przycisk (włęcznik) przesunąć na pozycję C/M w zależności od potrzeb skóry.
7. Wibracje uruchamia się poprzez ułożenie palca w czasie zabiegu na polu indukcyjnym.
8. Masaż wokół oka należy wykonywać od wewnętrznej części oka ku zewnętrznej. Masaż powinien trwać 1-2 min na oko.
9. Masaż wokół ust powinien być wykonywany okrężnymi ruchami i trwać 2min na każdą stronę ust.
10. Urządzenie automatycznie wyłączy się po 3 min użytkowania.
11. Pamiętaj, by zawsze używać urządzenia czystymi i suchymi rękoma, by zapewnić poprawne działanie czujnika.

Uwaga: Podczas zabiegu pamiętaj a zamkniętych oczach oraz nie poruszaniu nimi. Urządzania nie można stosować na linii rzęs oraz ruchomej powiece oka.

Tryby pracy

Tryb pracy: C - Niebieskie światło LED + wibracje soniczne
Charakterystyka: Tryb przeciw bakteryjny, oczyszczający, łagodzący zapalenie skóry
Czas zabiegu: 1-2 minut na każde oko, kącik ust

Tryb pracy: M - Czerwone światło LED + wibracje soniczne
Charakterystyka: Tryb przeciwzmarszczkowy, ujędrniający właczający substancje aktywne w głąb skóry
Czas zabiegu: 1-2 minut na każde oko, kącik ust

Uwagi dla użytkowników

1. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.
2. Produkt jest zasilany za pomocą baterii AA 1.5V LR6.
3. Zabrania się używania tego produktu podczas ładowania.
4. Produkt nie jest wodoodporny, nie należy zanurzać go w wodzie.
5. Nie należy próbować odłączać urządzenia od gniazda ani używać go mokrymi rękami.
6. Aby uniknąć wypadków, nie należy dotykać metalowej części wtyczki.
7. Nie należy niszczyć, modyfikować, zginać czy skręcać przewodu zasilającego - może to skutkować jego uszkodzeniem.
8. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania oraz przewodu zasilającego.
9. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego lub nagrzewania się ich podczas ładowania.
10. Należy czyścić urządzenie, aby uniknąć gromadzenia się kurzu i zabrudzeń.
11. Nie należy przechowywać produktu w łazience, wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
12. Nie należy niszczyć produktu, rzucać nim czy modyfikować go. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania.
13. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.
14. Nie należy pozwalać używać urządzenia dzieciom.
15. Kobiety w ciąży lub podczas cyklu menstruacyjnego nie powinny używać produktu bez wcześniejszego skontaktowania się z lekarzem.

Naprawa i konserwacja

1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o zaprzestanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett.
2. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne. Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy myć go wodą.
4. W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia, zaleca się ładowanie przynajmniej 1-2 razy w miesiącu oraz przechowywanie go w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.

W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem urządzenia zachęcamy do odwiedzenia zakładki Pomoc Techniczna na naszej stronie internetowej (zeskanuj kod QR/skorzystaj z linku) lub kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl



<https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145>

Odwiedź nas:




Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji/dane kontaktowe dostępne na stronie: **www.garett.pl**

Producent/Osoba odpowiedzialna na terenie EU:

GARETT sp. z o.o.
ul. Sandomierska 209
25 - 330 Kielce, Polska
www.garett.pl
kontakt@garett.pl

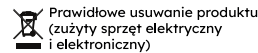

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



CE GARETT SPÓŁKA Z O. O. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/30/UE oraz 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.garett.pl