


waterpik®

Instrukcja obsługi

Irygator Waterpik®

model WF-100/112/150

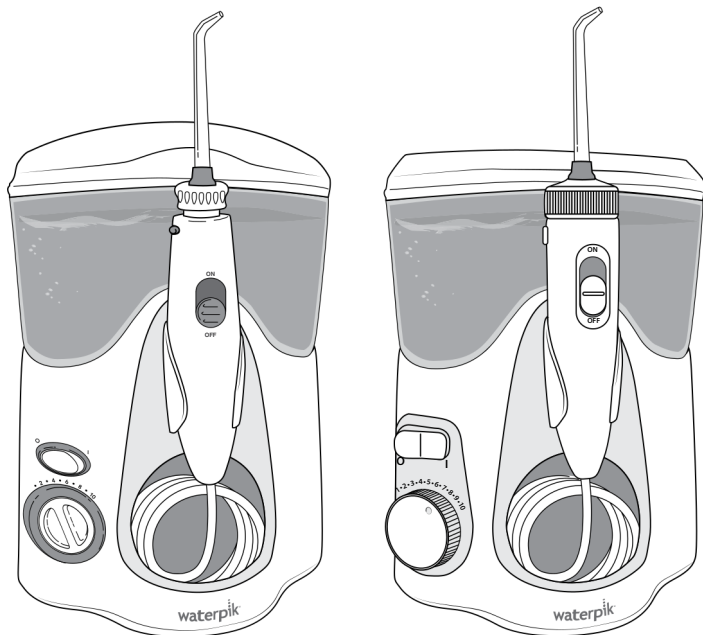

www.waterpikpolska.pl

OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

- Produkt przeznaczony jest do użytku domowego.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

- Nie stosuj urządzenia podczas kąpieli.
- Nie umieszczaj i nie przechowuj produktu w miejscu, w którym może wpaść lub zostać wciągnięty do wanny lub zlewu.
- Nie umieszczaj oraz nie wrzucaj urządzenia do wody lub innego płynu.
- Nie sięgaj po produkt, który wpadł do wody. W takim wypadku natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami.
- Odłącz zasilanie, gdy urządzenie nie jest używane.
- Sprawdź przewód ładowający pod kątem uszkodzeń powstałych przed pierwszym użyciem oraz w trakcie eksploatacji produktu.

OSTRZEŻENIE:

Aby ograniczyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej odpowiednie instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

*** Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.**

- Używaj tego produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji lub zaleceniami stomatologa.
- Nie używaj tego produktu, jeśli ma uszkodzoną obudowę, przewód lub wtyczka nie działają prawidłowo, jeśli zostały upuszczone lub uszkodzone, lub wpadły do cieczy. Skontaktuj się z serwisem PolcardBis pod numerem 734 109 938 lub na stronie www.waterpik.pl
- Do ładowania tego produktu wymagana jest ładowarka USB, posiadająca przynajmniej certyfikat bezpieczeństwa (IPX4, klasa II) o znamionowym napięciu wyjściowym 5,0 V DC, maks. 1,0 A.
- Nie podłączaj tego urządzenia do sieci napięciowej, który różni się od napięcia podanego na urządzeniu lub ładowarce.
- Trzymaj przewód ładowający z dala od gorących powierzchni.
- Nie stosuj urządzenia na zewnątrz ani w miejscach, w których występuje aerozol oraz w miejscach, w których stosuje się produkty (w sprayu) lub podaje się tlen.

- Używaj wyłącznie końcówek wymiennych oraz akcesoria zalecane przez WaterPik, Inc., określone w niniejszej instrukcji obsługi
- W przypadku uszkodzenia przewodu ładującego należy go wymienić.
- Jeśli lekarz zalecił Ci przyjęcie antybiotyku przed zabiegami stomatologicznymi, powinieneś skonsultować się ze swoim dentystą przed użyciem tego urządzenia lub jakiegokolwiek innego środka wspomagającego higienę jamy ustnej.
- Przed użyciem urządzenia należy zdjąć biżuterię z ust.
- Nie należy stosować urządzenia w przypadku otwartej rany na języku lub w ustach.
- Upewnij się, że styki przewodu, urządzenia i zasilacz jest czysty i suchy podczas ładowania urządzenia.
- Nie narażaj baterii ani urządzenia na działanie nadmiernych temperatur.
- Stosowanie past do zębów zawierających nadtlenek może spowodować uszkodzenie plastikowej obudowy tego produktu.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE


Opis produktu	5
Pierwsze kroki	6
Końcówki wymienne i ich zastosowanie	7
Pielęgnacja i czyszczenie urządzenia	8
Gwarancja	9

SYMBOLE

Następujące symbole mogą pojawić się na Twoim produkcie i/lub opakowaniu. Niektóre z tych symboli mogą nie być istotne w Twoim regionie i są wymienione wyłącznie w celach informacyjnych.

Symbol	Definicja	Symbol	Definicja
	Zapoznaj się z instrukcją obsługi		Nie zanurzaj urządzenia w żadnym płynie.
	Producent		Nie używaj tego urządzenia pod prysznicem, w wannie i nie zanurzaj w żadnym płynie.
IPX7 or IPX4	Kod ochrony przed wnikaniem		Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej
	Sprzęt klasy II IEC		Oznakowanie zgodności CE
	Odłączany zasilacz		Ocena zgodności w Wielkiej Brytanii
	Napięcie prądu stałego (DC)		Znak zgodności z przepisami


1. Pokrywa zbiornika z pojemnikiem na końcówki
2. Przycisk wysuwania końcówki
3. Uszczelka pojemnika
4. Przycisk włączania
5. Pokrętko do ustawiania ciśnienia wody
6. Końcówka
7. Pokrętko 360° do obracania końcówki
8. Zbiornik
9. Przełącznik wody WŁ./WYŁ.
10. Rączka z wężykiem
11. Baza urządzenia

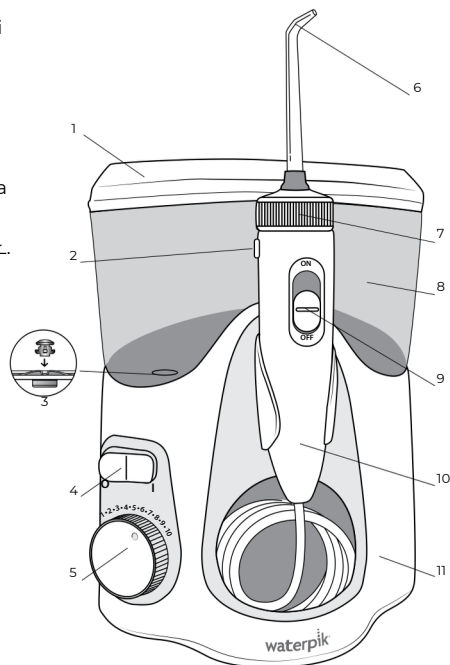

NIE WSZYSTKIE KOŃCÓWKI SĄ DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH MODELI




KOŃCÓWKI

- A. Końcówka ortodontyczna*
- Aparaty ortodontyczne
- B. Końcówka Pik Pocket™**
- Kieszonki przyzębne
- C. Końcówka Plaque Seeker™**
- Implanty/korony/mosty
- D. Końcówka szczoteczka*
- Ogólnego użytku
- E. Końcówka klasyczna**
- Ogólnego użytku
- F. Końcówka do języka**
- Odświeżanie oddechu

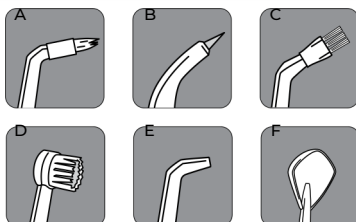

*Wymieniaj co 3 miesiące **Wymieniaj co 6 miesięcy

Końcówki wymienne można nabyć online na stronie www.waterpik.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 600 895 430

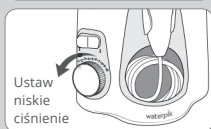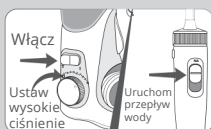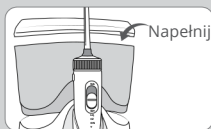

Zasilanie urządzenia

Podłącz kabel do gniazdka elektrycznego. Jeśli gniazdko jest kontrolowane za pomocą przełącznika ściennego, upewnij się, że jest włączone.

Przygotowanie pojemnika

Podnieś pokrywę zbiornika, wyjmij zbiornik i napełnij go ciepłą wodą. Umieść zbiornik na podstawie, mocno dociśnij i zamknij pokrywę.

Zakładanie i zdejmowanie końcówek

Włóż końcówkę do rączki urządzenia, mocno naciskając, aż końcówka zatrzaśnie się w swoim miejscu. Kolorowy pierścień będzie przylegał do górnej części uchwytu, jeśli końcówka zostanie prawidłowo zablokowana. Aby usunąć końcówkę z uchwytu, naciśnij przycisk wysuwania końcówki znajdujący się na rączce.

Jednostka podstawowa (wyłącznie do pierwszego zastosowania)

Ustaw pokrętko regulacji ciśnienia na wysokie (ustawienie ciśnienia nr 10), skieruj uchwyt oraz końcówkę do zlewu. Włącz zasilanie i przepływ wody, aż woda zacznie wypływać z końcówki. Wyłącz urządzenie.

Regulacja ciśnienia - ustawienie

Przy pierwszym użyciu ustaw pokrętko regulacji ciśnienia na najniższe ustawienie (ustawienie ciśnienia nr 1) zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu. Stopniowo zwiększaj ciśnienie do preferowanego poziomu – lub według wskazówek dentysty.

Używanie irygatora wodnego

Zawsze umieszczaj końcówkę w ustach przed uruchomieniem wody. Gdy przełącznik wody na uchwycie jest w pozycji WYŁĄCZONY, włącz zasilanie. Pochyl się nad zlewem i lekko zamknij usta, aby zapobiec rozchłapywaniu, jednocześnie pozwalając wodzie spływać z ust do zlewu. Po zakończeniu wyłącz przełącznik wody i wyłącz zasilanie. Podczas użytkowania możesz zatrzymać przepływ wody, przesuwając przełącznik wody na uchwycie do pozycji WYŁĄCZONY. **UWAGA: Silnik będzie nadal działał.**


Zalecana metoda

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, rozpocznij od zębów tylnych, a następnie przesuwaj się w kierunku zębów przednich. Skieruj strumień pod kątem 90 stopni do linii dziąseł, trzymając końcówkę w jamie ustnej. Przesuń końcówkę wzdłuż linii dziąseł i zatrzymaj się na chwilę pomiędzy zębami. Kontynuuj, aż wyczyścisz wewnętrzną i zewnętrzną część zębów górnych oraz dolnych.

Po zakończeniu procesu

Wyłącz urządzenie. Opróżnij zbiornik z pozostałego płynu.

UWAGA: Jeśli użyłeś płynu do płukania ust lub innego roztworu oprócz wody, zapoznaj się z sekcją „Użycie płynu do płukania ust i innych roztworów”.

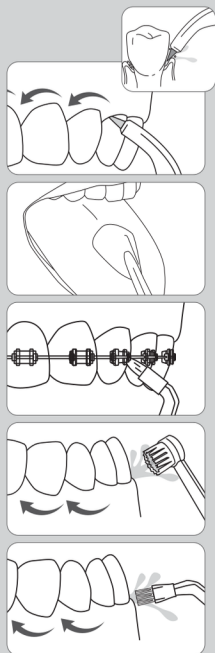

Końcówka Pik Pocket™

Końcówka Pik Pocket™ została stworzona z myślą o efektywnym dostarczaniu wody lub roztworów antybakteryjnych głęboko do kieszonek przyzębia. Aby skorzystać z końcówki Pik Pocket™, ustaw urządzenie na najniższe ciśnienie. Przyłóż miękką końcówkę do zęba pod kątem 45 stopni i delikatnie umieść ją pod linią dziąseł, w kieszonce.

Końcówka do czyszczenia języka

Ustaw minimalne ciśnienie, umieść końcówkę w centrum języka mniej więcej w połowie drogi do tyłu. Pociągnij do przodu z delikatnym naciskiem. Zwiększ nacisk według własnego uznania.

Końcówka ortodontyczna

Aby zastosować końcówkę ortodontyczną, delikatnie przesuwaj ją wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę, aby starannie oczyścić przestrzeń między zębami oraz wokół zamka ortodontycznego, zanim przejdiesz do kolejnego zęba.

Końcówka szczoteczki do mycia zębów

Umieść końcówkę szczoteczki w jamie ustnej, tak aby główka szczoteczki dotykała zęba przy linii dziąseł. Końcówkę szczoteczki można używać z pastą do zębów lub bez niej. Używając delikatnego nacisku (włosie nie powinno się wyginać), masuj szczoteczkę tam i z powrotem bardzo krótkimi ruchami – podobnie jak w przypadku szczoteczki manualnej.

Końcówka Plaque seeker™

Aby skorzystać z końcówki Plaque Seeker™, umieść ją blisko zębów, tak aby włosie delikatnie stykało się z ich powierzchnią. Ostrożnie przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę pomiędzy zębami, aby delikatnie szczotkować i umożliwić wodzie przepływ między nimi.

UWAGA: NIE WSZYSTKIE KOŃCÓWKI SĄ DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH MODELI.

Użycie płynu do płukania jamy ustnej oraz innych roztworów

Irygator Waterpik® Water Flosser może być wykorzystywany do aplikacji płynów do płukania jamy ustnej oraz roztworów antybakteryjnych. Aby ułatwić dodawanie innych roztworów, należy wyjąć zbiornik (patrz sekcja „Po zakończeniu”) i dodać przez górny otwór w zbiorniku. W przypadku dodawania dodatkowej wody, można wymienić zbiornik i całkowicie napełnić go za pomocą klapki do napełniania. Po użyciu jakiegokolwiek specjalnego roztworu, należy przepłukać urządzenie, aby zapobiec zatykaniu, częściowo napełniając zbiornik ciepłą wodą i uruchamiając urządzenie z końcówką skierowaną do zlewu, aż urządzenie będzie puste.


Czyszczenie

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz je od zasilania. W razie potrzeby oczyść produkt miękką ściereczką oraz delikatnym, nieściernym środkiem czyszczącym do przetarcia zewnętrznych powierzchni. Zbiornik na wodę oraz jego uszczelkę można wyjąć, co ułatwia czyszczenie. Zaleca się cotygodniowe opróżnianie i czyszczenie zbiornika.

Usuwanie osadów z twardej wody / czyszczenie ogólne

Osady twardej wody mogą gromadzić się w urządzeniu, w zależności od zawartości minerałów w wodzie. Jeśli nie będą kontrolowane, mogą utrudniać jego działanie. Czyszczenie części wewnętrznych: dodaj 1 łyżkę białego octu do pełnego zbiornika ciepłej wody. Skieruj uchwyt i końcówkę do zlewu. Włącz urządzenie i pracuj, aż zbiornik będzie pusty. Przepłucz, powtarzając czynność pełnym zbiornikiem czystej, ciepłej wody.

Aby osiągnąć optymalną wydajność, proces ten powinien być powtarzany co 1–3 miesiące.

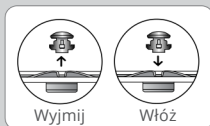

SERWIS I GWARANCJA 24 miesiące

POLKARD Bis Sp. z o.o. gwarantuje pierwszemu nabywcy nowego urządzenia, że jest ono wolne od wad wykonania i materiałowych w ciągu 2 lat od daty zakupu urządzenia. Należy zachować i przedłożyć dowodu zakupu urządzenia oraz prawidłowo wypełnioną gwarancję w oryginale. POLKARD Bis Sp. z o.o. naprawi lub wymieni jakąkolwiek część urządzenia, która w naszej opinii jest wadliwa zakładając, iż urządzenie było użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem, nie zostało celowo uszkodzone, ani naprawiane poza autoryzowanymi punktami serwisowymi i było używane zgodnie z powyższą instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje końcówek irygatora.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania, należy skontaktować się z serwisem:

POLKARD BIS Sp. z o.o. ul. M. Kotańskiego 2, 10-166 Olsztyn, tel/fax 089/5338777, tel. 089/5334850

w celu naprawy lub wymiany urządzenia.

Koszty dostarczenia urządzenia do naprawy pokrywa nabywca natomiast zwrot urządzenia po naprawie gwarancyjnej odbywa się na koszt serwisu.

Urządzenie dostarczane jest w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

**Jeżeli urządzenie zostanie zarejestrowane w ciągu 14 dni od daty zakupu na stronie,
www.rejestracja.polkardbis.pl, zostanie ono objęte 3 letnią gwarancją.**

Producent:

WaterPik Inc.

1730 East prospect Road Fort

Collins, CO 80553-0001 USA

Data zakupu:

Nr Seryjny:

Dystrybucja w Polsce:

Pieczęć i podpis sprzedawcy



Polkard bis

Polkard Bis Sp. z o.o.

ul. Marka Kotańskiego 2

10-166 Olsztyn

www.polkardbis.pl

e-mail: handel@polkardbis.pl

Jak używać?

