

RENPHO

INSTRUKCJA OBSŁUGI



MASAŻER SHIATSU

Model: RF-FM062

Dziękujemy za wybór masażera do stóp RENPHO z funkcją ugniatania i podgrzewania. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu na przyszłość. W razie potrzeby skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

WAŻNE INFORMACJE


PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
3. **OSTRZEŻENIE** – Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:
 - a) a) Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu. Odłącz je od zasilania, gdy nie jest używane oraz przed zakładaniem lub zdejmowaniem części.
 - b) Nie używaj pod kocem ani poduszką. Nadmierne nagrzewanie może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
 - c) Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, osoby chore lub niepełnosprawne albo w ich pobliżu.
 - d) Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
 - e) Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie.
 - f) Nie przenoś urządzenia za przewód ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
 - g) Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
 - h) Nie używaj urządzenia, jeśli otwory wentylacyjne są zablokowane. Utrzymuj je wolne od kurzu, włosów itp.
 - i) Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
 - j) Nie używaj na zewnątrz.

- k) Nie używaj w miejscach, gdzie stosowane są aerozole (spraye) lub podawany jest tlen.
- l) Aby odłączyć urządzenie, wyłącz wszystkie funkcje, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- . Urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym w zestawie.
 - . Urządzenie musi być zasilane napięciem bezpiecznym, zgodnym z oznaczeniem na obudowie.
 - . Urządzenie posiada powierzchnię grzewczą. Osoby niewrażliwe na ciepło powinny zachować ostrożność.
 - . **OSTRZEŻENIE:** Ostrożnie używaj funkcji grzania. Może powodować poważne oparzenia. Nie używaj na obszarach niewrażliwych na ciepło ani przy zaburzeniach krążenia. Pozostawienie urządzenia bez nadzoru przez dzieci lub osoby niepełnosprawne może być niebezpieczne.
 - . **OSTRZEŻENIE:** Nie stawaj na urządzeniu ani nie wchod do środka. Używaj wyłącznie w pozycji siedzącej.
 - . Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do celów medycznych ani leczenia schorzeń..

ZACHOWAJ T INSTRUKCJ

O PRODUKCIE

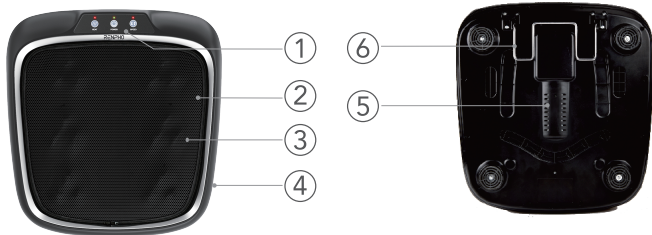

1. Przyciski sterujące: grzanie, Zasilanie, Prędkość
2. Ławice masujące
3. Zdejmowana osłona

- . Gniazdo zasilania
- . Otwory emisji ciepła
- . Regulowana podstawka

FUNKCJE

- RZANIE:** Naciśnij, aby włączyć wyłączyć funkcję grzania
- ZASI ANIE:** Naciśnij, aby włączyć wyłączyć masażer
- PR DKO** : Naciśnij, aby zmienić prędkość obrotu (niska wysoka)

Zdejmowana siatka: Rozepnij, aby wyjąć i wyprać nadaje się do prania
w palce Regulowana podstawka: Umożliwia zmianę wysokości i kąta
masażera

O S U A

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
2. Czerwona dioda oznacza tryb czuwania, zielona – pracę urządzenia.
3. Naciśnij przycisk **ZASI ANIE** , aby uruchomić masażer. Łowice na lewej stopie obracają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (pierwsza i trzecia), druga – przeciwnie. Na prawej stopie kierunki są odwrotne.
 - . Naciśnij **RZANIE** , aby włączyć wyłączyć funkcję podgrzewania.
 - . Naciśnij **PR DKO** , aby zmienić prędkość obrotu. Migająca czerwona dioda oznacza wolną prędkość, stała czerwona – szybką.
 - . Urządzenie automatycznie wyłącza się po 1 minutach ciągłej pracy, aby zapobiec przegrzaniu.
 - . Aby zdjąć osłonę, rozepnij zamek. Osłona nadaje się do prania w palce.
 - . W przypadku przegrzania silnik automatycznie się wyłączy. Po ostygnięciu urządzenie wznowi pracę.

Uwaga: Zalecamy ograniczenie sesji do 3 minut, aby uniknąć bólu lub dyskomfortu.

Ze względów ekologicznych nie wyrzucaj urządzenia do śmieci.
 Utylizuj urządzenie w odpowiednim punkcie zbiórki lub recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE.

W razie pytań skontaktuj się z lokalnymi władzami ds. utylizacji odpadów.

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyny	Rozwiązania
Urządzenie nie działa	1. brak zasilania lub luźne podłączenie. 2. Silnik wyłączył się z powodu długiego użytkowania.	1. Podłącz ponownie urządzenie. 2. Poczekaj, aż silnik ostygnie.
Funkcja grzania nie działa lub działa słabo	1. Funkcja grzania jest wyłączona. 2. Zbyt krótki czas nagrzewania	1. Naciśnij przycisk GRZANIE . 2. Odczekaj –1 minut – to celowe opóźnienie dla bezpieczeństwa.

O PRODUKCIE

Zawartość opakowania:

1 Masażer do stóp Shiatsu

1 Zasilacz

Specyfikacja techniczna

Model: RF FM 2

Napięcie znamionowe: 12 V 2. A

Moc znamionowa: 3 W

Automatyczne wyłączenie: po 1 minutach

WARANCJA

Zakup produktu RENPHO objęty jest 2 letnią ograniczoną gwarancją producenta od daty dostawy.

Uwaga: Rejestracja produktu nie jest wymagana do uzyskania gwarancji.

Jeśli zdecydujesz się nie rejestrować swojego produktu, nie unieważni to gwarancji na produkt.

O S U A K IENTA

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Zespół Obsługi Klienta RENPHO gwarantuje szybką odpowiedź i bezproblemowe rozwiązywanie wszelkich problemów w godzinach pracy.

Email: bok@brandbook.serices

Oficjalny dystrybutor produktów Renpho w Polsce:

brandbook Serices Sp. z o.o.

ul. Władysława Szpilmana

23 Warszawa

NIP 133 RE ON: 3 21

kontakt@brandbook.serices

W przypadku wadliwych produktów lub zwrotu przedmiotów, prosimy o kontakt z nami z numerem zamówienia w określonym okresie gwarancyjnym. NIE wyrzucaj żadnych części produktu, ponieważ mogą być wymagane do inspekcji naprawy.



1. Znaczenie symbolu przekreślonego kosza na kółkach

Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że jesteś prawnie zobowiązany do utylizacji tych urządzeń oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych, tzn. stare urządzenia muszą być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych. Baterie lub akumulatory, które nie są zamontowane na stałe, muszą być wcześniej wyjęte i zutylizowane oddzielnie.

2. Możliwości zwrotu starych urządzeń

Właściciele ZSEE mogą je zwrócić lub oddać w ramach możliwości stworzonych i dostępnych przez publiczne organy zarządzania odpadami, aby zapewnić właściwą utylizację.



1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na bateriach lub akumulatorach wskazuje, że nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu ich żywotności.

2. Jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów po użyciu. Możesz to zrobić bezpłatnie w punkcie zbiórki w swojej okolicy. Adresy odpowiednich punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.

3. Baterie mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Oddzielna zbiórka i recykling zużytych baterii i akumulatorów ma na celu uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.

4. Prosimy o unikanie wytwarzania odpadów ze zużytych baterii w miarę możliwości. Prosimy unikać zaśmiecania przestrzeni publicznych, nie pozostawiając beztrosko baterii lub sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego baterie.



Niniejszym Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU, Dyrektywą 2011/65/EU, Przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych 2017, Przepisami dotyczącymi ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2012 oraz innymi stosownymi przepisami. Pełny tekst Deklaracji Zgodności można uzyskać pod następującym adresem internetowym: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO