

RENPHO

Masażer do nóg

Instrukcja obsługi



Model: RP-ALM079

Dziękujemy za zakup masażera nóg RENPHO. Urządzenie zostało zaprojektowane do masażu całych nóg — stóp, łydek i ud — w celu rozluźnienia mięśni. Aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć przypadkowych uszkodzeń lub obrażeń, przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję i stosować się do zaleceń. Nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnych obrażeń, śmierci i/lub szkód materialnych.

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych, a także osoby bez doświadczenia, pod warunkiem nadzoru lub przeszkolenia w bezpiecznym użytkowaniu i zrozumieniu zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do celów medycznych. Przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i pożaru:

- Nie używaj spinek ani metalowych elementów z urządzeniem.
- Upewnij się, że napięcie i częstotliwość odpowiadają wartościom na adapterze.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Zawsze odłączaj adapter po użyciu.
- Nie podłączaj/odłączaj adaptera ani przewodu powietrza mokrymi rękami.
- Trzymaj przewód i urządzenie z dala od gorących powierzchni.

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, jeśli należysz do jednej z poniższych grup:

- Kobiety w ciąży lub połogu
- Dzieci
- Osoby starsze (powyżej 65 lat)
- Osoby z infekcjami skóry, nadwrażliwością, ranami, oparzeniami
- Osoby z rozrusznikiem serca lub innym implantem
- Osoby z chorobami serca, nowotworami lub poważnymi schorzeniami
- Osoby w trakcie leczenia lub odczuwające dyskomfort podczas masażu
- Osoby z osteoporozą, cukrzycą lub zakrzepicą
- Osoby z wysokim lub nieregularnym ciśnieniem
- Osoby z zaburzeniami czucia bólu (np. zaburzenia metaboliczne)
- Osoby z gorączką powyżej 38°C
- Przerwij użycie, jeśli poczujesz się źle i skonsultuj się z lekarzem.

NIE WOLNO:

- Używać nieautoryzowanych części zamiennych
- Rozkręcać urządzenia bez zgody producenta
- Używać urządzenia z uszkodzonymi powierzchniami lub przewodem
- Przechowywać w wilgotnych miejscach (np. łazienka)
- Przenosić urządzenia za przewód lub kontroler
- Używać podczas snu, prowadzenia maszyn lub po spożyciu alkoholu
- Stać lub chodzić podczas używania
- Zanurzać kontrolera, opasek lub adaptera w wodzie
- Zginać, ciągnąć lub skręcać przewodu zasilającego
- Umieszczać ciężkich przedmiotów lub wkładać obce elementy do szczelin
- Przebijać opasek ostrymi narzędziami
- Używać na opuchniętej, podrażnionej lub chorej skórze
- Używać dłużej niż 30 minut jednorazowo
- Używać pod kocem lub poduszką
- Stosować na zwierzętach

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

O PRODUKCIE

Zawartość opakowania:


- 1 x Opaska na lewe udo
- 1 x Opaska na prawe udo
- 1 x Opaska na lewą łydkę i stopę
- 1 x Opaska na prawą łydkę i stopę
- 1 x Kontroler ręczny
- 1 x Adapter zasilania
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Torba do przechowywania



Opaski na uda



Zasilacz

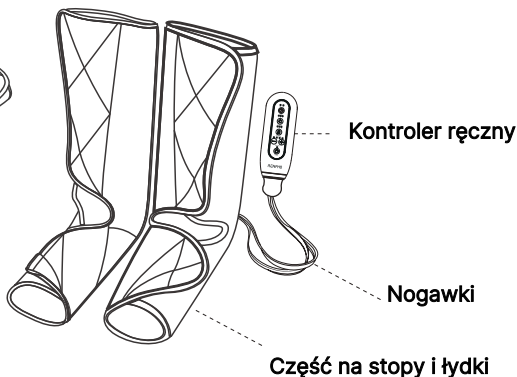

3. Specyfikacja Techniczna

Nazwa: Masażer nóg

Model: RP-ALM079

Zasilanie: 12V = 0.6A

Moc znamionowa: 7.2W

Adapter: 100-240V AC 50/60Hz → 12V = 0.6A

Timer automatyczny: 20 lub 25 minut

UŻYWANIE MASAŻERA

1. Przed pierwszym użyciem

1.1 Podczas zakładania opasek upewnij się, że każda z nich znajduje się na odpowiedniej nodze: lewej lub prawej.



„L” oznacza lewą nogę



„R” oznacza prawą nogę

1.2 Na opaskach ud znajdziesz oznaczenia wskazujące górną stronę.



1.3 Przed użyciem opaski na udo upewnij się, że opaski na udo i łydkę są połączone przewodem powietrznym. Przewód powinien być prawidłowo i stabilnie podłączony.

1.4 Sprawdź, czy złącze zatrzaskowe jest prawidłowo osadzone w kontrolerze — zgodnie z ilustracją poniżej.

1.5 Jeśli masaż wydaje się zbyt intensywny lub preferujesz delikatniejsze działanie, zastosuj się do poniższych zaleceń:

- Wybierz najniższy poziom intensywności
- Poluzuj rzepy w odpowiednim miejscu
- Zaleca się pozostawienie przestrzeni na 4 palce między opaską a łydką — zobacz ilustrację poniżej



1.3




1.4



1.5

2. Instrukcja obsługi

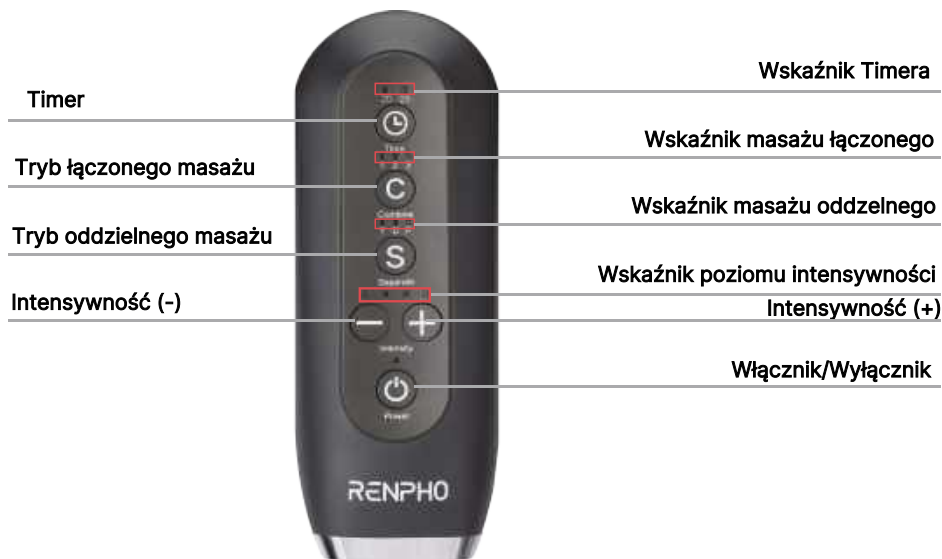

2. Tryby pracy

1. Naciśnij przycisk zasilania "  ", aby włączyć/wyłączyć masażer. Domyślnie uruchamia się tryb łączony C1 z intensywnością 2 i timerem 20 minut (zielone diody świecą się ciągle).
2. "  " Przycisk czasu pozwala wybrać automatyczne wyłączenie po 20 lub 25 minutach.
3. "  " Przycisk trybu łączonego umożliwia wybór:
C1: masaż stóp, łydek i ud
C2: masaż stóp i łydek (opaski ud można odłączyć)
C3: cykliczny masaż stóp, łydek i ud
4. "  " Przycisk trybu oddzielnego umożliwia masaż wybranych partii:
T: tylko uda
C: tylko łydki
F: tylko stopy
5. "  " Przycisk „+” zwiększa intensywność,
"  " Przycisk „-” zmniejsza intensywność
Do wyboru są 4 poziomy intensywności.

Uwaga:

- Masażer automatycznie wyłącza się po 20 lub 25 minutach. Aby kontynuować, naciśnij ponownie przycisk zasilania.
- Urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia trybu, czasu i intensywności. Po ponownym uruchomieniu działa w tym samym trybie.
- Zmiana trybu nie wpływa na ustawienia czasu i intensywności.
- Funkcja pamięci nie działa, jeśli odłączysz urządzenie od zasilania.
- Opaski ud można odłączyć. Nie wybieraj trybu C1, C3 ani T, jeśli opaski ud są odłączone.



1. Czyszczenie urządzenia

Nie prać w pralce

Nie zanurzać w żadnym płynie

Nie używać środków ściernych, szczotek, benzyny, nafty, płynów do polerowania szkła ani rozcieńczalników do farb

Zaleca się przecieranie masażera miękką, lekko wilgotną szmatką

2. Pakowanie urządzenia

Unikaj zginania przewodu powietrznego podczas pakowania — może to spowodować problemy z pompowaniem

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa	1. Brak zasilania lub luźne podłączenie. 2. Użycie adaptera o innych parametrach (brak świecenia diody zasilania)	1. Podłącz przewód prawidłowo. 2. Używaj wyłącznie adaptera z zestawu
	Przycisk zasilania nie został włączony lub timer automatyczny wyłączył urządzenie (dioda miga na zielono)	Włącz przycisk zasilania
Masaż zbyt intensywny, niewygodny lub zbyt ciasny	1. Zbyt ciasno zapięte opaski. 2. Zbyt wysoka intensywność	1. Wybierz najniższy poziom intensywności. 2. Poluzuj rzepy. 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć. 4. Odłącz przewód powietrza od kontrolera — poduszki powietrzne szybko się opróżnią
Kontroler się nagrzewa	Urządzenie było używane zbyt długo	Zaleca się używanie masażera przez 20–25 minut na sesję. Po wyłączeniu pozwól urządzeniu ostygnąć przed kolejnym użyciem

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Różna intensywność masażu na każdej nodze	1. Zbyt ciasno zapięte opaski. 2. Zbyt wysoka intensywność	Spróbuj zapiąć opaski z jednakową siłą
Wyciek powietrza	Przewody powietrzne nie zostały prawidłowo podłączone	Starannie podłącz przewody, upewniając się, że są dobrze osadzone
Jeśli powyższe rozwiązania nie pomagają lub napotkasz inne problemy, skontaktuj się z nami: support@renpho.com		

GWARANCJA

Zakup produktu RENPHO objęty jest 2-letnią ograniczoną gwarancją producenta od daty dostawy.

Uwaga: Rejestracja produktu nie jest wymagana do uzyskania gwarancji.

Jeśli zdecydujesz się nie rejestrować swojego produktu, nie unieważni to gwarancji na produkt.

OBSŁUGA KLIENTA

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Zespół Obsługi Klienta RENPHO gwarantuje szybką odpowiedź i bezproblemowe rozwiązania wszelkich problemów w godzinach pracy.

Email: bok@brandbook.services

Oficjalny dystrybutor produktów Renpho w Polsce:

Brandbook Services Sp. z o.o.
ul. Władysława Szpilmana 6
02-634 Warszawa
NIP 6751735834; REGON: 387068251
kontakt@brandbook.services

*W przypadku wadliwych produktów lub zwrotu przedmiotów, prosimy o kontakt z nami z numerem zamówienia w określonym okresie gwarancyjnym. NIE wyrzucaj żadnych części produktu, ponieważ mogą być wymagane do inspekcji/naprawy.

Zgodność z przepisami FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. To urządzenie generuje, używa i może emitować energię radiową i, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik jest zachęcany do próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dealerem lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zgodność z przepisami ISED

To urządzenie zawiera nadajnik(y)/odbiornik(i) zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS(y) zwolnione z licencji Kanadyjskiego Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1: To urządzenie nie może powodować zakłóceń.
- 2: To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia. Nadajnik/odbiornik zwolniony z licencji zawarty w tym urządzeniu jest zgodny z CNR Ministerstwa Innowacji, Nauk i Rozwoju Gospodarczego Kanady, które mają zastosowanie do urządzeń radiowych zwolnionych z licencji. Działanie jest dozwolone pod warunkiem spełnienia dwóch następujących warunków:

1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń;
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia radiowe, nawet jeśli zakłócenia mogą wpłynąć na jego działanie.



1. Znaczenie symbolu przekreślonego kosza na kółkach

Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że jesteś prawnie zobowiązany do utylizacji tych urządzeń oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych, tzn. stare urządzenia muszą być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych. Baterie lub akumulatory, które nie są zamontowane na stałe, muszą być wcześniej wyjęte i zutylizowane oddzielnie.

2. Możliwości zwrotu starych urządzeń

Właściciele ZSEE mogą je zwrócić lub oddać w ramach możliwości stworzonych i dostępnych przez publiczne organy zarządzania odpadami, aby zapewnić właściwą utylizację.

obowe

Przypomina się wszystkim użytkownikom końcowym ZSEE, że są oni odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych z ZSEE przeznaczonego do utylizacji.



1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na bateriach lub akumulatorach wskazuje, że nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu ich żywotności.

2. Jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów po użyciu. Możesz to zrobić bezpłatnie w punkcie zbiórki w swojej okolicy. Adresy odpowiednich punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.

3. Baterie mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Oddzielna zbiórka i recykling zużytych baterii i akumulatorów ma na celu uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.

4. Prosimy o unikanie wytwarzania odpadów ze zużytych baterii w miarę możliwości. Prosimy unikać zaśmiecania przestrzeni publicznych, nie pozostawiając beztrosko baterii lub sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego baterie.



Niniejszym Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU, Dyrektywą 2011/65/EU, Przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych 2017, Przepisami dotyczącymi ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2012 oraz innymi stosownymi przepisami. Pełny tekst Deklaracji Zgodności można uzyskać pod następującym adresem internetowym:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO

Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.

Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone,
Shenzhen, P.R.China

Made in China

NA2