


GIO perfect Brush

Szczoteczka do twarzy 4 w 1 z technologią LED

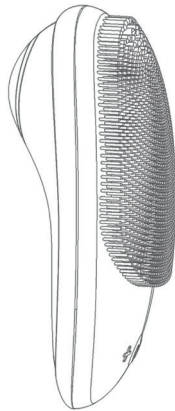


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, przeczytaj dokładnie instrukcję

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Ta szczoteczka do twarzy 4-w-1 z technologią LED zapewnia prostą i skuteczną pielęgnację skóry. Dzięki wysokoczęstotliwościowym wibracjom i funkcji podgrzewania umożliwia dogłębne oczyszczanie oraz wspomaga wchłanianie kosmetyków. Wymienne silikonowe nakładki ułatwiają utrzymanie higieny i czystości. Miękkie, długie włosie szczoteczki pozwala zadbać o różne potrzeby skóry, pozostawiając ją odświeżoną i promienną. Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt zapewnia wygodę użytkowania. Urządzenie wykonane jest z silikonu klasy spożywczej, dzięki czemu jest bezpieczne i odpowiednie do użytku domowego.

OPIS CZĘŚCI

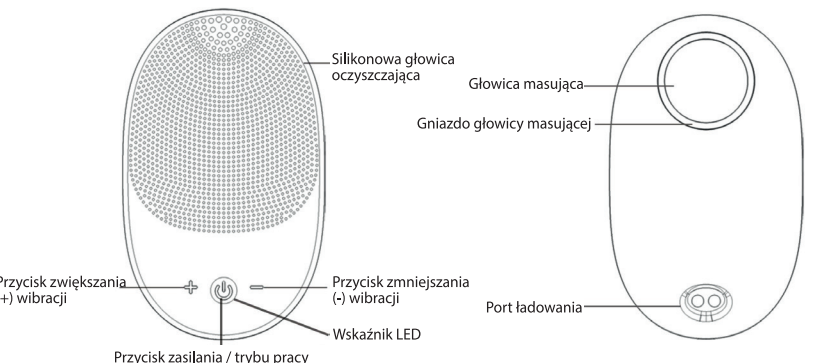

SPOSÓB UŻYCIA

Przed pierwszym użyciem

1. Naładuj urządzenie do pełna, korzystając z dołączonego magnetycznego kabla ładującego.
2. Umyj urządzenie wodą z dodatkiem łagodnego środka do mycia twarzy, a następnie dokładnie spłucz ciepłą wodą. Nie używaj alkoholu, acetonu, benzyny ani innych środków żrących.

Włączanie i wybór trybu pracy

- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
- Urządzenie uruchomi się w zielonym trybie oczyszczania (wibracje włączone).
- Naciśnij przycisk funkcyjny raz, aby przełączyć na tryb niebieski, i ponownie, aby przejść do czerwonego trybu podgrzewania.
- Tryby przełączają się w następującej kolejności: Zielony/ Niebieski/ Czerwony/ Zielony.

Uwaga: W trybie niebieskiego światła głowica masująca może się chwilowo ogrzać po 4 minutach pracy – jest to skutek przewodzenia ciepła resztkowego.

Opis trybów

- Zielone światło – tryb oczyszczania
Stosuj z preparatem do mycia twarzy w celu dogłębego oczyszczenia porów.
- Niebieskie światło – tryb tryb wybielania i zwężania porów
Pomaga zwęzić pory i ukoić skórę.
- Czerwone światło – tryb podgrzewania
Używaj z serum lub esencją, aby wspomóc wchłanianie składników aktywnych i pobudzić skórę.

Regulacja poziomu wibracji

- Intensywność wibracji można regulować od poziomu 0 (brak) do poziomu 5.
- Domyślnie ustawiony jest poziom 3.
- Użyj przycisków „+” i „-”, aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność wibracji.

Wskaźnik naładowania baterii

- Migająca czerwona dioda – niski poziom naładowania
- Dioda stale świeci na czerwono – trwa ładowanie
- Dioda nie świeci – urządzenie w pełni naładowane

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

1. Demakijaż i codzienne oczyszczanie



✓ Krok 1: Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane

Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane. Odłącz magnetyczny kabel ładujący i przed użyciem upewnij się, że głowica szczoteczki jest czysta i sucha.

✓ Krok 2: Nałóż preparat do mycia twarzy i włącz tryb oczyszczania

Zwilż twarz ciepłą wodą. Nałóż równomiernie odpowiedni produkt do mycia twarzy – np. piankę oczyszczającą, olejek lub wodę micelną. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Urządzenie uruchomi się w trybie oczyszczania z zieloną diodą.



✓ Krok 3: Oczyszcz twarz delikatnymi ruchami

Przyłóż silikonową szczoteczkę płasko do skóry. Delikatnie przesuwaj szczoteczkę okrężnymi ruchami – od policzków do brody, nosa i czoła. Omijaj okolice oczu. Po oczyszczeniu spłucz twarz czystą wodą i osusz miękkim ręcznikiem.

2. Głębokie oczyszczanie (zalecane raz w tygodniu)



Krok 1: Sprawdź poziom naładowania baterii

Przed rozpoczęciem głębokiego czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco naładowane. W razie potrzeby naładuj urządzenie, a następnie odłącz kabel.

Krok 2: Zwilż twarz i nałóż preparat do mycia twarzy

Spłucz twarz ciepłą wodą. Nałóż odpowiednią ilość preparatu do mycia twarzy i delikatnie wmasuj go w skórę, aż powstanie gęsta piana.



Krok 3: Włącz tryb oczyszczania

Włącz urządzenie i wybierz tryb oczyszczania zielonym światłem lub tryb niebieskiego światła, w zależności od preferencji. Delikatnymi, okrężnymi ruchami głęboko oczyść skórę. Skoncentruj się na obszarach podatnych na zatykanie porów, takich jak strefa T.

Krok 4: Opłucz twarz i szczoteczkę

Po oczyszczeniu twarzy przemyj ją czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości środka do mycia twarzy. Silikonową główkę szczoteczki również przepłucz pod bieżącą wodą.



Krok 5: Nałóż produkt do pielęgnacji skóry i włącz tryb ogrzewania

Nałóż równomiernie serum, esencję lub produkt nawilżający na twarz. Przełącz urządzenie w tryb ogrzewania czerwonym światłem i delikatnie wmasuj produkt w skórę, aby poprawić wchłanianie i zwiększyć vitalność skóry.

Krok 6: Opłucz twarz wodą

Opłucz twarz czystą wodą i osusz ręcznikiem.



Przypomnienie:

Stosuj delikatny nacisk i unikaj nadmiernego oczyszczania. Głębokie oczyszczanie nie powinno trwać dłużej niż 2–3 minuty.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

1. Użyj dołączonego kabla magnetycznego (bez polaryzacji).
2. Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie i port ładowania są suche.
3. Lekkie nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania jest normalne.
4. Nie ładuj urządzenia dłużej niż 24 godziny bez przerwy.
5. Podczas użytkowania za granicą sprawdź, czy napięcie w sieci jest odpowiednie (5 V/1 A).

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Urządzenie jest wodoodporne zgodnie z normą IPX7 i można je bezpiecznie opłukać wodą po każdym użyciu.
- Po wyczyszczeniu pozostaw je w dobrze wentylowanym miejscu do całkowitego wyschnięcia.
- Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, ładuj je co 3 miesiące, aby zachować żywotność baterii.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie używaj tego urządzenia, jeśli masz otwarte rany, infekcje skóry, ciężki trądzik, oparzenia słoneczne lub niedawno przeszedłeś operację twarzy.
2. Nie używaj z tym urządzeniem peelingów złuszczących, ziarnistych środków czyszczących ani produktów na bazie silikonu, ponieważ mogą one uszkodzić szczoteczkę.
3. Nie używaj urządzenia częściej niż zalecane. Nadmierne stosowanie może podrażnić skórę.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 12 roku życia. Osoby niepełnoletnie powinny używać go wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Ze względów higienicznych nie należy dzielić się urządzeniem z innymi osobami.
6. Po każdym użyciu dokładnie wyczyść szczoteczkę, aby zapobiec gromadzeniu się produktu lub bakterii.

UWAGA

1. Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i małych dzieci.
2. Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w pobliżu ognia, źródeł ciepła lub w temperaturach powyżej 60°C.
3. Nigdy nie ładować urządzenia w pobliżu wody (np. umywalk, wanien lub w wilgotnych łazienkach).
4. Używać wyłącznie certyfikowanych ładowarek 5V/1A. Nie używać uszkodzonych kabli ani luźnych gniazdek zasilania.
5. Nie dotykać kabla ładującego mokrymi rękami.
6. Nie próbuj otwierać, rozmontowywać, przebijać ani modyfikować urządzenia lub baterii.
7. Nie używaj urządzenia, jeśli jest zdeformowane, uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
8. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

OSTRZEŻENIE

1. Jeśli masz jakieś problemy ze skórą lub alergię, przed użyciem skonsultuj się z dermatologiem.
2. Jeśli pojawi się podrażnienie, zaczerwienienie lub dyskomfort, natychmiast przestań używać urządzenia.
3. To urządzenie jest przeznaczone tylko do pielęgnacji skóry twarzy. Nie używaj go na innych częściach ciała.
4. Kiedy nie używasz urządzenia, trzymaj je w suchym miejscu. Po wyczyszczeniu pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.



SPECYFIKACJA

Nazwa produktu: GIOperfect Brush

Materiały: ABS + silikon

Wymiary produktu: 100 mm × 60 mm × 40 mm

Waga netto: 86 g

Pojemność baterii: 600 mAh

Sposób ładowania: Kabel magnetyczny

Moc znamionowa: 3 W

Napięcie ładowania: 5 V / 1 A

Napięcie robocze: 3,7 V

Poziomy wibracji: 5 stopni

Funkcja ogrzewania: 40°C – 46°C

Wskaźnik świetlny: trójkolorowa dioda LED

Tryby pracy:

- Zielone światło – tryb masażu i oczyszczania
- Niebieskie światło – tryb wybielania i zwężania porów
- Czerwone światło – tryb gorącej kompresji dla lepszego wchłaniania

Czas pracy: 1–3 godziny

Wodoodporność: IPX7

