


PL

GIO-731

innoGIO

GIO perfect Skin Scrubber


Ultradźwiękowy peeling do twarzy

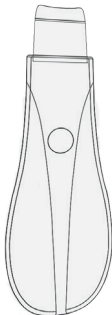

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia,
przeczytaj dokładnie instrukcję.

OPIS PRODUKTU

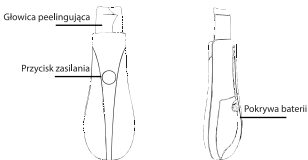

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Przed użyciem

- Włóż baterie (2xAAA, brak w zestawie) i zamknij pokrywę baterii.
- Przed użyciem upewnij się, że głowica urządzenia jest czysta i sucha.

W trakcie używania

- Używaj wyłącznie na wilgotnej skórze — nigdy na suchej skórze.
- Zalecane stosowanie: 1–2 razy w tygodniu, do 10 minut na sesję.
- Nie wolno stosować na uszkodzoną, podrażnioną, zapalną lub poparzoną skórę.
- W przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie.
- Należy unikać używania metalowych przedmiotów (np. biżuterii, kluczy) w pobliżu urządzenia.
- Urządzenie nie jest wodoodporne — nie używać pod prysznicem ani w wannie.

Po użyciu

- Natychmiast po każdym użyciu wyczyść głowicę urządzenia chusteczką lub miękką ściereczką.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że na urządzeniu nie pozostały żadne pozostałości balsamu, żelu czy wilgoci.
- Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i wilgoci.
- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

SPOSÓB UŻYCIA

Zawsze nawilżaj skórę przed użyciem!

Krok po kroku:

- Zmyj makijaż i nawilż twarz sprayem lub mgiełką.
- Rozgrzej skórę gorącym ręcznikiem, aby zwiększyć skuteczność działania.
- Trzymaj urządzenie tak, aby dłoń nie stykała się z metalową płytką.
- Odchyl urządzenie pod kątem 30°–45°.
- Delikatnie przesuwaj w odpowiednim kierunku (patrz poniżej) — zawsze przesuwaj, nie naciskaj.
- Po użyciu wyłącz urządzenie i wyczyść je.
- Zastosuj tonik lub serum, aby zakończyć pielęgnację skóry.

Jak przesuwac głowicę peelingującą:

<u>Obszar twarzy</u>	<u>Kierunek przesuwania</u>
Broda	Przesuwaj do góry
Nos	Przesuwaj z dołu do góry
Policzki	Przesuwaj na zewnątrz i ku górze, zaczynając od środka
Okolice ust	Przesuwaj w kierunku środka twarzy

Nie stosować:

- W okolicach oczu
- Na powiekach
- Na zainfekowanej, uszkodzonej lub nadwrażliwej skórze.



innogio

Wyprodukowano w Chinach dla

INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.

ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska

www.innogio.com



@innogio.official



@innogio_com

GIO perfect Skin Scrubber

Ultradźwiękowy peeling do twarzy

İnnogİÖ

Wyprodukowano w Chinach dla

INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.


ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska

www.innogio.com

@innogİO.official




@innogİo_com

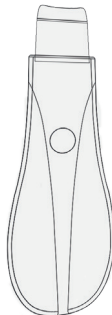

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia,
przeczytaj dokładnie instrukcję.

OPIS PRODUKTU

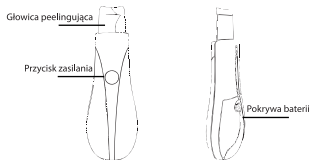

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Przed użyciem

- Włóż baterie (2xAAA, brak w zestawie) i zamknij pokrywę baterii.
- Przed użyciem upewnij się, że głowica urządzenia jest czysta i sucha.

W trakcie używania

- Używaj wyłącznie na wilgotnej skórze — nigdy na suchej skórze.
- Zalecane stosowanie: 1–2 razy w tygodniu, do 10 minut na sesję.
- Nie wolno stosować na uszkodzoną, podrażnioną, zapalną lub poparzoną skórę.
- W przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie.
- Należy unikać używania metalowych przedmiotów (np. biżuterii, kluczy) w pobliżu urządzenia.
- Urządzenie nie jest wodoodporne — nie używać pod prysznicem ani w wannie.

Po użyciu

- Natychmiast po każdym użyciu wyczyść głowicę urządzenia chusteczką lub miękką ściereczką.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że na urządzeniu nie pozostały żadne pozostałości balsamu, żelu czy wilgoci.
- Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i wilgoci.
- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

SPOSÓB UŻYCIA

Zawsze nawilżaj skórę przed użyciem!

Krok po kroku:

- Zmyj makijaż i nawilż twarz sprayem lub mgiełką.
- Rozgrzej skórę gorącym ręcznikiem, aby zwiększyć skuteczność działania.
- Trzymaj urządzenie tak, aby dłoń nie stykała się z metalową płytką.
- Odchyl urządzenie pod kątem 30°–45°.
- Delikatnie przesuwaj w odpowiednim kierunku (patrz poniżej) — zawsze przesuwaj, nie naciskaj.
- Po użyciu wyłącz urządzenie i wyczyść je.
- Zastosuj tonik lub serum, aby zakończyć pielęgnację skóry.

Jak przesuwac głowicę peelingującą:

<u>Obszar twarzy</u>	<u>Kierunek przesuwania</u>
Broda	Przesuwaj do góry
Nos	Przesuwaj z dołu do góry
Policzki	Przesuwaj na zewnątrz i ku górze, zaczynając od środka
Okolice ust	Przesuwaj w kierunku środka twarzy

Nie stosować:

- W okolicach oczu
- Na powiekach
- Na zainfekowanej, uszkodzonej lub nadwrażliwej skórze.

