

# GIO perfect Ultrasonic Skin Scrubber

Urządzenie do peelingu  
kawitacyjnego z EMS



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia,  
przeczytaj dokładnie instrukcję.

## SPECYFIKACJA

Nazwa: GIOperfect Ultrasonic Skin Scrubber  
Model: GIO-730  
Wymiary: 130 × 70 × 17 mm  
Waga: 75 g  
Napięcie akumulatora: 3,7 V  
Moc znamionowa: 1,5 W  
Pojemność akumulatora: 250 mAh  
Częstotliwość pracy głowicy: 26 000 drgań/sekundę  
Czas ładowania: ok. 1–1,5 godziny  
Czas pracy: ok. 0,8 godziny

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 × urządzenie  
1 × kabel USB-C  
1 × instrukcja obsługi

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Etykiety ostrzegawcze wskazują na potencjalne zagrożenie. Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do urazu lub uszkodzenia mienia.
- W przypadku bólu, dyskomfortu lub nietypowej reakcji – natychmiast przerwij użytkowanie.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych (np. alkoholu, benzyny, acetonu, aerozoli).
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie płucz go bezpośrednio pod bieżącą wodą.
- W przypadku upuszczenia lub uszkodzenia – zaprzestań użytkowania.
- Nie demontuj urządzenia ani nie podejmuj prób samodzielnej naprawy. W razie potrzeby skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Używaj wyłącznie dołączonego przewodu ładującego i upewnij się, że źródło zasilania odpowiada specyfikacji urządzenia.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się pozostałości.
- Nie używaj urządzenia podczas kąpieli, pod prysznicem ani w pobliżu wanien, umywalk lub innych zbiorników z wodą.

## Przeciwwskazania – nie stosować w przypadku:

- Ciąży, menstruacji lub problemów skórnych związanych z gospodarką hormonalną.
- Alergii, chorób skóry, zapaleń lub silnych oparzeń słonecznych.
- Otwartych ran, egzem lub obrzęków.
- Okresu rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych.
- Zaburzeń fizycznych, sensorycznych lub psychicznych – chyba że użycie odbywa się pod nadzorem opiekuna.

## OPIS PRODUKTU

Prawidłowe oczyszczanie skóry jest kluczowe dla skutecznego wchłaniania kosmetyków. Bez dokładnego oczyszczenia, składniki aktywne nie przenikają w głąb skóry, co może prowadzić do jej poszarzenia, trądziku, utraty jędrności, przebarwień i innych problemów skórnych.

To urządzenie wykorzystuje wysokoczęstotliwościowe wibracje ultradźwiękowe oraz technologię jonową, aby dogłębnie oczyścić skórę i zwiększyć wchłanianie produktów pielęgnacyjnych.

Kabel zasilający



Listwa jonizacyjna

Osłonka

Przycisk zasilania/ wyboru trybu




## SPOSÓB UŻYCIA

### PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

- Naładuj urządzenie przez 2 godziny przed pierwszym użyciem.
- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie zmienia tryby.
- Wyczyść głowicę miękką ściereczką lub płatkami kosmetycznym.
- Nałóż na skórę preparat oczyszczający lub czystą wodę.
- Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe i wyłączy się.
- Podczas ładowania kontrolki będą migać kolejno. Po pełnym naładowaniu wszystkie kontrolki zaświecą się ciągłym światłem.


### 1. Oczyszczanie ultradźwiękowe

- Umyj twarz i nałóż preparat oczyszczający.
- Naciśnij pierwszy tryb, aby uruchomić wibracyjne oczyszczanie.
- Trzymaj urządzenie i przesuwaj głowicę powoli pod kątem 45° przeciwnie do kierunku porów.

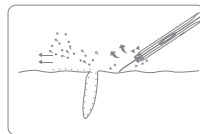

### 2. Terapia EMS

- Oczyść i rozgrzej twarz parą przez 5 minut (lub zastosuj ciepły ręcznik).
- Nałóż preparat do usuwania zaskórników na 10 minut.
- Naciśnij czwarty tryb, aby aktywować usuwanie jonów dodatnich.
- Przesuwaj głowicę powoli w dół, przeciwnie do kierunku porów.
- Stosuj przez 10 minut, następnie oplucz twarz i wyczyść urządzenie.

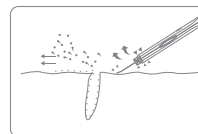

### 3. Wprowadzenie składników odżywczych

- Oczyszć twarz i rozgrzej ją parą przez 5 minut.
- Nałóż preparat bogaty w składniki odżywcze.


Tryb 3 (Intensywne odżywianie):

- Naciśnij trzeci tryb (import jonów ujemnych).
- Powoli przesuwaj głowicę z dołu do góry, zgodnie z kierunkiem porów skóry.
- Używaj przez 5 minut.




Tryb 2 (Delikatne odżywianie):

- Naciśnij drugi tryb, aby uruchomić masaż pulsacyjny.
- Powoli przesuwaj głowicę z dołu do góry. Zabieg powinien trwać 5 minut.
- Po zakończeniu przemij twarz wodą, a następnie schłodź ją zimną mgiełką lub chłodnym ręcznikiem przez 10 minut, aby zamknąć pory.

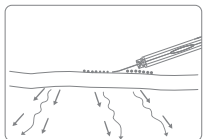

### SPOSÓB OCZYSZCZANIA

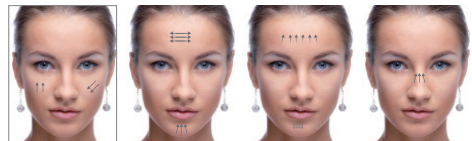

Oczyszczanie i pielęgnacja twarzy

Pielęgnacja czoła i linii żuchwy

Pielęgnacja nosa i strefy-T

1. Skup się na kluczowych obszarach: czole, linii żuchwy oraz strefie T (w tym grzbiecie nosa).
2. Zawsze trzymaj listwy jonizacyjne po boku urządzenia, aby aktywować funkcje jonowe.
3. Utrzymuj głowicę pod kątem 45° i przesuwaj ją powoli i delikatnie po skórze — nie zostawiaj jej w jednym miejscu.
4. Nie stosuj na skórze podrażnionej lub zaczerwienionej.
5. Zalecane użycie: 2–3 razy w tygodniu.
6. Zawsze czyść urządzenie i głowicę przed i po użyciu.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Nie wkładaj go do zmywarki ani kuchenki mikrofalowej.
- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Używaj wyłącznie miękkich ściereczek zwilżonych zimną lub ciepłą wodą — unikaj ostrych narzędzi, środków żrących lub łatwo ulatniających się płynów.
- Nie płucz urządzenia bezpośrednio pod bieżącą wodą.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez ponad 3 miesiące, przed przechowywaniem należy je całkowicie naładować, aby zapobiec uszkodzeniu baterii.

### ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem                   | Przyczyna                                                        | Rozwiązanie                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Głowica nie wibruje       | Głowica jest wykrzywiona                                         | Delikatnie chwyć głowicę obiema rękami i przywróć jej pierwotny kształt. |
|                           | Okablowanie wewnętrzne jest odłączone                            | Skontaktuj się z działem posprzedażowej obsługi klienta                  |
|                           | Zbyt duży nacisk podczas stosowania                              | Stosuj lekki nacisk — delikatnie dotykaj skóry głowicą.                  |
|                           | Niski poziom naładowania baterii                                 | Ładuj urządzenie przez co najmniej 2 godziny przed użyciem.              |
| Urządzenie nie włącza się | Bateria jest uszkodzona z powodu długiego okresu nieużywania     | Skontaktuj się z działem posprzedażowej obsługi klienta                  |
|                           | Do urządzenia dostała się woda                                   | Skontaktuj się z działem posprzedażowej obsługi klienta                  |
|                           | Do przycisku zasilania dostała się wilgoć                        | Skontaktuj się z działem posprzedażowej obsługi klienta                  |
| Nie działa jonizacja      | Dłonie nie stykają się z elektrodą boczną ("listwą jonizacyjną") | Podczas użytkowania upewnij się, że dłoń dotyka bocznej elektrody.       |
|                           | Uszkodzenie obwodu wewnętrznego w wyniku zalania wodą            | Skontaktuj się z działem posprzedażowej obsługi klienta                  |

innoGIO

Wyprodukowano w Chinach dla  
**INNIOGIO GLOBAL** sp. z o.o.  
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska  
**www.innogio.com**



@innoGIO.official



@innogio\_com

