

PL

GIO-780

innoGIO

GIO perfect Mask


Maska kosmetyczna z podświetleniem LED



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia,
przeczytaj dokładnie instrukcję


PIERWSZE KROKI

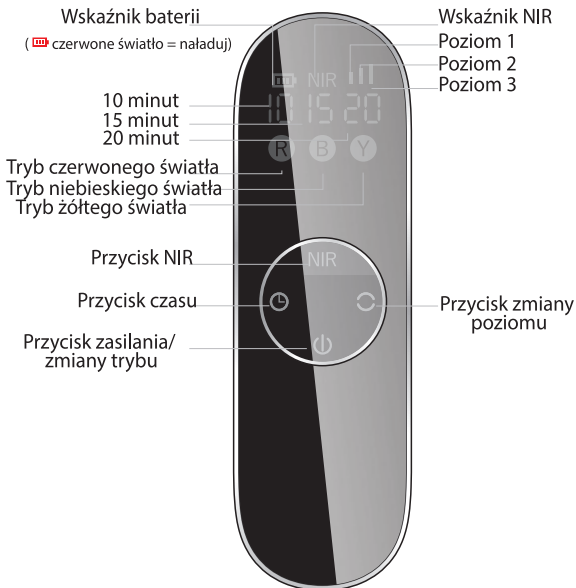

Uwaga: Gdy na kontrolerze wyświetlany jest symbol, funkcja jest aktywna.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- Przycisk zasilania/ zmiany trybu: włączanie i wyłączanie urządzenia oraz przełączanie pomiędzy trybami światła
- Przycisk czasu: wybór czasu trwania zabiegu (10, 15 lub 20 minut)
- Przycisk zmiany poziomu: regulacja intensywności (poziomy 1–3)
- Przycisk NIR: włączanie/ wyłączanie światła bliskiej podczerwieni

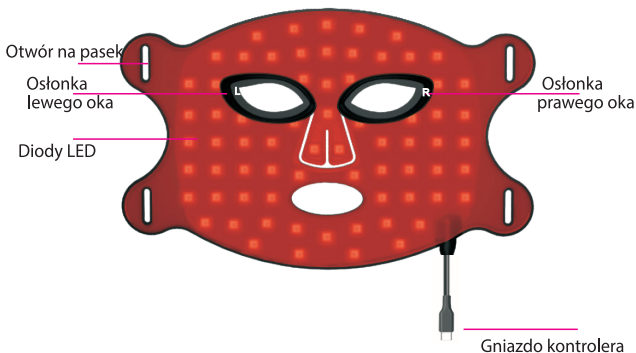

UWAGA

1. Urządzenie nie może być używane podczas ładowania.
2. Przed użyciem należy zawsze wyczyścić urządzenie przy wyłączonym zasilaniu. Należy używać wyłącznie zalecanych środków czyszczących (czyścić wilgotną szmatką lub nawilżaną chusteczką lub użyć roztworu soli fizjologicznej (0,9% NaCl) do przetrucia części stykających się ze skórą).
3. Maskę LED do terapii twarzy należy przechowywać w pozycji płaskiej, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
4. Po zabiegu może wystąpić przejściowe zaczerwienienie, które zwykle ustępuje w ciągu 1–2 godzin.
5. Po 12 zabiegach użytkownicy zazwyczaj zauważają widoczną poprawę kolorytu i struktury skóry.
6. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie za pomocą dołączonego kabla USB. Podczas ładowania dioda kontrolera miga.

ZASTOSOWANIE

- **Światło czerwone** (660 nm): Działa przeciwstarzeniowo, stymuluje produkcję kolagenu, sprzyja relaksacji, poprawia elastyczność skóry.
- **Światło niebieskie** (410 nm): Eliminuje bakterie powodujące trądzik, zmniejsza stany zapalne i blizny, zwiększa dotlenienie, rozjaśnia koloryt skóry.
- **Światło żółte** (590 nm): Wyrównuje strukturę skóry, stymuluje czerwone krwinki, zmniejsza zaczerwienienia/obrzęki/drobne zmarszczki, rozjaśnia ślady po trądziku, stabilizuje stan skóry.
- **Światło NIR** (850 nm): Regeneruje skórę, przyspiesza metabolizm, poprawia krążenie krwi, zwiększa nawilżenie.

ZALECENIA DOTYCZĄCE ZABIEGÓW

1. Dla najlepszych efektów stosuj 3–5 razy w tygodniu przez co najmniej 4 tygodnie.
2. Zabiegi podtrzymujące można kontynuować w razie potrzeby, w zależności od kondycji skóry i trybu życia.


TEST WRAŻLIWOŚCI

Przed pierwszym użyciem wykonaj test wrażliwości skóry:

1. Umieść maskę LED na wewnętrznej stronie ramienia.
2. Naciśnij przycisk zasilania/trybu, aby rozpocząć 10-minutowy zabieg.
3. Jeśli skóra stanie się gorąca lub odczujesz dyskomfort, natychmiast przerwij i zdejmij urządzenie.
4. Oczekaj co najmniej 6 godzin. Jeśli pojawi się zaczerwienienie lub swędzenie, urządzenie może nie być odpowiednie dla Twojej skóry.


SPOSÓB UŻYCIA

KROK 1

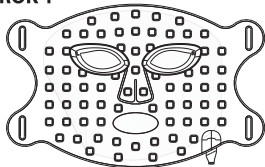

Usuń folię ochronną

KROK 2

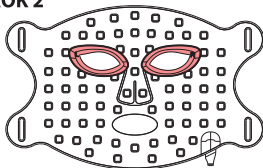


Włóż osłonki obu oczu

KROK 3



Zainstaluj oba paski

KROK 4

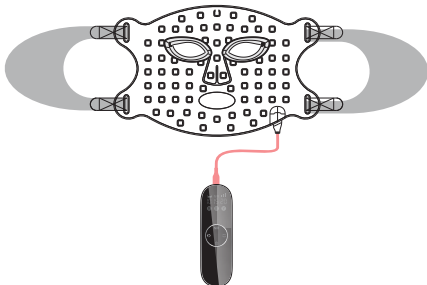

Podłącz kontrolera

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

Ustalanie tolerancji skóry

- Rozpocznij od poziomu intensywności 1–2.
- Stopniowo zwiększaj w miarę adaptacji skóry.

Regulacja czasu zabiegu

- Wybierz 10, 15 lub 20 minut za pomocą przycisku czasu.
- Nie zwiększaj nadmiernie czasu ani częstotliwości zabiegów.

Zalecane stosowanie

- 3–5 razy w tygodniu, 10–20 minut na sesję.
- W przypadku terapii światłem niebieskim nie przekraczaj 10 minut.

Przeprowadzanie zabiegu

- Oczyszczyć i złuszczyć skórę.
- Założyć maskę, zabezpieczyć paski i nacisnąć przycisk zasilania/ zmiany trybu.
- Urządzenie uruchomi się w trybie czerwonego światła.
- Zmiana trybu: przycisk zasilania/ zmiany trybu, regulacja intensywności: przycisk zmiany poziomu, ustawienie czasu: przycisk czasu.
- Maskę wyłączy się automatycznie po zakończeniu zabiegu.
- Po użyciu zdejmij maskę, nałóż kosmetyki pielęgnacyjne i stosuj krem z filtrem.
- Wyczyść maskę wilgotną ściereczką lub chusteczką na bazie wody. Nie czyść podczas ładowania.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Maska LED ×1

Kontroler ×1

Elastyczne paski ×2

Instrukcja obsługi ×1

Kabel do ładowania ×1

Torba do przechowywania ×1

Ośłony oczu ×2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Stosować wyłącznie zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej instrukcji.
- Nie używać po niedawnych urazach, operacjach ani zabiegach kosmetycznych (np. wypełniacze, Botox, microneedling, laser, peeling chemiczny) dopóki skóra nie wygoi się całkowicie.
- Przed użyciem skonsultować się z lekarzem w przypadku ciąży lub podejrzenia nowotworu.
- Nie stosować na zaczerwienioną lub spuchniętą skórę będącą efektem wcześniejszego zabiegu.
- Przerwać użycie, jeśli zaczerwienienie lub obrzęk utrzymuje się dłużej niż 2 godziny.
- Nie stosować w przypadku bardzo wrażliwej skóry, otwartych ran, infekcji ani wykwitów opryszczki.
- Nie stosować na bolesne, wypukłe, strupiate lub krwawiące miejsca.
- Nie nakładać retinolu przed terapią czerwonym światłem (stosować wyłącznie po zabiegu).
- Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć chwilowego zaczerwienienia, suchości lub podrażnienia, szczególnie przy świetle niebieskim.
- Po zabiegu chronić skórę kremem z filtrem, ponieważ wrażliwość na słońce może wzrosnąć.
- Nie nadużywać terapii światłem niebieskim; nadmierne stosowanie może powodować przebarwienia.
- Nie patrzeć bezpośrednio na diody LED. Używać dostarczonych osłon na oczy.
- Dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia; niezalecane dla dzieci poniżej 12 lat.
- Nie modyfikować urządzenia.

OSTRZEŻENIA

Przed użyciem:

- Przed pierwszym użyciem zawsze przeprowadź test wrażliwości.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem; nieprzewidziane zastosowania mogą wiązać się z nieznanym ryzykiem.

Bezpieczeństwo urządzenia:

- Natychmiast przerwij stosowanie, jeśli poczujesz nieprzyjemne uczucie gorąca na skórze.
- Przed zabiegiem należy zmyć kremy, serum, balsamy i makijaż.
- Trzymaj z dala od wody, źródeł ciepła i łatwopalnych materiałów.
- Nie modyfikuj ani nie rozbieraj urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli uszkodzona jest bateria lub ładowarka.

Bezpieczeństwo ładowania:

- Ładuj w pomieszczeniu, w suchym, wentylowanym miejscu, za pomocą ładowarki USB-C.
- Nie ładuj w pobliżu źródeł wody lub w środowisku, w którym występuje ryzyko wybuchu.
- Nie przeładuj; odłącz po całkowitym naładowaniu (około 1 godziny).
- Używaj wyłącznie dostarczonych akcesoriów.
- Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.
- Ładuj w temperaturze od 0°C do 40°C (32°F do 104°F).

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie zginiataj, nie upuszczaj ani nie narażaj baterii na uszkodzenie.
- Unikaj zwarcia baterii.
- W przypadku kontaktu płynu z baterii ze skórą lub oczami natychmiast przepłucz je wodą i zgłoś się do lekarza.

Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami domowymi.
- Kontroler zawiera baterię litowo-jonową. Po zakończeniu eksploatacji zwróć urządzenie do producenta lub postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu i utylizacji urządzeń elektronicznych.

SPECYFIKACJA

Nazwa: GIOperfect Mask

ID: GIO-780

Kolory diod LED: czerwony, niebieski, żółty, podczerwień

Liczba diod LED: 70 szt. (280 wiązek światła)

Bateria: 2000 mAh

Napięcie: 3,7 V

Moc: maks. 6,5 W

Wymiary kontrolera: 130 × 40 × 26,5 mm

Wymiary maski: 299 × 210 × 3,5 mm

Opcje timera: 10 / 15 / 20 minut

Materiał: ABS + silikon



innoGIO

Wyprodukowano w Chinach dla **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska
www.innogio.com



@innoGIO.official



@innogio_com