


SKG

Masażer talii
VS500




INSTRUKCJA OBSŁUGI

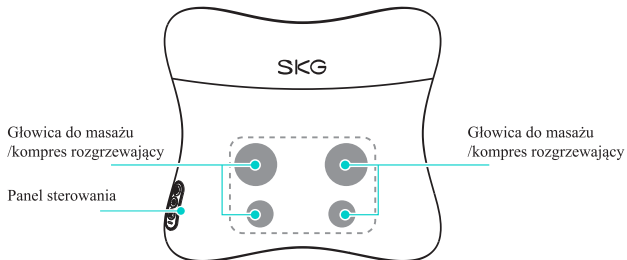


Przycisk Wł./Wył. (naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć; krótkie naciśnięcie, aby przełączyć tryb)

Przycisk kompresu rozgrzewającego z tyłu (krótko naciśnij, aby przełączyć poziom intensywności)

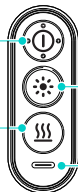

Przycisk kompresu rozgrzewającego z przodu (krótko naciśnij, aby włączyć/wyłączyć kompres rozgrzewający)

Port ładowania

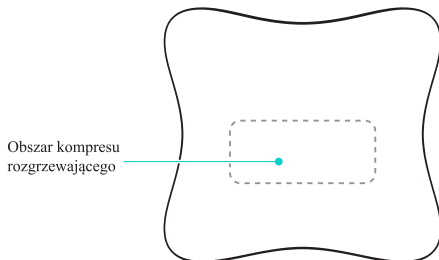

(Powyższy schemat służy wyłącznie do celów ilustracyjnych i może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu).
Uwaga: Nie masuj tego samego obszaru zbyt długo.

1. Niniejszy produkt posiada z jednej strony obszar masażu i kompresu rozgrzewającego, a z drugiej obszar kompresu rozgrzewającego, na którym można się oprzeć.

2. Wszystkie przyciski sterujące znajdują się na panelu sterowania masażera. Aby włączyć lub wyłączyć masażer, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na panelu sterowania przez 3 sekundy, aż głowica masująca zacznie działać; aby przełączać tryby masażu, naciśnij krótko przycisk zasilania; aby włączyć lub wyłączyć funkcję kompresu rozgrzewającego, naciśnij krótko przycisk kompresu rozgrzewającego z przodu; aby włączyć funkcję kompresu rozgrzewającego z tyłu, naciśnij krótko przycisk kompresu rozgrzewającego z tyłu i naciśnij go ponownie, aby przełączać poziomy intensywności lub naciśnij go po raz trzeci, aby wyłączyć funkcję kompresu rozgrzewającego.

3. Świecąca na zielono kontrolka zasilania oznacza, że bateria jest w pełni naładowana, a migająca na pomarańczowo kontrolka oznacza, że bateria jest bliska rozładowania. Kiedy produkt jest rozładowany, można go naładować za pomocą portu ładowania typu C. Kontrolka na porcie ładowania będzie wskazywać różne stany ładowania: pomarańczowa kontrolka wskazuje, że urządzenie jest w trakcie ładowania, a zielona kontrolka wskazuje, że bateria jest w pełni naładowana.

4. Aby zakończyć masaż, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję masażu.

Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Masażer talii		
Model	VS500	Znamionowe napięcie ładowania	5V $\equiv$
Pojemność baterii	3200mAh/23.68Wh	Znamionowa moc wejściowa	10W

Ten produkt można ładować, a użytkownicy powinni ładować go za pomocą kabla ładującego typu C. Używane ładowarki muszą mieć moc wyjściową nie większą niż 15 W.



- Nie używaj urządzenia z następującymi medycznymi urządzeniami elektronicznymi: wszczepialne medyczne urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, podtrzymujące życie medyczne urządzenia elektroniczne, takie jak sztuczne płuco-serce, medyczne urządzenia elektroniczne, takie jak elektrokardiograf.
- Ten produkt jest masażerem do użytku osobistego i nie jest przeznaczony do zastępowania leków ani urządzeń medycznych.
- Kobiety w ciąży i po porodzie powinny używać tego produktu ostrożnie i wyłącznie pod nadzorem i za zgodą lekarza.
- Osoby o wrażliwej skórze powinny używać tego produktu wyłącznie za zgodą i pod nadzorem lekarza.
- Produkt zawiera baterię litową. Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu, nie zanurzaj go w wodzie ani nie wrzucaj do ognia.
- Podczas używania produktu głowica do masażu nie powinna stykać się z następującymi obszarami: rany i blizny w talii, obszary z wewnętrznymi nowotworami złośliwymi, obszary z wewnętrznymi metalowymi implantami oraz obszary z ostrym ropnym stanem zapalnym.
- Z produktu nie mogą korzystać następujące osoby: osoby z zaburzeniami krzepnięcia, osoby z paraliżem spastycznym, osoby w fazie spastycznej po wypadku naczyniowo-mózgowym, osoby z poważnymi zaburzeniami poznawczymi, osoby z drażliwością nerwową, osoby z przykurczami lub deformacjami stawów, niemowlęta i dzieci, które utraciły całkowicie lub częściowo świadomość.
- Przed użyciem produktu następujące osoby powinny skonsultować się z lekarzem: pacjenci, którzy są leczeni i źle się czują, pacjenci z chorobami zakaźnymi, pacjenci z temperaturą ciała przekraczającą 38 stopni Celsjusza (gorączkujący), pacjenci z nieprawidłowym ciśnieniem krwi, pacjenci z zaburzeniami kardiologicznymi lub neurologicznymi, pacjenci z zaburzeniami czucia, pacjenci, którzy nie mogą swobodnie wyrażać własnej woli, pacjenci z osteoporozą i pacjenci ze złamaniami kręgosłupa.
- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu podczas użytkowania, natychmiast przerwij korzystanie z produktu.
- Poziom naładowania baterii może szybko się wyczerpać przy pierwszym użyciu lub jeśli produkt nie był używany przez dłuższy czas. Aby zapewnić prawidłowe działanie baterii, należy ją ładować zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj ładowarki mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub wypadek.
- Zaleca się stosowanie przez osoby w wieku co najmniej 16 lat.
- Jeśli masażer nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie go raz w miesiącu, aby utrzymać poziom naładowania baterii powyżej 20%.

Postępować zgodnie z zasadami recyklingu baterii (baterie litowo-jonowe)

 Niebezpieczeństwo	Bateria używana w tym produkcie to specjalny akumulator, którego nie należy używać w innych produktach. Nie ładuj baterii, gdy została ona wyjęta. • Nie przegrzewaj baterii wrzucając ją do ognia. • Nie przebijaj jej gwoździami, nie narażaj na uderzenia grawitacyjne ani nie demontuj jej w celu modyfikacji. • Nie łącz katody i anody akumulatora bezpośrednio z metalem. • Nie przechowuj jej razem z naszyjnikami, spinkami do włosów itp. • Nie ładuj, nie używaj i nie umieszczaj baterii w gorących miejscach, takich jak kominek lub gorące słońce Powyższe sytuacje mogą prowadzić do przegrzania, zapłonu i pęknięcia baterii.
 Ostrzeżenie	Wyjętą baterię przechowuj poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu. • Jeśli dojdzie do połknięcia, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. • W przypadku wycieku z baterii nie dotykaj płynu gołymi rękami i postępuj zgodnie z poniższymi krokami. • Jeżeli płyn z baterii dostanie się do oczu, istnieje ryzyko utraty wzroku. Nie należy pocierać oczu bezpośrednio rękami, lecz natychmiast przemyć je czystą wodą i zwrócić się po pomoc lekarską. Kontakt płynu z baterii ze skórą lub ubraniami może spowodować przypalenie skóry lub obrażenia. Należy przepłukać usta czystą wodą i natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli poczujesz się niekomfortowo. • Demontaż produktu jest dozwolony wyłącznie w przypadku jego utylizacji. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować wypadki, takie jak pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała. Jeśli konieczna jest naprawa (z wyjątkiem wymiany baterii), skonsultuj się ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Bateria litowo-jonowa zastosowana w tym produkcie jest cennym surowcem nadającym się do recyklingu. Dlatego prosimy o przekazanie jej do profesjonalnej organizacji zajmującej się recyklingiem i regeneracją baterii, gdy osiągną one koniec swojego cyklu życia i zostaną zutyliczowane. Przed wyrzuceniem masażera należy wyjąć z niego baterię. Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć masażer. Baterię należy bezpiecznie zutyliczować. Kroki wyjmowania baterii:

1. Upewnij się, że produkt jest wyłączony.
2. Otwórz zamek błyskawiczny materiałowego pokrowca.
3. Poluzuj śruby na pokrywie obudowy urządzenia.
4. Odłącz zaciski przewodu wyjściowego baterii.
5. Wyjmij jednostkę.
6. Wyjmij baterię.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami podczas użytkowania w środowisku domowym. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.



Urządzenie to zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy (UE)2023/988.

UWAGA: Ryzyko wybuchu, jeśli bateria zostanie zastąpiona niepoprawnym typem. **USUŻYTKOWANIE BATERII**

Zgodnie z instrukcjami.

Oświadczenie UE o zgodności z przepisami:

SKG Health technology Co., Ltd. oświadcza tutaj, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy (UE)2023/988. Kopia deklaracji zgodności UE jest dostępna online na stronie internetowej <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Stare urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane razem z pozostałymi odpadami; muszą być utylizowane oddzielnie. Utylizacja w publicznych punktach zbiórki jest bezpłatna dla osób prywatnych. Właściciel starych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie ich do tych punktów zbiórki lub podobnych obiektów. Podejmując ten niewielki osobisty wysiłek, przyczyniasz się do recyklingu cennych surowców i właściwego przetwarzania substancji toksycznych.



FR

**Cet appareil
et sa batterie
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

**DÉPLIANT
+ BARQUETTE
+ ÉTUI**



EU

REP

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

successservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Address: 23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009,
Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

Website : <https://global.skg.com/>



Made in China