



Elektryczna szczoteczka do zębów Oclean Sonic
Instrukcja obsługi


Polski 2

Elektryczna szczoteczka do zębów Oclean Sonic Instrukcja obsługi

Dziękujemy za korzystanie z elektrycznej szczoteczki do zębów Oclean Sonic.

Ważna wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

- Podczas korzystania z produktu po raz pierwszy, z uwagi na wysoką prędkość obrotową szczoteczki, uczucie stymulacji lub odrętwienia dziąseł jest normalnym zjawiskiem, które przez okres 7-14 dni będzie stopniowo zanikać.
- Jeśli szczoteczka nie była przez długi czas używana (bateria urządzenia nie ma energii z powodu jej zużycia w trybie czuwania), podczas ponownego jej ładowania, wskaźnik ładowania może się nie pojawić. Należy odczekać 6-10 minut aż ładowanie zostanie wznowione.
- Główna część szczoteczki może nieznacznie się nagrzać podczas ładowania, jest to normalnym zjawiskiem. Jeśli szczoteczka nagrzeje się nadmiernie, należy przerwać jej ładowanie i przesłać szczoteczkę do centrum obsługi posprzedażowej Oclean w celu kontroli.
- Z tym urządzeniem można używać tylko specjalnej głowicy szczotkującej przeznaczonej dla elektrycznych szczoteczek Oclean Sonic. Oclean nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z użycia innych oficjalnie zatwierdzonych lub niezatwierdzonych głowic szczotkujących.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do mycia zębów i nie może być stosowany do innych celów.
- Ten produkt służy wyłącznie jako urządzenie czyszczące do użytku prywatnego. Nie zaleca się, aby szczoteczki używało kilka osób jednocześnie.
- Tego produktu należy używać wyłącznie wewnątrz budynków i nie narażać na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Należy go przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w normalnej temperaturze.

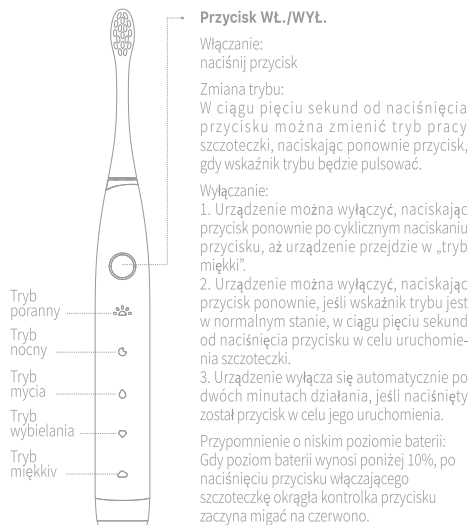

Osoby cierpiące na następujące rodzaje nadwrażliwości jamy ustnej muszą zachować szczególną ostrożność

- Osoby, które w ostatnim czasie przeszły zabieg okolicyzbowy lub są w trakcie takich zabiegów.
- Osoby z innymi objawami chorób jamy ustnej, w tym z niestabilnymi protezami lub utrzymującym się krwawieniem z dziąseł.
- Pozostałe osoby z delikatnymi problemami jamy ustnej. Ten produkt nie jest zalecany dla powyższej grupy lub przed użyciem należy skonsultować się z dentystą.
- Ten produkt nie nadaje się dla ludzi z niepełnosprawnościami, chorobami psychicznymi i nieposiadających wystarczającego doświadczenia oraz wiedzy (w tym dzieci w wieku od 0 do 12 lat). Jeśli nie jest używany pod nadzorem opiekuna.

Instrukcje używania

Domyślny program szczotkowania

- Urządzenie wykorzystuje pięć trybów szczotkowania: tryb poranny, tryb nocny, tryb mycia, tryb wybielania i tryb miękki.
- Tryb poranny: w porównaniu do trybu nocnego, nacisk wywierany na zęby jest niski. Jako metoda mycia i pielęgnacji może skutecznie usunąć płytkę nazębną powstałą podczas snu.
 - Tryb nocny: dogłębnie usuwa resztki pożywienia i płytkę nazębną, działając z dużym naciskiem.
 - Tryb mycia: odpowiedni do zwykłego i regularnego mycia zębów. W porównaniu do trybu nocnego nacisk jest relatywnie niski.
 - Tryb wybielania: skutecznie usuwa odbarwienia na zębach u osób, które często palą tytoń lub piją dużo kawy, herbaty itd.
 - Tryb miękki: chroni dziąsła, spełniając podstawową funkcję usuwania płytki nazębnej u osób z alergią jamy ustnej.

Ładowanie bezpośrednie za pomocą portu USB-C

Otwórz dolną pokrywę szczoteczki elektrycznej, podłącz przewód USB-C do portu na dole szczoteczki, a drugi jego koniec do zasilacza. Okrągła kontrolka przycisku zacnie migać na biało, co wskazuje, że trwa ładowanie szczoteczki.

Proces ładowania

Stan ładowania: okrągła kontrolka przycisku miga na biało.

Pierwsze użycie

Użytkownik może ładować szczoteczkę zgodnie z potrzebą zapewnienia normalnej pracy urządzenia.

Proces stosowania

Gdy poziom baterii wynosi poniżej 10%, po naciśnięciu przycisku włączającego szczoteczkę okrągła kontrolka przycisku zaczyna migać na czerwono.

Środki ostrożności

Baterię urządzenia może wymienić tylko pracownik autoryzowanego centrum obsługi Klienta Oclean. W przypadku wymiany baterii przez użytkownika lub nieautoryzowanego pracownika gwarancja automatycznie utraci ważność.

Szczoteczkę Oclean należy ładować za pomocą ładowarki 5 V/1 A lub 5 V/2 A do urządzeń przenośnych.

Mogą to być ładowarka do iPhone'a, ładowarka do tabletu itd. Jeśli natężenie prądu ładowania wynosi poniżej 1 A, czas ładowania może ulec wydłużeniu. Jeśli szczoteczka będzie ładowana za pomocą ładowarki wykorzystującej napięcie powyżej 5 V, może dojść do uszkodzenia obwodu ładowania szczoteczki.

Zalecana metoda szczotkowania zębów



Należy wolno poruszać szczoteczką ustawioną pod kątem 45° pomiędzy miejscem szczoteczki i linią dziąseł. Podczas tego procesu nie ma konieczności szczotkowania w górę i w dół.




Należy lekko chwycić uchwyt szczoteczki i wolno wykonywać okrężne ruchy, ale nie stosować zbyt dużego nacisku.



Po szczotkowaniu gardło należy wypłukać czystą wodą.

Czyszczenie i konserwacja

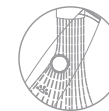

Splukać bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu. Nie wyciągać włosków z główki szczoteczki.

- Specyfikacje produktu:

Nazwa produktu	Elektryczna szczoteczka do zębów Oclean Sonic
Model	F5002
Stopień ochrony IP	IPX7
Moc	1.85W
Ładowarka	USB-C do ładowania bezpośredniego
Wejście	5V = 1A
Żywotność*	≤ 180 dni (*)
Pojemność baterii	2500 mAh (**)
Czas ładowania	≤ 5 godzin (***)
Norma wdrożenia	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

- * W przypadku dwóch szczotekowań na dzień, z których każde trwa po dwie minuty. (Tryb poranny)
- ** Teoretycznie pojemność baterii może się różnić o ±50 mAh.
- *** Zaleca się korzystanie z ładowarki USB 5 V = 1 A do urządzeń przenośnych.



- NIE demontować, uderzać, wyrzucać ani wrzucać urządzenie do ognia.
 - NIE używać szczoteczki, jeśli bateria napęczniała lub rozszerzyła się.
 - NIE narażać baterii na środowisko o wysokiej temperaturze.
 - NIE używać baterii, jeśli została zawilgocona.
- Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć z niego baterię. Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie. Baterię należy utylizować w bezpieczny sposób.

Prosimy zwrócić się do centrum serwisowego o raport z konserwacji i zachować go razem z kartą gwarancyjną.

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd., w zgodzie z Regulaminem Odpowiedzialności w zakresie konserwacji, wymiany i zwrotu sprzedaży urządzeń gospodarstwa domowego, oferuje gwarancję dla konsumentów, którzy zakupią inteligentną soniczną szczoteczkę elektryczną Oclean. W przypadku jakiegokolwiek niezgodności pomiędzy artykułami serwisowymi a postanowieniami gwarancji, obowiązują postanowienia gwarancji oraz treść zaświadczenia gwarancyjnego.

Jeśli okazało się, że zakupiony produkt ma wadę lub defekt, skontaktuj się z nami pod numerem service@oclean.com

Producent: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.
Adres producenta: #28G, Building 3, Dachong Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue), Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China
Adres miejsca produkcji: Building A, No.6 of Xinmu Road, Xinmu Community, Pinghu, Shenzhen, China
Witryna: www.oclean.com

Jeśli potrzebne są szczegółowe informacje na temat używania produktu, prosimy o śledzenie oficjalnego konta Oclean.



www.facebook.com/ocleanglobal

FC CE UK IC EAC K
IPX7 RoHS ♻️

EU Authorized Representative
Agency name: Mbrush UAB
Representative: Algirdas Tevelis
European Address: Totorių g.3, Kaunas,
Lithuania
Post Code: LT44237
Email: service@mobalt.eu
Phone: +37067052772

