



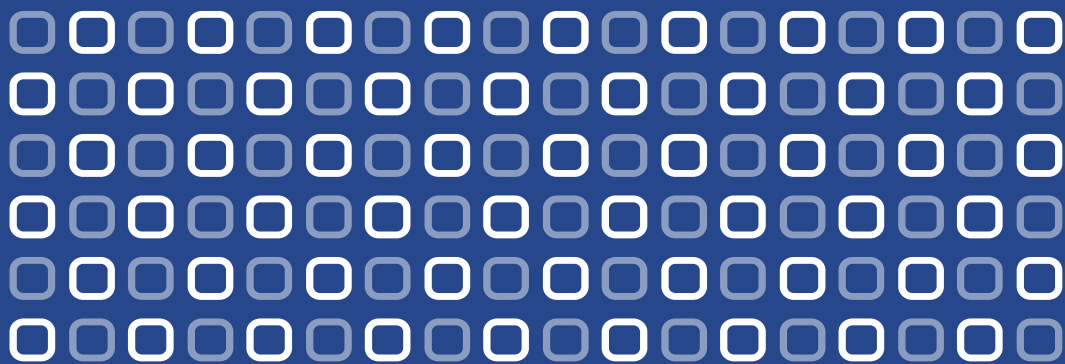


DIFORO

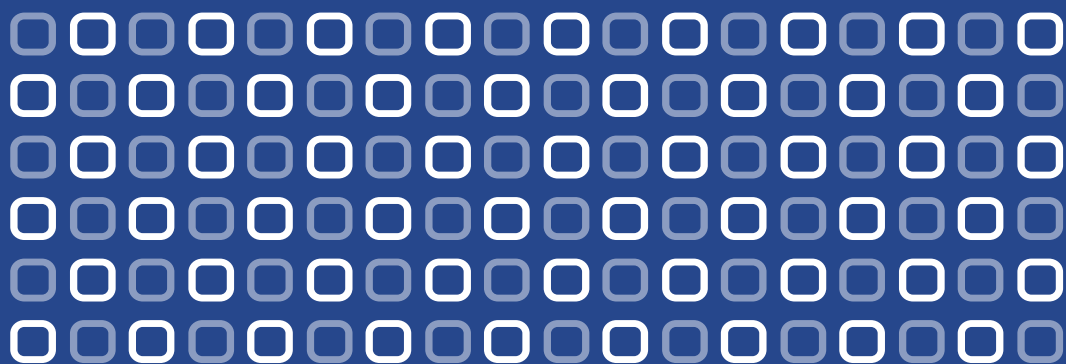

DiF-Puf

PRODUKT I AKCESORIA

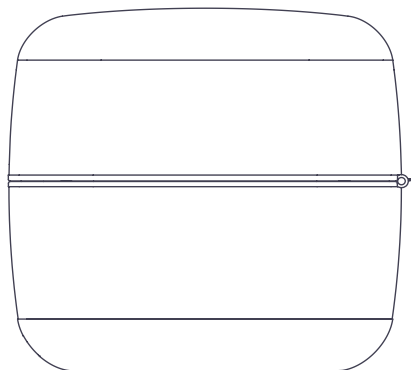

Część główna




Ładowarka



Instrukcja obsługi

NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW


STRUKTURA ZEWNĘTRZNA

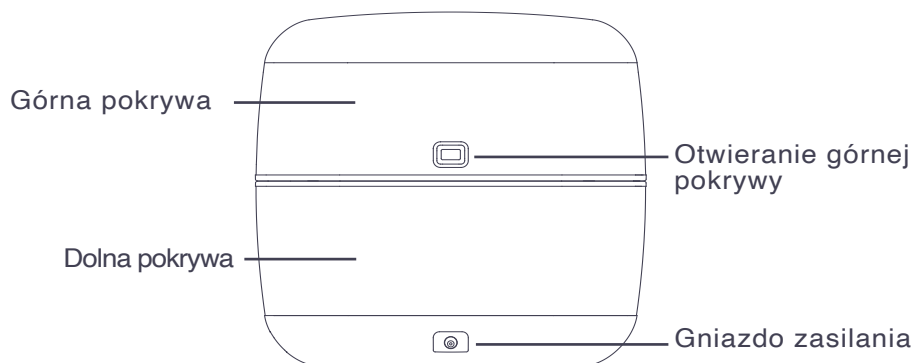

PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

MIEJSCE INSTALACJI

Aby zapobiec zakłóceniom sygnału, zachowaj co najmniej 1 metr odstępu od telewizora, radia oraz innych urządzeń audio-wideo.

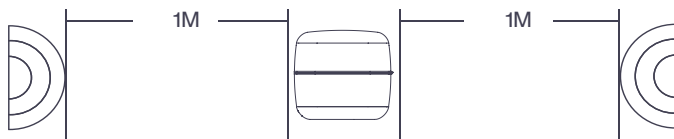

UWAGA

- Podczas ładowania ustaw adapter tak, aby przewód się nie plątał i nie uległ uszkodzeniu.
- Czas ładowania nie powinien przekraczać 3 godzin.
- Nie używaj ładowarki innej niż oryginalna.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

- Urządzenie musi być uziemione, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Nie stawiaj urządzenia na nierównym podłożu.

ŚRODOWISKO PRACY


- Trzymaj urządzenie z dala od wilgotnych miejsc (np. łazienki), aby uniknąć porażenia prądem.
- Unikaj wysokich temperatur oraz źródeł ciepła (np. pieca), aby zapobiec uszkodzeniu elementów skórzanych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI MASAŻERA




PODŁĄCZENIE ZASILANIA

- W wersji z akumulatorem, po pełnym naładowaniu, urządzenie działa bez podłączenia do adaptera.

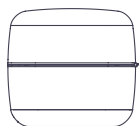

Taboret / pufa


- Gdy górna pokrywa jest zamknięta, urządzenie może być używane jako pufa / taboret.

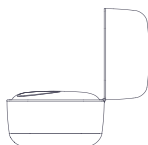

Masażer do stóp

- Po otwarciu górnej pokrywy można korzystać z funkcji masażera do stóp.

INSTRUKCJA OBSŁUGI MASAŻERA

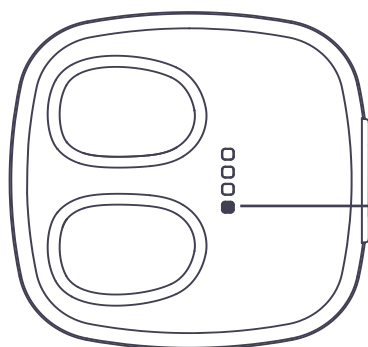

ON/OFF



- Włącza/wyłącza masaż stóp.
- Zielona dioda oznacza poziom naładowania baterii 70%–100%.

ON/OFF




- Włącza/wyłącza masaż stóp.
- Żółta dioda oznacza poziom naładowania baterii 30%–70%.



ON/OFF

- Włącza/wyłącza masaż stóp.
- Czerwona dioda oznacza poziom naładowania baterii 0%–30%.

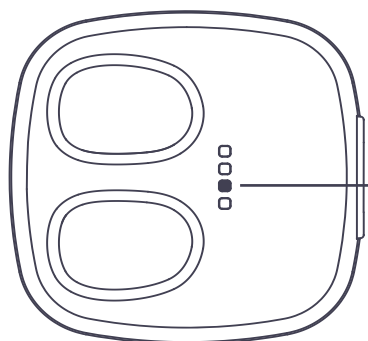

Program Button (zielony)



- Zielony kolor oznacza aktywne funkcje: Poduszki powietrzne, Wibracja, Rolki.

Program Button (żółty)





- Żółty kolor oznacza aktywne funkcje: Poduszki powietrzne, Rolki.



Program Button (czerwony)

- Czerwony kolor oznacza aktywną funkcję: Wibracja.

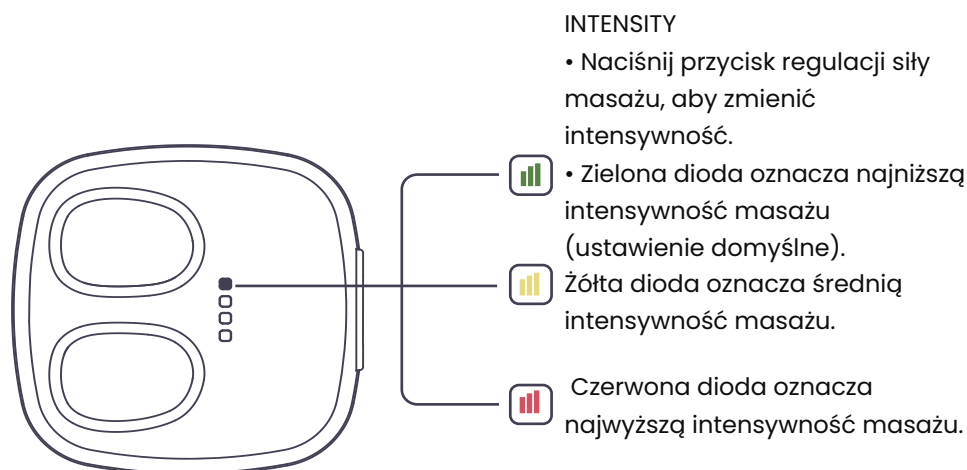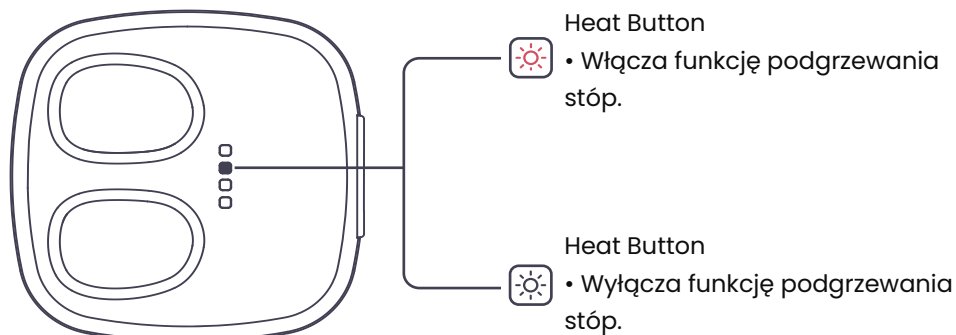

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA

- Przed użyciem dokładnie przeczytaj sekcję „ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA”, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.

KONTROLER

- Nie używaj kontrolera mokrymi dłońmi i nie ciągnij za przewód kontrolera.
- Nie zachlapuj kontrolera wodą — może to spowodować awarię.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na kontrolerze.

ŁADOWARKA

- Nie używaj ładowarek innych niż oryginalne, aby uniknąć ryzyka pożaru lub uszkodzenia urządzenia.
- Czas ładowania nie powinien przekraczać 3 godzin.
- Nie podłączaj adaptera mokrymi dłońmi — grozi to porażeniem prądem.
- Wyjmuj adapter, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie zgniataj przewodu ładowarki ani nie przyciskaj go ciężkimi przedmiotami.

- Nie zginaj, nie skręcaj nadmiernie i nie wiąż przewodu — grozi to uszkodzeniem.
- W przypadku uszkodzenia przewodu, nie rozbieraj i nie naprawiaj go samodzielnie.

Wymianę i naprawę powinien przeprowadzić wykwalifikowany serwisant.

Środowisko użytkowania

- Nie używaj urządzenia w temperaturze powyżej 40°C.
- Nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 0°C.
- Nie używaj urządzenia w środowisku wilgotnym lub zapyłonym — grozi to porażeniem prądem lub awarią.
- Nie używaj urządzenia podczas burzy — odłącz adapter od gniazdka.
- Nie stawiaj urządzenia na nierównym podłożu.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kuchenki, źródeł ciepła ani w bezpośrednim świetle słonecznym.

Zakaz demontażu

- Nie demontuj wewnętrznych komponentów urządzenia bez zezwolenia — grozi to uszkodzeniem sprzętu.
- Poza techniką wyznaczoną przez producenta, urządzenie nie może być rozbierane, naprawiane ani modyfikowane.

W przypadku problemów skontaktuj się z dystrybutorem.

Odłączanie wtyczki

- Podczas konserwacji odłącz urządzenie od prądu.
- Nie ciągnij za przewód i nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami — ryzyko porażenia.
- Odłącz wtyczkę z gniazdka po użyciu lub gdy urządzenie nie jest używane.
 - W przypadku awarii zasilania natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę.

Uwagi

- Urządzenie jest przeznaczone dla użytkowników o masie poniżej 265 lb (ok. 120 kg).
- Nie używaj innych urządzeń terapeutycznych jednocześnie z tym urządzeniem.
- Produkt może być używany wyłącznie przez jedną osobę — nie używać jednocześnie przez dwie lub więcej osób.
- Podczas korzystania z urządzenia zdejmij wszelkie akcesoria z kostek lub stóp.
- Przed użyciem sprawdź, czy tkanina wszystkich elementów kontaktowych nie jest uszkodzona.

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia — natychmiast przerwij używanie i zleć naprawę.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów fizycznych — przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.

Uwagi

- Zalecany czas jednorazowego użycia urządzenia to 10 minut.
- Upewnij się, że wewnątrz urządzenia nie znajdują się zwierzęta ani żadne przedmioty.
- Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, ładuj go co 2 miesiące, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
- Nie stawaj na urządzeniu — grozi to uszkodzeniem lub kontuzją.
- Nie przesuwaj urządzenia po dywanach lub wykładzinach, które łatwo ulegają uszkodzeniu.
- Przechowuj produkt w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od silnego światła słonecznego.

OSTRZEŻENIA MEDYCZNE

Produkt nie jest zalecany dla:

- Pacjentów z poważną hiperostozą (nadmiernym rozrostem kości).
- Osób z obrzękami lub zakrzepicą.
- Pacjentów z poważnymi chorobami serca.
- Kobiety w ciąży.
- Osoby spożywające duże ilości alkoholu.
- Osoby chore na cukrzycę.
- Osoby z wysoką gorączką.
- Pacjenci z nowotworami złośliwymi lub ropieźmi o podłożu nowotworowym.
- Osoby z deformacjami stawów.

Problem / Objawy	Możliwa przyczyna	Sposób rozwiązania
serca. Dźwięki przypominające stukanie lub buczenie	Normalna praca silnika lub tarcie między kołem masującym a pokrywą materiałową	Jest to normalne
Urządzenie nie włącza się	Brak baterii	Użyć po naładowaniu

Jeśli problem nie wynika z powyższych przyczyn, wyłącz urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Uwaga:

- Nie demontuj urządzenia samodzielnie.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub samodzielnymi próbami naprawy.

Przypomnienie / Zalecenia

Podczas całorocznego użytkowania należy zwracać uwagę na poniższe objawy:

- Zapach spalenizny.
- Niestabilne lub nieprawidłowe działanie zasilania.
- Przewód zasilający nadmiernie się nagrzewa.
- Inne nietypowe lub nieprawidłowe zjawiska.

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, natychmiast przerwij użytkowanie urządzenia, aby zapobiec awarii lub wypadkowi – wyłącz masażer, odłącz go od zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu.

SPECYFIKACJA

Nazwa	Masażer do stóp	Napięcie znamionowe	110–220 V
Wymiary opakowania	455 × 455 × 455 mm	Poziom hałasu	≤ 55 dB
Waga brutto (G.W.)	11,2 kg	Klasa bezpieczeństwa	Klasa I
Waga netto (N.W.)	9,7 kg	Maks. obciążenie	120 kg
Normy	GB4706.1 – 2005, GB4706.10 – 2008		

Dane kontaktowe

DIFORO Brand

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

+48 453 271 100

Godziny konsultacji : 08:00 ~ 16:00

PRODUCENT

DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.

Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLSKA

www.diforo.pl get@diforo.pl

NIP: 5252799270, KRS 0000800189