


DIFORO

MASAŻER ANTYCELLULITOWY



Instrukcja obsługi

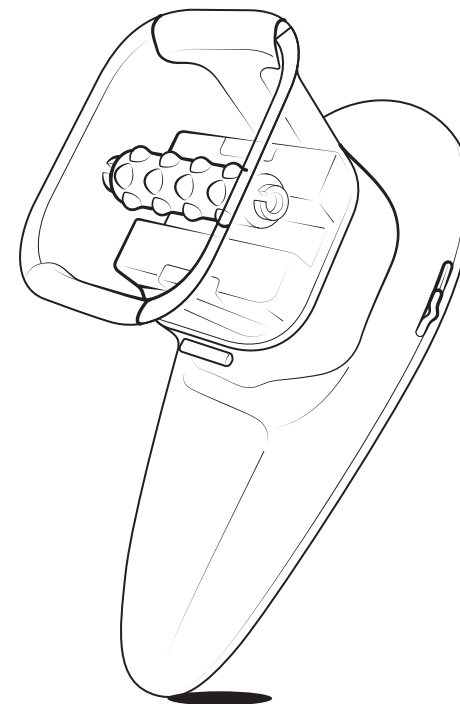


Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

CZYM JEST CELLULIT?

Cellulit to stan, w którym skóra ma pofałdowany, nierówny wygląd spowodowany nagromadzeniem złogów tłuszczu pod skórą. Najczęściej występuje na pośladkach i udach, ale może pojawiać się także na ramionach.

Używając tego urządzenia możesz poprawić krążenie, pobudzić drenaż limfatyczny, a w połączeniu ze zdrową, zrównoważoną dietą i regularną aktywnością fizyczną — zmniejszyć zawartość tłuszczu w komórkach i zredukować widoczność cellulitu.

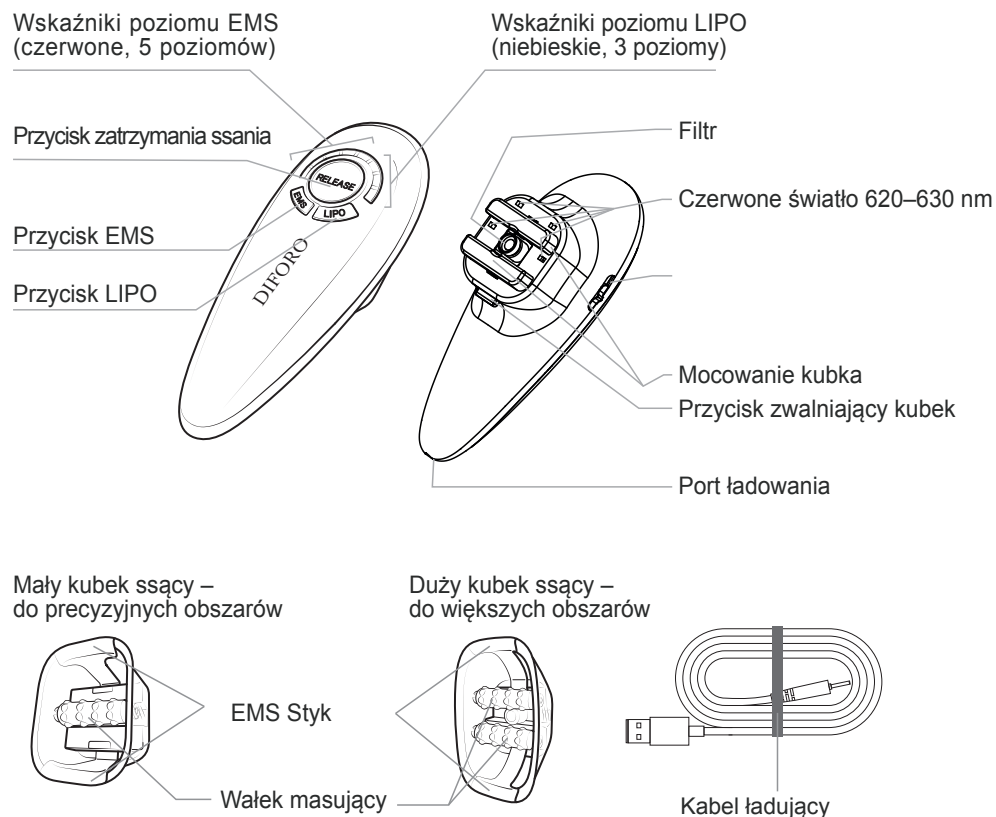

- EMS: impulsowy prąd elektryczny, który stymuluje skurcze mięśni
- LIPO: 2 tryby ssania, bezpośrednio uciskające mięśnie

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję.


1. Trzymaj urządzenie z dala od wody.
2. Nie zanurzaj ani nie wrzucaj urządzenia do wody ani do żadnych innych cieczy.
3. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast je odłącz od zasilania. Nie wkładaj rąk do wody.
4. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu.
5. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
6. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji. Nie stosuj żadnych akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta.
7. Nie upuszczaj urządzenia i nie wkładaj żadnych przedmiotów do jego otworów.
8. Nie używaj urządzenia zbyt długo — maksymalnie 5 minut w jednym miejscu.
9. U osób z wiotkimi mięśniami urządzenie może pozostawić niewielkie zasinienia po użyciu. W przypadku wystąpienia siniaków należy natychmiast przerwać używanie urządzenia. Zazwyczaj znikają one samoistnie po około tygodniu.
10. Jeśli Twoja skóra jest w trakcie leczenia lub w złym stanie zdrowia, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
11. Nie demontuj urządzenia w żadnych okolicznościach.
12. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, szczególnie w obecności dzieci.
13. Urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym w zestawie.
14. **WAŻNE:** Nie używać na twarzy.

Ładowanie

1. Gdy poziom baterii jest niski, wskaźniki będą migać przez 1 minutę z częstotliwością 2 razy na sekundę, po czym urządzenie automatycznie się wyłączy.
2. Podłącz końcówkę przewodu (jack) do portu ładowania w urządzeniu.
3. Drugi koniec kabla (USB) podłącz do standardowej ładowarki USB.
4. Podczas ładowania diody LED na urządzeniu będą się świecić, a po pełnym naładowaniu zgasną po około 2 minutach.
5. Pełne naładowanie trwa do 3 godzin i umożliwia około 45 minut pracy.
6. Po pełnym naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdka.

Użytkowanie

1. Wybierz odpowiedni kubek ssący w zależności od wielkości obszaru, który chcesz poddać zabiegowi. Przymocuj kubek, mocno dociskając go do urządzenia.

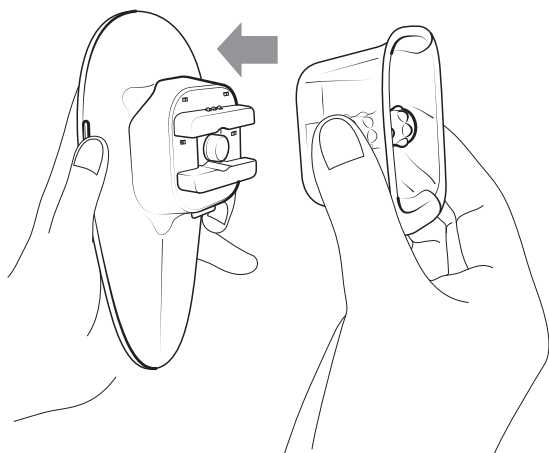

JAK UŻYWAĆ

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIPO przez 2 sekundy, aby aktywować funkcję ssania. Wskaźnik zaświeci się na **niebiesko**.

Poziom ssania zmienia się w następującej kolejności po każdym kolejnym naciśnięciu przycisku **LIPO**. Podczas pierwszego użycia zacznij od poziomu 1 i stopniowo zwiększaj moc, gdy ciało przyzwyczai się do stymulacji.

Poziomy:

Poziom 1 (po pierwszym naciśnięciu przycisku LIPO) → Poziom 2 → Poziom 3 → Ssanie WYŁ.

3. Wybierz tryb ssania za pomocą przycisku SUCTION MODE:

Tryb 1: ssanie przerywane

Tryb 2: ssanie ciągłe

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk EMS przez 2 sekundy, aby aktywować funkcję EMS. Wskaźnik zaświeci się na czerwono. Poziom EMS będzie zmieniał się w poniższej kolejności po każdym kolejnym naciśnięciu przycisku EMS. Podczas pierwszego użycia zacznij od poziomu 1 i stopniowo zwiększaj moc, gdy ciało przyzwyczai się do stymulacji EMS.

Poziomy:

Poziom 1 (po pierwszym naciśnięciu przycisku EMS) → Poziom 2 → Poziom 3 → Poziom 4 → Poziom 5 → EMS WYŁ.

5. Po ustawieniu żądanych poziomów, mocno przyłóż kubek do ciała i poruszaj nim powoli po skórze.

Uwaga: Nie używaj na twarzy.

Zalecenie: Przed użyciem nałóż na skórę krem, balsam lub olejek do ciała w obszarze zabiegowym, aby ułatwić płynne przesuwanie urządzenia oraz zminimalizować uczucie lekkiego „mrowienia” spowodowanego działaniem EMS.

Dodatkowo, połączenie EMS z wałkami masującymi wspomaga wchłanianie kosmetyku.

6. **Zalecany czas zabiegu to 2–3 minuty na jeden obszar dziennie, maksymalnie 30 minut na całe ciało.** Szczegółowe zalecenia dotyczące użytkowania znajdziesz poniżej dla poszczególnych partii ciała.

JAK UŻYWAĆ

Uwaga: Nie używaj zbyt długo — maksymalnie 5 minut na jeden obszar.

Informacja: To normalne, że skóra po zabiegu może być zaczerwieniona. Zaczerwienienie zniknie po 1 dniu przerwy w używaniu urządzenia.

7. Podczas zabiegu wykonuj powolne i ciągłe ruchy. Trzymaj urządzenie stabilnie przy ciele, aby zapobiec jego ześlizgnięciu się — nie dociskaj zbyt mocno.

Uwaga: Nie pozostawaj z urządzeniem w jednym miejscu przez dłuższy czas.


8. Gdy aktywne są jednocześnie funkcje LIPO i EMS, możesz odczuwać delikatne zasysanie skóry oraz lekkie impulsy elektryczne — jest to zjawisko normalne.

Jeśli poczujesz dyskomfort, naciśnij przycisk RELEASE, aby natychmiast przerwać działanie.

Następnie zmniejsz poziom intensywności i rozpocznij zabieg ponownie.

9. Po zakończeniu zabiegu przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk LIPO lub EMS, aby wyłączyć urządzenie.

Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania po 10 minutach.

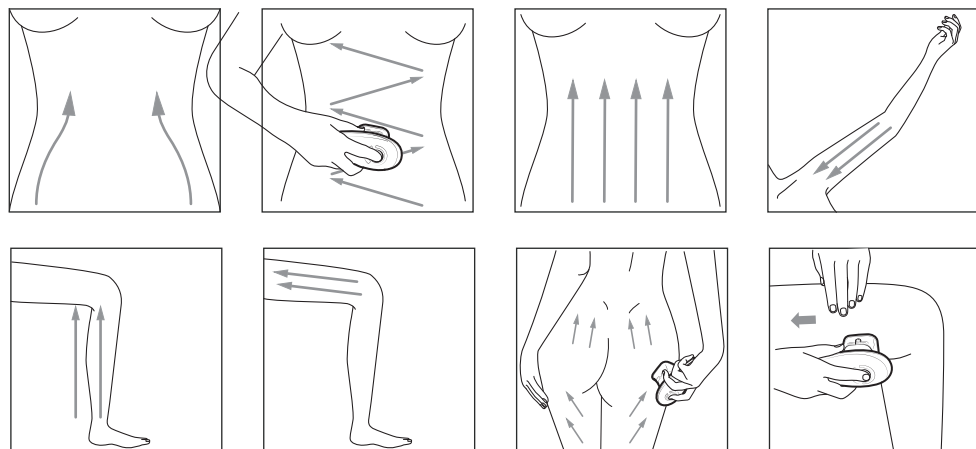


JAK UŻYWAĆ

Czyszczenie

1. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i wyłączone.
2. Naciśnij przycisk Cup Removal, aby zdjąć kubek ssący z głównej części urządzenia.
3. Wymień stary filtr na nowy, zgodnie z ilustracją poniżej.

Częstotliwość wymiany: raz w miesiącu
Wymień filtr, gdy siła ssania staje się słabsza.

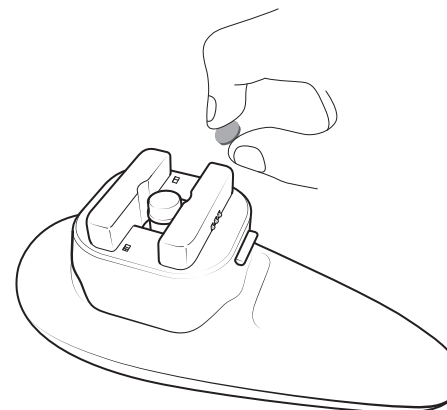

4. Umyj kubek ssący czystą wodą z kranu.
5. Przetrzyj korpus urządzenia lekko wilgotną, czystą ściereczką.

Ważne:

- Trzymaj urządzenie z dala od wody. Nie płucz ani nie zanurzaj głównej części w wodzie.
- Nie używaj detergentów ani środków chemicznych do czyszczenia urządzenia ani kubka ssącego — może to spowodować jego uszkodzenie.

Przechowywanie

Po zakończeniu użytkowania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka. Przechowuj je z dala od wilgoci i wysokich temperatur.

JAK UŻYWAĆ

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, dokładnie wyczyść główną część oraz kubek ssący przed odłożeniem na przechowanie.

Środowisko

Tego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać go do specjalnego punktu zbiórki przeznaczonego do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, który może być spowodowany niewłaściwym usuwaniem urządzeń elektrycznych.

Recykling materiałów pomaga również chronić zasoby naturalne.

Wskazówki dotyczące użytkowania



Urządzenie należy stosować wyłącznie na skórze pokrytej olejkim lub innym produktem zapewniającym odpowiedni poślizg.

Nie używaj urządzenia na suchej skórze — może to powodować dyskomfort, utrudniać płynny ruch głowicy oraz zmniejszać skuteczność zabiegu.

Przed rozpoczęciem masażu:

- Nałóż cienką warstwę olejku lub emulsji do masażu na obszar, który będzie poddany zabiegowi.
- Upewnij się, że skóra jest równomiernie pokryta.
- W razie potrzeby dodaj więcej olejku w trakcie masażu, aby utrzymać prawidłowy poślizg.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

1. Produkt **nie jest ognioodporny** – trzymaj go z dala od ognia oraz substancji żrących.
2. **Nie rozbieraj ani nie naprawiaj** urządzenia samodzielnie.
3. Przechowuj urządzenie **poza zasięgiem dzieci**.
4. Produkt **posiada funkcję wodoodporności**, jednak nie należy go zanurzać w wodzie.
5. **Nie naciskaj mocno** na maskę, aby uniknąć jej odkształcenia lub uszkodzenia.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji na wytwarzane przez siebie produkty w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Akcesoria dołączone do oryginalnego produktu podlegają gwarancji w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.

W celu sprawnego działania produktów i reklamacji zalecamy.

1. Zapoznaj się dokładnie i przestrzegaj instrukcji obsługi.
2. Zachowaj instrukcję, kartę gwarancyjną, dowód zakupu.
3. Korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
4. W przypadku problemów z urządzeniem skontaktuj się z Producentem.
5. Nie dokonuj samodzielnych napraw lub modyfikacji.
6. Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane bezpłatnie.

Wszelkie wady lub usterki zostaną usunięte w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od chwili dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu producenta.

Ograniczenia

Gwarancja nie zostanie uznana, w przypadku mechanicznych uszkodzeń wynikających z nieuwagi lub zdarzeń losowych.

W przypadku używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i specyfikacją.

Baterie są materiałami eksploatacyjnymi,
gwarancja obejmując 6 miesięcy.
Baterii nie można wymienić poza
autoryzowanym serwisem.

Dane kontaktowe

DIFORO Brand

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
+48 453 271 100

Godziny konsultacji: 08:00 ~ 16:00
(Od poniedziałku do piątku)

PRODUCENT
DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla,
www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270, KRS 0000800189

Karta gwarancyjna

Nazwa produktu	Beauty LED Mask	Model
	Nazwa sprzedawcy	
Informacje o kupującym	Imię, nazwisko	
	Adres:	
	Telefon:	
Opis usterki		

Prosimy o dokładne wypełnienie karty gwarancyjnej podczas zgłaszania naprawy.
Dziękujemy za współpracę!