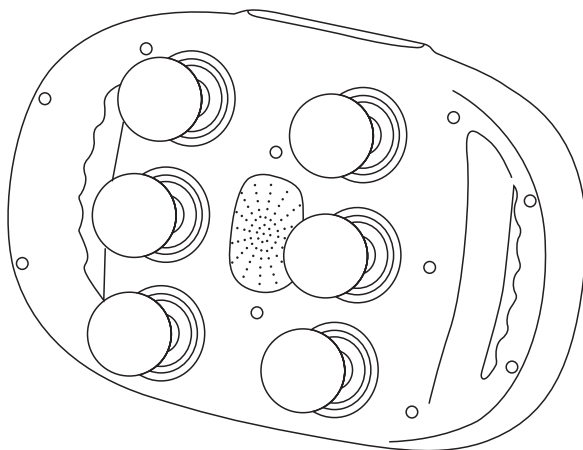
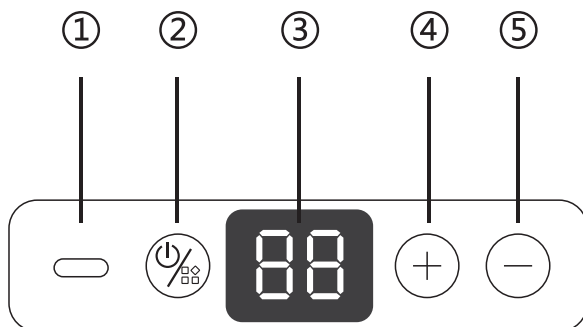

DIFORO



DiF-Multi-Tap

Masażer 6 głowicowy
12 punktowy
Instrukcja obsługi

Wskaźniki funkcji



Wyświetlacz

Wskaźniki funkcji

Opis funkcji przycisków i wyświetlacza

① Port ładowania USB Type-C

② Przycisk zasilania / zmiany trybu

1. Długie naciśnięcie – włączanie urządzenia; krótkie naciśnięcie – zmiana trybu.

2. Po uruchomieniu wyświetlacz cyfrowy jest aktywny przez 10 minut.

3. Krótkie naciśnięcie – włączenie lub wyłączenie podgrzewania, wyświetlane jako P1 lub P2.

4. Kolejne krótkie naciśnięcia – zmiana trybów: P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9.

③ Wyświetlacz cyfrowy

④ Przycisk zwiększania intensywności

Zakres L1–L9. Po 2 sekundach urządzenie automatycznie powraca do ekranu odliczania czasu.

⑤ Przycisk zmniejszania intensywności

Zakres L9–L1. Po 2 sekundach urządzenie automatycznie powraca do ekranu odliczania czasu.

Parametry produktu

Model produktu: DiF-Multi-Tap
Pojemność baterii: 2000 mAh
Napięcie znamionowe: 7,4 V
Napięcie ładowania: 5 V $\equiv$

Moc znamionowa: 15 W
Prąd ładowania: 1 A
Normy wykonawcze:
GB4706.1-2005
GB4706.15-2008

Instrukcje konserwacji

1. W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia należy pozostawić pewien poziom naładowania baterii, wyłączyć zasilanie i odpowiednio przechowywać produkt. Urządzenie można umieścić w oryginalnym opakowaniu i przechowywać w bezpiecznym, suchym, dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu.
2. Przy długim okresie nieużywania zaleca się ładowanie urządzenia co 6 miesięcy, aby zapobiec uszkodzeniu baterii spowodowanemu głębokim rozładowaniem.
3. Do codziennej konserwacji używaj neutralnych środków czyszczących oraz miękkiej ściereczki. Nie używaj oleju silnikowego, rozpuszczalników organicznych ani innych agresywnych środków chemicznych. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie czyść go poprzez płukanie.
4. Przed użyciem lub czyszczeniem urządzenia wyłącz zasilanie.
5. Podczas transportu urządzenie powinno być odpowiednio zabezpieczone, aby zapobiec silnym wstrząsom, uderzeniom, toczeniu się oraz upadkom.

Najczęściej zadawane pytania

Nie można uruchomić urządzenia lub urządzenie nie uruchamia się z powodu niskiej temperatury

Przyczyna 1: Niska temperatura

Długotrwałe przebywanie w temperaturze poniżej 0°C może prowadzić do obniżenia aktywności baterii, co skutkuje brakiem prawidłowego uruchomienia urządzenia (urządzenie może sprawiać wrażenie włączonego, ale nie działa prawidłowo).

Rozwiązanie: Pozostaw urządzenie na co najmniej 2 godziny w środowisku o temperaturze powyżej 0°C lub użyj suszarki do włosów, aby szybko podnieść temperaturę obudowy.

Przyczyna 2: Niewystarczający poziom naładowania baterii

Gdy bateria pozostaje przez dłuższy czas w stanie niskiego naładowania, urządzenie przechodzi w tryb ochrony baterii. W takim stanie po ponownym uruchomieniu urządzenie może nie działać prawidłowo.

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie, podłącz ładowarkę, naładuj baterię do pełna, a następnie spróbuj użyć urządzenia ponownie.

Rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych

Model	Objawy	Sposób rozwiązania
DIF Multi-Tap	Produkt nie działa	Sprawdź, czy bateria jest wystarczająco naładowana. Zaleca się użycie urządzenia po pełnym naładowaniu.
	Niewielki, nietypowy hałas podczas użytkowania	Jest to normalne zjawisko w okresie docierania nowego urządzenia. Jeśli hałas jest wyraźnie nienormalny, prześlij urządzenie do kontroli serwisowej.
	Bateria nie ładuje się	Możliwe starzenie się baterii lub słaby kontakt. Skontaktuj się z działem obsługi klienta lub sprzedawcą.

Ważne informacje środki ostrożności

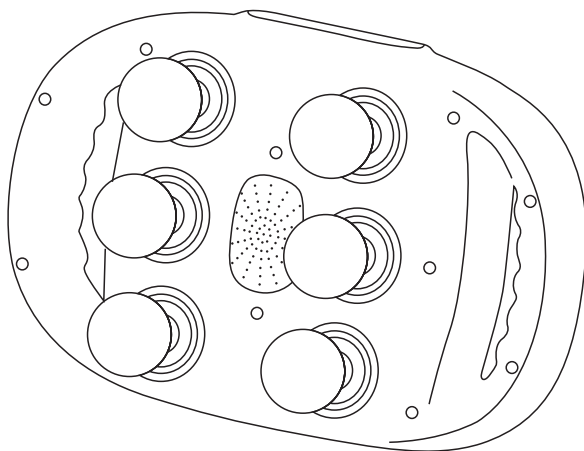
1. Zabrania się używania urządzenia przez osoby z rozrusznikiem serca, urządzeniami do oczyszczania twarzy lub cewnikami centralnymi wprowadzonymi przez żyły obwodowe.
2. Zabrania się używania w przypadku wszelkich ostrych i przewlekłych chorób zakaźnych, wysokiej gorączki, ostrego zapalenia kości i szpiku, gruźliczego zapalenia stawów, ostrych bólów brzucha, zakaźnych chorób skóry, owrzodzeń, ran, oparzeń w fazie ostrej, ciężkiej cukrzycy, a także u pacjentów po niedawnych złamaniach lub z ranami.
3. Dzieci poniżej 6 roku życia nie mogą używać urządzenia. Dzieci w wieku 6–18 lat mogą korzystać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. W okresie ciąży i karmienia piersią kobiety powinny unikać używania urządzenia lub stosować je wyłącznie zgodnie z zaleceniami terapeuty.
4. Zabrania się stosowania u osób z chorobami krwotocznymi (np. małopłytkowość). Urządzenie nie może zastępować ani uzupełniać leczenia medycznego. W przypadku bólu, trwającego leczenia lub stosowania innych urządzeń — skonsultuj się z lekarzem.
5. Przed użyciem upewnij się, że napięcie urządzenia jest zgodne z napięciem sieciowym oraz że wtyczka pasuje do gniazda.
6. Zabrania się zanurzania urządzenia w wodzie. W przypadku przypadkowego kontaktu z wodą należy niezwłocznie przekazać urządzenie do kontroli.
7. Zabrania się zbliżania urządzenia do źródeł ognia lub wkładania go do ognia.
8. Zabrania się używania nieoryginalnych ładowarek, przewodów zasilających lub wtyczek.
9. Zabrania się celowego upuszczania urządzenia.
10. Zabrania się odkręcania śrub lub prób demontażu urządzenia.
11. Zabrania się blokowania wylotu oraz dopuszczania do dostania się drobnych zanieczyszczeń do wnętrza.
12. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wydaje nietypowe dźwięki, nie należy go używać.
13. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami ani w pobliżu źródeł wody (np. kuchnia, łazienka).
14. Podczas użytkowania nie naciskaj ani nie blokuj wylotu urządzenia. Nie stosuj nadmiernego nacisku.
15. W przypadku uszkodzenia, niekompletności lub przegrzewania przewodu zasilającego lub wtyczki — nie naprawiaj samodzielnie. Skontaktuj się z dealerem lub autoryzowanym serwisem.
16. Urządzenie posiada powierzchnię grzewczą. Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania przez osoby o obniżonej wrażliwości na ciepło.

Oświadczenie

Aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego działania, porażenia prądem, obrażeń ciała, pożaru, śmierci oraz uszkodzenia urządzenia, przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji.

- Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego baterię.
- Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być wyłączone.
- Baterie należy utylizować w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób.

Kroki demontażu baterii podczas utylizacji urządzenia



Przed wyrzuceniem urządzenia bateria musi zostać z niego usunięta i odpowiednio posegregowana.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

- 1. Produkt **nie jest ognioodporny** – trzymaj go z dala od ognia oraz substancji żrących.
- 2. **Nie rozbieraj ani nie naprawiaj** urządzenia samodzielnie.
- 3. Przechowuj urządzenie **poza zasięgiem dzieci**.
- 4. Produkt **posiada funkcję wodoodporności**, jednak nie należy go zanurzać w wodzie.
- 5. **Nie naciskaj mocno** na maskę, aby uniknąć jej odkształcenia lub uszkodzenia.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji na wytwarzane przez siebie produkty w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Akcesoria dołączone do oryginalnego produktu podlegają gwarancji w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.

W celu sprawnego działania produktów i reklamacji zalecamy.

- ① Zapoznaj się dokładnie i przestrzegaj instrukcji obsługi.
- ② Zachowaj instrukcję, kartę gwarancyjną, dowód zakupu.
- ③ Korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
- ④ W przypadku problemów z urządzeniem skontaktuj się z Producentem.
- ⑤ Nie dokonuj samodzielnych napraw lub modyfikacji.
- ⑥ Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane bezpłatnie.

Wszelkie wady lub usterki zostaną usunięte w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, liczonego od chwili dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu producenta.

Ograniczenia

Gwarancja nie zostanie uznana, w przypadku mechanicznych uszkodzeń wynikających z nieuwagi lub zdarzeń losowych.

W przypadku używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i specyfikacją.

Baterie są materiałami eksploatacyjnymi, gwarancja obejmuje 6 miesięcy. Baterii nie można wymienić poza autoryzowanym serwisem.

Dane kontaktowe

DIFORO Brand

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
+48 453 271 100

Godziny konsultacji : 08:00 ~ 16:00
(Od poniedziałku do piątku)

PRODUCENT

DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLSKA

www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270, KRS 0000800189

Karta gwarancyjna

	Model				
Nazwa produktu	Beauty LED Mask				
Nazwa sprzedawcy		Imię, nazwisko	Adres:	Tel:	Opis usterki
Informacje o kupującym					

Prosimy o dokładne wypełnienie karty gwarancyjnej podczas zgłaszania naprawy.
Dziękujemy za współpracę!