

Przenośny masażer łydek DiF-Press-Mini



Dziękujemy za zakup tego masażera łydek.

Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zwróć szczególną uwagę na środki ostrożności.

Instrukcję przechowuj w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.



Funkcje

Masażer łydek wyróżnia się prostym i nowoczesnym designem oraz łatwą obsługą.

Urządzenie masuje mięśnie łydek poprzez ucisk poduszek powietrznych.

Funkcja podgrzewania zapewnia doskonałe działanie kojące w przypadku:

- obrzęków łydek,
- bólu mięśni nóg po ćwiczeniach,
- potrzeby modelowania i wysmuklania nóg.

To Twój idealny, domowy „masażysta” do codziennej regeneracji i relaksu.

Funkcje użytkowe

Urządzenie jest łatwe w obsłudze i wygodne w użyciu.

Sterowanie obejmuje regulację temperatury oraz wybór trybu pracy.

Ciepły kompres pomaga ukoić obolałe mięśnie nóg.

Dostępne są trzy poziomy intensywności oraz trzy stopnie temperatury, które można dopasować do własnych potrzeb.

Produkt może być używany pojedynczo lub w parze (na jedną lub obie nogi).

Technical parameter

Nazwa produktu: przenośny masażer łydek

Napięcie znamionowe: 5V


Moc znamionowa: 5W

Pojemność baterii: 2500 mAh

Czas ładowania: 3.5 godziny

Czas pracy na baterii: 2-5 godzin

INSTRUKCJA OBSŁUGI

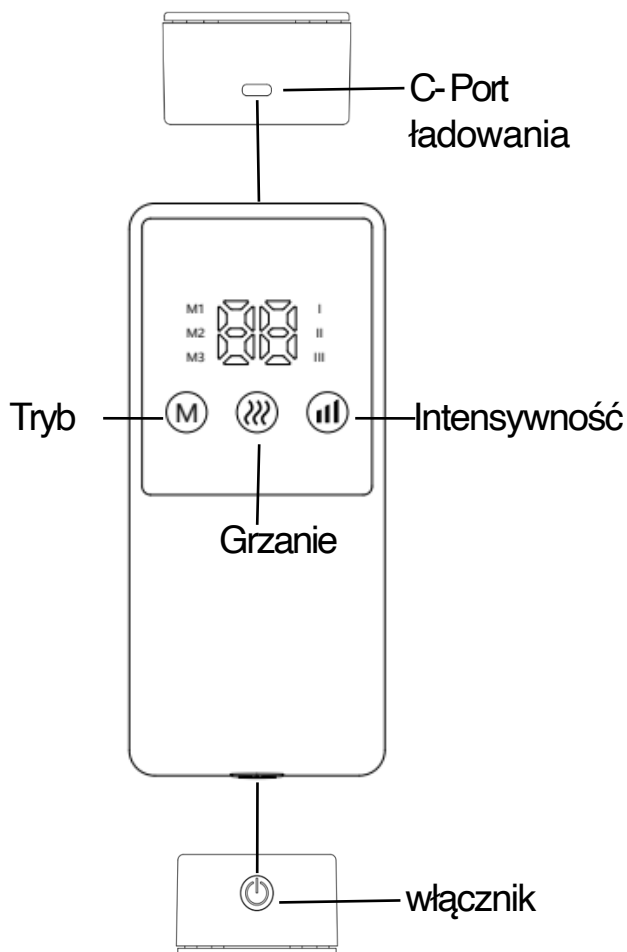

01 /

Przed użyciem sprawdź, czy masażer można uruchomić.

Jeśli urządzenie się nie włącza, naładuj je za pomocą dołączonego kabla ładowania.

02 /

Rozdziel elementy mocujące (rzepy), aby całkowicie rozwinąć masażer.

03 /

Założ masażer na łydkę, upewniając się, że jest założony we właściwym kierunku — z przyciskiem zasilania skierowanym ku górze.

Dostosuj odpowiednie dopasowanie.

Urządzenie można stosować na ubranie.

04 /

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.

Jeden cykl masażu trwa 30 minut.

Urządzenie oferuje:

3 tryby pracy,

3 poziomy intensywności,

3 poziomy podgrzewania: 45°C/ 50°C/ 55°C.

Gdy poziom baterii jest niski, buzzer wyda trzy sygnały dźwiękowe, po czym system automatycznie się wyłączy.

Port ładowania: USB Type-C

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem koniecznie zapoznaj się z poniższymi środkami ostrożności, aby uniknąć ryzyka pożaru, zwarcia lub innych zagrożeń dla użytkownika.

Po pełnym naładowaniu produktu koniecznie odłącz wtyczkę zasilania.

Nie stawaj na urządzeniu.

Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.

Trzymaj przewód zasilający z dala od źródeł ciepła, nie ciągnij urządzenia za przewód i nie dopuszczaj do kontaktu wtyczki z ostrymi lub mokrymi przedmiotami.

Nie używaj produktu w łazience ani w miejscach wilgotnych—może to prowadzić do zwarcia lub awarii.

Nie dopuść do zachlapania panelu sterowania.

Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w środowisku, w którym temperatura przekracza 60°C.

Jeśli produkt jest uszkodzony, natychmiast zaprzestań użytkowania, aby uniknąć dalszych szkód.

Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani wtyczek.

W przypadku uszkodzenia przewodu lub wtyczki należy je wymienić u wykwalifikowanego specjalisty.

Aby uniknąć zwarcia lub innych usterek, nie demontuj żadnych części urządzenia.

Nie używaj urządzenia podczas snu oraz po spożyciu alkoholu.

Nie pozwalaj dzieciom używać urządzenia jako zabawki.

Nie odłączaj przewodu zasilającego w trakcie pracy urządzenia.

FAQi Rozwiązania problemów

Zjawisko / Problem	Możliwe przyczyny i sposoby postępowania
Silnik wydaje dźwięk podczas pracy	Jestto normalne — lekkie odgłosy pracy są dopuszczalne.
Masaż zatrzymał się w trakcie działania	• Upłynął czas ustawiony przez automatyczny timer. • Przypadkowo naciśnięto przycisk na panelu sterowania.
Podgrzewanie wyłącza się podczas pracy	• Upłynął czas automatycznego timera. • Przepomyłkę został naciśnięty przycisk podgrzewania.
Nie można uruchomić urządzenia	• Zasilanie zostało prawidłowo podłączone.
Dioda świeci na zielono podczas ładowania	• Akumulator jest w pełni naładowany, lub • Zasilanie zostało prawidłowo podłączone

Przeciwwskazania i środki ostrożności

1. Produkt **nie jest ognioodporny** – trzymaj go z dala od ognia oraz substancji żrących.
2. **Nie rozbieraj ani nie naprawiaj** urządzenia samodzielnie.
3. Przechowuj urządzenie **poza zasięgiem dzieci**.
4. Produkt **posiada funkcję wodoodporności**, jednak nie należy go zanurzać w wodzie.
5. **Nie naciskaj mocno** na maskę, aby uniknąć jej odkształcenia lub uszkodzenia.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji na wytwarzane przez siebie produkty w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Akcesoria dołączone do oryginalnego produktu podlegają gwarancji w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.

W celu sprawnego działania produktów i reklamacji zalecamy.

- ① Zapoznaj się dokładnie i przestrzegaj instrukcji obsługi.
- ② Zachowaj instrukcję, kartę gwarancyjną, dowód zakupu.
- ③ Korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
- ④ W przypadku problemów z urządzeniem skontaktuj się z Producentem.
- ⑤ Nie dokonuj samodzielnych napraw lub modyfikacji.
- ⑥ Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane bezpłatnie.

Wszelkie wady lub usterki zostaną usunięte w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od chwili dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu producenta.

Ograniczenia

Gwarancja nie zostanie uznana, w przypadku mechanicznych uszkodzeń wynikających z nieuwagi lub zdarzeń losowych.

W przypadku używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i specyfikacją.

Baterie są materiałami eksploatacyjnymi,
gwarancja obejmując 6 miesięcy.
Baterii nie można wymienić poza
autoryzowanym serwisem.

Dane kontaktowe

DIFORO Brand

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
+48 453 271 100

Godziny konsultacji : 08:00 ~ 16:00
(Od poniedziałku do piątku)

PRODUCENT

DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowiń, POLSKA

www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270. KRS 0000800189

Karta gwarancyjna

Nazwa produktu		Beauty LED Mask	Model
Nazwa sprzedawcy			
Informacje o kupującym	Imię, nazwisko		
	Adres:		
	Tel:		
Opis usterki			

Prosimy o dokładne wypełnienie karty gwarancyjnej podczas zgłaszania naprawy.
Dziękujemy za współpracę!