




INTELIGENTNA WAGA ŁAZIENKOWA
SMART BODY SCALE

SIENA PS636

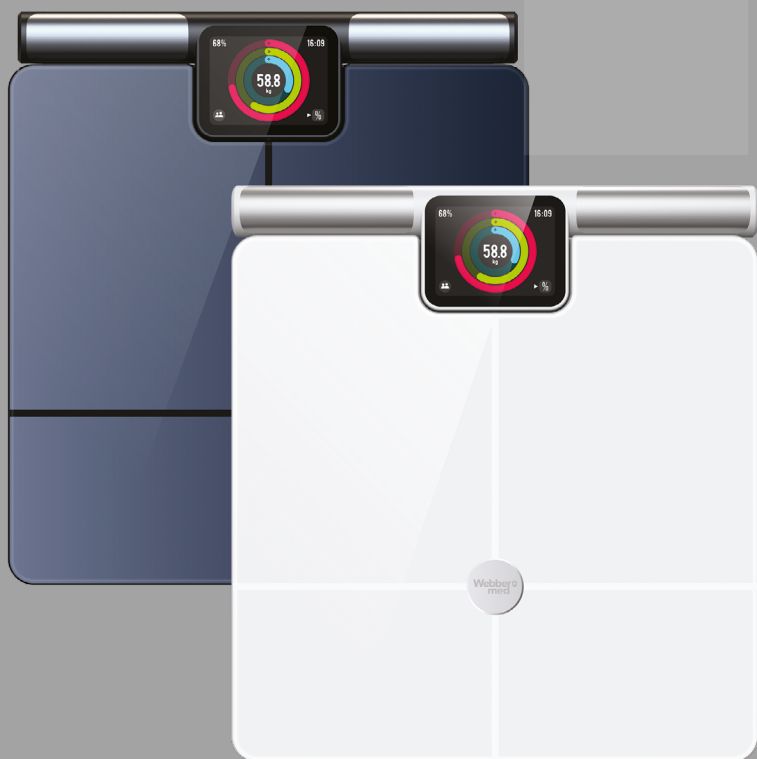

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENG

USER MANUAL

Dziękujemy za zakup Inteligentnej Wagi Łazienkowej
SIENA PS636.

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie tysięcy
zadowolonych klientów Webber Med.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji,
aby zapewnić wydajne i przyjemne korzystanie
z urządzenia.

SPIS TREŚCI

I.	Wskazówki bezpieczeństwa	4
II.	Specyfikacja techniczna	5
III.	Opis i funkcje urządzenia	5
IV.	Aplikacja i jej instalacja	6
V.	Pomiary na wadze	8
VI.	Instalacja i używanie baterii	10
VII.	Rozwiązywanie problemów	11
VIII.	Warunki gwarancji	12
	 MANUAL	16

I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Pomiary mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy ich traktować jako porada medyczna. UWAGA: Przed użyciem przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.
2. WAŻNE: Nie należy używać tego produktu w ciąży ani w przypadku wszczepienia urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, sztuczne płuca lub przenośne urządzenia EKG. Staby prąd używany do pomiaru tkanki tłuszczowej może zakłócać działanie urządzeń medycznych i powodować poważne konsekwencje.
3. Podczas korzystania z produktu elektronicznego należy zachować następujące podstawowe środki ostrożności: UWAGA: Nieprzestrzeganie wszystkich środków ostrożności może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.
4. Przed użyciem należy zadbać o to, aby stopy były suche i czyste.
5. Należy ustawić wagę poziomo na płaskiej, równej i twardej płaszczyźnie.
6. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy wykonywać pomiary codziennie o tej samej porze.
7. Nie należy używać produktu po intensywnym wysiłku fizycznym.
8. Produkt może być poddawany jedynie działaniu nacisku statycznego, dlatego nie należy wskakiwać na wagę w celu zważenia.
9. Nie należy używać rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia produktu, należy używać ściereczki zwilżonej wodą i nie moczyć obudowy wagi.
10. Nie należy kłaść niczego na wadze, jeśli nie jest używana.
11. Surowo zabrania się rozmontowywania, zgniatania, przekuwania, zwierania produktu, wrzucania go do wody, ognia lub narażania na działanie temperatury wyższej niż 60°C (140°F).
12. Produkt jest podatny na uszkodzenia i niebezpieczny w przypadku uderzenia lub upuszczenia.
13. Nie należy używać urządzenia w zakurzonej, wilgotnej, brudnej przestrzeni ani w pobliżu pól magnetycznych, aby uniknąć awarii wewnętrznych obwodów urządzenia.
14. Należy używać wagi tylko w zakresie temperatur od 5°C do 40°C. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura otoczenia może spowodować awarię urządzenia.
15. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia, takich jak grzejniki elektryczne, kuchenki mikrofalowe, piekarniki, podgrzewacze wody, piece, świece ani innych miejsc, które mogą generować wysoką temperaturę.
16. Nie mierzyć, gdy ciało lub stopy są mokre, ponieważ może to spowodować po-

ślizgnięcie i upadek, niedokładne wyniki pomiaru, przedostanie się wody do urządzenia i inne usterki.

17. Nie używać na mokrym podłożu ani w miejscach narażonych na zawilgocenie.
18. Nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysoką temperaturę.
19. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenie było zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny też wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	PS636
Zasilanie	Baterie 4 x AAA / 1.5 V
Max obciążenie	180 kg
Wymiary	300 x 34.5 x 331 mm
Waga netto	2.4 kg

III. OPIS I FUNKCJE URZĄDZENIA

1. Ten produkt posiada kolorowy wyświetlacz TFT i jest wyposażony w precyzyjne czujniki do pomiaru wagi. Posiada funkcję automatycznej aktywacji po naciśnięciu szyby i może mierzyć i wskazywać 57 parametrów składu ciała.
2. Waga wyposażona jest w antypoślizgowe, hartowane szkło ITO, zapewniające bezpieczny, stabilny i stylowy pomiar składu ciała – idealny do użytku domowego.
3. Obsługuje także pomiar małych obiektów (np. opakowań).
4. Ważony przedmiot/osoba nie powinny przekraczać zakresu znamionowego (180 kg), aby uniknąć uszkodzenia elementów mierzących oraz szklanej konstrukcji.
5. Nie należy stawiać z boku wagi ani na nią wskakiwać, aby uniknąć obrażeń.

6. Nie należy czyścić produktu gorącą wodą ani olejkami eterycznymi.
7. Produkt nie jest wodoodporny, należy unikać jego używania w wilgoci i mycia bezpośrednio wodą po użyciu, aby uniknąć uszkodzeń.

WYŚWIETLANE PARAMETRY


Waga/ Tętno / BMR /BMI/ Masa tłuszczowa w %/ Wskaźnik mięśni szkieletowych / Masa mięśniowa / Wskaźnik białka / Masa białkowa / Wskaźnik wody / Całkowita ilość wody / Wskaźnik tkanki tłuszczowej podskórnej/ Masa tłuszczu podskórnego / Masa tłuszczu lewej ręki / Masa tłuszczu prawej ręki / Masa tłuszczu w lewym ramieniu / Masa tłuszczu w prawym ramieniu / Procent mięśni w lewym ramieniu / Procent mięśni w Prawym ramieniu /Masa mięśniowa w lewym ramieniu /masa mięśniowa w prawym ramieniu / Stosunek tłuszczu w lewej nodze / Stosunek tłuszczu w prawej nodze / Masa tłuszczu w lewej nodze / Masa tłuszczu w prawej nodze / % mięśni w lewej nodze / % mięśni w prawej nodze / Masa mięśniowa w lewej nodze / Masa mięśniowa w prawej nodze / Stosunek tłuszczu tułowia / Masa tłuszczu tułowia / % mięśni w tułowiu / masa mięśniowa w tułowiu / Masa wody wewnątrzkomórkowej / Masa wody zewnątrzkomórkowej / Wskaźnik mięśni szkieletowych / Masa mięśni szkieletowych / Stopień otyłości / Poziom otłuszczenia / Kontrola tłuszczu / Masa standardowa / Kontrola wagi / Kontrola mięśni / Idealna masa ciała / Masa beztłuszczowa / Tłuszcz trzewny / Masa kostna / Wskaźnik mięśni szkieletowych / Typ ciała / Wiek biologiczny / Ocena zdrowia / Ocena w punktach / Masa komórek ciała / Składniki mineralne w ciele / Szacowany wskaźnik WHR / Zalecane dzienne spożycie.

IV. APLIKACJA I JEJ INSTALACJA


1. Wyszukaj aplikację **Unique Health** w sklepie Android App Store lub Apple App Store albo zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację i połączyć się z urządzeniem.



2. Przed połączeniem aplikacji z inteligentną wagą, sprawdź czy Twoje urządzenie spełnia poniższe wymagania dla urządzeń iPhone/iPad touch z systemem iOS 8.0 lub nowszym. Urządzenia mobilne z systemem Android 4.3 lub nowszym i Bluetooth 4.0. Pasma Wi-Fi 2.4 G.
3. Przed podłączeniem i użyciem upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana, zanim będzie można normalnie korzystać z wagi. Delikatnie naciśnij na szybę wagi, aby podświetlić ekran, i upewnij się, że Bluetooth, Wi-Fi 2.4 G i pozycjonowanie GPS są włączone.
4. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym i otwórz aplikację Unique Health, aby przejść do interfejsu. Użytkownicy korzystający z wagi po raz pierwszy muszą zaakceptować umowę użytkownika przed kontynuowaniem.
5. Użyj aplikacji, wejdź na stronę główną i zaloguj się/zarejestruj. Przy pierwszym użyciu ustaw prawidłowe parametry osobiste dla bieżącego użytkownika.

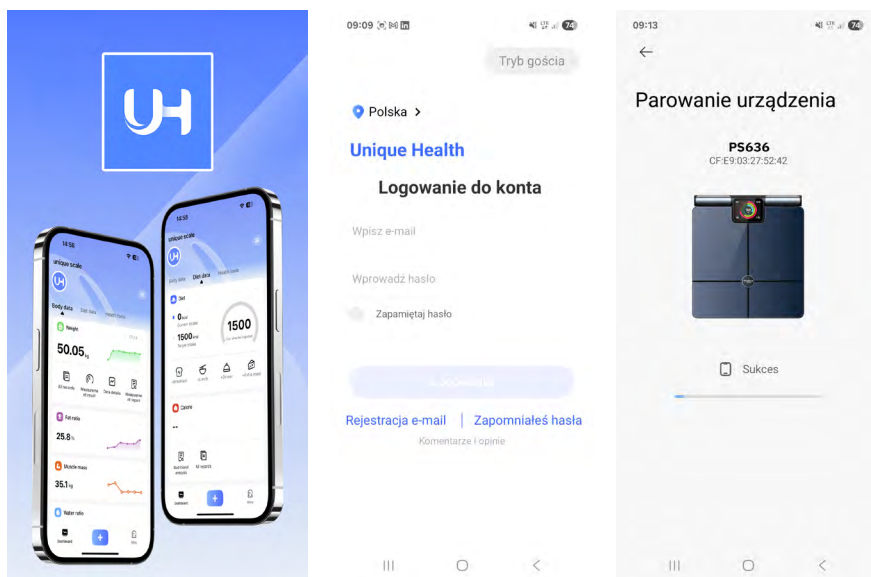

6. Po wejściu do interfejsu aplikacji kliknij [Moje] – [Zarządzanie sprzętem] i potwierdź, czy urządzenie zostało powiązane.

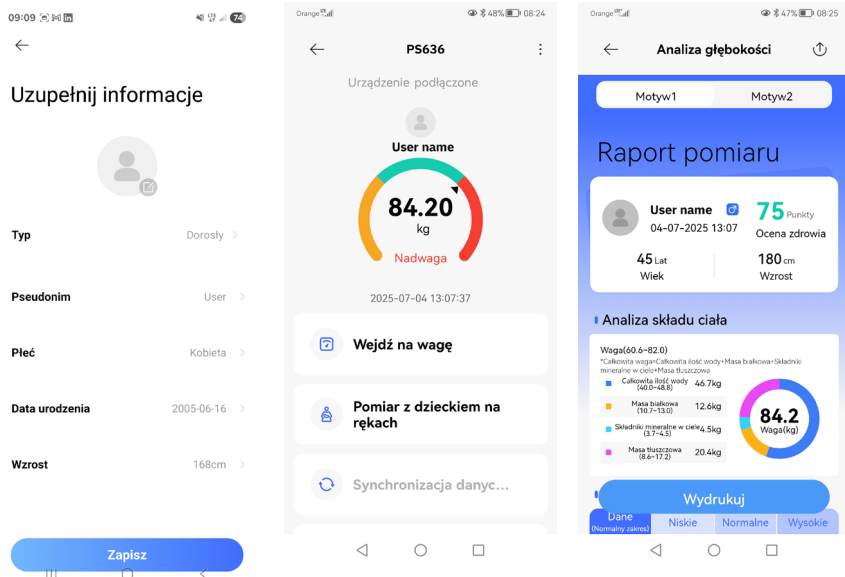

V. POMIARY NA WADZE


- W przypadku osób poniżej 18 roku życia wyniki pomiarów mają charakter wyłacznie orientacyjny ze względu na szybki wzrost.
- U pacjentów dializowanych, osób z obrzękami lub osób powyżej 80. roku życia wyniki należy je traktować wyłacznie jako orientacyjne.
- Zawsze należy wyzerować wagę przed użyciem: delikatnie stąpnij na wagę i zejź z niej. Wyświetlacz automatycznie powróci do wartości „0,0 kg”.
- Produkt włącza się za pomocą indukcji ciśnieniowej. Po umieszczeniu na twardym i płaskim podłożu, ekran włączy się po wykryciu ciężaru powyżej 3 kg.

KONWERSJA JEDNOSTEK

Po połączeniu aplikacji mobilnej z wagą, przejdź do interfejsu ustawień parametrów i wybierz jednostkę kg lub funty.

PRAWIDŁOWA POSTAWA NA WADZE

Podczas pomiaru na wadze obie stopy są naturalnie rozłożone po obu stronach, ze środkowym oznaczeniem jako punkt wyznaczający podział stron L/P. Przód stopy znajduje się na przedniej elektrodzie ITO, a pięta na drugiej połowie elektrody ITO.



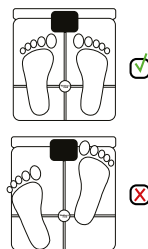



UWAGA

Pomiaru należy dokonywać tylko bosymi stopami, tak aby skóra stóp równomiernie stykała się z górną szybą wagi. Przed dotknięciem elektrody w celu wykonania pomiaru należy zdjąć plastikową torebkę z opakowania produktu. Jeśli waga została zmierzona kilka razy z rzędu, należy ponownie wykonać pomiar, gdy ekran powróci do „0,00”.

ROZPOCZĘCIE POMIARÓW

Rozpocznij pomiar na wadze. Stój nieruchomo trzymając uchwyt obiema rękami wyciągniętymi na wprost na wysokości klatki piersiowej. Gdy waga się ustabilizuje, wartość na wyświetlaczu wagi zamiga trzy razy, a następnie przejdzie w tryb pomiaru tkanki tłuszczowej. Poczekać, aż wszystkie dane pomiarowe przestaną migać i zostaną zablokowane, a następnie zostaną wyświetlone synchronicznie na wyświetlaczu urządzenia i w interfejsie aplikacji na telefonie komórkowym. Po zakończeniu pomiaru obudowa wagi wyłączy się automatycznie po 10 sekundach wyświetlania.

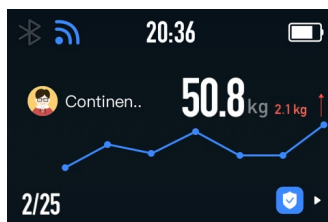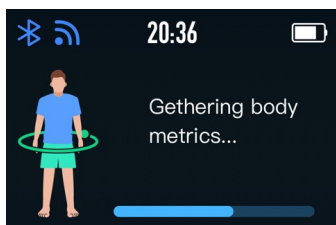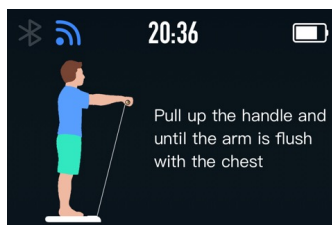

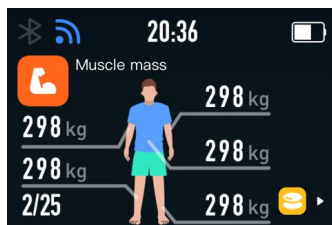

WYSZUKIWANIE PEŁNYCH DANYCH POMIAROWYCH

Wejdź na stronę główną w aplikacji Unique Health, kliknij interfejs z listą wartości pomiarów, aby wyświetlić szereg danych dotyczących pomiarów ciała.

POMIAR Z DZIECKIEM NA RĘKACH

1. Wybierz w aplikacji „Pomiar z dzieckiem”.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji: najpierw zważ osobę dorosłą, a następnie wróć na wagę, trzymając dziecko. Gdy waga się ustabilizuje, wyświetli się waga dziecka.
3. Uwaga: Aby powrócić do pomiarów osoby dorosłej, wróć do „Panelu głównego aplikacji” i zmień użytkownika.

VI. INSTALACJA I UŻYWANIE BATERII

1. Otwórz komorę baterii na spodzie wagi i włóż baterie, zachowując prawidłową biegunowość.
2. Gdy na ekranie wyświetli się komunikat „Lo”, należy niezwłocznie wymienić baterie.
3. Jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami płynu z baterii.
4. UWAGA: Należy używać baterii o napięciu 1,5 V, akumulatorów również 1,5 V. Te o napięciu 1.2 V mogą powodować nieprawidłowe działanie sprzętu.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

1. W przypadku braku aktywności waga wyłączy się automatycznie po 10 sekundach.
2. Jeśli obciążenie przekroczy maksymalny zakres, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Err”, a waga wyłączy się automatycznie po 5 sekundach.

3. Waga wyłączy się również automatycznie w przypadku wystąpienia błędu pomiaru tkanki tłuszczowej.

PRZECHOWYWANIE

1. Przechowuj wagę z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
2. Nie wystawiaj wagi na działanie wysokich temperatur.
3. Nie umieszczaj wagi w wilgotnym otoczeniu.

VII. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku problemów podczas użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Jeśli produkt jest uszkodzony i nie można go używać, skontaktuj się z serwisem.

MOŻLIWY PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie można uruchomić urządzenia.	Sprawdź czy baterie są dobrze włożone i naładowane.
Wyświetla się komunikat „FAIL” – konfiguracja sieci Wi-Fi nie powiodła się.	Skonfiguruj sieć ponownie.
Wyświetlanie danych podczas pomiaru jest nieprawidłowe	Wykonaj pomiar boso, dbając o czystość podeszw stóp.
Nie udało się uzyskać impedancji poprzez pomiar tkanki tłuszczowej.	Należy ponownie wykonać pomiar na wadze, poprawnie trzymaj wyciągany uchwyt wagi, dwoma rękoma na wysokości klatki piersiowej.
Pokazuje się ikonka wykrzyknika.	Oznacza przekroczoną dopuszczalną masę ważonej osoby, nie przekraczaj 180 kg.
Brak obrazu na ekranie, błędy, brakujące ikonki i grafiki.	Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony. Może być konieczne aby dokonać ponownego parowania wagi z telefonem.
Nagłe zatrzymanie podczas pracy.	Zbyt długie ciągłe użytkowanie może aktywować zabezpieczenie przed przegrzaniem produktu. Po ostygnięciu produktu ponownie naciśnij przycisk wyłączenia.

VIII. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Polski przez zakład serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją.
2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie i wymiana filtrów itp.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu Producenta: przez stronę:

www.webber.com.pl/reklamacje lub telefonicznie: 61 1020 492.

3. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 - b. zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
 - c. naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.
4. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi zakład serwisowy.
5. Reklamujący udostępnia zakładowi serwisowemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Niesprawne urządzenie z dokładnym opisem usterki należy przesać na adres serwisu:

Metrex – Serwis, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, tel. 61 1020 492.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

1. Przewód zasilający, sieciowy, żarówki, baterie itp... Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz sprzętu, korozja, pyły itp.).
2. Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczony do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Producent:

METREX

ul. Grunwaldzka 229

60-179 Poznań, PL

www.webberplus.com

RoHS

