

Instrukcja obsługi

Waga łazienkowa

Body Energy



Item No. 3415

Oficjalny dystrybutor marki Caso Germany na terenie Polski

TERABAJT Mateusz Reszka

Kruszewska 23

15-641 Krupniki

email: info@caso-germany.pl

www: www.caso-germany.pl

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Caso Germany (oficjalny dystrybutor TERABAJT Mateusz Reszka) żadna część niniejszej instrukcji nie może być wydawana ani powielana przez kopiowanie, drukowanie, fotografowanie lub w jakikolwiek inny sposób.

1 Instrukcja obsługi.....	4
1.1 Informacje ogólne.....	4
1.2 Informacje o instrukcji.....	4
1.3 Ostrzeżenia.....	4
1.4 Ograniczenia odpowiedzialności.....	5
1.5 Ochrona praw autorskich.....	5
2 Bezpieczeństwo.....	5
2.1 Przeznaczenie produktu.....	6
2.2 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	6
2.3 Źródła zagrożenia.....	7
2.3.1 Niebezpieczeństwo poparzenia.....	7
2.3.2 Niebezpieczeństwo przepięcia elektrycznego.....	7
3 Uruchomienie.....	7
3.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	7
3.2 Zakres kontroli dostaw i transportu.....	7
3.3 Rozpakowywanie.....	8
3.4 Zalecenia dotyczące pakowania.....	8
3.5 Ustawienia.....	8
3.5.1 Wymagane ustawienia.....	8
3.6 Podłączenie do prądu.....	9
4 Wygląd i funkcjonalność.....	9
4.1 Przegląd urządzenia.....	9
4.2 Panel sterowania.....	10
4.4 Tabliczka znamionowa.....	10
5 Eksploatacja i obsługa.....	10
5.1 Przed pierwszym użyciem.....	10
5.2 Regulacja twardości sterowana czasowo.....	11
5.3 Gotowanie jajek.....	12
6 Czyszczenie i konserwacja.....	12
6.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	12
6.2 Czyszczenie.....	13
7 Rozwiązywanie problemów.....	13
7.1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa.....	13
7.2 Problem i rozwiązanie.....	13
8 Utylizacja zużytego sprzętu.....	14
9 Dane techniczne.....	14

1 Instrukcja obsługi

1.1 Informacje ogólne

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby można było bezpiecznie korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia.

Życzymy przyjemnego użytkowania!

1.2 Informacje o instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową wagi i dostarczy ważnych informacji dotyczących pierwszego uruchomienia, bezpieczeństwa, przeznaczenia i konserwacji urządzenia.

Instrukcja obsługi musi być dostępna w każdym momencie. Z niniejszą instrukcją obsługi musi się zapoznać każda osoba, która będzie obsługiwała urządzenie, osoba ta musi stosować się do wymagań:

- Uruchomienia
- Działania
- Rozwiązywania problemów
- Czyszczenia

Należy przechowywać instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu i przekazać ją następnemu właścicielowi wraz z urządzeniem.

1.3 Ostrzeżenia

▲GEFAHR

Niebezpieczeństwo

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

► Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci.

▲VORSICHT

Uwaga

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń.

► Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń.

HINWEIS

Wskazówka

Taka ikona oznacza dodatkowe informacje, które ułatwią obsługę urządzenia.

1.4 Ograniczenia odpowiedzialności

Wszystkie dane techniczne i uwagi w odniesieniu do instalacji, obsługi, czyszczenia są całkowicie aktualne w momencie druku tej instrukcji. Instrukcja została sporządzona z najwyższą starannością bazując na latach doświadczeń.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

- Nieprzestrzegania instrukcji
- Wykorzystania do innych celów niż wymienione w niniejszej instrukcji
- Napraw wykonywanych przez nieautoryzowane serwisy
- Modyfikacji technicznych
- Używania nieoryginalnych części zamiennych

Modyfikacje urządzenia nie są zalecane i nie są objęte gwarancją.

1.5 Ochrona praw autorskich

Ta instrukcja jest chroniona prawami autorskimi.

Braukmann GmbH rezerwuje wszystkie prawa do niniejszej instrukcji, włączając jakikolwiek sposób kopiowania, nawet częściowy.

Braukmann GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości oraz zmian technicznych.

2 Bezpieczeństwo

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa, do których należy się stosować obsługując urządzenie.

Urządzenie jest zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Niewłaściwe używanie może doprowadzić do uszkodzeń ciała lub mienia.

2.1 Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych do:

- Ważenia

Używanie urządzenia do innych celów niż wyżej wypisane uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

▲WARNING

Ostrzeżenie

Zagrożenie w przypadku niezamierzonego użycia!

Zagrożenia mogą pochodzić z urządzenia, jeżeli jest ono używane niezgodnie z instrukcją.

- ▶ Należy używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- ▶ Należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Roszczenia wszelkiego rodzaju ze względu na szkody wynikające z nieprzewidzianych zastosowań są wyłączone.

2.2 Ogólne informacje o bezpieczeństwie

HINWEIS

Wskazówka

Należy zwrócić uwagę na następujące ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

- ▶ Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie nie posiada uszkodzeń. Nigdy nie można używać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Osoby, które nie są w stanie obsługiwać urządzenia z powodu jakichkolwiek fizycznych, umysłowych lub mechanicznych niepełnosprawności, mogą korzystać tylko z urządzenia pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją osoby odpowiedzialnej.
- ▶ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- ▶ Tylko przeszkoleni przez producenta serwisanci mogą naprawiać urządzenie.
- ▶ Tylko autoryzowany serwis może wykonywać naprawy w czasie trwania okresu gwarancji, w przeciwnym razie uprawnienia gwarancyjne będą nieważne.
- ▶ Uszkodzone części muszą być wymienione na oryginalne części zamienne, tylko takie części dają pewność, że wymogi bezpieczeństwa zostaną zachowane.
- ▶ Nie można zanurzać urządzenia lub skakać na wadze, w przeciwnym razie waga może być łatwo uszkodzona.
- ▶ Podczas ważenia należy zachować równowagę.
- ▶ Nie należy przeciążać urządzenia, w przeciwnym razie czujnik ulegnie uszkodzeniu.
- ▶ Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej.

3 Uruchomienie

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pierwszego uruchomienia urządzenia. Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć zagrożeń.

3.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

⚠️ **WARNUNG**

Ostrzeżenie

Podczas uruchomienia urządzenia mogą powstać szkody!

Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć niebezpieczeństwa:
Opakowanie nie może być używane do zabawy, istnieje ryzyko uduszenia.

3.2 Zakres kontroli dostaw i transportu

Waga jest dostarczana z następującymi komponentami:

- Waga body Energy
- Instrukcja obsługi

HINWEIS

Uwaga

- ▶ Należy dokładnie obejrzeć opakowanie czy nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń
- ▶ Należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o zaobserwowanych uszkodzeniach lub niekompletnym wyposażeniu

3.3 Rozpakowywanie

Aby rozpakować urządzenie należy:

- Wyjąć urządzenie z opakowania oraz usunąć wszystkie materiały zabezpieczające.

3.4 Zalecenia dotyczące pakowania

Opakowanie chroni urządzenie podczas transportu. Opakowanie jest wytworzone z przyjaznych środowisku materiałów oraz może być łatwo przetworzone.



Opakowanie, które nie jest dłużej potrzebne można przekazać do punktów recyklingu.

HINWEIS

Uwaga

- ▶ Jeżeli to możliwe należy zachować oryginalne opakowanie w okresie trwania gwarancji, aby w razie potrzeby móc dobrze zabezpieczyć urządzenie w razie wysyłki do serwisu.

3.5 Ustawienia

3.5.1 Wymagane ustawienia:


W celu zapewnienia bezproblemowej pracy należy zastosować się do poniższych wymagań:

- Urządzenie musi być ustawione na płaskim, poziomym podłożu.

4 Wygląd i funkcjonalność

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonalności urządzenia.

4.1 Zasilacz

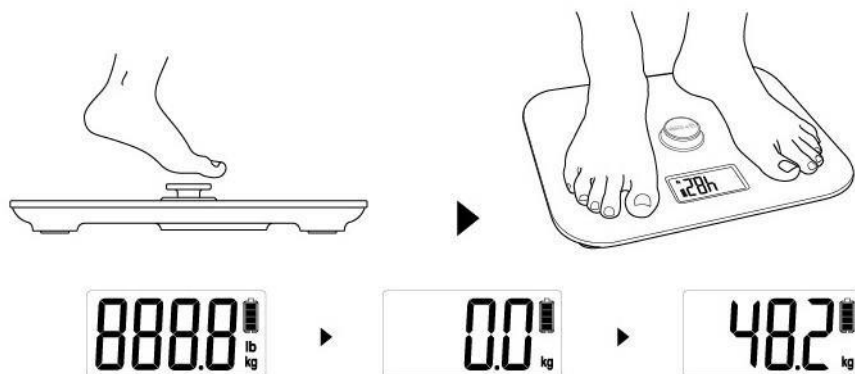

Naciśnij stopą lub dłonią przycisk, aby w pełni naładować kondensator przy użyciu technologii dynamo.

Ryzyko zmiżdżenia!

Nie dotykaj obszaru pod przyciskiem podczas jego naikksania, możesz zmiądzzyć palce u rąk i nóg.



4.2 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

5 Eksploatacja i obsługa

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące obsługi urządzenia.

5.1 Działanie

W tym rozdziale znajdują się ważne informacje dotyczące obsługi urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć niebezpieczeństw i uszkodzeń.

5.2 Konfigurowanie urządzenia

Należy umieścić wagę na płaskim i twardym podłożu. Należy umieścić zawsze w tym samym miejscu, aby uniknąć różnic w pomiarach spowodowanych zmianą podłoża.

5.3 Wybór jednostek masy i wielkości




Aby dokonać zmiany, naciśnij przycisk z tyłu urządzenia – zamiana pomiędzy kg a funtem.

HINWEIS

Uwaga

- ▶ Przed ważeniem wybierz jednostkę masy. Podczas użytkowania nie ma możliwości przełączenia pomiędzy jednostkami.

5.4 Wyłączanie / włączanie

Naciśnij przycisk , aż kondensator zostanie całkowicie naładowany. Wyświetlacz zaświeci się.

Waga wyłącza się automatycznie po około 80 sekundach.

5.5 Ważenie

Położ wagę na twardej i płaskiej powierzchni. Wejdź na wagę stabilnie, gdy na wyświetlaczu pojawi się 0,0 kg, poczekaj, aż na ekranie wyświetli się Twoja waga. Waga wyłącza się automatycznie po około 80 sekundach.

5.6 komunikaty o błędach



Wskazanie przeciążenia

Gdy waga zostanie przeciążona (ponad 200kg), na ekranie pojawi się komunikat „Err”.



Niskie obciążenie kondensatora

Gdy ekran to wskaże, wyłącz się automatycznie po 10 sekundach.

6 Czyszczenie i konserwacja

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące czyszczenia oraz konserwacji urządzenia.

Stosowanie się do poniższych uwag pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia.

6.1 Czyszczenie

- Nie używaj produktów chemicznych
- Do czyszczenia powierzchni wagi należy używać wilgotnej szmatki.

HINWEIS

Uwaga

- ▶ Do czyszczenia wagi używaj wilgotnej szmatki. Nie pozwól, aby woda dostała się wnętrza urządzenia.
- ▶ Do czyszczenia wagi nie używaj środków chemicznych.

7 Utylizacja zużytego sprzętu

Zużyty sprzęt często zawiera w sobie wartościowe materiały. Jednakże często zawiera również szkodliwe substancje, które były niezbędne ze względów funkcjonalnych lub bezpieczeństwa.



Jeżeli zużyty sprzęt zostanie umieszczony w pojemnikach na odpady nie recyklingowe mogą spowodować szkody dla człowieka lub środowiska.

HINWEIS

Wskazówka

- ▶ Należy wykorzystać punkty zbiórki zużytego sprzętu.
- ▶ Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy się upewnić, że dzieci nie mają do niego dostępu.

8 Dane techniczne

Urządzenie	Waga łazienkowa
Nazwa	Body Energy
Item No.:	3415
Obciążenie	Max. 200 kg
Wymiary (D x W x Sz):	336 mm x 35 mm x 295 mm