

Götze & Jensen



WAGA OSOBOWA BS502*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

* - instrukcja dotyczy dwóch modeli wag BS502; BS502W

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Zanim użytkownik stanie na wagę należy upewnić się, że jej powierzchnia jest sucha, aby nie poślizgnąć się na śliskiej płycie.
5. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
6. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników i nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach.
7. Nie należy ingerować we wnętrze i konstrukcji wagi.
8. Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na płycie wagi w trakcie przechowywania.
9. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
10. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
11. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na żywotność urządzenia.
12. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
13. Nie należy ładować baterii nie przewidzianych do ładowania,
14. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii.
15. Należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych.
16. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.

17. UWAGA! Ryzyko zadławienia. Należy trzymać baterie z dala od dzieci,
18. W przypadku połącznięcia baterii należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
19. Nie należy narażać baterii na nadmierne ciepło oraz zimno.
20. Nie należy spalać baterii.
21. W przypadku nie używania urządzenia przez dłuższy czas należy z niego wyjąć baterie.
22. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującym prawem.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	BS502 / W
Wyświetlacz:	LCD
Bateria:	2 x CR2032
Pamięć osobistych ustawień:	10 osób
Minimalne obciążenie [kg]:	5
Maksymalne obciążenie [kg]:	180
Dokładność pomiaru [g]:	do 100
Jednostki miary:	kg/lb/st
Wiek użytkownika:	10-80 lat
Wzrost użytkownika [cm]:	100-240

OPIS URZĄDZENIA

1. Przyciski sterujące
2. Metalowe płytki (elektrody)
3. Wyświetlacz LCD
4. Podstawa
5. Nóżki
6. Schowek na baterie




INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE


1. Wyjmij wagę z opakowania. Wymagane baterie 2 x CR2032 znajdują się wewnątrz urządzenia na odwrocie wagi. Baterie są zabezpieczone arkuszem izolacyjnym. Należy otworzyć schowek na baterie i usunąć arkusz izolacyjny z baterii.
2. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni aby zapewnić dokładność.
3. Aby ustawić odpowiednią jednostkę wagi naciskaj przycisk „UNIT” na odwrocie wagi tak długo, aż odpowiednia jednostka pojawi się na wyświetlaczu.
4. Naciśnij przycisk „SET” aby wejść w tryb ustawień.



5. Za pomocą przycisków lub ustaw numer profilu użytkownika. Naciśnij przycisk aby potwierdzić.

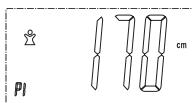

6. Za pomocą przycisków lub wybierz płeć oraz tryb normalny lub sportowy. Naciśnij przycisk aby potwierdzić.

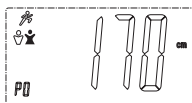

7. Za pomocą przycisków lub ustaw wysokość użytkownika. Naciśnij przycisk aby potwierdzić.



8. Za pomocą przycisków lub ustaw wiek użytkownika. Naciśnij przycisk aby potwierdzić.




9. Po zakończeniu ustawień wyświetlacz wskaże „0.0”.




10. Stań na wadze. Upewnij się, że masz dobry kontakt między nagimi stopami a metalowymi płytkami (elektrodami). Oczekuj na stabilnie wyświetlony wynik pomiaru.




11. Po pomiarze i wyświetleniu ciężaru ciała, waga wyświetli i wygasi poniższy symbol informujący o dokonywaniu analizy składu ciała.

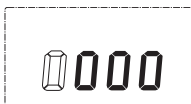

12. Następnie wyniki analizy będą wyświetlane jeden po drugim: tkanki tłuszczowej, wody, BMI, masy mięśniowej, masa kości, zapotrzebowanie na kalorie, waga ciała.

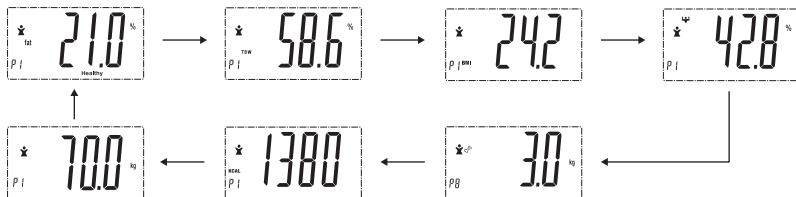

13. Na końcu wyświetlą się informacje o użytkowniku dla potwierdzenia.

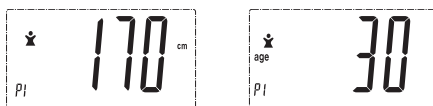

14. Wyniki wyświetlą się dwa razy. Następnie waga wyłączy się automatycznie.

ZALECENIA:

- Upewnij się, że urządzenie znajduje się na równej i płaskiej powierzchni. Unikaj dywanów lub miękkich powierzchni. Nierówne podłogi mogą mieć wpływ na odczyt.
- Dokonuj pomiarów bez ubrań i obuwia, zlecane ważenie przed posiłkami i zawsze o tej samej porze dnia.
- Aby uzyskać większą dokładność, nie zaleca się pomiaru w ciągu 2 godzin od momentu przebudzenia się.

UWAGA! PODCZAS POMIARU WAGI, DOPUSZCZA SIĘ PONIŻSZĄ TOLERANCJĘ BŁĘDU POMIAROWEGO URZĄDZENIA.


50 kg	100 kg	150 - 180 kg
±0.4 kg	±0.5 kg	±0.7 kg

AUTOMATYCZNY ZAKRES IDENTYFIKACJI

1. Jeśli dane użytkownika zostały wprowadzone i zostały dokonane pomiary, przy następnym pomiarze waga rozpozna użytkownika – nie trzeba ponownie wprowadzać danych użytkownika.
2. Stań na wadze. Upewnij się, że masz dobry kontakt między nagimi stopami a metalowymi płytkami (elektrodami).




3. Po pomiarze i wyświetleniu ciężaru ciała, waga wyświetli i wygasi poniższy symbol informując o dokonywaniu analizy składu ciała.

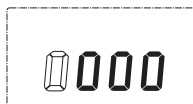

4. Następnie wyświetlą się wyniki: tkanki tłuszczu, wody, BMI, mięśni, kości i kalorii.



5. Jeśli waga wskazuje, że pomiar jest podobny do 2 lub więcej użytkowników, należy użyć przycisków aby wybrać swój profil.

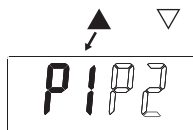

JEDNORAZOWY POMIAR WAGI

Waga posiada funkcję automatycznego włączenia po obciążeniu. Stań na wagę poczekaj na ustabilizowanie pomiaru. Jeżeli pomiar nie jest taki sam lub zbliżony do wagi zapisanego dotychczas profilu po kilku sekundach zniknie.

Wykres wskaźników wody i wykresu mięśni (%)

Wiek	Kobieta (%)				Mężczyzna (%)			
	Niska	Prawidłowa	Wysoka	Mięśnie	Niska	Prawidłowa	Wysoka	Mięśnie
10-15	< 54.0	54.0-59.0	59.0 <	> 44	< 57.0	57.0-62.0	62.0 <	> 46
16-30	< 53.0	53.0-58.0	58.0 <		< 56.0	56.0-61.0	61.0 <	
31-60	< 52.0	52.0-57.0	57.0 <		< 55.0	55.0-60.0	60.0 <	
61-80	< 51.0	51.0-56.0	56.0 <		< 54.0	54.0-59.0	59.0 <	

Wykres wagi kości (kg)

	Kobieta			Mężczyzna		
Waga	< 45kg	45~60kg	60kg <	< 60kg	60~75kg	75kg <
Masa kości	~ 3.0kg	~ 4.2kg	~ 6.5kg	~ 4.5kg	~ 6.0kg	~ 7.5kg

Wykres zapotrzebowania na kalorie (kcal)

Wiek	Kobieta		Mężczyzna	
	Waga (kg)	kcal	Waga (kg)	kcal
10-17	50	1265	60	1620
18-29	55	1298	65	1560
30-49	60	1302	70	1561
50-80	60	1242	70	1505

Wskaźnik BMI

BMI	Niski	Prawidłowy	Wysoki	Nadwaga
	< 18.5	19 - 27	30 - 39	40 <

Z uwagi na naturalną różnicę między ludźmi powyższe wykresy zawierają tylko i wyłącznie wskaźniki szacunkowe.

CZYSZCZENIE

1. Wagę należy czyścić lekko zwilżoną szmatką.
2. Do czyszczenia nie należy używać żrących środków chemicznych.
3. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

WYMIANA BATERII

1. Obróć wagę do góry podstawą. Otwórz schowek na baterie, zwalniając zacisk i podnosząc pokrywę.
2. Wyjmij zużyte baterie i zastąp je nowymi.
3. Zamknij pokrywkę schowka na baterie.

PRZECHOWYWANIE

1. Wytrzyj urządzenie do sucha.
2. Urządzenie przechowuj w pozycji poziomej w suchym bezpiecznym miejscu.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania, wyjmij baterie ze schowka.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Baterie w urządzeniu są słabe lub rozładowane.	Wymień baterie na nowe.
	Nieprawidłowa instalacja baterii.	Umieść baterie w komorze zgodnie z oznaczeniami (+ / -).
Wyświetlacz wskazuje „LO”.	Rozładowana bateria.	Wymień baterie na nowe.
Wyświetlacz wskazuje „Err”.	Maksymalna masa została przekroczona.	Maksymalne obciążenie wagi to 180 kg.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE WAGI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

