

Götze & Jensen



WAGA OSOBOWA BS502*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

* - instrukcja dotyczy dwóch modeli wag BS502; BS502W

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Zanim staniesz na wagę upewnij się, że jest sucha aby nie poślizgnąć się na śliskiej płycie.
2. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
3. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników i nie zanurzać produktu w wodzie.
4. Nie należy próbować ingerować w części i elementy wagi innych niż wymiana baterii.
5. Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej, gdy nie jest używana.
6. Należy unikać nadmiernego uderzenia lub wibracji urządzenia. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na wierzchu wagi.
7. Zawsze używaj baterii zalecanych przez producenta.
8. Wkładaj baterie według wskazań (+ i -) znajdujących się w schowku na baterie.
9. Wyjmij baterie z wagi w przypadku, kiedy nie będziesz używać przez dłuższy czas urządzenia.
10. Upewnij się, że baterie znajdują się z dala od małych dzieci i nie mają one do nich dostępu.
11. W przypadku połknięcia baterii, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
12. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
13. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	BS502 / W
Wyświetlacz:	LCD
Bateria:	2 x CR2032
Pamięć osobistych ustawień:	10 osób
Minimalne obciążenie [kg]:	5
Maksymalne obciążenie [kg]:	180
Dokładność pomiaru [g]:	do 100
Jednostki miary:	kg/lb/st
Wiek użytkownika:	10-80 lat
Wzrost użytkownika [cm]:	100-240

OPIS URZĄDZENIA

1. Przyciski sterujące
2. Metalowe płytki (elektrody)
3. Wyświetlacz LCD
4. Podstawa
5. Nóżki

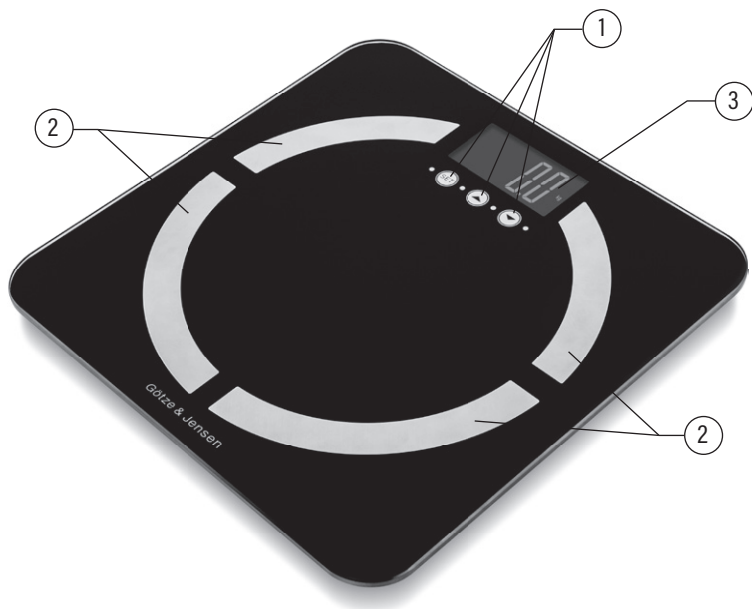





INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE


1. Wyjmij wagę z opakowania. Wymagane baterie 2 x CR2032 znajdują się wewnątrz urządzenia na odwrocie wagi. Baterie są zabezpieczone arkuszem izolacyjnym. Należy otworzyć schowek na baterii i usunąć arkusz izolacyjny z baterii.
2. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni aby zapewnić dokładność.
3. Aby ustawić odpowiednią jednostkę wagi naciskaj przycisk „UNIT” na odwrocie wagi tak długo, aż odpowiednia jednostka pojawi się na wyświetlaczu.
4. Naciśnij przycisk „SET” aby wejść w tryb ustawień.

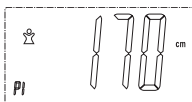

5. Za pomocą przycisków  lub  ustaw numer profilu użytkownika. Naciśnij przycisk  aby potwierdzić.



6. Za pomocą przycisków  lub  wybierz płeć oraz tryb normalny lub sportowy. Naciśnij przycisk  aby potwierdzić.

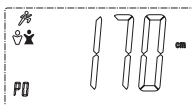

7. Za pomocą przycisków  lub  ustaw wysokość użytkownika. Naciśnij przycisk  aby potwierdzić.



8. Za pomocą przycisków  lub  ustaw wiek użytkownika. Naciśnij przycisk  aby potwierdzić.




9. Po zakończeniu ustawień wyświetlacz wskaże „0.0”.




10. Stań na wadze. Upewnij się, że masz dobry kontakt między nagimi stopami a metalowymi płytkami (elektrodami). Oczekuj na stabilnie wyświetlony wynik pomiaru.




11. Po pomiarze i wyświetleniu ciężaru ciała, waga wyświetli i wygasi poniższy symbol informujący o dokonywaniu analizy składu ciała.

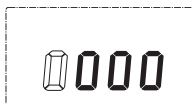

12. Następnie wyniki analizy będą wyświetlane jeden po drugim: tkanki tłuszczowej, wody, BMI, masy mięśniowej, masa kości, zapotrzebowanie na kalorie, waga ciała.

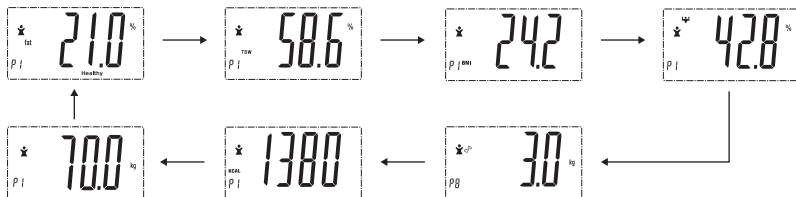

13. Na końcu wyświetlą się informacje o użytkowniku dla potwierdzenia.

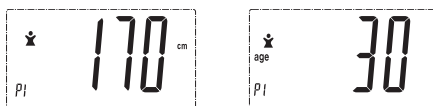

14. Wyniki wyświetlą się dwa razy. Następnie waga wyłączy się automatycznie.

ZALECENIA:

- Upewnij się, że urządzenie znajduje się na równej i płaskiej powierzchni. Unikaj dywanów lub miękkich powierzchni. Nierówne podłogi mogą mieć wpływ na odczyt.
- Dokonuj pomiarów bez ubrań i obuwia, zlecane ważenie przed posiłkami i zawsze o tej samej porze dnia.
- Aby uzyskać większą dokładność, nie zaleca się pomiaru w ciągu 2 godzin od momentu przebudzenia się.

UWAGA! PODCZAS POMIARU WAGI, DOPUSZCZA SIĘ PONIŻSZĄ TOLERANCJĘ BŁĘDU POMIAROWEGO URZĄDZENIA.


50 kg	100 kg	150 - 180 kg
±0.4 kg	±0.5 kg	±0.7 kg

AUTOMATYCZNY ZAKRES IDENTYFIKACJI

1. Jeśli dane użytkownika zostały wprowadzone i zostały dokonane pomiary, przy następnym pomiarze waga rozpozna użytkownika – nie trzeba ponownie wprowadzać danych użytkownika.
2. Stań na wadze. Upewnij się, że masz dobry kontakt między nagimi stopami a metalowymi płytkami (elektrodami).




3. Po pomiarze i wyświetleniu ciężaru ciała, waga wyświetli i wygasi poniższy symbol informujący o dokonywaniu analizy składu ciała.

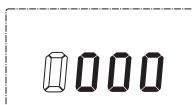

4. Następnie wyświetlą się wyniki: tkanki tłuszczu, wody, BMI, mięśni, kości i kalorii.



5. Jeśli waga wskazuje, że pomiar jest podobny do 2 lub więcej użytkowników, należy użyć przycisków aby wybrać swój profil.

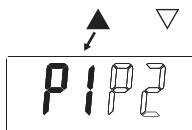

JEDNORAZOWY POMIAR WAGI

Waga posiada funkcję automatycznego włączenia po obciążeniu. Stań na wagę poczekaj na ustabilizowanie pomiaru. Jeżeli pomiar nie jest taki sam lub zbliżony do wagi zapisanego dotychczas profilu po kilku sekundach zniknie.

Wykres wskaźników wody i wykresu mięśni (%)

Wiek	Kobieta (%)				Mężczyzna (%)			
	Niska	Prawidłowa	Wysoka	Mięśnie	Niska	Prawidłowa	Wysoka	Mięśnie
10-15	< 54.0	54.0-59.0	59.0 <	> 44	< 57.0	57.0-62.0	62.0 <	> 46
16-30	< 53.0	53.0-58.0	58.0 <		< 56.0	56.0-61.0	61.0 <	
31-60	< 52.0	52.0-57.0	57.0 <		< 55.0	55.0-60.0	60.0 <	
61-80	< 51.0	51.0-56.0	56.0 <		< 54.0	54.0-59.0	59.0 <	

Wykres wagi kości (kg)

	Kobieta			Mężczyzna		
Waga	< 45kg	45~60kg	60kg <	< 60kg	60~75kg	75kg <
Masa kości	~ 3.0kg	~ 4.2kg	~ 6.5kg	~ 4.5kg	~ 6.0kg	~ 7.5kg

Wykres zapotrzebowania na kalorie (kcal)

Wiek	Kobieta		Mężczyzna	
	Waga (kg)	kcal	Waga (kg)	kcal
10-17	50	1265	60	1620
18-29	55	1298	65	1560
30-49	60	1302	70	1561
50-80	60	1242	70	1505

Wskaźnik BMI

BMI	Niski	Prawidłowy	Wysoki	Nadwaga
	< 18.5	19 - 27	30 - 39	40 <

Z uwagi na naturalną różnicę między ludźmi powyższe wykresy zawierają tylko i wyłącznie wskaźniki szacunkowe.

CZYSZCZENIE

Wagę należy czyścić lekko zwilżoną szmatką. Do czyszczenia nie należy używać żrących środków chemicznych. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „LO”, należy wymienić baterię na nową.
2. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „Err” oznacza to, że maksymalna masa została przekroczona.

WYMIANA BATERII

1. Obróć wagę. Otwórz schowek na baterie, zwalniając zaciski i podnosząc pokrywę.
2. Wyjmij zużyte baterie i zastąp je nowymi.
3. Zamknij pokrywkę schowka na baterie.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.

3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

