

01. BOOSTER PRO wprowadzenie

6 w 1 BOOSTER PRO – rewolucyjna pielęgnacja skóry

BOOSTER PRO to innowacyjne urządzenie, które poprawia wygląd skóry. Zapewnia promienną, jędrną cerę, zmniejsza widoczność porów oraz poprawia objętość i elastyczność. Dzięki wibracjom sonicznym, oferuje kompleksową pielęgnację w jednym produkcie.



Opis Głównych Trybów

*Przed użyciem zapoznaj się ze sposobem użytkowania oraz zalecaną częstotliwością dla każdego trybu.

Tryb Wzmacniania Blasku (Radiance Booster Mode)

BOOSTER MODE

Instrukcje użycia: Nałóż odpowiednią ilość ulubionego kosmetyku (np. serum lub kremu) na skórę i przyłóż końcówkę urządzenia. Wykonuj delikatne, okrężne ruchy, aby pomóc wchłonąć produkt.
Zalecana częstotliwość: 1-3 razy dziennie (5-10 minut na sesję)

Tryb Linii Twarzy (Line MC Mode)

MC MODE

Instrukcje użycia: Nałóż odpowiednią ilość kosmetyku (na skórę i przyłóż końcówkę urządzenia. Przesuwaj ją od wewnętrznej strony twarzy na zewnątrz, trzymając blisko skóry.
Zalecana częstotliwość: 1-3 razy dziennie (5-10 minut na sesję)

Tryb Elastyczności (Elasticity Derma Shot Mode)

DERMA SHOT MODE

Instrukcje użycia: Nałóż odpowiednią ilość kosmetyku na skórę i powoli przesuwaj urządzenie po jej powierzchni. Zatrzymaj się na chwilę w miejscach, które wymagają rozluźnienia mięśni.
Zalecana częstotliwość: 1-3 razy dziennie (5-10 minut na sesję)

Tryb Czyszczenia Porów (Pores Air Shot Mode)

AIR SHOT MODE

Instrukcje użycia: Po oczyszczeniu i osuszeniu skóry, delikatnie przesuwaj krawędź urządzenia po twarzy.
Zalecana częstotliwość: 2-3 razy w tygodniu (5 minut na sesję)

Kolejność Trybów

*Jeśli różne tryby są używane w tym samym dniu, zaleca się stosowanie tej kolejności. Przed użyciem sprawdź zalecaną częstotliwość.

AIR SHOT MODE



BOOSTER MODE



MC MODE



DERMA SHOT MODE

Zalecana częstotliwość:
2-3 razy w tygodniu

Zalecana częstotliwość: 1-3 razy dziennie

WSKAŹNIK LED

*Kolory LED dla każdego trybu są ustawione fabrycznie, a zmiany koloru LED mogą być dokonane tylko przez aplikację AGE-R.



Niebieski



Pomarańczowy



Zielony



Czerwony



Fioletowy

Wibracje Soniczne Dostosowane do Trybu

*Wibrację soniczną można włączyć/wyłączyć tylko za pomocą aplikacji AGE-R.


Tryb Promienności (Radiance Booster Mode)

Wibracje zaprojektowane, aby pomóc głęboko wchłonać produkt do pielęgnacji skóry.



Tryb Elastyczności (Elasticity Derma Shot Mode)

Wibracje odpowiednie do pielęgnacji mięśni.

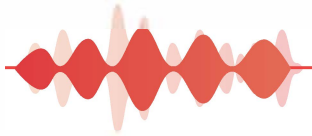


Tryb Linii Twarzy (Line MC Mode)

Wibracje zsynchronizowane z ruchem liftingującym.



Tryb Oczyszczania Porów (Pores Air Shot Mode)

Wibracje przeznaczone do kompleksowej pielęgnacji porów.

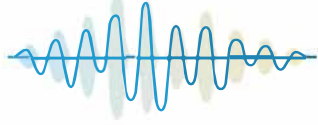

Czujnik Kontaktu ze Skórą

*Ze względu na czuły sensor może on się aktywować, gdy na głowicy urządzenia znajduje się znaczna ilość produktu do pielęgnacji skóry. Aby zapewnić dokładne wykrywanie kontaktu ze skórą, należy trzymać główną część urządzenia tak, jakby obejmowało się ją dłońą dookoła.



Inteligentny i bezpieczny czujnik kontaktu ze skórą

Urządzenie jest wyposażone w zaawansowany czujnik kontaktu ze skórą, który włącza światło LED tylko wtedy, gdy ma kontakt ze skórą, rejestrując czas trwania kontaktu jako czas zabiegu.

02. Łączność Bluetooth

Uzyskaj pełną kontrolę z AGE-R


Od ustawienia preferowanego trybu, intensywności, głośności, wibracji i kolorów LED po rejestrowanie każdego aspektu Twojej pielęgnacji skóry dzięki automatycznym raportom. Korzystaj z niego bez wysiłku i śledź postępy swojej przemiany.

Przegląd funkcji Bluetooth

01

Zdalne sterowanie


Pielęgnacja w prosty i wygodny sposób.

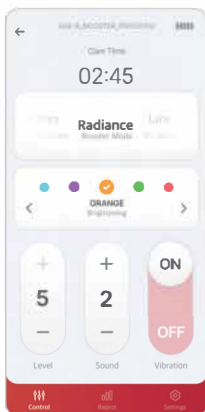

02

Automatyczne raporty


Zmień swoją rutynę pielęgnacyjną w nawyk

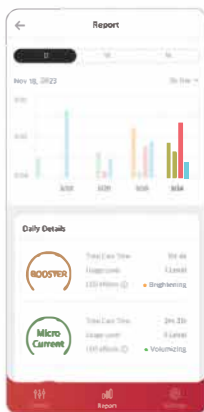

03

Rejestrowanie efektów przed i po użyciu

Sprawdź zmiany po 8 tygodniach stosowania.

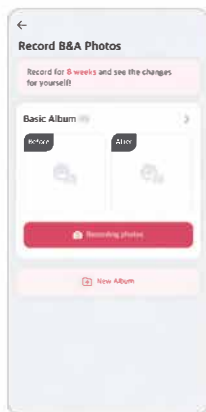

* Dane dotyczące użytkowania zostaną przesłane do raportu tylko wtedy, gdy całkowity czas użycia (czas kontaktu ze skórą) dla każdego trybu wyniesie 20 sekund lub więcej po włączeniu urządzenia.

* Domyślny poziom głośności to poziom 3, a ustawienie 0 (wyciszenie) wyciszy wszystkie efekty dźwiękowe, w tym dźwięk włączania i wyłączania zasilania.

* Poziom głośności oraz status wibracji ON/OFF, które zmienisz w zakładce Control podczas użytkowania, zostaną zapisane jako ustawienia domyślne.



Wykorzystaj w pełni możliwości BOOSTER PRO


Pobierz bezpłatnie aplikację AGE-R już teraz i korzystaj z AGE-R BOOSTER PRO w jeszcze bardziej profesjonalny i wygodny sposób.

* Zeskanuj kod QR lub wyszukaj „AGE-R” w sklepie z aplikacjami.

Instrukcja połączenia Bluetooth

*Upewnij się, że Bluetooth w Twoim smartfonie jest włączony, a urządzenie BOOSTER PRO jest włączone, aby nawiązać połączenie.

01

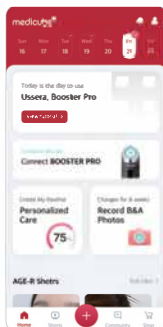

02



03



04



- 1 Otwórz aplikację AGE-R i kliknij „Connect BOOSTER PRO”.
- 2 Włącz Bluetooth w swoim smartfonie i włącz urządzenie BOOSTER PRO.
- 3 Po potwierdzeniu wykrytego urządzenia kliknij ikonę „Connect”.
- 4 Sprawdź, czy pojawi się ekran „Connection Successful” oraz czy słychać dźwięk połączenia Bluetooth z BOOSTER PRO.

Środki ostrożności podczas łączenia przez Bluetooth

1. Zdalne sterowanie

- Funkcja zdalnego sterowania działa tylko po połączeniu z urządzeniem i umożliwia takie funkcje jak zmiana koloru LED, kontrola głośności oraz włączanie/wyłączanie wibracji tylko w obrębie funkcji zdalnego sterowania po połączeniu Bluetooth.
- Ustawienia poziomu głośności i wibracji ON/OFF skonfigurowane w zdalnym sterowaniu zostaną zapisane jako domyślne wartości, ale zmiany koloru LED nie będą zapisane.

2. Raporty użytkownika

Historia użycia, gdy urządzenie jest używane bez połączenia z aplikacją, jest tymczasowo przechowywana w urządzeniu i automatycznie przesyłana do raportów aplikacji po ponownym połączeniu.

Intensywność raportu i specyficzne kolory LED dla trybu są zapisywane jako największy zapisany poziom i kolor.

3. Domyślne zmiany koloru LED dla każdego trybu

Zmiana domyślnego koloru LED dla każdego trybu jest możliwa tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone i można to zrobić w zakładce „Settings”.

4 Błąd połączenia urządzenia

Upewnij się, że urządzenie nie jest połączone z innym smartfonem. Jeśli jest połączone, rozłącz je z aplikacji smartfona, a następnie spróbuj ponownie.

5. Zmiana smartfona

Jeśli chcesz połączyć urządzenie z innym smartfonem, najpierw otwórz aplikację w obecnie połączonym smartfonie. Przejdź do zakładki [BOOSTER PRO Banner] → [Settings] → [Device Disconnect], aby rozłączyć, a następnie spróbuj ponownie połączyć z nowym smartfonem.



Dostępne tylko po połączeniu Bluetooth

Zmiany koloru specyficzne dla trybu | Włączanie/wyłączanie wibracji dźwiękowych | Kontrola głośności | sprawdzanie raportów pielęgnacji

03. Tryb Booster

Tryb Booster, który wspomaga poprawę blasku skóry



Tryb Booster

Ustawienie domyślne | Pomarańczowe LED

Można go używać z różnymi rodzajami produktów do pielęgnacji skóry i masek na twarz. Proszę wybrać najbardziej odpowiednią metodę spośród trzech poniższych metod dotyku i używać zgodnie z instrukcją.

Jak używać



Nawadnianie

Umieść głowicę na skórze i wykonaj okrężne ruchy, zapewniając efekt wzmocnienia.



Wzmacnianie

Naciśnij i przesuwaj głowicę po skórze, jakbyś ją przesuwiał, zapewniając efekt wzmocniający.



Skupienie

Umieść głowicę na skórze i przytrzymaj w jednym miejscu przez 1-2 sekundy, zanim przejdziesz do następnego punktu.

Środki ostrożności przed użyciem

*Przy pierwszym użyciu produktu rozpocznij od najniższego ustawienia i dostosuj w razie potrzeby podczas użytkowania.



Zabronione obszary użycia

Nie stosować na obszarze podniebienia, otwartych ranach ani w miejscach, gdzie przeprowadzono zabiegi lub operacje.



Zalecane obszary do stosowania przy niskim poziomie

Wrażliwe obszary, takie jak oczy, nos i okolice ust, należy stosować przy niskim poziomie.



Częstotliwość stosowania trybu Booster

Zaleca się stosowanie 1-3 razy dziennie, zgodnie z zalecaną metodą użytkowania.



Krok 01

Po oczyszczeniu skóry nałóż odpowiednią ilość produktu do pielęgnacji.



Krok 02

Upewnij się, że głowica urządzenia ma pełny kontakt ze skórą, następnie delikatnie masuj i wchłaniaj produkt do pielęgnacji.



Krok 03

Odwolaj się do metody wzmocnienia i kontynuuj używanie, aż produkt pielęgnacyjny zostanie całkowicie wchłonięty. (1-3 razy dziennie / 5-10 minut na użycie)



Krok 04

Po wchłonięciu produktu pielęgnacyjnego, zakończ zabieg, koncentrując się na wybranych obszarach skóry.

04. Tryb MC

Tryb MC do pielęgnacji linii i objętości skóry

MC MODE

Ustawienie domyślne | Zielone LED

Używaj po nałożeniu produktu do pielęgnacji skóry. Jeśli poczujesz, że stymulacja jest zbyt słaba, dostosuj ilość używanego produktu pielęgnacyjnego.



Jak używać



LINING

Przyłóż głowicę do skóry i używaj jej w ruchu ku górze.

TIP: Wzmacnianie efektów Trybu MC

Zacznij od trybu MC, aby wypełnić drobne i głębsze linie. Następnie przełącz na tryb Derma Shot Mode, aby masować mięśnie i uzyskać bardziej elastyczną i odmłodzoną skórę.

MC MODE



DERMA SHOT MODE

Rekomendowana kolejność użycia

Środki ostrożności przed użyciem

* Podczas pierwszego użycia produktu zacznij od najniższego ustawienia i dostosuj je w miarę potrzeby.



Zakazane obszary użycia

Nie używać w okolicy podniebienia, na otwartych ranach ani w miejscach, gdzie przeprowadzono zabiegi lub operacje.



Zalecane obszary do stosowania przy niskim poziomie

W przypadku wrażliwych obszarów, takich jak oczy, nos i okolice ust, zaleca się stosowanie produktu na niskim poziomie.



Częstotliwość używania w trybie MC

Zaleca się stosowanie 1-3 razy dziennie, zgodnie z zalecaną metodą użycia.



KROK 01

Po oczyszczeniu nałóż odpowiednią ilość produktu do pielęgnacji skóry na skórę.



KROK 02

Upewnij się, że głowica jest w pełnym kontakcie ze skórą, a następnie przesuwaj głowicę od wewnętrznej części twarzy na zewnątrz ruchem ku górze



KROK 03

W przypadku szyi i czoła użyj urządzenia raz jeszcze, przesuwając je od dołu ku górze.



KROK 04

Po wchłonięciu się produktu do pielęgnacji skóry, zakończ pielęgnację, koncentrując się na wybranych obszarach.

05. Tryb Derma Shot

Tryb Derma Shot dla pielęgnacji elastyczności


DERMA SHOT MODE

Domyślne ustawienie | Czerwona dioda LED

Po nałożeniu produktu do pielęgnacji skóry, masuj obszar, w którym stymulacja mięśni działa najlepiej. Podczas używania urządzenia możesz bezpośrednio obserwować ruch swoich mięśni.



Jak używać

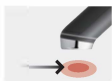

Focus

Powoli przesuwaj głowicę w pełnym kontakcie ze skórą. Zatrzymaj się na 1-2 sekundy w miejscach, gdzie stymulacja mięśni działa najlepiej, aby zrelaksować mięśnie.

TIP Wzmacnianie efektów trybu Derma Shot

Zaleca się rozpoczęcie od trybu MC, aby wypełnić drobne linie i głębsze zmarszczki. Następnie przełącz się na tryb Derma Shot, aby stymulować mięśnie, co zapewni bardziej elastyczną i odmłodzoną skórę.

MC MODE



DERMA SHOT MODE

Zaleca się stosowanie w tej kolejności.

Środki ostrożności przed użyciem

* Podczas pierwszego użycia produktu zacznij od najniższego ustawienia i dostosuj je w miarę potrzeby.



Zakazane obszary użycia

Nie używać w okolicy podniebienia, na otwartych ranach ani w miejscach, gdzie przeprowadzono zabiegi lub operacje.



Zalecane obszary do stosowania przy niskim poziomie

W przypadku wrażliwych obszarów, takich jak oczy, nos i okolice ust, zaleca się stosowanie produktu na niskim poziomie.



Częstotliwość używania trybu Derma Shot

Zaleca się stosowanie 1-3 razy dziennie, zgodnie z zalecaną metodą użycia.



KROK 01

Po oczyszczeniu, nałóż odpowiednią ilość produktu do pielęgnacji skóry na skórę przed użyciem.



KROK 02

Z pełnym kontaktem głowicy ze skórą, przesuwaj ją powoli i zatrzymaj się na 1-2 sekundy w miejscach, gdzie czujesz największą stymulację, aby zrelaksować mięśnie.



KROK 03

Masuj delikatnie od linii szyi w kierunku obszaru trapezu i linii żuchwy.



KROK 04

Używaj przez 5-10 minut dziennie, aby zadbać o bardziej elastyczną twarz.

06. Tryb Air Shot

Tryb Air Shot dla pielęgnacji porów

AIR SHOT MODE

Domyślne ustawienie | Niebieska dioda LED

Po oczyszczeniu, upewnij się, że używasz go na suchej skórze, delikatnie przesuwając go brzegiem głowicy. Nie będzie prawidłowo przekazywał stymulacji, gdy używany jest na mokrej skórze.



Jak używać



Szerokie ruchy

Delikatnie nawiąż kontakt ze skórą, używając krawędzi głowicy, i przesuwaj ją w jednym kierunku.



Dla większych obszarów

Używając na większych obszarach, przesuwaj głowicą po skórze, trzymając ją wzdłuż krawędzi.



Dla mniejszych obszarów

Dla precyzyjnych miejsc, takich jak nos, broda czy okolice brwi, delikatnie przesuwaj głowicą używając jej końcówki.

Środki ostrożności przed użyciem

* When using the product for the first time, start with the lowest setting and adjust as needed during use.



Zakazane obszary użycia

Nie używać w okolicy podniebienia, na otwartych ranach ani w miejscach, gdzie przeprowadzono zabiegi lub operacje.



Zalecane obszary do stosowania przy niskim poziomie

W przypadku wrażliwych obszarów, takich jak oczy, nos i okolice ust, zaleca się stosowanie produktu na niskim poziomie.



Częstotliwość używania trybu Air Shot

Zaleca się stosowanie raz dziennie, 2-3 razy w tygodniu, z przerwą 2-3 dni po każdym użyciu.



KROK 01


Używaj na całkowicie suchej skórze po oczyszczeniu.

***Nie będzie działać prawidłowo, jeśli skóra jest mokra.**



KROK 02

Delikatnie nawiąż kontakt ze skórą, używając krawędzi głowicy i przesuwaj ją w jednym kierunku.

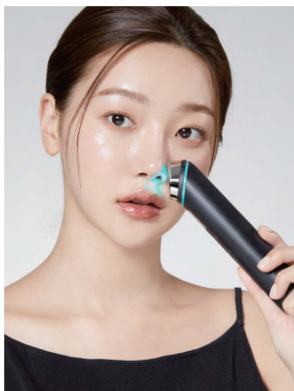

KROK 03

W przypadku zlokalizowanych obszarów, takich jak nos, broda i okolice brwi, delikatnie przesuwaj głowicą używając jej końcówki.



KROK 04

Po 5 minutach używania, włącz tryb Booster, aby wchłonąć produkt do pielęgnacji skóry, zapewniając promienną cerę.

07. Szczegółowe informacje o produkcie

Przegląd ekranu LCD



Domyślny ekran

① Wskaźnik Bluetooth



Bluetooth rozłączony



Bluetooth Połączony
(Zintegrowane z dedykowaną aplikacją AGE-R)

② Wskaźnik baterii



Pozostała bateria



Niska bateria
(Wymaga ładowania)

③ Aktualny tryb używania

④ Poziom intensywności

⑤ Czas pielęgnacji



Ekran oczekiwania na zmianę trybu po 5-minutowej pielęgnacji

① Odliczanie automatycznego wyłączenia



Urządzenie automatycznie wyłączy się po 10 sekundach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

② Dodatkowe wskazówki dotyczące pielęgnacji

Przyciski MODE i aplikacja mogą być użyte do zmiany na inny tryb.



Ekran ładowania/niskiej baterii

① Ekran ładowania

Wyświetlany na zielono, umożliwia sprawdzenie statusu ładowania.
(Nie działa podczas ładowania)

② Ekran niskiej baterii

Wyświetlany na czerwono, informuje o konieczności ładowania.

③ Ekran pełnego naładowania



Cały pierścień wyświetla się na zielono.