



Depilator IPL

Model BHRL-04

Instrukcja obsługi

Produkt: Depilator IPL, model BHRL-04.
Urządzenie przeznaczone **do użytku domowego**.

Producent: Bestway Plastic And Metal Products Ltd.
Room 701, Building 2, Dongguan City,
Chiny



Importer / osoba odpowiedzialna w UE: Goimport Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 11/10, 98-200 Sieradz, Polska
tel.: +48 453 305 016
import@fitbymed.pl

Wydanie instrukcji: 07.2025, lipiec 2025 r.



Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy zachować, aby można z niej było korzystać w przyszłości.

Spis treści

1. Bezpieczeństwo	3
2. Opis urządzenia	8
3. Przygotowanie, próba na skórze i częstość zabiegów	11
4. Wykonywanie zabiegu	14
5. Pielęgnacja i ochrona skóry po zabiegu	15
6. Czyszczenie i konserwacja urządzenia	15
7. Dane techniczne	16
8. Usuwanie odpadów	16

1. Bezpieczeństwo

Należy ściśle stosować się do poniższych ostrzeżeń oraz całej instrukcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do importera.

1.1. Zasady bezpieczeństwa



- Niedozwolone jest używanie urządzenia przez dzieci ani na ciele dzieci. Osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź niemające doświadczenia i wiedzy mogą używać tego urządzenia, pod warunkiem że będzie się to odbywało pod nadzorem lub zostaną im udzielone instrukcje bezpiecznego używania urządzenia i osoby te będą rozumieć zagrożenia związane z jego używaniem.
- Niedopuszczalne jest, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
- Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić urządzenia ani wykonywać przy nim żadnych czynności konserwacyjnych.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem, który został z nim dostarczony.
- Przewód zasilający jest niewymienny. Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, należy wyrzucić całe urządzenie.
- Dla zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) o czułości 30 mA lub bardziej czułego w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Należy zwrócić się o poradę do uprawnionego elektryka.



- **OSTRZEŻENIE.** Nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę. Jeśli urządzenie jest używane w łazience, należy po użyciu odłączyć je od gniazdka zasilającego, ponieważ bliskość wody

stwarza zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.



- **OSTRZEŻENIE.** Promieniowanie optyczne o wysokiej intensywności. Nieprzestrzeganie instrukcji grozi uszkodzeniem oczu (potencjalnie prowadzącym do utraty wzroku) lub uszkodzeniem skóry. Należy przeczytać instrukcje i się do nich stosować.
- **OSTRZEŻENIE.** Po długotrwałej lub wielokrotnej aplikacji na powierzchnię skóry w jednym miejscu może dojść do uszkodzenia skóry.
- **OSTRZEŻENIE.** Nieprawidłowe użycie może prowadzić do uszkodzenia oczu. Chronić oczy przed ekspozycją. Nie używać urządzenia na powiekach ani blisko oczu.
- **OSTRZEŻENIE.** Nie obchodzić ani nie dezaktywować mechanizmów bezpieczeństwa, w które wyposażone jest urządzenie.
- **OSTRZEŻENIE.** Osoby przyjmujące leki lub preparaty ziołowe o właściwościach fotouczulających powinny przed użyciem urządzenia zasięgnąć porady lekarza, ponieważ używanie urządzenia może zaszkodzić ich skórze.
- Nie używać urządzenia na miejscach ciała ze zmianami i uszkodzeniami skóry (takich jak miejsca z poparzeniami, zmianami chorobowymi, pęcherzami, bliznami, skaleczeniami, otwartymi ranami, aktywnymi stanami chorobowymi skóry, miejsca niedawno opalone, z oparzeniami słonecznymi i/lub obszary objęte zakażeniem).
- To urządzenie nie jest przeznaczone do leczenia schorzeń. W sprawie leczenia, na przykład, znamion barwnikowych, wysypki, śwιάdu, grzybicy, zakażeń, guzków lub włókniaków miękkich na skórze należy zwrócić się do lekarza.

- Unikać nadmiernie intensywnego używania, na przykład wielokrotnego wracania z aplikacją w to samo miejsce, wielokrotnego emitowania impulsów w to samo miejsce i/lub zwiększonej częstotliwości zabiegów.
- Przed użyciem urządzenia sprawdzić, czy jego układ optyczny lub obudowa nie są w widoczny sposób uszkodzone. Nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Urządzenia nie można używać do depilacji włosów siwych ani białych.
- Przed użyciem urządzenia na obszarach ciała, w których wstrzykiwano wypełniacze lub toksyny, należy skonsultować się z lekarzem.
- Przed zabiegiem skórę należy oczyścić i osuszyć. Obszar poddawany depilacji należy oczyścić z wszelkich produktów do pielęgnacji ciała i włosów, kremów, środków nawilżających i innych kosmetyków oraz usunąć biżuterię, w tym kolczyki.
- Używanie urządzenia niezgodnie z instrukcją producenta może wywołać skutki niepożądane, w tym powstawanie pęcherzy, ból i powstawanie blizn.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia przez otwory w jego obudowie.
- Na czas czyszczenia, serwisowania lub wymiany części zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Jeśli po włączeniu depilatora jego wentylator nie działa w słyszalny sposób, nie używać depilatora.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- Nie używać depilatora w obecności łatwopalnych gazów i oparów (np. benzyny, lakierów, rozpuszczalników).

- Nie używać depilatora na zwierzętach.
- Przed pierwszym użyciem zawsze przeprowadzić test na skórze (patrz rozdział 3).
- Podczas używania depilatora należy zawsze mieć założone okulary ochronne dostarczone w zestawie.
- Nie wystawiać skóry na działanie słońca przed zastosowaniem depilatora.
- Ogolić włosy przed zastosowaniem depilatora. Nie używać środków do chemicznego usuwania włosów.
- Nie używać depilatora w ciemności.
- Nie wystawiać skóry poddanej depilacji na słońce ani promieniowanie UV przez co najmniej 24 godziny po użyciu depilatora.
- Nie dotykać okienka emisyjnego od razu po zabiegu, ponieważ rozgrzewa się ono do wysokiej temperatury. Istnieje ryzyko poparzenia.
- Usuwając owłosienie z pleców, korzystać z pomocy drugiej osoby, ponieważ przy samodzielnym operowaniu depilatorem na własnych plecach zachowanie kontroli nad aplikacją energii może być utrudnione.

1.2 Osoby, u których nie wolno stosować tego urządzenia



W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

- Osoby, które w opinii lekarza nie mogą być poddawane zabiegom IPL.
- Osoby, których barwy włosów i skóry są nieodpowiednie do stosowania urządzenia (patrz rozdział 3).
- Osoby, które nie ukończyły 15. roku życia.
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią.

- Osoby z nadwrażliwością na światło słoneczne.
- Osoby chore na padaczkę fotogenną.
- Osoby z przewlekłymi stanami chorobowymi skóry wywołanymi np. cukrzycą lub inną chorobą ogólnoustrojową bądź zaburzeniami metabolizmu.
- Osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi, w tym umiarkowanym i ciężkim nadciśnieniem tętniczym.
- Osoby chorujące obecnie na nowotwory złośliwe.
- Osoby chorujące obecnie lub w przeszłości na nowotwory złośliwe skóry, osoby ze stanami przedrakowymi skóry, osoby z dużą liczbą znamion barwnikowych.
- Osoby z chorobami naczyniowymi, np. żylakami.
- Osoby z obniżoną odpornością, w tym zakażone wirusem HIV, osoby chore na toczeń rumieniowaty, porfirię.
- Osoby przyjmujące leki immunosupresyjne lub niesterydowe leki przeciwzapalne.

1.3 Obszary ciała, w których nie wolno stosować tego urządzenia



W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

- Miejsca, na których istnieje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia raka skóry, otwarte rany lub wysypki, opuchnięte, zaczerwienione, podrażnione, zakażone lub zapalone obszary skóry lub wykwity skórne.
- Niezagojone rany.
- Opalona skóra lub miejsca oparzeń słonecznych (należy odczekać minimum 1 tydzień, aż skóra wróci do stanu prawidłowego).
- Miejsca, które były poddawane zabiegom chirurgii plastycznej.
- Znamiona barwnikowe.
- Miejsca z tatuażami i pomalowana skóra (np. henną).
- Miejsca, w których biegną duże naczynia krwionośne.
- Miejsca, w których znajdują się jakiegokolwiek implanty.
- Naturalnie ciemna skóra.

- Miejsca poddane chemicznej depilacji.
- Następujące obszary anatomiczne:

- jama ustna	- oczy, powieki, okolice oczu
- jabłko Adama	- brwi
- brodawki sutkowe i ich okolice	- pępek
- narządy płciowe	- wszelkie błony śluzowe
- głowa (z wyj. twarzy poniżej kości policzkowych)	- uszy

2. Opis urządzenia

Depilator BHRL-04 jest urządzeniem wykorzystującym intensywne światło pulsujące (IPL, ang. *intense pulsed light*) do usuwania włosów, regeneracji i poprawy wyglądu skóry oraz oczyszczania skóry. IPL to sprawdzona w praktyce, bezpieczna technika o potwierdzonej skuteczności. Dodatkowo depilator oferuje funkcję chłodzenia (ICE COOL), która zmniejsza ewentualny dyskomfort związany z zabiegami.


Depilator jest przeznaczony do użytku domowego przez szeroki krąg osób, a do jego obsługi nie są wymagane szczególne kwalifikacje. Należy jednak ściśle stosować się do niniejszej instrukcji, a zwłaszcza informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Depilator BHRL-04 ma lampę wbudowaną na stałe, która nie podlega wymianie. Lampa ta wystarcza na 1 000 000 (jeden milion) impulsów.

2.1 Zawartość opakowania

Opakowanie urządzenia zawiera depilator, zasilacz, okulary ochronne, ręczną maszynkę do golenia skóry oraz niniejszą instrukcję. Po otwarciu opakowania należy upewnić się, że żadnego elementu nie brakuje i żaden element nie jest w widoczny sposób uszkodzony. O brakach lub uszkodzeniach należy powiadomić sprzedawcę. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia.

2.2 Budowa depilatora

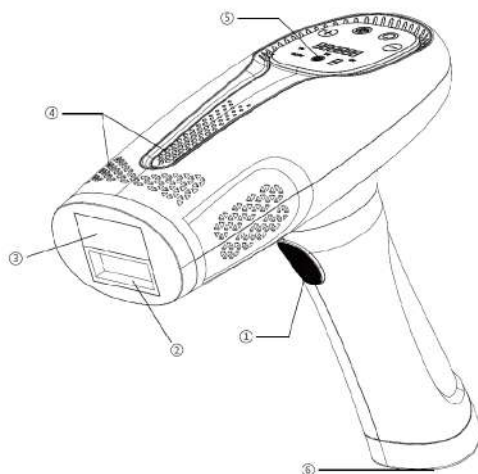

- 1. Przycisk emisji
- 2. Okienko emisyjne
- 3. Płytką chłodząca

- 4. Otwory wentylacyjne
- 5. Wyświetlacz dotykowy
- 6. Gniazdo zasilania

2.3 Wyświetlacz

Obsługa depilatora odbywa się głównie za pomocą wyświetlacza dotykowego. Gdy depilator jest podłączony do zasilania, ale nie włączony, na wyświetlaczu widoczny jest tylko napis OFF i przyciski dotykowe.

Po dotknięciu na co najmniej 2 sekundy przycisku  na wyświetlaczu pojawiają się informacje opisane poniżej.



1. **Wskaźnik intensywności światła:** od 1 do 9. Informuje o energii emitowanych impulsów. Do zmiany intensywności służą przyciski  i .
2. **Wskaźnik trybu AUTO:** napis AUTO jest widoczny, gdy depilator działa w trybie automatycznym, tj. emituje impulsy samoczynnie po przyłożeniu do skóry. Aby włączyć albo wyłączyć tryb AUTO, należy — bez przykładania depilatora do skóry — nacisnąć przycisk emisji i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy.
3. **Wskaźnik rodzaju zabiegu:**
HR: usuwanie włosów
SC: regeneracja skóry i poprawa jej wyglądu
RA: oczyszczanie skóry z bakterii, zapobieganie trądzikowi
Rodzaj zabiegu wybiera się, dotykając krótko przycisku .
4. **Pozostała liczba impulsów:** odliczana od miliona w dół. Po prawidłowym przyłożeniu depilatora do skóry ta liczba miga, sygnalizując gotowość do emisji impulsów.
5. **Przycisk włączania, wyłączania i wyboru rodzaju zabiegu:** długie dotknięcie (ok. 2 sekundy) włącza/wyłącza depilator. Krótkie dotknięcie zmienia rodzaj zabiegu.
6. **Przycisk chłodzenia:** włącza i wyłącza chłodzenie.
7. **Przyciski zmiany intensywności:** służą do zmiany intensywności impulsów.

2.4 Jak obchodzić się z depilatorem

Stosowanie się do poniższych zasad pozwoli uniknąć uszkodzenia i przedwczesnego zużycia depilatora.

- Chronić depilator przed uszkodzeniami mechanicznymi: nie uderzać, nie rzucać, nie upuszczać.
- Nie używać depilatora w miejscach silnie nasłonecznionych.
- Regularnie czyścić depilator zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale 6.
- Nie zbliżać okienka emisyjnego ani płytki chłodzącej do magnesów i urządzeń zawierających magnesy.
- Nie naświetlać depilatorem czarnych przedmiotów.
- Nie naświetlać depilatorem odzieży (grozi to jej przebarwieniem).
- Jeśli depilator zostanie przeniesiony z miejsca zimnego do ciepłego lub z ciepłego do zimnego, a różnica temperatur przekracza 20°C, to przed włączeniem depilatora odczekać około 2 godzin.
- Nie używać depilatora w temperaturze spoza zakresu 5–40°C.
- Nie pozostawiać depilatora w miejscu nasłonecznionym lub pod lampą UV.

3. Przygotowanie, próba na skórze i częstotść zabiegów

Zanim zaczniesz się używać depilatora, należy ustalić, czy kolor skóry i włosów osoby, która ma być poddawana zabiegowi, jest do tego odpowiedni.



Nie wolno stosować tego depilatora u osób, których kolor włosów i skóry jest nieodpowiedni.

Do oceny należy wykorzystać poniższą tabelę ze wzornikiem kolorów. Należy przyłożyć poniższą tabelę do owłosionej i nieowłosionej skóry, aby porównać faktyczny kolor z kolorem na wzorniku. Depilator można stosować, jeśli na przecięciu koloru włosów i skóry znajduje się znak „√”. Natomiast „x” oznacza, że nie wolno używać depilatora.

Kolor skóry Kolor włosów	 Biała	 Beżowa	 Jasnobrązowa	 Brązowa	 Ciemnobrązowa	 Wpadająca w czern lub ciemniejsza
 Białe/szare	x	x	x	x	x	x
 Rude	x	x	x	x	x	x
 Jasnożółte	x	x	x	x	x	x
 Ciemnożółte/ jasnobrązowe	√	√	√	√	x	x
 Brązowe	√	√	√	√	x	x
 Ciemnobrązowe	√	√	√	√	x	x
 Czarne	√	√	√	√	x	x

3.1 Przygotowanie skóry i depilatora

Przed zabiegiem należy starannie ogolić i oczyścić skórę w miejscu, które ma być naświetlane. Skóra powinna być sucha, bez jakichkolwiek pozostałości kosmetyków i zanieczyszczeń.

Przy wyłączonym depilatorze obejrzeć okienko emisyjne, aby upewnić się, że jest czyste. W razie potrzeby oczyścić okienko zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale 6.



Przed użyciem depilatora nie aplikować żadnych kosmetyków na skórę.

3.2 Próba na skórze

Nawet jeśli kolory włosów i skóry są odpowiednie, to przed pierwszym użyciem depilatora należy przeprowadzić próbę na skórze, aby upewnić się, że zabieg nie spowoduje niepożądanych skutków, a także aby dobrać właściwą intensywność naświetlania IPL.

1. Wybrać na próbę miejsce (o długości kilku cm) w pobliżu obszaru, który docelowo ma być poddany zabiegowi. Nie powinno to być miejsce szczególnie wrażliwe, takie jak stopy lub miejsca, gdzie prawie bezpośrednio pod skórą znajduje się kość.
2. Podłączyć depilator do zasilania, a następnie dotknąć przycisku  na ok. 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. **(Nie naciskać jeszcze przycisku emisji, aby nie włączyć przypadkiem trybu AUTO. Jeśli włączył się tryb AUTO, nacisnąć raz przycisk emisji i przytrzymać przez około 2 sekundy bez przykładania depilatora do skóry).**
3. Po chwili na wyświetlaczu powinna pojawić się liczba pozostałych impulsów, symbol rodzaju zabiegu i intensywność.



- a. Dotykać krótko przycisku , aby wybrać żądany rodzaj zabiegu (patrz 2.3).

- b. Jeśli intensywność jest inna niż 1, dotykać przycisku  lub , aby wybrać intensywność 1.
4. Przyłożyć depilator prostopadle do skóry w wybranym miejscu, a gdy liczba impulsów na wyświetlaczu zacznie migać — nacisnąć krótko przycisk emisji. Depilator wyemituje światło.
 5. Przenieść depilator o kilka milimetrów.
 6. Dotknąć przycisku , aby zwiększyć intensywność.
 7. Powtarzać kroki od 4 do 6 aż do osiągnięcia maksymalnej intensywności lub dopóki dyskomfort podczas emisji światła nie będzie zbyt duży.
 8. Aby wyłączyć depilator, dotknąć przycisku  na około 2 sekundy. Urządzenie nie wyłącza się od razu, lecz najpierw przez kilka sekund chłodzi się i odlicza czas.



Z reguły im ciemniejsza skóra, tym mniejsza będzie akceptowalna intensywność naświetlania.



Strefa bikini, pachwiny i pachy są szczególnie wrażliwe.

Po zakończeniu próby odczekać kilka godzin, zwracając uwagę na wszelkie niepokojące objawy naświetlonej skóry, na przykład nieprzemijające szybko zaczerwienienie, pęcherze lub obrzęk.



Szybko przemijające zaczerwienienie jest objawem normalnym i nie jest powodem do niepokoju.

Brak niepokojących objawów oznacza, że można bezpiecznie używać depilatora z przetestowaną intensywnością.

W przypadku wystąpienia niepożądanych objawów nie należy korzystać z depilatora.



Jeśli objawy przez dłuższy czas nie ustąpią, skonsultować się z lekarzem.

3.3 Częstość wykonywania zabiegów

U wielu osób odpowiednią skuteczność depilacji zapewni następująca częstość wykonywania zabiegów:

Od 1. do 4. tygodnia używania depilatora:	2 razy w tygodniu
Od 5. do 8. tygodnia używania depilatora:	raz na 1–2 tygodnie
Po 8. tygodniu używania depilatora:	raz na 15–30 dni

Jednak skuteczność u każdej osoby zależy od cech indywidualnych, jak np. budowa włosów, a także od stosowanej intensywności naświetlania. Dlatego powyższe informacje są tylko orientacyjne.

4. Wykonywanie zabiegu

Depilator może działać w dwóch trybach: ręcznym i automatycznym (AUTO):

- W trybie ręcznym depilator emituje impuls światła po przyłożeniu do skóry i każdorazowym naciśnięciu przycisku emisji.
- W trybie AUTO depilator stale emituje impulsy jeden po drugim, gdy jest przyłożony do skóry. Można przesuwać depilator po skórze, naświetlając w ten sposób żądany obszar. Po oddaleniu depilatora od skóry światło nie jest emitowane.

Depilator jest wyposażony w funkcję chłodzenia (ICE COOL), którą można włączać i wyłączać przyciskiem . Z funkcji chłodzenia można korzystać:

- W trakcie zabiegu, aby łagodzić dyskomfort w trakcie naświetlania.
- Po zabiegu, aby złagodzić ewentualne przejściowe nieprzyjemne objawy. W tym celu należy **wyłączyć** tryb AUTO, włączyć chłodzenie i przykładać depilator prostopadłe do skóry, ale nie naciskać przycisku emisji. Płytką chłodzącą będzie chłodzić skórę, a depilator nie będzie już emitował światła.

Sposób wykonywania zabiegu:

1. Podłączyć depilator do zasilania, a następnie dotknąć przycisku  i przytrzymać go przez ok. 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
2. Jeśli ma być używany tryb AUTO, nacisnąć przycisk emisji i przytrzymać go przez ok. 2 sekundy.
3. Po chwili na wyświetlaczu powinna pojawić się liczba pozostałych impulsów, symbol rodzaju zabiegu i intensywność.
4. Dotykać krótko przycisku , aby wybrać żądany rodzaj zabiegu (patrz 2.3).
5. Dotykać przycisku  lub , aby wybrać intensywność.



Każdy zabieg zaczynać od intensywności 1. Dopiero jeśli nie spowoduje ona dyskomfortu, można stopniowo zwiększać intensywność do poziomu ustalonego podczas próby (punkt. 3.2).

6. W razie potrzeby dotknąć przycisku , aby włączyć chłodzenie.

7. Przyłożyć depilator prostopadle do skóry.
 - a. W trybie AUTO depilator zacznie emitować impulsy światła. Przesuwać depilator po skórze, aby wykonać zabieg na żądanym obszarze.
 - b. W trybie ręcznym po przyłożeniu depilatora do skóry, gdy liczba impulsów na wyświetlaczu zacznie migać, naciskać przycisk emisji, aby emitować światło, i przemieszczać depilator w żądane miejsca.
8. Po zakończeniu naświetlania, jeśli zachodzi taka potrzeba, włączyć chłodzenie przyciskiem , wyłączyć tryb AUTO (jeśli był włączony) i schłodzić skórę, przykładając do niej depilator (jego płytkę chłodzącą).
9. Aby wyłączyć depilator, dotknąć przycisku  na około 2 sekundy. Urządzenie nie wyłącza się od razu, lecz najpierw przez kilka sekund chłodzi się i odlicza czas.



Pojawiające się po zabiegu, przemijające zaczerwienienie jest objawem normalnym i nie jest powodem do niepokoju.

5. Pielęgnacja i ochrona skóry po zabiegu

Zaleca się, aby przez 6 godzin po zabiegu nie moczyć ani nie nawilżać skóry poddanej zabiegowi. Po tym czasie można użyć balsamu do nawilżenia skóry. Przez 24 godziny po zabiegu nie należy stosować perfum, dezodorantów, maseczek, samoopalaczy ani innych kosmetyków na skórze poddanej zabiegowi. Przez 24 godziny po zabiegu unikać ekspozycji na promieniowanie UV (nie opalać się, nie korzystać z solarium). W razie potrzeby zastosować krem z filtrem.



Jeśli po zabiegu wystąpią utrzymujące się przez dłuższy czas niepożądane objawy, należy skonsultować się z lekarzem.

6. Czyszczenie i konserwacja urządzenia

Należy czyścić depilator po każdym zabiegu, aby uniknąć gromadzenia się resztek włosów i naskórka oraz innych zanieczyszczeń. Zabrudzone urządzenie nie będzie skutecznie działać.

Zwracać szczególną uwagę na czystość okienka emisyjnego. Jeśli z powodu trwałego zabrudzenia nie da się go oczyścić, należy zaprzestać używania depilatora.



- Nie dotykać okienka emisyjnego od razu po zabiegu, ponieważ rozgrzewa się ono do wysokiej temperatury. Istnieje ryzyko poparzenia.
- Nie czyścić depilatora ani zasilacza pod bieżącą wodą ani poprzez zanurzenie. Nie dopuścić do ich zamoczenia.



Nie czyścić urządzenia środkami ściernymi, szczotką drucianą lub o twardym włosiu itp. Nie stosować acetonu, benzyny itp.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć depilator od zasilania i poczekać, aż okienko emisyjne ostygnie.
2. W razie potrzeby wytrzeć całe urządzenie suchą miękką ściereczką.
3. Zwilżyć ściereczkę kilkoma kroplami wody i taką wilgotną ściereczką wytrzeć **okienko emisyjne** oraz **płytkę chłodzącą**.



Jeśli czyszczenie wodą jest nieskuteczne lub konieczna jest dezynfekcja, można zamiast wody użyć alkoholu (w stężeniu maks. 96%).

7. Dane techniczne

Model	BHRL-04
Masa	320 g
Napięcie zasilania	 100–240 V, 50 Hz  12 V
Pobór mocy	36–48 W
Temperatura otoczenia przy pracy	5–40°C
Wilgotność względna przy pracy	≤80%
Ciśnienie atmosferyczne przy pracy	86–106 kPa
Długość emitowanej fali świetlnej	600–1200 nm
Metoda chłodzenia	Powietrzem
Regulacja natężenia światła	9 ustalonych poziomów

8. Usuwanie odpadów

Po wycofaniu urządzenia z użytkowania należy je zutylizować w sposób właściwy dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie wolno go wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

