

Irygator

Waterpik® WF-26

Cordless Plus 5000

www.waterpik.pl

ISTOTNE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.

Produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym.

- Korzystając z urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności, w tym następujące:

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Aby zredukować ryzyko porażenia prądem:

- Nie umieszczaj ani nie przechowuj produktu w miejscu, gdzie może spaść lub zostać wciągnięty do wanny.
- Należy unikać dotykania dostarczonej przez użytkownika ładowarki ściennej USB mokrymi dłońmi.
- Nie umieszczaj ani nie upuszczaj urządzenia ani dostarczonej przez użytkownika ładowarki USB do gniazdka do wody lub innego płynu.
- Sprawdź kabel ładujący oraz dostarczoną przez użytkownika ładowarkę ścienną USB pod kątem uszkodzeń, które wystąpiły przed pierwszym użyciem oraz w trakcie korzystania z produktu.

OSTRZEŻENIE

Aby zminimalizować ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru lub urazów ciała:

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, w tym dzieci:

- o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia.

*** Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.**

- Stosuj ten produkt wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji lub zgodnie z zaleceniami Twojego dentysty.
- Używaj wyłącznie końcówek i akcesoriów rekomendowanych przez firmę Water Pik, Inc.
- Przewód ładujący oraz dostarczoną przez użytkownika ładowarkę ścienną USB należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nigdy nie umieszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów lub końcówek
- Trzymaj przewód ładujący z dala od gorących powierzchni.
- Używaj wyłącznie końcówek wymiennych szczoteczki oraz akcesoria zalecane przez WaterPik, Inc., określone w niniejszej instrukcji obsługi

- Nie używaj tego produktu, jeśli ma uszkodzoną obudowę, przewód lub wtyczka nie działają prawidłowo, jeśli zostały upuszczone lub uszkodzone, lub wpadły do cieczy. Skontaktuj się z serwisem PolkardBis pod numerem 734 109 938 lub na stronie www.waterpik.pl
- Do ładowania tego produktu wymagana jest ładowarka USB, posiadająca przynajmniej certyfikat bezpieczeństwa (IPX4, klasa II) o znamionowym napięciu wyjściowym 5,0 V DC, maks. 1,0 A.
- Nie podłączaj tego urządzenia do sieci napięciowej, który różni się od napięcia podanego na urządzeniu lub ładowarce.
- Nie stosuj urządzenia na zewnątrz ani w miejscach, w których występuje aerozol oraz w miejscach, w których stosuje się produkty (w sprayu) lub podaje się tlen.
- Używaj wyłącznie końcówek wymienne oraz akcesoria zalecane przez WaterPik, Inc., określone w niniejszej instrukcji obsługi
- W przypadku uszkodzenia przewodu ładującego należy go wymienić.
- Jeśli lekarz zalecił Ci przyjęcie antybiotyku przed zabiegami stomatologicznymi, powinieneś skonsultować się ze swoim dentystą przed użyciem tego urządzenia lub jakiegokolwiek innego środka wspomagającego higienę jamy ustnej.
- Przed użyciem urządzenia należy zdjąć biżuterię z ust.
- Nie należy stosować urządzenia w przypadku otwartej rany na języku lub w ustach.
- Upewnij się, że styki przewodu, urządzenia i zasilacz jest czysty i suchy podczas ładowania urządzenia.
- Nie narażaj baterii ani urządzenia na działanie nadmiernych temperatur.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Opis produktu	5
Pierwsze kroki	6
Czyszczenie i rozwiązywanie problemów z irygatorem Waterpik®	9
Pielęgnacja akumulatora, utylizacja/recykling, wyjmowanie akumulatora	10
Gwarancja	11

SYMBOLIKA


Następujące symbole mogą występować na Twoim produkcie i/lub opakowaniu. Niektóre z tych symboli mogą nie mieć znaczenia w Twoim regionie i są podane wyłącznie w celach informacyjnych.

Symbol	Definicja	Symbol	Definicja	Symbol	Definicja	Symbol	Definicja
	Przeczytaj instrukcję obsługi.		Zasilacz odłączony		Urządzenia nie należy używać pod prysznicem, w wannie ani zanurzać w żadnych cieczach.		Znak zgodności z regulacjami
	Producent		Napięcie prądu stałego		Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej		Selektywna zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych.
IPX7 lub IPX4	Kod zabezpieczający przed wnikaniem		Napięcie prądu zmiennego (AC)		Oznaczenie zgodności CE		
	Sprzęt kategorii II IEC		Nie zanurzaj sprzętu w żadnym płynie.		Ocena zgodności w Zjednoczonym Królestwie		

1. Obrótowa końcówka 360
2. Przełącznik zasilania/ciśnienia
3. Wskaźnik ciśnienia/trybu
4. Uchwyt
5. Port ładowania/klapka
6. Zbiornik
7. Końcówka
8. Kabel do ładowania
9. Klapka wlewu zbiornika
10. Wskaźnik ładowania
11. Przycisk wysuwania końcówki



8

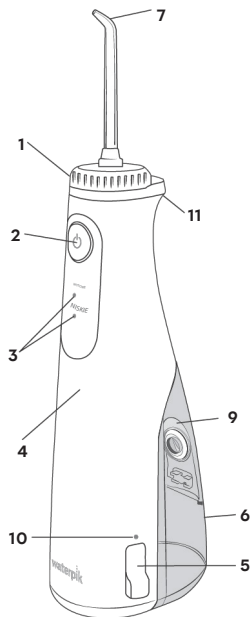




Kabel do ładowania USB
20034096-2 White

KOŃCÓWKI


- A. Końcówka ortodontyczna*
- Aparaty ortodontyczne
- B. Końcówka Pik Pocket™**
- Kieszonki przyzębne
- C. Końcówka Plaque Seeker™**
- Implanty/korony/mosty

- D. Końcówka szczoteczka*
- Ogólnego użytku
- E. Końcówka klasyczna**
- Ogólnego użytku
- F. Końcówka do języka**
- Odświeżanie oddechu
- G. Końcówka zatyczka
- Zapobiega wyciekaniu nadmiaru wody podczas podróży

NIE WSZYSTKIE KOŃCÓWKI SĄ DOŁĄCZONE DO WSZYSTKICH MODELI

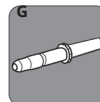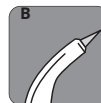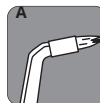

*Wymieniaj co 3 miesiące **Wymieniaj co 6 miesięcy
Końcówki wymienne można nabyć online na stronie
www.waterpik.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 600 895 430

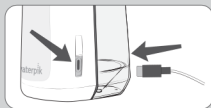

Ładowarka ścienna USB nie stanowi standardowego wyposażenia tego urządzenia.



Ładowanie urządzenia przed pierwszym użyciem

Podłącz kabel ładowający USB do urządzenia (USB-C), a następnie do ładowarki ściennej USB (USB-A). Następnie podłącz ładowarkę ścienną USB do gniazdka elektrycznego i ładuj urządzenie przez około 4 godziny. Uwaga: Zapoznaj się z sekcją ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA, aby uzyskać wymagane specyfikacje ładowarki ściennej USB. Zawsze upewnij się, że wtyczki USB oraz porty USB są czyste i suche przed podłączeniem.

- Dioda LED zacznie migać na biało, sygnalizując, że poziom naładowania baterii urządzenia jest niski.
- Dioda LED zmieni kolor na czerwony, gdy bateria zostanie całkowicie rozładowana, sygnalizując konieczność naładowania urządzenia.
- Dioda LED będzie świecić podczas ładowania.
- Po całkowitym naładowaniu dioda LED pozostanie zapalona do momentu odłączenia kabla ładowającego od urządzenia.



Napełnianie pojemnika

Przed napełnieniem odłącz kabel zasilający i załóż pokrywę portu ładowania. Otwórz pokrywę zbiornika i napełnij letnią wodą.




Zakładanie i wyjmowanie końcówek

Włóż końcówkę do wnętrza pokrętki na górze uchwytu iringatora Water Flosser. Naciśnij mocno, aż końcówka zatrzaśnie się na swoim miejscu. Aby usunąć końcówkę z uchwytu, naciśnij przycisk wysuwania końcówki i wyciągnij końcówkę z uchwytu.

UWAGA: Nie wciskaj przycisku wysuwania końcówki, gdy urządzenie jest włączone.



UWAGA: Przed zdjęciem zaślepki i podłączeniem ładowarki upewnij się, że urządzenie jest suche. Po naładowaniu załóż zaślepkę i upewnij się, że jest całkowicie osadzona (również z zewnętrzną powierzchnią uchwytu).

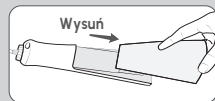

Regulacja ciśnienia ustawienia

Możesz dostosować ustawienie ciśnienia w swoim irygatorze Water Flosser, klikając przełącznik ciśnienia/zasilania na uchwycie. Naciśnij przycisk zasilania, aby uzyskać niskie ciśnienie, naciśnij ponownie, aby uzyskać wysokie ciśnienie. Zacznij od najniższego ustawienia i zwiększaj je według własnych preferencji.

Zalecana metoda

Pochyl się nisko nad zlewem i umieść końcówkę w ustach. Skieruj końcówkę w stronę linii dziąseł i włącz urządzenie. Aby uzyskać optymalne rezultaty, zacznij od zębów tylnych i przesuwaj się w kierunku zębów przednich. Przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł i zatrzymaj się na chwilę pomiędzy zębami.

Kontynuuj, aż oczyścisz wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię zębów górnych i dolnych.

Skieruj strumień pod kątem 90 stopni do linii dziąseł. Lekko zamknij usta, aby uniknąć rozpryskiwania, ale pozwól wodzie swobodnie spływać z ust do zlewu. Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej podczas używania, aby uzyskać najlepsze rezultaty.


Po zakończeniu procesu

Wyłącz urządzenie. Opróżnij zbiornik z pozostałego płynu. W razie potrzeby zbiornik można usunąć z uchwytu zasilania, po prostu ciągnąc go w dół.

Tryb podróży:

- Znajdź przycisk zasilania.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż urządzenie zacznie migać. Urządzenie znajduje się teraz w trybie podróży.
- W trybie podróży urządzenie nie włącza się.
- Aby wyłączyć tryb podróży, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż zacznie migać.
- Po 5 sekundach urządzenie powinno wyjść z trybu podróży.
- Sprawdź, czy urządzenie powróciło do normalnego działania, sprawdzając, czy wszystkie wcześniej wyłączone funkcje są teraz dostępne.

UWAGA: Tryb podróży zostanie wyłączony, gdy urządzenie zostanie podłączone do ładowania.

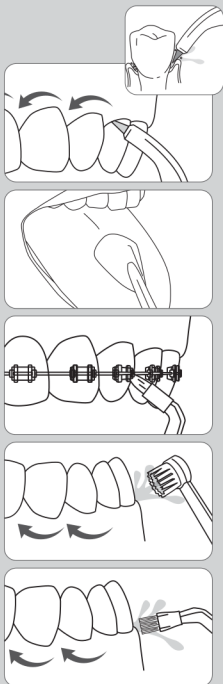

UWAGA: NIE WSZYSTKIE KOŃCÓWKI SĄ DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH MODELI.

Końcówka Pik Pocket™

Końcówka Pik Pocket™ została stworzona z myślą o efektywnym dostarczaniu wody lub roztworów antybakteryjnych głęboko do kieszonek przyzębia. Aby skorzystać z końcówki Pik Pocket™, ustaw urządzenie na najniższe ciśnienie. Przyłóż miękką końcówkę do zęba pod kątem 45 stopni i delikatnie umieść ją pod linią dziąseł, w kieszonce.

Końcówka do czyszczenia języka

Ustaw minimalne ciśnienie, umieść końcówkę w centrum języka mniej więcej w połowie drogi do tyłu. Pociągnij do przodu z delikatnym naciskiem. Zwiększ nacisk według własnego uznania.

Końcówka ortodontyczna

Aby zastosować końcówkę ortodontyczną, delikatnie przesuwaj ją wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę, aby starannie oczyścić przestrzeń między zębami oraz wokół zamka ortodontycznego, zanim przejdziesz do kolejnego zęba.

Końcówka szczoteczki do mycia zębów

Umieść końcówkę szczoteczki w jamie ustnej, tak aby główka szczoteczki dotykała zęba przy linii dziąseł. Końcówkę szczoteczki można używać z pastą do zębów lub bez niej. Używając delikatnego nacisku (włosie nie powinno się wyginać), masuj szczoteczkę tam i z powrotem bardzo krótkimi ruchami – podobnie jak w przypadku szczoteczki manualnej.

Końcówka Plaque seeker™

Aby skorzystać z końcówki Plaque Seeker™, umieść ją blisko zębów, tak aby włosie delikatnie stykało się z ich powierzchnią. Ostrożnie przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę pomiędzy zębami, aby delikatnie szczotkować i umożliwić wodzie przepływ między nimi.

Użycie płynu do płukania jamy ustnej oraz innych roztworów

Irygator Waterpik® Water Flosser może być wykorzystywany do aplikacji płynów do płukania jamy ustnej oraz roztworów antybakteryjnych. Aby ułatwić dodawanie innych roztworów, należy wyjąć zbiornik (patrz sekcja „Po zakończeniu”) i dodać przez górny otwór w zbiorniku. W przypadku dodawania dodatkowej wody, można wymienić zbiornik i całkowicie napełnić go za pomocą klapki do napełniania. Po użyciu jakiegokolwiek specjalnego roztworu, należy przepłukać urządzenie, aby zapobiec zatykaniu, częściowo napełniając zbiornik ciepłą wodą i uruchamiając urządzenie z końcówką skierowaną do zlewu, aż urządzenie będzie puste.

Czyszczenie

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz je od zasilania. W razie potrzeby oczyść produkt miękką ściereczką oraz delikatnym, nieściernym środkiem czyszczącym do przetarcia zewnętrznych powierzchni.


Zbiornik na wodę można usunąć, co ułatwia czyszczenie. Można go myć w zmywarce na górnej półce.

Zaleca się cotygodniowe opróżnianie i czyszczenie zbiornika.

Usuwanie osadów z twardej wody / czyszczenie ogólne

Osady twardej wody mogą gromadzić się w urządzeniu, w zależności od zawartości minerałów w wodzie. Jeśli nie będą kontrolowane, mogą utrudniać jego działanie. Czyszczenie części wewnętrznych: dodaj 1 łyżkę białego octu do pełnego zbiornika ciepłej wody. Skieruj uchwyt i końcówkę do zlewu. Włącz urządzenie i pracuj, aż zbiornik będzie pusty. Przepłucz, powtarzając czynność pełnym zbiornikiem czystej, ciepłej wody.

Aby osiągnąć optymalną wydajność, proces ten powinien być powtarzany co 1–3 miesiące.

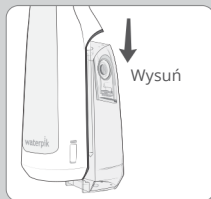

Pielęgnacja baterii

Jeśli irygator Waterpik ma być przechowywany przez dłuższy okres czasu (sześć miesięcy lub dłużej), należy go w pełni naładować przed przechowywaniem. Nie należy wystawiać akumulatora ani urządzenia na działanie nadmiernych temperatur.

Utylizacja/Recykling

Ten produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Akumulator nie jest wymienny. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wyrzucaj go do śmieci domowych ani do pojemników na odpady do recyklingu. Poddaj recyklingowi w najbliższym punkcie recyklingu lub zanieś do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, aby przestrzegać lokalnych przepisów.

W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym wydziałem gospodarki odpadami.



Uwaga: Akumulator nie podlega wymianie, należy go wyjąć dopiero po zakończeniu okresu użytkowania produktu. Proces ten nie jest odwracalny i powoduje unieważnienie gwarancji produktu.

Wyjmowanie baterii

Aby wyjąć akumulator w celu recyklingu, należy całkowicie rozładować akumulator przed wyjęciem. Podczas wykonywania poniższej procedury należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności. Należy chronić oczy, dłonie, palce i powierzchnię, na której się pracuje.

1. Wyjmij zbiornik i owiń jednostkę ręcznikiem. Uderzaj młotkiem, aż dolna pokrywa odpadnie.
2. Wyciągnij akumulator, przetnij przewody. Przetnij przewody akumulatora po jednym.

Uwaga: Nie przecinaj obu przewodów akumulatora jednocześnie.

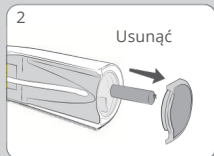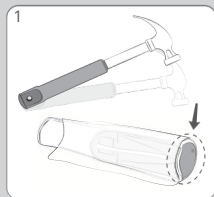

SERWIS I GWARANCJA 12 miesięcy

POLKARD Bis Sp. z o.o. gwarantuje pierwszemu nabywcy nowego urządzenia, że jest ono wolne od wad wykonania i materiałowych w ciągu 1-go roku od daty zakupu urządzenia. Należy zachować i przedłożyć dowodu zakupu urządzenia oraz prawidłowo wypełnioną gwarancję w oryginale. POLKARD Bis Sp. z o.o. naprawi lub wymieni jakąkolwiek część urządzenia, która w naszej opinii jest wadliwa zakładając, iż urządzenie było użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem, nie zostało celowo uszkodzone, ani naprawiane poza autoryzowanymi punktami serwisowymi i było używane zgodnie z powyższą instrukcją obsługi.

Gwarancja nie obejmuje końcówek irygatora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania, należy skontaktować się z serwisem:

POLKARD BIS Sp. z o.o. ul. M. Kotańskiego 2, 10-166 Olsztyn, tel/fax 089/5338777, tel. 089/5334850

w celu naprawy lub wymiany urządzenia. Koszty dostarczenia urządzenia do naprawy pokrywa nabywca natomiast zwrot urządzenia po naprawie gwarancyjnej odbywa się na koszt serwisu. Urządzenie dostarczane jest w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Dystrybucja w Polsce:



Polkard Bis Sp. z o.o. ul. Marka
Kotańskiego 2 10-166 Olsztyn
www.polkardbis.pl
e-mail: handel@polkardbis.pl

Producent:

WaterPik Inc.
1730 East prospect Road Fort
Collins, CO 80553-0001 USA

Jak używać?



Data zakupu:

Nr Seryjny: