


Opis części

1. Po zamontowaniu głowki szczoteczki między dolną częścią głowki a uchwytem pozostanie szczelina o szerokości od 0,5 mm do 1 mm. Ta szczelina ma na celu zapewnienie prawidłowego drgania głowki szczoteczki.
2. Włączenie zasilania: Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć szczoteczkę.
3. Przelłączanie trybów: W ciągu 4 sekund od włączenia szczoteczki, naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby zmienić tryb.
4. Wstrzymaj: Po 4 sekundach pracy w dowolnym trybie, naciśnij ponownie przycisk, aby wstrzymać działanie. Po 20 sekundach przerwy szczoteczka wyłączy się automatycznie.
5. Wyłączenie zasilania: W ciągu 4 sekund od uruchomienia można przełączyć się między wszystkimi trybami. Po przełączeniu naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć szczoteczkę.
6. Pierścień świetlny podzielony jest na cztery obszary, odpowiadające czterem częściom jamy ustnej: lewa góra, lewa dół, prawa góra i prawa dół. Po zakończeniu szczotkowania pierścień świetlny informuje o dokładności czyszczenia – pominięte obszary zaświecą się na czerwono.
7. Lampki wskaźników trybu: Od lewej do prawej, pierwsze, drugie i trzecie światła oznaczają kolejno tryb delikatny (Soft Mode), tryb czyszczenia (Clean Mode) oraz tryb wybielania (Whitening Mode).

Rozmiar: 26,8 × 27,72 × 250,45 mm (w tym głowka szczoteczki)

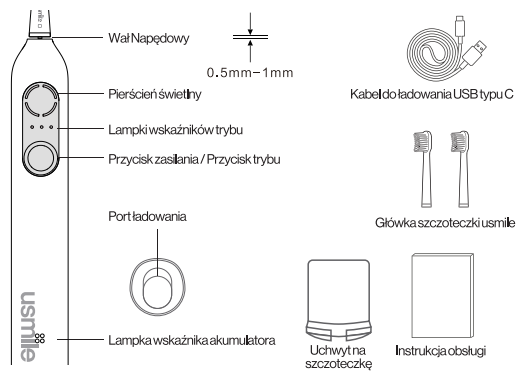

Środki ostrożności

- Proszę uważnie przeczytać następujące instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem.
1. Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
2. Ten produkt należy używać wyłącznie z bezpiecznym napięciem bardzo niskim (SELV) zgodnym ze specyfikacją podaną na etykiecie produktu.
3. Nie wystawiaj produktu ani akumulatora na działanie nadmiernego ciepła. Uwaga: Metalowe przedmioty mogą powodować zwarcia na akumulatorze lub jej zaciskach.
4. Akumulator zawarty w tym produkcie może być wymieniany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
5. Jako urządzenie klasy III, produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku z SELV.
6. Nie demontuj produktu, chyba że przygotujesz się do jego utylizacji. Przed wyjęciem baterii należy odłączyć zasilanie i całkowicie rozładować akumulator. Użyj odpowiednich narzędzi, aby otworzyć plastikową obudowę, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora lub spowodowania zwarcia. Po wyjęciu należy odciąć przewody akumulatora i wyrzucić go do przeznaczonego do tego pojemnika na zużyte akumulatory.
7. Ten produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie ładuj urządzenia w pobliżu otwartego ognia, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w środowisku o wysokiej temperaturze lub wilgotności, ponieważ może to spowodować wyciek, przegrzanie lub eksplozję. Po naładowaniu odłącz kabel ładujący i wyjmij wtyczkę z gniazda.
8. Nie próbuj samodzielnie modyfikować, naprawiać ani demontować produktu. Nie używaj produktu podczas kąpieli, prysznica lub w saunie. Upewnij się, że kabel do ładowania oraz porty są suche i czyste przed ładowaniem. Nie należy usuwać płam na siłę, aby nie naruszyć bezpieczeństwa ładowania.
9. Jeśli cierpisz na ciężkie zapalenie przyzębia, jesteś w trakcie leczenia stomatologicznego lub odczuwasz dyskomfort w jamie ustnej, przed użyciem skonsultuj się ze swoim dentystą. Jeśli nosisz aparat ortodontyczny lub masz uzupełnienia, protezy lub implanty, używaj produktu wyłącznie zgodnie z zaleceniami dentysty.
10. Podczas początkowego okresu adaptacji może wystąpić drobne krwawienie dziąseł. Objawy zazwyczaj ustępują w ciągu 1–2 tygodni. Jeśli krwawienie utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie, może to wskazywać na nieprawidłowy stan dziąseł. Natychmiast przerwij używanie i skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.
11. Sprawdź stan produktu przed użyciem. Należy natychmiast zaprzestać użytkowania, jeśli pojawią się oznaki uszkodzenia, pęknięcia lub rdzy. Jeśli wtyczka zasilania lub kabel są uszkodzone, należy je wymienić przed dalszym użytkowaniem.
12. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w zakresie higieny jamy ustnej. Jeśli podczas używania pojawi się dyskomfort lub ból, natychmiast przerwij stosowanie i skonsultuj się z dentystą.

13. Ten produkt spełnia normy bezpieczeństwa elektromagnetycznego. Jeśli używasz wszczepialnego urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub producentem produktu.
14. Trzymaj ten produkt poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci. Produkt zawiera małe elementy, takie jak nasadki szczoteczki, które mogą stwarzać zagrożenie zadławienia. Po wymianie główek szczoteczki należy niezwłocznie wyrzucić stare osłonki główek szczoteczki.
15. W normalnych lub nietypowych warunkach należy używać wyłącznie źródeł zasilania o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 15 W.

Elektromagnetyka  
Kompatybilność elektromagnetyczna

Ten produkt spełnia wszystkie odpowiednie normy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Urządzenie jest bezpieczne w użyciu, jeśli jest obsługiwane zgodnie z niniejszą instrukcją. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące rozruszników serca lub innych wszczepialnych urządzeń medycznych, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub producentem produktu.

Procedura szczotkowania



Uwaga: Szczoteczka zmienia częstotliwość wibracji co 30 sekund, aby przypomnieć o zmianie obszaru szczotkowania. Po 2 minutach częstotliwość zmieni się trzy razy, wskazując zalecany czas szczotkowania. Po 4 minutach szczoteczka automatycznie się wyłączy. Zalecamy szczotkowanie przez co najmniej 2 minuty za każdym razem.

Opis trybu

**Tryb delikatny:** czyści zęby z delikatną intensywnością, odpowiedni dla wrażliwych dziąseł lub początkujących.


**Tryb Czyszczenia:** czyści zęby ze standardową intensywnością, odpowiedni do codziennego czyszczenia.

**Tryb wybielania:** czyści zęby z wysoką intensywnością dla głębokiego czyszczenia.

Uwaga: Domyślny czas szczotkowania wynosi 4 minuty. Szczoteczka automatycznie wyłączy się po 4 minutach.

Ładowanie

1. Szczoteczka została naładowana przed opuszczeniem fabryki i jest gotowa do użycia.
2. Gdy dioda LED miga na czerwono, prosimy naładować szczoteczkę jak najszybciej. Akumulator naładuje się całkowicie w ciągu 4–5 godzin.
3. Naładuj szczoteczkę za pomocą ładowarki USB zgodnej z obowiązującymi normami. Umieść szczoteczkę w suchym miejscu podczas ładowania.
4. Spróbuj naładować szczoteczkę przed całkowitym rozładowaniem akumulatora.

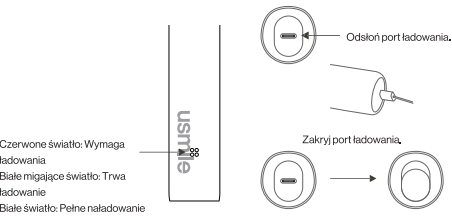

Ochrona środowiska

Szczoteczka soniczna usmle zawiera wbudowany akumulator litowy, który można wielokrotnie ładować. Nie wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi. Proszę przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Zużyte akumulatory należy poddać odpowiedniemu recyklingowi.

Ostrzeżenie: Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że został całkowicie rozładowany.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu: Soniczna szczoteczka elektryczna usmle P10 PRO  
Nazwa marki: usmle  
Numer modelu: P10 PRO  
Moc znamionowa wejściowa: 5W  
Napięcie znamionowe: 5V/1A  
Stopień wodoodporności: IPX8  
Specyfikacja akumulatora: Akumulator litowy 2500mAh  
Producent: Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.  
Infolinia obsługi klienta: service@usmle.com  
Wyprodukowano w Chinach

Rodzaje usterek i metody rozwiązywania problemów

| Zjawiska związane z usterekami                         | Możliwe przyczyny                                     | Rozwiązania                                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Przycisk nie włącza się                                | W stanie ochrony przed przeładowaniem                 | Odłączony w celu ładowania                                               |
|                                                        | Niski poziom naładowania baterii                      | Podłączony do przewodu zasilającego w celu ładowania                     |
| Nie można włożyć głowki szczoteczki do wału napędowego | VCiała obce w gnieździe głowki szczoteczki            | Użyj narzędzia, aby usunąć ciała obce z gniazda w główce szczoteczki.    |
|                                                        | Ciała obce przyklepione do wału napędowego            | Wyczyść wał napędowy                                                     |
|                                                        | Nie wykryto oryginalnej głowki szczoteczki usmle      | Wymień ją na oryginalną główkę szczoteczki usmle                         |
| Wibracje głowki szczoteczki są słabe                   | Głowka szczoteczki nie została prawidłowo zamontowana | Zamontuj ponownie główkę szczoteczki                                     |
|                                                        | Ciała obce między główką szczoteczki a uchwytem       | Wyjmij główkę szczoteczki i usuń ciała obce                              |
| Podczas ładowania nie wyświetla się ikona ładowania    | Nieprawidłowe podłączenie zasilania                   | Podłącz prawidłowo do źródła zasilania                                   |
| Zbyt krótki czas pracy po ładowaniu                    | Temperatura otoczenia jest zbyt niska                 | Ładowanie i użytkowanie w pomieszczeniach o temperaturze od 15°C do 35°C |
|                                                        | Czas ładowania jest zbyt krótki                       | Moc ładowania produktu                                                   |