



BOOSTER PRO MINI

Instrukcje użytkownika

Proszę przeczytać przed użyciem.

Instrukcja obsługi

GLÓWNE INFORMACJE TECHNICZNE

Technologia Wchłaniania Produktów (Glow Poration)

Booster Pro Mini został zaprojektowany, aby wspomagać skuteczniejsze wchłanianie produktów pielęgnacyjnych przez skórę.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Instrukcje obsługi

- Naciśnij i przytrzymaj ❷ przycisk zasilania przez 2-3 sekundy, Po włączeniu ❸ wyświetlacz LED w 3 kolorach zapali się z efektem dźwiękowym „ON”
- Po włączeniu urządzenia automatycznie zostanie ustawiony na poziom 1 z dźwiękiem powiadomienia. Naciśnij przycisk ❷ Poziom aby dostosować ustawienie. Każde naciśnięcie przycisku zwiększy poziom o 1, a urządzenie wyda odpowiedni komunikat głosowy.
- Naciśnij przycisk LED ❷ dwa razy, aby wybrać kolor podświetlenia LED.
*Kolor LED zmienia się na niebieski po dwukrotnym naciśnięciu przycisku.
- Podczas użytkowania, czas pracy urządzenia będzie ogłaszany co minutę za pomocą komunikatu głosowego. Jeśli urządzenie będzie używane przez ponad 5 minut, automatycznie się wyłączy.

- Zaleca się stosowanie 1-3 razy dziennie. Proszę postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania.
- Upewnij się, że głowica urządzenia jest w pełnym kontakcie ze skórą, co wspomaga skuteczne wchłanianie produktów pielęgnacyjnych.
- Unikaj stosowania bezpośrednio po zabiegach lub operacjach oraz skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.
- Zaleca się stosowanie niskiego poziomu intensywności w okolicach oczu/nosa/ust oraz unikanie stosowania w okolicy jabłka Adama.
- Podczas pierwszego użycia upewnij się, że zaczynasz od poziomu 1 i stopniowo dostosowujesz odpowiedni poziom intensywności.

- W celu zachowania higieny, po każdym użyciu dokładnie wyczyść głowicę urządzenia ❶ za pomocą suchej szmatki lub wacika, a następnie przechowuj je w odpowiednim miejscu.
 - Ładowanie urządzenia odbywa się przez podłączenie ładowarki typu C do portu ładowania, który znajduje się na dole urządzenia.
* Gdy poziom baterii jest niski, urządzenie automatycznie się wyłączy i wyda powiadomienie o niskim poziomie naładowania.
* Podczas ładowania, zielone światło będzie migać ❸ na wyświetlaczu LED. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, zielone światło ❸ pojawi się na wyświetlaczu LED.
* Po podłączeniu urządzenia usłyszysz dźwięk nawiązania połączenia, a urządzenie nie będzie działać podczas ładowania.
- 

Wykorzystaj pełny potencjał swojego BOOSTER PRO MINI
Pobierz aplikację AGE-R za darmo, aby korzystać z BOOSTER PRO MINI w sposób bardziej profesjonalny i wygodny, z dostępem do ekspertów K-Beauty i porad pielęgnacyjnych.
*Zeskanuj kod QR lub wyszukaj AGE-R w sklepie z aplikacjami.

Zestaw zawiera

Urządzenie BOOSTER PRO MINI, instrukcja obsługi

01



02

Podstawowe zasady użytkowania

Po oczyszczeniu skóry nałóż odpowiednią ilość produktu pielęgnacyjnego. Upewnij się, że głowica jest w pełnym kontakcie z powierzchnią skóry, a następnie delikatnie masuj. Urządzenie jest wyposażone w czujnik kontaktu ze skórą, działa tylko wtedy, gdy jest w kontakcie ze skórą.

Przewodnik po kolorach LED

*Naciśnij przycisk LED dwa razy, aby zmienić kolor podświetlenia LED.



Środki ostrożności przed użyciem

Podczas pierwszego użycia upewnij się, że zaczynasz od poziomu 1 i stopniowo dopasowujesz odpowiedni poziom intensywności.



Środki ostrożności podczas użytkowania i przechowywania

Środki ostrożności podczas używania

- Uważaj, aby nie upuścić urządzenia ani nie narażać go na wstrząsy.
- Upewnij się, że do wnętrza głównej jednostki nie dostanie się woda ani kosmetyki.
- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, nie rozbieraj go samodzielnie – zamiast tego skontaktuj się z obsługą klienta.
- Zdejmij wszystkie metalowe akcesoria mające kontakt z ciałem użytkownika.

Środki ostrożności dotyczące przechowywania

- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i z dala od wilgoci.
- Nie przechowuj w miejscach, gdzie występują pola magnetyczne lub elektryczne.
- Po użyciu wyczyść głowicę wilgotną chusteczką, ściereczką lub miękkim ręcznikiem i przechowuj ją w suchym miejscu.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że zasilanie urządzenia jest wyłączone.
- Do czyszczenia nie używaj substancji łatwopalnych, takich jak benzyna lub benzen, ponieważ mogą powodować reakcje chemiczne, odbarwienia i deformacje.

Środki ostrożności dla użytkownika

Nie używaj urządzenia, jeśli źle się czujesz, spożyłeś alkohol, bierzesz środki nasenne, jesteś zmęczony lub w trakcie leczenia. Jeśli pojawi się ból lub nietypowe objawy, natychmiast przerwij używanie. Częste używanie w tym samym miejscu lub niewłaściwe użycie może uszkodzić skórę. W razie niepokojących zmian na skórze skonsultuj się z lekarzem.
* Osoby z wrażliwą skórą mogą mieć lekkie zaczerwienienie. Przeczytaj instrukcję i stosuj odpowiednią pielęgnację po użyciu.

Nie używaj urządzenia w następujących przypadkach:

- Zaczerwienienie lub pieczenie skóry spowodowane nadmiernym opalaniem.
- Alergie, szczególnie w przypadku bardzo wrażliwej skóry.
- Wszczepione elektroniczne urządzenia w ciele (np. rozrusznik serca).
- Używanie z elektronicznych urządzeń podtrzymujących życie (np. sztuczne serce lub płuca).
- Wszczepione elektroniczne urządzenia medyczne (np. aparat EKG).
- Długotrwałe przyjmowanie leków hormonalnych na bazie sterydów.
- Choroby wątroby lub objawy rozszerzenia naczyń krwionośnych.
- Trwające leczenie ambulatoryjne.
- Miejsca z zapalnym trądzikiem.

Specyfikacja baterii

Oznaczenie jakości zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie urządzeń elektrycznych i produktów konsumenckich – raport potwierdzający bezpieczeństwo nr YU10492-24006.

Nazwa modelu: 602053, **Nazwa:** Akumulator litowo-jonowy (Li-Ion)
Parametry znamionowe: 3,7 V, 700 mAh, **Producent:** Dongguan Golden Cel Battery Co., Ltd. **Wyprodukowano w Chinach.**


Polityka wymiany / zwrotów

Gwarancja

Na wszystkie urządzenia Age-R udzielamy **ograniczonej gwarancji na okres 1 roku od daty zakupu**. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo z powodu wady produkcyjnej, **wymienimy je bezpłatnie w ciągu 1 roku**.

- Wypadku, obejmującego użytkownika lub modyfikacji.
 - Używania nieautoryzowanych akcesoriów lub użytkowania niezgodnego z instrukcją.
 - Podłączenia do niewłaściwego prądu lub napięcia.
- Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy urządzenie jest używane z **oryginalnymi, autoryzowanymi akcesoriami**.
- Zwroty**
Zwroty urządzeń Age-R należy zgłosić w **ciągu 30 dni od otrzymania produktu**.
- Zwrot z powodu zmiany decyzji: możliwy tylko w ciągu 30 dni i tylko wtedy, gdy produkt jest oryginalnie zapieczętowany i nieotwarty.
- W przypadku takiego zwrotu koszt wysyłki pokrywa klient.
- Przy zamówieniach międzynarodowych klient pokrywa opłaty celne oraz koszty zwrotnej wysyłki.
- Produkt uszkodzony lub wadliwy:** 1) Skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta e-mailem, podając następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer zamówienia. Możesz również dołączyć zdjęcie lub nagranie wideo przedstawiające problem.

Zalecana metoda użytkowania

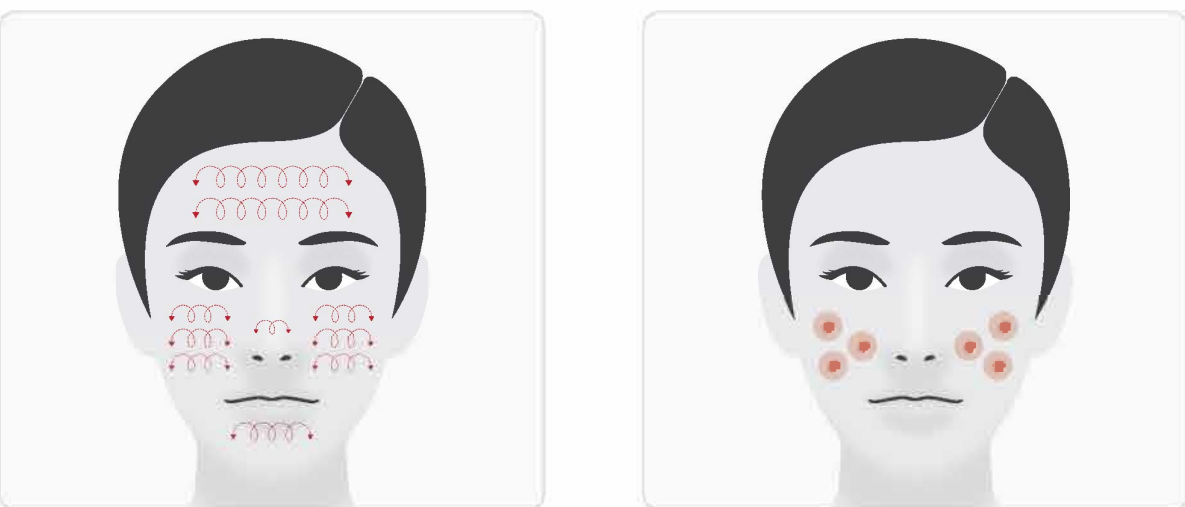

Metoda Hydracji i Promienistości

Rollowanie głowicy po skórze w ruchu okrężnym.

Metoda Intensywnej Pielęgnacji Miejscowej

Naciśnij głowicę na skórze i trzymaj przez 2-3 sekundy przed przejściem do kolejnego miejsca.

- Nie używaj urządzenia razem z innymi urządzeniami elektrycznymi, np. poduszkami grzewczymi.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym; nie umieszczaj urządzenia ani kabla w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie trzymaj urządzenia długo w jednym miejscu podczas używania – należy je przesuwać.
- Używaj ostrożnie – kontakt z innymi przedmiotami może spowodować awarię.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż wskazane w instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz problemy z czuciem (np. po paraliżu).
- Nie stukaj głowicą urządzenia o twarde powierzchnie.
- Nie uderzaj ani nie upuszczaj urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w wysokiej temperaturze, wilgotności lub w zakurzonej atmosferze.
- Podczas używania zachowaj odległość od innych urządzeń elektrycznych.
- Nie używaj urządzenia na nierównej powierzchni, na ranach ani w miejscach po zabiegach chirurgicznych.
- Nie używaj urządzenia przy napięciu innym niż znamionowe – może to spowodować pożar, porażenie prądem lub awarię.
- Nie dotykaj urządzenia ani kabla mokrymi rękami – grozi to porażeniem prądem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani rozbierać urządzenia – może to spowodować awarię.
- Urządzenie nie działa podczas ładowania.
- Abby zapewnić prawidłowe rozpoznawanie skóry, trzymaj urządzenie, obejmując jego główną część dłonią.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych tylko pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie używaj produktu w pobliżu wanien, pryszniców ani miejsc wypełnionych wodą.

03

- Obszary z zapaleniem skóry spowodowanym kosmetykami lub u osób z atopowym zapaleniem skóry.
- Miejsca ze zmianami skórnymi z towarzyszącym swędzeniem lub spowodowanymi podrażnieniem.
- Obszary z metalem, plastikiem, silikonem lub innymi ciałami obcymi w organizmie.
- Osoby z chorobami krwi, chorobami serca, ostrymi chorobami, krwawieniami, nowotworami złośliwymi, złamaniami, chorobami zakaźnymi, obrzękami, urazami, chorobami skóry, a także kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz osoby starsze.
- * Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku kosmetycznego. Nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją i ostrzeżeniami. W razie problemów zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem.
- ** Produkt przeznaczony do użytku domowego, nie do zastosowań profesjonalnych.

Urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega następującym warunkom:

- Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- Urządzenie musi tolerować wszelkie zakłócenia z zewnątrz, nawet jeśli mogą one powodować nieprawidłowe działanie.

Uwaga: Spowodowanie zmian lub modyfikacji niezatwierdzonych przez podmiot odpowiedzialny za zgodność może spowodować utratę prawa do korzystania z urządzenia.

Specyfikacja

Nazwa modelu: ME-BPRM-K **Nazwa produktu:** MEDICUBE AGE-R BOOSTER PRO MINI **Sprzedawca:** APR US INC., 41 Greenfield Irvine, CA 92614 (medicube_uscs@apr-in.com) **Producent:** APR FACTORY Co., Ltd., 107 Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seul, Republika Korei Wyprodukowano dla: APR Co., Ltd., 36F, 300 Olympic-ro, Songpa-gu, Seul, Republika Korei
Nr rejestracyjny KC: R-R-pg1-ME-BPRM **Data produkcji:** podana oddzielnie na produkcie
Wymiary produktu: $\Phi 25,5 \times 155,5$ mm ($1,0 \times 6,1$ cala) **Napięcie wejściowe:** DC 5 V / maks. 2 A (USB-C) **Bateria:** DC 3,7 V / 700 mAh **Pobór mocy:** maks. 1 W ($3,7 \text{ V} \times 250 \text{ mA}$) **Waga:** 75 g (0,17 lb) **Czas ładowania:** ok. 4 godziny

05

- Po otrzymaniu zgłoszenia wyślemy e-mail z potwierdzeniem (odpowiedź z obsługi klienta zazwyczaj zajmuje 2–3 dni robocze).
- Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej odeślij produkt do naszego magazynu na wskazany adres zwrotu.
- Adres zwrotu zostanie podany w e-mailu potwierdzającym.
- Po otrzymaniu produktu w naszym magazynie sprawdzimy jego stan. Jeśli zostanie stwierdzona wada, dokonamy wymiany i wyślemy nowy produkt.

Zalecenia dotyczące utylizacji i ładowania baterii litowej

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować pożar lub eksplozję. Należy przestrzegać poniższych zasad.

1. Obsługa baterii

- Jeśli bateria jest spuchnięta lub uszkodzona, natychmiast skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą.
- Używaj wyłącznie ładowarki przeznaczonej do tego urządzenia.
- Trzymaj baterie z dala od ognia.
- Nie wkładaj baterii do kuchenki mikrofalowej.
- Nie pozostawiaj urządzenia w samochodzie w upalne dni.
- Nie używaj w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności (np. sauna).
- Nie przykrywaj urządzenia kocem.
- Po zakończeniu ładowania odłącz zasilanie.
- Uważaj, aby metalowe przedmioty (np. naszyjniki, monety, klucze, zegarki) nie dotykały styków baterii.
- Używaj wyłącznie baterii zalecanej przez producenta.
- Nie rozbieraj, nie zginałaj i nie przebijaj baterii.
- Nie upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na silne uderzenia.
- Nie wystawiaj baterii na temperaturę powyżej 50°C.
- Chroń baterię przed wilgocią.

2. Utylizacja baterii

Nie wyrzucaj zużytej baterii do ognia ani nie spalaj jej. Baterię należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

3. Zalecenia dotyczące ładowania

- Nie ładuj baterii dłużej niż wskazano w instrukcji.

Uwaga: Czas ładowania może się różnić w zależności od stanu baterii, temperatury otoczenia oraz warunków ładowania. Specyfikacja produktu i wygląd mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu ulepszenia produktu.

medicube.us 06