


Maska LED do rąk

# Skin Ritual Hands

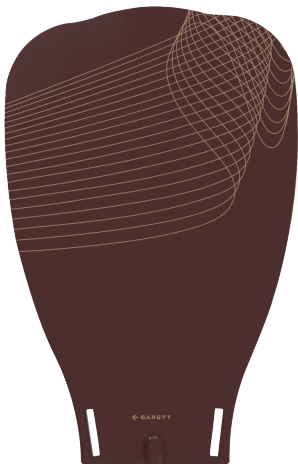

Instrukcja obsługi

---

# Dziękujemy za zakup urządzenia **Garett Beauty Skin Ritual Hands**

## **Spis treści**

- 1. Spis treści - s. 2**
- 2. Szybki start - s. 2**
- 3. O produkcie - s. 3**
- 4. Funkcje produktu - s. 5**
- 5. Specyfikacja techniczna - s. 6**
- 6. Opis produktu - s. 7**
- 7. Instrukcja użytkowania - s. 8**
- 8. Tryby pracy urządzenia - s. 9**
- 9. Rozszerz swój rytuał z Garrett Beauty - s. 12**
- 10. Zobacz, jak Pani Kosmetolog korzysta z tych urządzeń w serii „Okiem Ekspertki” na naszym kanale YouTube! - s. 13**
- 11. Odkryj wszystkie urządzenia Garrett Beauty - s. 13**
- 12. FAQ - najczęściej zadawane pytania - s. 14**
- 13. Uwagi dla użytkowników - s. 16**
- 14. Naprawa i konserwacja - s. 17**
- 15. Rozwiązywanie problemów - s. 19**
- 16. Gwarancja i reklamacja - s. 20**

## **Szybki start**

- 1. Naładuj urządzenie za pomocą kabla USB-C (pełne ładowanie trwa ok. 2 godziny).**
- 2. Oczyszczyć i osuszyć skórę dłoni.**
- 3. (Opcjonalnie) Nałóż na dłonie serum lub krem – światło LED wspomaga wchłanianie składników aktywnych.**
- 4. Umieść dłoń wewnątrz maski LED.**
- 5. Przytrzymaj przycisk zasilania (ok. 2 sekundy), aby włączyć urządzenie.**
- 6. Wybierz kolor światła i czas zabiegu przy użyciu przycisków trybu i czasu.**
- 7. Zrelaksuj się – zabieg trwa 15–30 minut (zależnie od wybranego czasu), po czym urządzenie wyłączy się automatycznie.**
- 8. Po zakończeniu wyjmij dłoń i przetrzyj maskę wilgotną szmatką.**

## O produkcie

**Garett Beauty Skin Ritual Hands** to nowoczesne urządzenie do regeneracji i pielęgnacji skóry dłoni z zastosowaniem światła LED. Wykorzystując technologię fotonową i siedem rodzajów światła o różnej długości fali, wspomaga procesy odnowy skóry, poprawia jej elastyczność, rozjaśnia przebarwienia i działa przeciwstarzeniowo. Dzięki zastosowaniu zimnego światła oraz elastycznego silikonu, urządzenie jest bezpieczne i komfortowe w codziennym użytkowaniu. Maska skutecznie redukuje oznaki zmęczenia skóry, wzmacnia mikrokrążenie i stymuluje produkcję kolagenu – dla widocznie gładziej, młodziej i lepiej odżywionych dłoni.

### **KIERUNKI DZIAŁANIA:**

- intensywnie regeneruje i odmładza skórę dłoni
- stymuluje produkcję kolagenu i elastyny
- rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt skóry
- poprawia jędrność i elastyczność naskórka
- wspiera mikrokrążenie i dotlenienie komórek
- działa przeciwzapalnie i łagodząco na podrażnienia
- redukuje widoczność zmarszczek i oznak starzenia
- poprawia strukturę i gładkość skóry
- wspomaga gojenie i regenerację skóry zniszczonej np. słońcem lub przesuszeniem
- wspiera detoksykację i oczyszczenie skóry

### **WSKAZANIA:**

- sucha, odwodniona i szorstka skóra dłoni
- oznaki starzenia – zmarszczki, utrata jędrności i elastyczności
- przebarwienia posłoneczne i hormonalne
- szary, zmęczony lub nierówny koloryt skóry
- skóra wymagająca regeneracji po częstym myciu i dezynfekcji
- wiotka skóra z widocznymi oznakami starzenia
- skóra narażona na działanie czynników zewnętrznych (słońce, mróz, detergenty)
- dłonie wymagające odnowy po zabiegach kosmetycznych lub dermatologicznych

## **PRZECIWSKAZANIA:**

### **Stany zdrowotne i leki:**

- ciąża oraz okres karmienia piersią – ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo
- epilepsja i inne schorzenia neurologiczne, w tym nadwrażliwość na migające światło
- nadwrażliwość na światło (fotodermatozy, toczeń rumieniowaty)
- stosowanie leków i kosmetyków światłouczulających, m.in. retinoidów, tetracyklin, niektórych ziół (np. dziurawca)
- choroby nowotworowe (obecne lub przebyte – tylko za zgodą lekarza)
- choroby tarczycy lub stosowanie leków hormonalnych (szczególnie przy stosowaniu maski w okolicach przegubów)
- zaburzenia krzepnięcia krwi lub stosowanie leków przeciwzakrzepowych

### **Stan skóry:**

- aktywne infekcje skórne (bakteryjne, wirusowe, grzybicze)
- otwarte rany, oparzenia, zadrapania, skaleczenia
- świeże blizny i niezagojone miejsca po zabiegach dermatologicznych lub chirurgicznych
- poważne podrażnienia, reakcje alergiczne, wysypki nieznanego pochodzenia
- aktywna łuszczyca lub egzema na dłoniach

### **Inne przeciwwskazania:**

- obecność wszczepionych urządzeń elektronicznych (np. rozruszniki serca, neurostymulatory)
- osoby z zaburzoną zdolnością odczuwania temperatury lub dotyku
- osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, które nie są w stanie samodzielnie i bezpiecznie obsługiwać urządzenia
- dzieci i osoby poniżej 16. roku życia – bez nadzoru osoby dorosłej

**UWAGA:** W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zdrowotnych lub trwających terapii farmakologicznych, przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.

## Funkcje produktu

### **Terapia światłem LED (fototerapia)**

Urządzenie **Garett Beauty Skin Ritual Hands** wykorzystuje zaawansowaną technologię fotonową (fototerapię) – metodę znaną już w starożytności jako fotoodmładzanie. Emitując impulsy światła o ściśle określonych długościach fal, dociera w głąb skóry i stymuluje naturalne procesy regeneracyjne. Fototerapia pobudza odbudowę kolagenu i elastyny, poprawia strukturę skóry oraz wspiera jej odnowę od wewnątrz – bez bólu, bezinwazyjnie i bez skutków ubocznych.

Maska Garrett wyposażona jest w **7 rodzajów światła LED**, z których każde ma inne działanie terapeutyczne:

### **Czerwone światło LED (630 nm)**

Poprawia mikrokrążenie i dotlenienie komórek skóry. Pobudza metabolizm i regenerację komórkową, wspiera gojenie i zabliznianie, przyczynia się do zwiększenia elastyczności oraz wygładzenia skóry. Szczególnie skuteczne w terapii przeciwstarzeniowej.

### **Niebieskie światło LED (470 nm)**

Wykazuje silne działanie antybakteryjne i przeciwzapalne. Redukuje nadmiar sebum, zapobiega powstawaniu niedoskonałości i pomaga łagodzić podrażnienia. Polecane przy tendencji do trądziku i stanów zapalnych skóry.

### **Zielone światło LED (520 nm)**

Wspiera redukcję napięcia mięśniowego, relaksuje i wycisza skórę. Pomaga zbalansować gospodarkę sebum, usprawnia mikrokrążenie i sprzyja detoksykacji. Stosowane także w łagodzeniu przebarwień i rozjaśnianiu skóry.

### **Żółte światło LED (590 nm)**

Pobudza układ limfatyczny, przyspiesza drenaż toksyn i działa przeciwobrzękowo. Wspomaga regenerację skóry wrażliwej, poprawia koloryt i przywraca cerze zdrowy blask. Redukuje rumień i zaczerwienienia.

### **Fioletowe światło LED (640 nm)**

Łączy działanie światła czerwonego i niebieskiego. Sprawdza się w terapii trądziku oraz blizn potrądzikowych. Wpływa korzystnie na koloryt skóry, aktywuje melanocyty i reguluje procesy pigmentacyjne.

### **Białe światło LED (510 nm)**

Wspiera regenerację skóry, działa rozświetlająco i łagodząco. Pomaga poprawić strukturę naskórka, niweluje oznaki zmęczenia oraz przywraca skórze witalność.

### **Cyjanowe światło LED (495 nm)**

Stymuluje głębokie warstwy skóry, przyspiesza metabolizm komórkowy, redukuje drobne zmarszczki i poprawia elastyczność. Skuteczne w przypadku szarej, matowej i zmęczonej skóry dłoni.


**Uwaga:** Każdy kolor światła działa indywidualnie i może być dostosowany do aktualnych potrzeb skóry - użytkownik ma możliwość wyboru długości oraz intensywności terapii.

## **Specyfikacja techniczna**

<b>Nazwa produktu: Garrett Beauty Skin Ritual Hands</b>	
Pojemność baterii: 2000 mAh	Liczba diod LED: 150 (3 w każdej z 50 punktów świetlnych)
Typ zasilania: USB-C	Moc: 5 W
Waga produktu (netto): 389 g	Wymiary: 250x160x10 mm

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie [www.garett.pl](http://www.garett.pl). Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

# Opis produktu

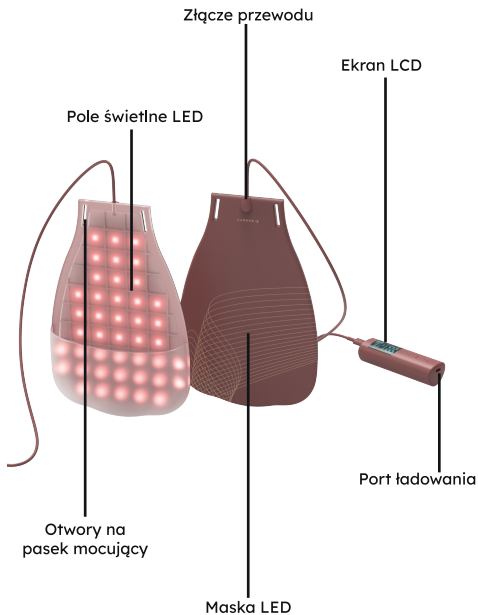

## Instrukcja użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
2. W przypadku braku reakcji na naciśnięcie przycisku zasilania – podłącz kontroler do źródła zasilania za pomocą kabla USB-C.
3. Przed nałożeniem maski oczyść skórę dłoni i dokładnie osusz ją miękkim ręcznikiem.
4. Jeśli chcesz, możesz nałożyć na skórę dłoni ulubiony krem lub serum – fototerapia może wspomóc wchłanianie substancji aktywnych.
5. Umieść dłoń wewnątrz maski LED – tak, aby cała ich powierzchnia przylegała do skóry.
6. Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** przez około 2 sekundy, aby uruchomić urządzenie.
7. Wybierz **kolor światła** odpowiedni do potrzeb skóry za pomocą przycisku trybu.
8. Ustaw **czas zabiegu** – zalecany czas to od 15 do 30 minut.
9. W razie potrzeby dostosuj **natężenie światła**, naciskając przycisk intensywności.
10. Podczas zabiegu pozostaw dłoń w spoczynku – np. połóż ją wygodnie na kolanach lub na stole.
11. Po zakończeniu terapii urządzenie wyłączy się automatycznie lub możesz je wyłączyć ręcznie, przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy.
12. Wyjmij dłoń z maski, oczyść skórę (jeśli stosowano kosmetyki), a następnie delikatnie przetrzyj maskę miękką, wilgotną szmatką. **Unikaj używania środków żrących lub alkoholu.**

**Zalecana częstotliwość użytkowania:** 3-5 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb skóry.

# Tryby pracy urządzenia

## 1. TRYB CZERWONY

### Funkcje:

- czerwone światło LED (630 nm)
- 4 poziomy intensywności światła - regulowane przyciskiem

### Charakterystyka:

Poprawia mikrokrążenie i dotlenienie komórek skóry. Stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, wygładza powierzchnię skóry i redukuje drobne zmarszczki. Wzmacnia strukturę skóry dłoni, zwiększając jej jędrność i elastyczność.

### Czas pracy:

Zalecany czas zabiegu to 15-30 minut, dostosowany do indywidualnych potrzeb skóry.

### Częstotliwość:

3-5 razy w tygodniu

## 2. TRYB NIEBIESKI

### Funkcje:

- niebieskie światło LED (470 nm)
- 4 poziomy intensywności światła

### Charakterystyka:

Wykazuje działanie antybakteryjne i przeciwzapalne. Pomaga ograniczyć produkcję sebum, łagodzi podrażnienia i wspiera walkę z niedoskonałościami skóry dłoni.

### Czas pracy:

15-30 minut

### Częstotliwość:

3-4 razy w tygodniu

## 3. TRYB ZIELONY

### Funkcje:

- zielone światło LED (520 nm)
- 4 poziomy intensywności światła

**Charakterystyka:**

Działa kojąco, wspomaga równowagę skóry i poprawia mikrokrążenie. Redukuje napięcia skóry oraz wspiera łagodzenie przebarwień i nierównomiernego kolorytu.

**Czas pracy:**

15-30 minut

**Częstotliwość:**

2-4 razy w tygodniu

**4. TRYB ŻÓŁTY****Funkcje:**

- żółte światło LED (590 nm)
- 4 poziomy intensywności światła

**Charakterystyka:**

Wspomaga drenaż limfatyczny, redukuje obrzęki i rozjaśnia skórę. Wzmacnia skórę wrażliwą, przywraca jej zdrowy wygląd i naturalny blask.

**Czas pracy:**

15-30 minut

**Częstotliwość:**

3-5 razy w tygodniu

**5. TRYB CYJANOWY****Funkcje:**

- cyjanowe światło LED (495 nm)
- 4 poziomy intensywności światła

**Charakterystyka:**

Pobudza metabolizm komórkowy, wspiera procesy oczyszczania skóry i nadaje jej świeży wygląd. Idealny przy oznakach zmęczenia i utracie blasku.

**Czas pracy:**

15-30 minut

**Częstotliwość:**

2-4 razy w tygodniu

**6. TRYB BIAŁY****Funkcje:**

- białe światło LED (510 nm)
- 4 poziomy intensywności światła

**Charakterystyka:**

Działa rozświetlająco i wspomaga regenerację skóry. Pomaga przywrócić równowagę, łagodzi podrażnienia i poprawia ogólną kondycję skóry dłoni.

**Czas pracy:**

15-30 minut

**Częstotliwość:**

3-5 razy w tygodniu

**7. TRYB FIOLETOWY****Funkcje:**

- fioletowe światło LED (640 nm)
- 4 poziomy intensywności światła - regulowane przyciskiem

**Charakterystyka:**

Fioletowe światło łączy właściwości czerwonego i niebieskiego światła, dzięki czemu działa zarówno regenerująco, jak i przeciwzapalnie. Pomaga w redukcji blizn potrądzikowych, przebarwień oraz stanów zapalnych. Poprawia koloryt skóry i wspomaga odbudowę naskórka.

**Czas pracy:**

15-30 minut, dostosowane do reaktywności skóry.

**Częstotliwość:**

3-5 razy w tygodniu

## Rozszerz swój rytuał z Garrett Beauty

**Skin Ritual Hands** to tylko jeden z etapów domowej pielęgnacji skóry. Poznaj inne urządzenia **Garrett Beauty**, które wspierają codzienny rytuał pielęgnacyjny:

### **Garrett Beauty Refresh Scrub**

Peeling kawitacyjny i sonoforeza – delikatne, ale skuteczne oczyszczanie skóry twarzy.



### **Garrett Beauty Bright Skin**

EMS, radiofrekwencja RF i światło LED – lifting, poprawa napięcia i regeneracja skóry twarzy.



### **Garrett Beauty Fresh Eye**

Masażer do okolic oczu z funkcją chłodzenia i ogrzewania – redukcja opuchlizny i oznak zmęczenia.



### **Garrett Beauty Perfect Body**

Antycellulitowy masażer próżniowy z funkcją drenażu limfatycznego – wspiera modelowanie sylwetki i poprawia napięcie skóry ciała.



### **Garrett Beauty Multi Care Brush**

Wielofunkcyjne urządzenie do masażu sonicznego i pielęgnacji twarzy – stymulacja skóry, poprawa mikrokrążenia i odprężenie mięśni twarzy.



**Zobacz, jak Pani Kosmetolog korzysta z tych urządzeń w serii „Okiem Ekspertki” na naszym kanale YouTube!**



**Odkryj wszystkie urządzenia  
Garett Beauty**



## FAQ – najczęściej zadawane pytania

### **Jak często mogę stosować maskę LED?**

Zaleca się zabiegi **3–5 razy w tygodniu**, w zależności od potrzeb skóry. W przypadku skóry bardzo wrażliwej lub podrażnionej zaleca się rozpocząć od 2–3 zabiegów tygodniowo i stopniowo zwiększać częstotliwość.

### **Czy można używać maski codziennie?**

Tak, w krótkich seriach (np. 5–7 dni z rzędu), szczególnie przy intensywnych kuracjach regeneracyjnych. Na co dzień zaleca się stosować 3–5 razy w tygodniu.

### **Czy mogę używać maski z kremem lub serum?**

Tak, można nałożyć ulubiony produkt pielęgnacyjny. Światło LED wspiera wchłanianie składników aktywnych.

### **Czy maska LED działa, jeśli nie nałożę żadnego kosmetyku?**

Tak, maska LED skutecznie działa na „gołą” skórę. Jednak stosowanie kremów lub serum może dodatkowo wspomagać efekty zabiegu.

### **Czy maska LED jest bezpieczna dla wszystkich?**

Nie – zapoznaj się z listą przeciwwskazań (np. ciąża, epilepsja, choroby skóry, leki światłouczulające). W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

### **Czy mogę używać maski z manicure hybrydowym/żelowym?**

Tak, maska działa na skórę dłoni i nie wpływa na stylizację paznokci.

### **Dlaczego maska sama się wyłącza?**

Maska wyłącza się automatycznie po upływie ustawionego czasu zabiegu.

### **Czy maska LED nagrzewa się podczas pracy?**

Nie. Urządzenie wykorzystuje zimne światło LED, które nie nagrzewa skóry

### **Jakie światło wybrać do mojego problemu skórniego?**

**Czerwone:** regeneracja, anti-aging, wygładzenie skóry.

**Niebieskie:** antybakteryjne, przy podrażnieniach i skłonnościach do trądziku.

**Zielone:** rozjaśnianie przebarwień, kojenie skóry.

**Żółte:** poprawa kolorytu, drenaż limfatyczny.

**Fioletowe:** blizny, regeneracja, stany zapalne.

**Białe:** ogólna poprawa kondycji skóry.

**Cyjanowe:** zmęczona, matowa skóra, poprawa elastyczności.

### **Co zrobić, jeśli skóra zareaguje podrażnieniem?**

Przerwij stosowanie urządzenia i skonsultuj się z dermatologiem.

### **Czy maska LED jest wodoodporna?**

Nie, maska nie jest wodoodporna. Należy chronić urządzenie przed wilgocią i wodą.

### **Czy maska wymaga specjalnej konserwacji?**

Po każdym użyciu należy delikatnie przetrzeć maskę wilgotną szmatką. Nie wolno zanurzać jej w wodzie ani używać agresywnych środków czyszczących.

## Uwagi dla użytkowników

- 1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.** Nie stosować na inne części ciała niż dłonie.
- 2. Przed rozpoczęciem terapii należy upewnić się, że skóra dłoni jest czysta, sucha i wolna od podrażnień.** Jeśli stosujesz kosmetyki przed zabiegiem, upewnij się, że są one bezpieczne do użycia w połączeniu ze światłem LED.
- 3. Nie stosować w przypadku otwartych ran, oparzeń, silnych stanów zapalnych skóry lub aktywnych infekcji.**
- 4. Nie patrz bezpośrednio w źródło światła LED.** Światło może być intensywne – zaleca się unikać długotrwałego wpatrywania się w diody.
- 5. Nie stosować urządzenia przez osoby:**
  - z nadwrażliwością na światło (fotodermatozy),
  - przyjmujące leki światłouczulające (np. retinoidy, niektóre antybiotyki),
  - cierpiące na epilepsję,
  - będące w ciąży lub karmiące piersią (bez konsultacji z lekarzem),
  - z rozrusznikami serca lub innymi aktywnymi implantami elektronicznymi.
- 6. Podczas użytkowania należy unikać kontaktu urządzenia z wodą, potem lub wilgocią.** Urządzenie nie jest wodoodporne.
- 7. Po zakończonym zabiegu należy wyczyścić urządzenie suchą lub lekko wilgotną, miękką szmatką.** Nie stosować detergentów, alkoholu, acetonu ani innych agresywnych środków czyszczących.
- 8. Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.** Grozi to utratą gwarancji oraz uszkodzeniem sprzętu.
- 9. Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz dzieci.**
- 10. Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są uszkodzenia mechaniczne, nadtopienia, przerwania przewodów lub luzy w złączach.**
- 11. W przypadku wystąpienia nietypowej reakcji skóry (pieczenie, wysypka, silne zaczerwienienie) – przerwij stosowanie i skonsultuj się z dermatologiem.**

# Naprawa i konserwacja

## 1. Czyszczenie urządzenia:

Po każdym użyciu przetrzyj maski LED i kontroler **suchą lub lekko wilgotną, miękką szmatką**. W razie potrzeby użyj łagodnego środka czyszczącego, który nie zawiera alkoholu, acetonu ani innych agresywnych substancji.

**Nie zanurzać w wodzie. Nie płukać pod bieżącą wodą.**

## 2. Dezynfekcja:

W przypadku użytkowania przez więcej niż jedną osobę zaleca się regularną dezynfekcję silikonowej powierzchni maski za pomocą preparatów bezalkoholowych przeznaczonych do delikatnych powierzchni.

## 3. Przechowywanie:

Urządzenie należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i wilgoci.

Najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby chronić elementy przed kurzem i zgnieceniem.

## 4. Ładowanie:

Do ładowania używaj wyłącznie dołączonego kabla USB-C lub innego kompatybilnego zasilacza o napięciu 5V (1A-2A). Unikaj długotrwałego ładowania bez nadzoru.

## 5. Naprawy:

Nie demontuj urządzenia samodzielnie. W przypadku usterki skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub punktem sprzedaży. Samodzielna ingerencja może skutkować utratą gwarancji.

## 6. Uszkodzenia i zużycie:

Nie używaj urządzenia, jeśli:

- kabel lub port ładowania jest uszkodzony,
- kontroler nie reaguje na przyciski,
- silikonowa maska jest zdeformowana, pęknięta lub przegrzana,
- urządzenie wydziela nietypowy zapach, dym lub światło miga w sposób nieprawidłowy.

## 7. Utylizacja:

Urządzenie po zakończeniu użytkowania należy oddać do

punktu selektywnej zbiórki elektroodpadów. Nie wolno wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi.

**i** W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem urządzenia zachęcamy do odwiedzenia zakładki Pomoc Techniczna na naszej stronie internetowej (zeskanuj kod QR/skorzystaj z linku) lub kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)



<https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145>

**Odwiedź nas:**



## Rozwiązywanie problemów

<b>Problem</b>	<b>Możliwe rozwiązanie</b>
Maska nie świeci	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawdź wybór trybu światła.</li><li>2. Odłącz i ponownie podłącz maskę.</li></ol>
Urządzenie nie włącza się	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Naładuj kontroler.</li><li>2. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.</li></ol>
Urządzenie nie ładuje się	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Użyj oryginalnego kabla USB-C z zestawu.</li><li>2. Sprawdź, czy port ładowania nie jest zabrudzony lub uszkodzony.</li></ol>
Zabieg kończy się zbyt szybko	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawdź ustawiony czas zabiegu.</li><li>2. Ustaw dłuższy czas pracy na kontrolerze.</li></ol>
Światło LED miga lub działa niestabilnie	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zrestartuj urządzenie (wyłącz i włącz ponownie).</li><li>2. Odłącz maskę i podłącz ponownie.</li></ol>
Maska się nie nagrzewa	To prawidłowe - maska wykorzystuje zimne światło LED i nie powinna się nagrzewać podczas zabiegu.
Ładowarka nie pasuje do kabla USB-C	Użyj dowolnej ładowarki USB (np. od telefonu), obsługującej napięcie 5V i natężenie 1A-2A.

# Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.

Szczegółowe warunki gwarancji oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej:

**[www.garett.pl](http://www.garett.pl)**

## Producent/Osoba odpowiedzialna na terenie EU:

GARETT sp. z o.o.

ul. Sandomierska 209

25 - 330 Kielce, Polska

**[www.garett.pl](http://www.garett.pl)**

**[kontakt@garett.pl](mailto:kontakt@garett.pl)**



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



**CE** GARETT SPÓŁKA Z O. O. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/30/UE oraz 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.garett.pl](http://www.garett.pl)