


Przegląd Produktu



Wykaz Części w Opakowaniu

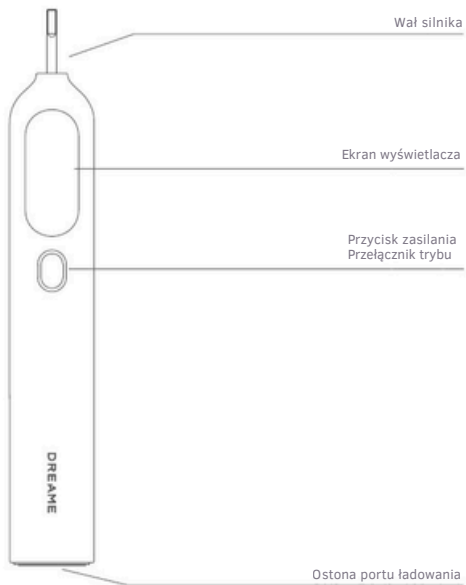

Jednostka główna



Dedykowana główka
szczoteczki*2



Kabel USB do ładowania

Konfiguracja standardowa

Jednostka główna *1, główka szczoteczki*2, kabel USB do ładowania*1, Instrukcja Obsługi" 1

Instrukcje Użytkowania

- **Włączanie:** Przy pierwszym użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć szczoteczkę do zębów.
- **Wybór języka:** Podczas pierwszego uruchomienia naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby wybrać preferowany język, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy w celu potwierdzenia wyboru. Jeżeli podczas późniejszego użytkowania konieczna jest zmiana języka, upewnij się, że szczoteczka do zębów jest podłączona do ładowarki, a następnie dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, aby przechodzić między opcjami językowymi.
- **Wybór trybu:** Gdy ekran jest włączony, naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby zmienić tryb pracy. Jeżeli szczoteczka do zębów pracuje, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wejść do wyboru trybu, a następnie naciśnij krótko, aby przełączać tryby.

Demontaż Akumulatora

To urządzenie zawiera niewymienny akumulator.

Bezpieczeństwo Akumulatora i Ładowania

- Nie narażaj akumulatora na działanie ognia ani bezpośredniego światła słonecznego oraz nie ładuj, nie używaj ani nie przechowuj go w warunkach wysokiej temperatury, ponieważ może to spowodować wyciek akumulatora, przegrzanie lub wybuch.
- Nie używaj produktu podczas ładowania ani wtedy, gdy osłona portu ładowania nie jest prawidłowo zamknięta. Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy napięcie zasilania odpowiada specyfikacji podanej na produkcie.
- Nie modyfikuj, nie demontuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu. Nie owijaj przewodu zasilającego pod napięciem wokół szczoteczki do zębów. Po zakończeniu ładowania niezwłocznie zakończ odłączenie zasilania.
- Nie używaj tego produktu podczas kąpieli, prysznica ani w gorących źródłach. Podczas użytkowania utrzymuj port ładowania w stanie suchym i czystym, aby pozostałe zabrudzenia lub osady nie wpływały na bezpieczeństwo ładowania.
- Do ładowania tego produktu używaj zasilacza 5V = 0,5A. Wyższe napięcie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub spowodować uszkodzenie produktu. Źródło zasilania nie może przekraczać 15W w żadnych warunkach pracy.
- Ten produkt zawiera niewymienny akumulator. Jeżeli produkt ulegnie awarii lub wystąpi niski poziom akumulatora, skontaktuj się z autoryzowanym personelem serwisowym. Jeżeli produkt zostanie uszkodzony w wyniku uderzenia lub upadku, należy zaprzestać jego użytkowania. Demontaż akumulatora musi być przeprowadzony zgodnie z określonymi procedurami.

Środki Ostrożności Podczas Użytkowania

- Nie czyść produktu rozpuszczalnikami, takimi jak rozcieńczalnik do farb, benzyna, alkohol ani innymi podobnymi substancjami chemicznymi. Natychmiast zaprzestań użytkowania produktu, jeżeli zostaną stwierdzone jakiegokolwiek uszkodzenia, ślady korozji lub pęknięcia.
- Podczas pierwszych kilku użyci może wystąpić niewielkie krwawienie dziąseł, ponieważ dziąsła dostosowują się do wysokiej skuteczności czyszczenia. Zjawisko to zazwyczaj ustępuje w ciągu jednego do dwóch tygodni.
- Jeżeli krwawienie utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie lub w dowolnym momencie wystąpi dyskomfort albo ból, należy przerwać użytkowanie i skonsultować się z dentystą. Osoby z ciężkimi chorobami przyzębia, osoby poddawane leczeniu stomatologicznemu lub osoby obawiające się dolegliwości w jamie ustnej powinny przed użyciem tego produktu zasięgnąć porady specjalisty stomatologii.
- Produkt spełnia wymagania norm bezpieczeństwa elektromagnetycznego. Jeżeli posiadasz rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenie medyczne, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia.

Konserwacja i Pielęgnacja

- Po każdym użyciu dokładnie opłucz główkę szczoteczki, aby zapobiec rozwojowi bakterii.
- Regularnie wymieniaj główkę szczoteczki; zalecana wymiana co 3 miesiące.
- Unikaj pozostawiania szczoteczki do zębów w środowisku o nadmiernej wilgotności przez dłuższy czas, ponieważ może to sprzyjać rozwojowi bakterii i skracać żywotność akumulatora.
- Nie narażaj szczoteczki do zębów na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur, ponieważ może to wpłynąć na wydajność akumulatora.
- Unikaj upuszczania lub narażania szczoteczki do zębów na uderzenia, które mogą spowodować uszkodzenie jej wewnętrznych komponentów.
- Regularnie czyść zewnętrzną powierzchnię szczoteczki do zębów oraz połączenie z główką szczoteczki, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Rozwiązywanie Problemów

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Brak możliwości włączenia	Niski poziom akumulatora	Naładuj produkt
	Brak możliwości włączenia podczas ładowania	Odłącz ładowarkę

Polityka Gwarancyjna

- W okresie gwarancji wszelkie problemy jakościowe niezawinione przez użytkownika, (takie jak wady wynikające z procesu produkcyjnego lub różnic komponentów), uprawniają do ubiegania się o bezpłatną wymianę produktu. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wskazanym na dowodzie zakupu.

W szczególności okres gwarancji obowiązuje w następującym zakresie:

Nazwa Produktu	Jednostka główna	Główka szczoteczki
Okres Gwarancji	1 Lat	Wyłączenia z zakresu gwarancji.

Jeżeli lokalne przepisy o ochronie konsumentów przewidują dłuższy okres gwarancji niż określony powyżej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa lokalnego.

Postanowienia Dotyczące Przypadków Nieobjętych Gwarancją (Powyższa gwarancja nie ma zastosowania w następujących sytuacjach)

- Okres gwarancji wygaś
- Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu lub niewłaściwego obchodzenia się z produktem podczas wysyłki zwrotnej, wymiany lub naprawy.
- Uszkodzenia spowodowane wypadkami lub czynnikami ludzkimi, w tym niewłaściwym napięciem zasilania, narażeniem na wysoką temperaturę, uderzeniami mechanicznymi, upadkami lub użytkowaniem w niewłaściwym środowisku, prowadzącym do silnego utleniania lub korozji.
- Naturalne starzenie się oraz zużycie, które nie wpływa na funkcjonalność produktu, (w tym naturalne zużycie dyszy lub spadek pojemności akumulatora w wyniku normalnego użytkowania).
- Nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu wynikające z nieprzestrzegania zasad użytkowania, konserwacji lub przechowywania określonych w instrukcji obsługi.
- Brak, uszkodzenie lub nieczytelność tabliczki znamionowej produktu, etykiety z numerem seryjnym lub plomby zabezpieczającej przed naruszeniem.
- Awarie lub uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, (takiej jak pożar, trzęsienie ziemi, powódź i podobne zdarzenia).
- Uszkodzenia wynikające z nieautoryzowanych modyfikacji, demontażu, napraw lub stosowania nieoryginalnych części Dreame.

Procedura Obsługi Gwarancyjnej

- Obsługa gwarancyjna jest świadczona przez naszego autoryzowanego przedstawiciela w regionie zakupu produktu. Aby skorzystać z obsługi gwarancyjnej, należy:
- W pierwszej kolejności skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym przedstawicielem, u którego zakupiono produkt.
- Przygotować oryginalny dowód zakupu, (taki jak faktura lub paragon), oraz numer seryjny produktu. Należy pamiętać, że brak ważnego dowodu zakupu może wpłynąć na uprawnienia gwarancyjne.
- Przedstawiciel oceni usterkę produktu zgodnie z niniejszą polityką gwarancyjną i zaproponuje naprawę, wymianę lub inne odpowiednie rozwiązanie.

Nazwa produktu: F02 Pro Soniczna i Wibrująca Szczoteczka do Zębów

Model produktu: F02 Pro

Napięcie znamionowe wejściowe: 5 V = 0.5 A

Pojemność akumulatora: 2000 mAh

Stopień ochrony przed wodą: IPX7

Producent: Yuanmeng Chuangzhi Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adres: 19. Piętro, Budynek A, Guangqi Future Center, Nr 88, Gaoxin South Fourth Road, Społeczność Strefy Wysokich Technologii, Ulica Yuehai, Dzielnica Nanshan, Shenzhen

Formularz Zgłoszenia Gwarancyjnego

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.



Dreame Technology Netherlands B.V.
Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp
+31 20 793 2050 Ext.800
compliance.eu@dreame.tech



Firma Yuanmeng Chuangzhi Technology (Shenzhen) Co., Ltd., oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz z ich zmianami.



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. W celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska należy natomiast przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego przez organy państwowe lub lokalne punktu zbiórki, przeznaczonego do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Prosimy o kontakt z instalatorem lub lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki.