



Opis produktu

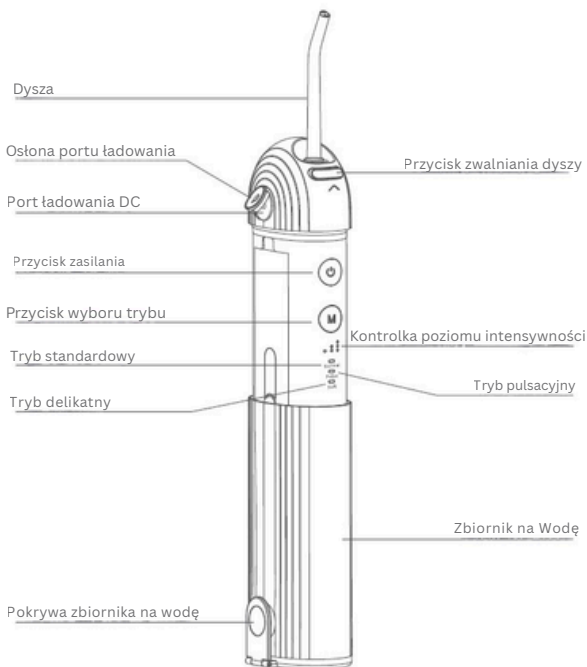

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi w celu opanowania prawidłowego sposobu użytkowania, co pozwoli na osiągnięcie optymalnej wydajności i lepszych efektów. Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować w odpowiednim miejscu w celu późniejszego wykorzystania oraz uzyskania wsparcia serwisowego.

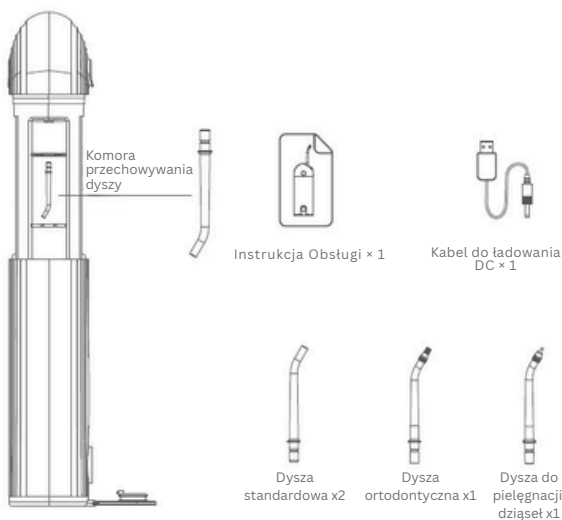

Ilustracje produktu, akcesoriów oraz interfejsu użytkownika zawarte w niniejszej Instrukcji Obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na ciągłe aktualizacje i udoskonalenia produktu rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionych ilustracji. Należy kierować się rzeczywistym wyglądem produktu.

Środki Ostrożności

1. W przypadku występowania ran w jamie ustnej lub na języku, chorób przyzębia lub przebycia zabiegu chirurgii jamy ustnej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, przed użyciem należy skonsultować się z dentystą.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8. roku życia. Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby ze specjalnymi potrzebami mogą używać, czyścić i konserwować produkt wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
3. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt. Produkt nie jest zabawką.
4. Nie należy podłączać ani odłączać zasilacza ani kabla do ładowania mokrymi rękami, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
5. Nie wolno dopuszczać do przedostania się ani wkładania jakichkolwiek ciał obcych do portu ładowania, gdyż może to spowodować ryzyko porażenia prądem lub zwarcia.
6. Nie wolno uszkadzać, modyfikować, nadmiernie zginać, ciągnąć ani skręcać kabla do ładowania. Kabel USB należy trzymać z dala od powierzchni o bardzo wysokiej temperaturze.
7. Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że zarówno port ładowania, jak i kabel są suche. Nie należy ładować produktu w wilgotnym środowisku, ponieważ może to spowodować zwarcie.
8. Nie należy używać produktu do celów innych niż irygacja jamy ustnej.
9. Należy używać wyłącznie ładowarki spełniającej odpowiednie normy lub źródła zasilania z portem USB, zapewniającego napięcie wyjściowe 5 V, prąd wyjściowy co najmniej 1000 mA oraz moc wyjściową nieprzekraczającą 15 W.
10. Nie należy używać produktu bez prawidłowo zamontowanej dyszy.
11. Nie należy napełniać zbiornika wodą o temperaturze przekraczającej 40°C do czyszczenia jamy ustnej, ponieważ może to spowodować oparzenia.
12. Nie wolno kierować strumienia wody na spodnią część języka, gardło, uszy, oczy ani inne części ciała, ponieważ strumień wody pod ciśnieniem może spowodować obrażenia.
13. Należy unikać kierowania strumienia wody bezpośrednio na dziąsła lub kieszonki przyzębne, ponieważ może to powodować krwawienie dziąseł.
14. Nie należy dociskać dyszy z nadmierną siłą do zębów, dziąseł ani aparatów ortodontycznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie dziąseł oraz dyszy.
15. Nie wolno zanurzać produktu ani jego akcesoriów w cieczach o temperaturze przekraczającej 40°C, w roztworach korozyjnych, rozpuszczalnikach ani alkoholu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
16. Przed czyszczeniem, konserwacją lub przechowywaniem należy zawsze odłączyć zasilacz i kabel do ładowania oraz upewnić się, że produkt jest wyłączony.
17. W przypadku stosowania płynów do płukania jamy ustnej lub roztworów zalecanych przez dentystę, po użyciu należy dokładnie przepłukać urządzenie czystą wodą, aby zapobiec osadzeniu się pozostałości, zanieczyszczeniu zbiornika oraz zatykaniu przewodów.
18. Po użyciu należy wytrzeć urządzenie do sucha czystą ściereczką lub ręcznikiem papierowym, a następnie przechowywać je w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
19. Należy unikać przechowywania produktu w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności oraz chronić go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
20. Nie należy narażać produktu na działanie ognia lub wysokiej temperatury ani ładować, używać lub przechowywać go w warunkach wysokiej temperatury, ponieważ może to prowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
21. Nie wolno demontować ani modyfikować produktu, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia ciała.
22. Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz oraz kabel do ładowania, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub pożarowi elektrycznemu spowodowanemu degradacją izolacji.
23. Należy przerwać użytkowanie produktu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu lub jego elementów, takich jak kabel USB lub dysza.
24. Należy stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane dysze oraz akcesoria przeznaczone do tego produktu.
25. Nie należy używać produktu w połączeniu z jodem, solą, wybielaczem ani nierozpuszczalnymi olejkami eterycznymi, ponieważ substancje te mogą obniżyć wydajność produktu oraz skrócić jego żywotność.
26. Nie należy umieszczać ani przechowywać produktu w miejscu, w którym mógłby on łatwo wpaść do wanny lub umywalki.
27. To urządzenie zawiera niewymienny akumulator.

Nazwa produktu: TO02 Pro Przenośny Irygator do Zębów z Funkcją UV

Model produktu: T02 Pro

Tryby pracy: Standardowy / Pulsacyjny / Delikatny

Znamionowe napięcie wejściowe: 5 V-

Znamionowa moc wejściowa: 5 W

Czas ładowania: 4 godziny

Stopień ochrony przed wodą: IPX7

Pojemność zbiornika na wodę: 180 mL

Specyfikacja akumulatora: Akumulator litowo-jonowy 18650, 3,7 V, 2200 mAh

Producent: Yuanmeng Chuangzhi Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adres: 19. Piętro, Budynek A, Guangqi Future Center, Nr 88, Gaoxin South Fourth Road, Spółeczność Strefy Wysokich Technologii, Ulica Yuehai, Dzielnica Nanshan, Shenzhen

Użytkowanie Produktu

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować produkt za pomocą dołączonego kabla ładowania DC. Proces ładowania trwa około 4 godzin. Otwórz ostrożnie port ładowania. Sprawdź i upewnij się, że port ładowania oraz dłonie są suche. Włóż kabel ładowania do portu ładowania i podłącz go do zasilacza spełniającego wymagania napięcia znamionowego (który ma zostać dostarczony przez użytkownika). Włącz zasilanie. Używaj wyłącznie ładowarki zgodnej z normami lub źródła zasilania USB o napięciu wyjściowym 5 V i prądzie 1 A.

Montaż / Demontaż Dyszy

Włóż dyszę do uchwyty dyszy, aż usłyszysz charakterystyczne "kliknięcie". Aby wyjąć dyszę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania dyszy, jednocześnie pociągając dyszę do góry. Wyjęte dysze można przechowywać w przenośnej komorze przechowywania dysz. Uwaga: Nie należy naciskać przycisku zwalniania dyszy podczas użytkowania, ponieważ może to spowodować nieoczekiwane wysunięcie dyszy i doprowadzić do obrażeń.

Wybór Dyszy

Dysza standardowa: Produkt skutecznie usuwa resztki jedzenia, kamień nazębny oraz płytkę nazębną z przestrzeni międzyzębowych i bruzd, pomagając zapobiegać próchnicy oraz tworzeniu się kamienia.
Dysza ortodontyczna: Został zaprojektowany do czyszczenia trudno dostępnych obszarów wokół aparatów ortodontycznych, retainerów oraz innych elementów ortodontycznych.
Dysza do pielęgnacji dziąseł: Dla osób z wrażliwymi zębami skutecznie usuwa płytkę nazębną wzdłuż linii dziąseł oraz pomiędzy zębami.

Przycisk Zasilania

Pojedyncze naciśnięcie przelacza produkt pomiędzy stanem włączonym i wyłączonym.

Przycisk Trybu Pracy

Gdy produkt jest wyłączony lub (włączony w trybie czuwania), naciśnij przycisk zmiany trybu: produkt przechodzi w tryb standardowy, gdy zapali się pierwszy wskaźnik, w tryb pulsacyjny, gdy zapali się drugi wskaźnik, lub w tryb delikatny, gdy zapali się trzeci wskaźnik. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez ponad 1,5 sekundy, aby przelaczać poziomy intensywności od niskiego przez średni do wysokiego; jeden zapalony wskaźnik oznacza niską intensywność, dwa zapalone wskaźniki oznaczają średnią intensywność, a trzy zapalone wskaźniki oznaczają wysoką intensywność.

Tryby i Obsługa

Jeżeli podczas pracy w dowolnym trybie produkt nie zostanie ręcznie zatrzymany, automatycznie zakończy działanie i wyłączy się po 2 minutach pracy.

UV Funkcja Sterylizacji UV

Tryb auto: Po prawidłowym zamontowaniu zbiornika na wodę w jednostce głównej światło UV włącza się automatycznie na 10 minut; aby wyłączyć je wcześniej, wystarczy wyjąć zbiornik na wodę. (Podczas sterylizacji UV wszystkie trzy wskaźniki trybu migają jako sygnał pracy)

Tryb ręczny: Przy odłączonym zbiorniku na wodę od jednostki głównej naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć światło UV na 10 minut. Aby wcześniej zatrzymać działanie światła UV, naciśnij przycisk zasilania. Irygator nie może pracować w czasie aktywnej sterylizacji.

Wskazanie zasilania

Ostrzeżenie o niskim poziomie akumulatora: Gdy poziom akumulatora spadnie poniżej 10% podczas pracy lub przy włączaniu urządzenia, (wszystkie trzy diody LED wskaźników trybu migają), sygnalizując konieczność ładowania.

Wskazanie ładowania: Podczas ładowania trzy diody LED świecą się sekwencyjnie w trybie biegnącym. Po pełnym naładowaniu akumulatora wszystkie trzy diody LED świecą światłem ciągłym. Urządzenie nie może być używane podczas ładowania.

Zresetowania

Funkcja resetowania: W ciągu 10 sekund od podłączenia produktu do ładowania szybko naciśnij przycisk zasilania 5 razy, aby przywrócić ustawienia fabryczne, (przy czym wszystkie kontrolki poziomu intensywności migają 5 razy). Po zakończeniu resetowania urządzenie powraca do normalnej pracy po naciśnięciu dowolnego przycisku i uruchamia się w standardowym trybie Gentle o poziomie 1.

Konserwacja i Pielęgnacja

Codzienne użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu otwórz pokrywę zbiornika na wodę i opróżnij zbiornik z pozostałą wodą. Wyjmij dyszę i przechowuj ją w suchym oraz czystym miejscu. Wytrzyj irygator do zębów do sucha czystą ściereczką.

Rutynowe Czyszczenie i Pielęgnacja

Rutynowe czyszczenie i pielęgnacja

Aby wyczyścić zbiornik na wodę, delikatnie, lecz stanowczo wyciągnij go z jednostki głównej. Po wyjęciu przepłucz go czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. Do czyszczenia

zewnętrznej powierzchni produktu używaj wilgotnej ściereczki z czystą wodą lub neutralnym detergentem. Nie używaj wody o temperaturze przekraczającej 40°C, cieczy korozyjnych, rozpuszczalników, alkoholu ani podobnych substancji do czyszczenia produktu ani akcesoriów dyszy. Jeżeli produkt ma pozostać nieużywany przez dłuższy czas, przed przechowywaniem upewnij się, że został dokładnie wyczyszczony i wysuszony.

Zalecenia

Czyść zbiornik na wodę co 1-3 miesiące w celu utrzymania optymalnej wydajności produktu. Wymieniaj dyszę co 3 do 6 miesięcy. Natychmiast wymień dyszę, jeżeli jej końcówka ulegnie deformacji, ponieważ dalsze użytkowanie może spowodować nieprawidłowe działanie. Wymieniaj dyszę ortodontyczną co 3 miesiące lub natychmiast po zdeformowaniu jej końcówki. W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego działania urządzenia.

Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu eksploatacji przenośnego irygatora do zębów, w zależności od lokalnych przepisów, może być wymagane usunięcie wewnętrznego akumulatora przed utylizacją. Jeżeli akumulator nie może zostać usunięty, należy przekazać cały produkt do punktu recyklingu wyznaczonego przez odpowiednie organy.

Rozwiązywanie problemów

Nieprawidłowe działanie	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Produkt nie działa	Produkt został niedawno zakupiony lub był nieużywany przez okres dłuższy niż 3 miesiące	1. Naładuj produkt nieprzerwanie przez 4 godziny, aby w pełni naładować akumulator. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta.
	1. Dysza jest zatkana zanieczyszczeniami. 2. Końcówka dyszy jest zdeformowana. 3. Wewnątrz pompy wodnej nagromadziły się zanieczyszczenia.	1. Wymień dyszę. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta.
Po każdym naładowaniu urządzenie może pracować jedynie przez kilka minut.	1. Niewystarczający czas ładowania powoduje niski poziom akumulatora 2. Akumulator osiągnął koniec okresu eksploatacji.	1. Napętnij zbiornik na wodę. 2. Dostosuj kąt użytkowania i utrzymuj urządzenie w bardziej pionowej pozycji podczas pracy. 3. Zamontuj ponownie przewód doprowadzający wodę. 4. Skontaktuj się z obsługą klienta.

*Uwaga: Aby zapobiec rozwojowi bakterii, upewnij się, że wewnątrz urządzenia nie pozostaje resztkowa woda. Jeżeli nie planujesz używać produktu przez dłuższy czas, przed przechowywaniem dokładnie go wysusz. Jeżeli podczas pierwszego użycia lub po długim okresie nieużywania produkt nie podaje wody, wlej niewielką ilość wody do uchwytu dyszy, ponownie zamontuj dyszę, a następnie włącz urządzenie.

Polityka gwarancyjna

- W okresie gwarancji wszelkie problemy jakościowe niezawinione przez użytkownika, (takie jak wady wynikające z procesu produkcyjnego lub różnic komponentów), uprawniają do ubiegania się o bezpłatną wymianę produktu. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wskazanym na dowodzie zakupu. W szczególności okres gwarancji obowiązuje w następującym zakresie:

Nazwa Produktu	Jednostka główna	Dysza
Okres Gwarancji	1 Lat	Wyłączenia z zakresu gwarancji.

Jeżeli lokalne przepisy o ochronie konsumentów przewidują dłuższy okres gwarancji niż określony powyżej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa lokalnego.

Postanowienia Dotyczące Przypadków Nieobjętych Gwarancją (Powyższa gwarancja nie ma zastosowania w następujących sytuacjach)

1. Okres gwarancji wygaś.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu lub niewłaściwego obchodzenia się z produktem podczas wysyłki zwrotnej, wymiany lub naprawy.
3. Uszkodzenia spowodowane wypadkami lub czynnikami ludzkimi, w tym niewłaściwym napięciem zasilania, narażeniem na wysoką temperaturę, uderzeniami mechanicznymi, upadkami lub użytkowaniem w niewłaściwym środowisku, prowadzącym do silnego utleniania lub korozji.
4. Naturalne starzenie się oraz zużycie, które nie wpływa na funkcjonalność produktu, (w tym naturalne zużycie dyszy lub spadek pojemności akumulatora w wyniku normalnego użytkowania).
5. Nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu wynikające z nieprzestrzegania zasad użytkowania, konserwacji lub przechowywania określonych w instrukcji obsługi.
6. Brak, uszkodzenie lub nieczytelność tabliczki znamionowej produktu, etykiety z numerem seryjnym lub plomby zabezpieczającej przed naruszeniem.
7. Awarie lub uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, (takiej jak pożar, trzęsienie ziemi, powódź i podobne zdarzenia).
8. Uszkodzenia wynikające z nieautoryzowanych modyfikacji, demontażu, napraw lub stosowania nieoryginalnych części Dreame.

Polityka gwarancyjna

Obsługa gwarancyjna jest świadczona przez naszego autoryzowanego przedstawiciela w regionie zakupu produktu. Aby skorzystać z obsługi gwarancyjnej, należy:

- W pierwszej kolejności skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym przedstawicielem, u którego zakupiono produkt.
- Przygotować oryginalny dowód zakupu, (taki jak faktura lub paragon), oraz numer seryjny produktu. Należy pamiętać, że brak ważnego dowodu zakupu może wpłynąć na uprawnienia gwarancyjne.
- Przedstawiciel oceni usterkę produktu zgodnie z niniejszą polityką gwarancyjną i zaproponuje naprawę, wymianę lub inne odpowiednie rozwiązanie.



Dreame Technology Netherlands B.V.
Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp
+31 20 793 2050 Ext.800
compliance.eu@dreame.tech



Firma Yuanmeng Chuangzhi Technology (Shenzhen) Co., Ltd., oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz z ich zmianami.



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. W celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska należy natomiast przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego przez organy państwowe lub lokalne punktu zbiórki, przeznaczonego do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Prosimy o kontakt z instalatorem lub lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki.

Formularz Zgłoszenia Gwarancyjnego

*Nazwa klienta

*Nr telefonu

*Adres klienta

*Model jednostki głównej

*Data zakupu

*Numer faktury

*Data naprawy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.