
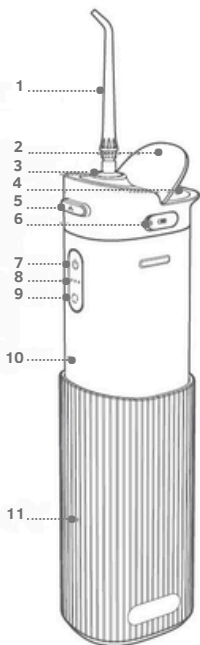


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Użytkownicy, u których występują rany w jamie ustnej lub na języku, choroby przyzębia albo którzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeszli zabieg chirurgiczny w obrębie jamy ustnej, powinni korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lekarza dentysty.
- Należy unikać używania tego produktu przez dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o szczególnych potrzebach mogą używać, czyścić i konserwować produkt wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt; nie wolno traktować produktu jako zabawki.
- Nie wolno podłączać ani odłączać zasilacza i przewodu ładowania mokrymi rękami, ponieważ grozi to porażeniem prądem. Nie wolno wrzucać ani wkładać ciał obcych do portu ładowania, gdyż może to spowodować porażenie prądem lub zwarcie.
- Nie wolno uszkadzać, modyfikować, nadmiernie zginać, ciągnąć ani skręcać przewodu ładowania; przewód USB należy trzymać z dala od powierzchni o wysokiej temperaturze.
- Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że port ładowania oraz przewód ładowania są całkowicie suche; zabrania się ładowania w wilgotnym środowisku, ponieważ grozi to zwarcie.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż czyszczenie jamy ustnej.
- Nie należy używać produktu bez zamontowanej dyszy.
- Nie wolno napełniać zbiornika na wodę wodą o temperaturze powyżej 40°C ani używać jej do czyszczenia jamy ustnej, aby uniknąć poparzeń.
- Nie wolno kierować strumienia wody bezpośrednio pod język, do gardła, uszu, oczu ani na inne części ciała, ponieważ ciśnienie strumienia może spowodować obrażenia.
- Nie wolno kierować strumienia wody bezpośrednio na dziąsła lub kieszonkę przyzębną, gdyż może to prowadzić do krwawienia dziąseł.
- Nie wolno mocno dociskać dyszy do zębów, dziąseł ani aparatów ortodontycznych, aby uniknąć uszkodzenia dziąseł oraz dyszy.
- Nie wolno umieszczać produktu ani jego akcesoriów w cieczach o temperaturze powyżej 40°C, cieczach żrących, rozcieńczalnikach, alkoholu ani innych podobnych substancjach, ponieważ może to uszkodzić produkt.
- Przed użyciem, czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć zasilacz oraz przewód ładowania i upewnić się, że produkt jest wyłączony.
- W przypadku stosowania płynów do płukania jamy ustnej lub roztworów leczniczych zalecanych przez lekarza dentystę, po zakończeniu użycia należy dokładnie przepłukać urządzenie czystą wodą, aby zapobiec pozostawianiu resztek płynu w zbiorniku na wodę lub zatłokowaniu rurki zasysającej.
- Po zakończeniu użytkowania należy osuszyć urządzenie suchą ściereczką lub suchym ręcznikiem papierowym i przechowywać je w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
- Nie wolno umieszczać produktu w miejscach o wysokiej temperaturze lub dużej wilgotności oraz należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie wolno wrzucać produktu do ognia, podgrzewać go ani ładować, używać lub przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze, gdyż może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Zabrania się samodzielnego demontażu lub modyfikacji produktu, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia ciała.
- W przypadku długotrwałego nieużywania produktu należy odłączyć zasilacz oraz przewód ładowania, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru elektrycznego spowodowanego pogorszeniem właściwości izolacyjnych.
- W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu, w tym przewodu USB lub dyszy, należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Nie wolno używać z produktem nieoryginalnych ani nierekomendowanych dysz lub akcesoriów.
- Nie wolno stosować w produkcie jodu, soli, wybielaczy ani nierozpuszczalnych olejków eterycznych, ponieważ substancje te obniżają wydajność urządzenia i skracają jego żywotność.
- Nie wolno umieszczać ani przechowywać produktu w miejscach, z których mógłby łatwo spaść do wanny lub umywalki.

Opis elementów

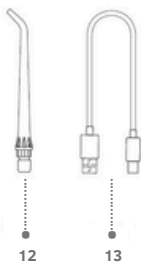

1. Dysza
2. Pokrywa komory przechowywania
3. Gniazdo montażu dyszy
4. Otwór do napełniania wodą (przechowywanie dyszy)
5. Przycisk zwalniania dyszy
6. Port ładowania
7. Przycisk zasilania
8. Kontrolka sygnalizacyjna
9. Przycisk trybu
10. Obudowa szczoteczki
11. Zbiornik na wodę
12. Dysza (dyszę można przechowywać w zbiorniku na wodę)
13. Przewód ładowania typu C

Instrukcja obsługi

Uwaga

- Wewnątrz korpusu urządzenia (zbiornik na wodę, rurka zasysająca itp.) może znajdować się niewielka ilość wody destylowanej używanej do testów wydajnościowych; jest to zjawisko normalne i nie wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.
- Podczas pierwszego użycia produktu, nawet w przypadku zdrowych dziąseł, może wystąpić uczucie mrowienia lub niewielkie krwawienie; jest to spowodowane brakiem przyzwyczajenia dziąseł do tego rodzaju stymulacji i zazwyczaj ustępuje w ciągu 1-2 tygodni.
- Osobom używającym produkt po raz pierwszy zaleca się stosowanie trybu delikatnego przez pierwszy tydzień, a po okresie adaptacji przejście na inne tryby.
- Jeżeli uczucie dyskomfortu utrzymuje się dłużej niż 2 tygodnie, należy przerwać korzystanie z produktu i skonsultować się z lekarzem dentystą.

Ładowanie

- Przed użyciem należy upewnić się, że poziom naładowania akumulatora jest wystarczający. Nowe urządzenie należy w pełni naładować przed pierwszym użyciem; podczas ładowania produkt nie może być używany.
- Podczas ładowania kontrolka sygnalizacyjna świeci białym światłem pulsującym; po pełnym naładowaniu kontrolka sygnalizacyjna świeci światłem ciągłym. Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 20%, kontrolka sygnalizacyjna miga na czerwono. (W przypadku stałego świecenia czerwonej kontrolki sygnalizacyjnej należy, przy zachowaniu suchości portu ładowania, odłączyć i ponownie podłączyć przewód w celu zapewnienia prawidłowego ładowania.)
- Czas pełnego ładowania produktu wynosi około 4-5 godzin.

Wskazówka: ładowanie należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia od 15°C do 35°C; w niskich temperaturach (poniżej 15°C) czas ładowania ulega wydłużeniu, natomiast przy bardzo niskiej temperaturze (poniżej 5°C) ładowanie może nie być możliwe.

Zmiana trybu

Przycisk włączania i wyłączania: krótkie naciśnięcie powoduje włączenie urządzenia, kolejne krótkie naciśnięcie powoduje jego wyłączenie,

Przycisk trybu (krótkie naciśnięcie umożliwia cykliczne przełączanie trybów):

Opis trybów według stanu kontrolki sygnalizacyjnej

Kontrolka sygnalizacyjna włączona

Kontrolka sygnalizacyjna wyłączona



Tryb delikatny



Tryb standardowy



Tryb pulsacyjny



Tryb DIY personalizowany


- Tryb delikatny: przeznaczony dla osób z wrażliwymi dziąsłami, zapewnia łagodne działanie bez podrażnień.
- Tryb standardowy: umożliwia głębokie czyszczenie przestrzeni międzyzębowych najbardziej komfortowy do codziennego użytkowania.
- Tryb pulsacyjny: rytmiczny strumień pulsacyjny masuje dziąsła i wspomaga krążenie krwi.
- Tryb DIY personalizowany: obsługuje swobodne przełączanie 7 poziomów ciśnienia wody, od delikatnego do intensywnego, umożliwiając indywidualne dopasowanie efektu irygacji.

* W trybie pracy DIY naciśnięcie i przytrzymanie przycisku trybu umożliwia płynną regulację siły strumienia od niskiej do wysokiej; zwolnienie przycisku trybu powoduje zatwierdzenie wybranego poziomu.

* Ilustracje produktu, akcesoriów oraz interfejsu użytkownika zawarte w instrukcji mają charakter poglądowy i służą wyłącznie celom informacyjnym. Ze względu na aktualizacje i udoskonalenia produktu, rzeczywisty wygląd może nieznacznie różnić się od ilustracji; obowiązują parametry produktu rzeczywistego.


Montaż i demontaż dyszy

- Włożyć dyszę do gniazda montażu dyszy i lekko docisnąć w dół, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia, co oznacza prawidłowy montaż.
- W celu wymiany dyszy należy najpierw wyłączyć urządzenie, następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniania dyszy oraz wyjąć dyszę.
- Uwaga: podczas użytkowania nie wolno naciskać przycisku zwalniania dyszy, aby uniknąć jej niekontrolowanego wysunięcia i ryzyka urazu.

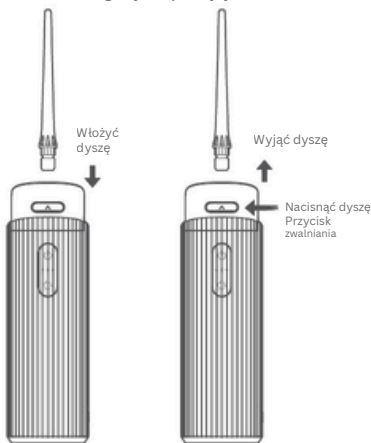

Napełnianie zbiornika na wodę

Otworzyć pokrywę zbiornika na wodę, trzymając korpus urządzenia w pozycji pionowej napełnić odpowiednią ilością czystej wody, a następnie zamknąć pokrywę (zalecana temperatura wody poniżej 40°C)

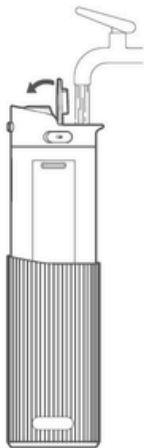


* Zaleca się stosowanie letniej wody o temperaturze poniżej 40°C lub bieżącej wody wodociągowej.

* Nie wolno napełniać zbiornika pastą do zębów, solą, płynem do płukania jamy ustnej ani innymi chemicznymi środkami lub stałymi tabletkami do płukania, gdyż może to spowodować zatkanie lub uszkodzenie urządzenia.

Instrukcja Użytkowania dla Początkujących


- Zamontować dyszę.
- Otworzyć pokrywę zbiornika na wodę, trzymając korpus urządzenia w pozycji pionowej napełnić odpowiednią ilością czystej wody, a następnie zamknąć pokrywę (zalecana temperatura wody poniżej 40°C).
- Trzymać irygator do jamy ustnej pionowo, wprowadzić dyszę do jamy ustnej, skierować ją na przestrzenie międzyzębowe lub linię dziąseł, jednocześnie lekko otwierając usta, aby umożliwić swobodny odpływ wody po czyszczeniu jamy ustnej.
- Nacisnąć przycisk włączania, aby uruchomić irygator do jamy ustnej.
- Powoli przesunąć strumień wzdłuż przestrzeni międzyzębowych oraz linii dziąseł, utrzymując stały przepływ wody na czyszczonym obszarze.
- Ustawić dyszę wzdłuż linii dziąseł, prostopadłe do powierzchni zębów.
- Nie wolno kierować strumienia wody bezpośrednio na dziąsła.
- Nie wolno mocno dociskać dyszy do zębów ani dziąseł.
- Po zakończeniu płukania należy niezwłocznie umyć dyszę oraz zbiornik na wodę.


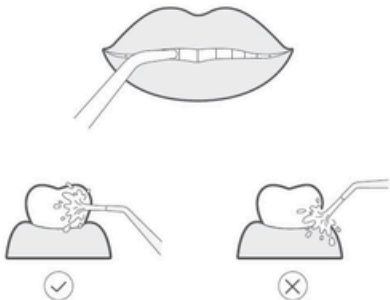


Konserwacja i Pielęgnacja

- Zdjąć zbiornik na wodę i wylać pozostałą w nim wodę.
- Krótko nacisnąć przycisk zasilania, aby uruchomić irygator do jamy ustnej; urządzenie automatycznie opróżni wodę zalegającą wewnątrz mechanizmu.
- Krótko nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć irygator do jamy ustnej, a następnie ponownie zamontować zbiornik na wodę;
- Wyjąć dyszę i umieścić ją w komorze przechowywania dyszy.
- Wytrzeć irygator do jamy ustnej suchą ściereczką.
- W razie potrzeby czyszczenia dyszy i zbiornika na wodę należy je zdjąć i opłukać czystą wodą; osad wewnątrz zbiornika na wodę można usunąć za pomocą szczoteczki, a następnie osuszyć ściereczką.
- Podczas czyszczenia powierzchni produktu należy używać wilgotnej ściereczki, czystej wody lub neutralnego detergentu.
- Nie wolno używać do czyszczenia produktu cieczy o temperaturze powyżej 40°C, cieczy żrących, rozcieńczalników ani alkoholu.
- W przypadku długotrwałego nieużywania produktu należy go wyczyścić i przechowywać dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Demontaż akumulatora

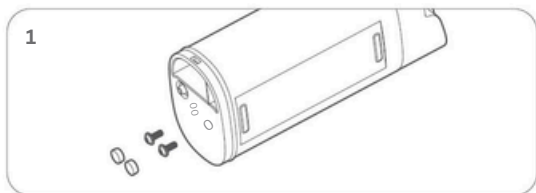

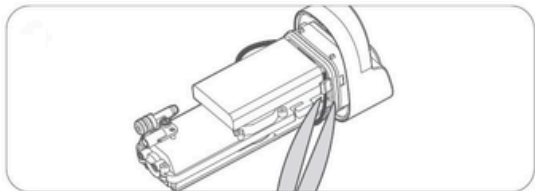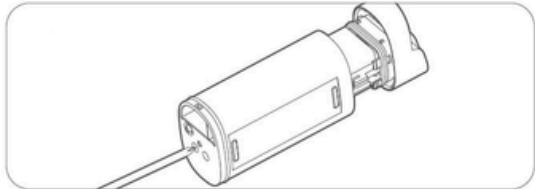

1. Zdjąć zaślepki śrub z dolnej pokrywy i za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręcić śruby.
2. Za pomocą narzędzia wypchnąć mechanizm urządzenia przez otwory po śrubach w dolnej części.
3. Nożyczkami przeciąć przewód łączący akumulator z płytą główną korpusu urządzenia i wyjąć akumulator,

W celu prawidłowego recyklingu lub utylizacji akumulatora należy skontaktować się z lokalnym punktem zbiórki wyznaczonym przez władze oraz zapytać o możliwość recyklingu pozostałych elementów irygatora do jamy ustnej.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie doprowadzić do zwarcia biegunów dodatniego i ujemnego akumulatora.

Po wyjęciu akumulatora nie wolno ponownie podłączać produktu do zasilania.

Usterki urządzenia	Możliwa przyczyna	Sposób rozwiązania
Urządzenie nie włącza się	Nowo zakupione urządzenie lub nieużywane przez ponad trzy miesiące	Naładować przez co najmniej 4 godziny
	Usterki urządzenia	Skontaktować się z działem obsługi klienta w celu serwisu
Niskie ciśnienie wody podczas pracy	Ciało obce wewnątrz dyszy lub odkształcenie dyszy	Wymienić dyszę
	Dysza filtrująca jest zatkana	Wyczyścić dyszę filtrującą
Po pełnym naładowaniu urządzenie działa tylko przez krótki czas	Akumulator osiągnął kres okresu eksploatacji	Zakupić nowe urządzenie
	Niewystarczający czas ładowania	Naładować przez co najmniej 4 godziny przed użyciem
Podczas ładowania kontrolka sygnalizacyjna nie świeci się	Wtyczka zasilania nie jest prawidłowo podłączona	Prawidłowo podłączyć zasilanie
	Uszkodzenie obwodu ładowania produktu	Skontaktować się z działem obsługi klienta w celu serwisu

Polityka gwarancyjna

W okresie gwarancyjnym, jeśli produkt wykazuje wady jakościowe niewynikające z winy użytkownika (np. wady spowodowane procesem produkcyjnym lub różnicami w komponentach), przysługuje prawo do bezpłatnej wymiany produktu. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu produktu wskazanej na dowodzie zakupu. Szczegółowe okresy gwarancji dla poszczególnych produktów są następujące:

Nazwa produktu	Korpus	Przewód ładowania Type-C	Dysza
Okres gwarancji	2 lata	Brak gwarancji	Brak gwarancji

Jeśli obowiązujące w kraju zakupu przepisy dotyczące gwarancji przewidują dłuższy okres ochrony niż niniejsza gwarancja producenta, zastosowanie mają przepisy lokalne.

Wyłączenie gwarancji

(powyższe zobowiązania gwarancyjne nie mają zastosowania w następujących przypadkach)

- Upięknął okres gwarancji lub darmowej wymiany produktu.
- Uszkodzenia powstałe podczas zwrotu, wymiany lub serwisowania produktu, wynikające z transportu, załadunku lub rozładunku w trakcie przesyłki realizowanej na życzenie klienta.
- Uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami losowymi lub działaniem użytkownika, takimi jak użycie niewłaściwego napięcia zasilania, wysoka temperatura, uszkodzenia mechaniczne, upadek, a także użytkowanie w nieodpowiednich warunkach prowadzących do poważnej korozji lub rdzy.
- Naturalne zużycie lub starzenie się produktu, wynikające z jego normalnego użytkowania, które nie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie produktu (np. naturalne zużycie końcówki szczoteczki, baterii czy innych części, ślady użytkowania powstałe podczas standardowej eksploatacji).
- Usterki lub uszkodzenia produktu wynikające z użytkowania, konserwacji lub przechowywania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi.
- Zerwanie, uszkodzenie lub zatarcie tabliczki znamionowej produktu, kodu SN czy plomb zabezpieczających powodujące brak możliwości jednoznacznej identyfikacji.
- Usterki lub uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. pożarem, trzęsieniem ziemi, powodzią itp.).
- Uszkodzenia wynikające z jakichkolwiek modyfikacji, demontażu, napraw bez upoważnienia Dreame lub zastosowania nieoryginalnych części zamiennych niezatwierdzonych przez Dreame.

Procedura serwisu gwarancyjnego

- Gwarancji na niniejszy produkt udziela autoryzowany dystrybutor działający w regionie, w którym dokonano zakupu produktu. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego:
- W pierwszej kolejności skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym dystrybutorem, u którego dokonano zakupu niniejszego produktu.
- Przygotuj dowód zakupu (fakturę lub paragon) oraz numer seryjny produktu. Brak ważnego dowodu zakupu może wpłynąć na Twoje prawa gwarancyjne.
- Dystrybutor, zgodnie z zasadami niniejszej polityki gwarancyjnej, oceni rodzaj usterki i zapewni naprawę, wymianę lub inne odpowiednie rozwiązanie.

Polityka gwarancyjna

*Imię i nazwisko klienta

*Numer telefonu

*Adres klienta

*Model urządzenia

*Data zakupu

*Numer faktury

*Data zgłoszenia do serwisu

Pola oznaczone* są obowiązkowe

Nazwa produktu: T01 Przenośny irygator do jamy ustnej

Model produktu: T01

Znamionowe napięcie i prąd wejściowy: 5V-1A

Znamionowa moc wejściowa: 5W

Pojemność baterii: 1200 mAh

Pojemność zbiornika na wodę: 200 mL

Klasa wodoszczelności: IPX7

Sposób ładowania: Type-C

Zawartość opakowania: Irygator do jamy ustnej x1; Dysza x2;

Instrukcja obsługi x1; Przewód ładowania Type-C x1

Producent: Yuanmeng Chuangzhi Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adres: 19. piętro, budynek A, Guangqi Future Center, nr 88 Gaoxin South 4th Road, dzielnica Nanshan, Shenzhen, Chiny

EU REP

Dreame Technology Netherlands B.V.
Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp
+31 20 793 2050 Ext.800
compliance.eu@dreame.tech



Firma Yuanmeng Chuangzhi Technology (Shenzhen) Co., Ltd., oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz z ich zmianami.



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEĖ zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. W celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska należy natomiast przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego przez organy państwowe lub lokalne punktu zbiórki, przeznaczonego do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Prosimy o kontakt z instalatorem lub lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki.