


# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed i zachować ją na przyszłość. S12

# PRZEGLĄD

---

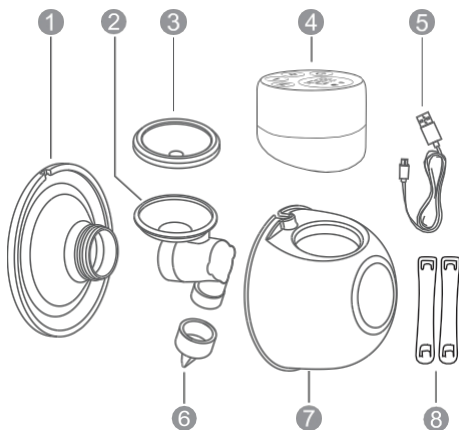


## Lista części

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 Kołnierz silikonowy | 5 Przewód typu C                    |
| 2 Łącznik             | 6 Zawór silikonowy                  |
| 3 Membrana silikonowa | 7 Odbiornik mleka                   |
| 4 Silnik pompy        | 8 Zapięcie do regulacji biustonosza |

# PANEL STEROWANIA

---

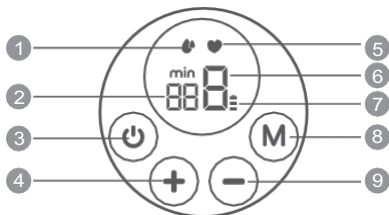

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Wyświetlanie trybu ekspresji | 5 Wyświetlacz trybu masażu     |
| 2 Wyświetlanie czasu           | 6 Wyświetlacz poziomu          |
| 3 Przycisk zasilania           | 7 Wyświetlacz mocy akumulatora |
| 4 Zwiększenie stażu            | 8 Przycisk wyboru trybu        |
|                                | 9 Zmniejszanie stażu           |

## Uwaga

Ten produkt ma wbudowaną baterię litową. Gdy wskaźnik naładowania baterii miga na czerwono, zalecamy jak najszybsze naładowanie silnika pompy za pomocą zasilacza 5V=1A.

# CZYSZCZENIE I STERYLIZACJA


---

- \* Po raz pierwszy i przed każdym użyciem należy zdemonstrować, umyć i wysterylizować wszystkie elementy laktatora, które mają kontakt z mlekiem matki.
- \* Nigdy nie myj ani nie sterylizuj silnika laktatora, ponieważ ten element nie ma kontaktu z mlekiem matki. Można go wyczyścić miękką ściereczką.
- \* Do sterylizacji należy używać gorącej wody / pary / naczynia do sterylizacji, temperatura nie powinna przekraczać 100 stopni.
- \* Do czyszczenia zaleca się stosowanie wody pitnej.
- \* Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia zaworu i silikonowej membrany, jeśli zostaną one uszkodzone, laktator nie będzie działał prawidłowo.
- \* Aby wyczyścić silikonowy zawór, należy delikatnie zanurzyć go w ciepłej wodzie z mydłem. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

## MONTAŻ


---

1. Umieść silikonową membranę w łączniku i dociśnij ją rękami, aby krawędzie ściśle przylegały, zapewniając idealne uszczelnienie.

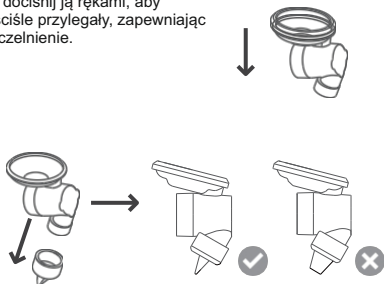


2. Zainstaluj zawór silikonowy w dolnej części łącznika, upewniając się, że jest zainstalowany we właściwym kierunku.


3. Umieść zmontowany łącznik w kolektorze mleka, tak aby "ucho" łącznika było wyrównane z wewnętrzną szczeliną kolektora mleka, a następnie dociśnij obiema rękami tarczę łącznika, aby mocno zamocować krawędzie w celu zapewnienia całkowitego uszczelnienia.

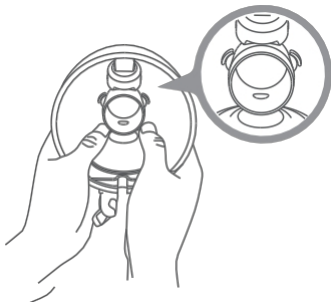


4. Zainstaluj kołnierz silikonowy na kolektorze mleka, wyrównaj deflektor na klapie z deflektorem na kolektorze mleka, wyrównaj rowek na kołnierzu silikonowym w pozycji rowka kolektora mleka.

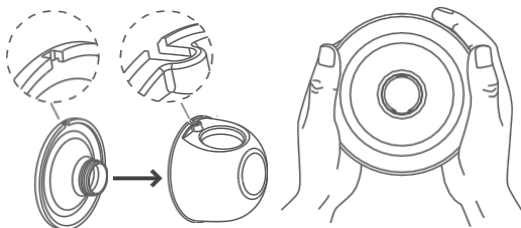

5. Wciśnij silnik pompy na kolektor mleka, aby upewnić się, że jest idealnie dopasowany.

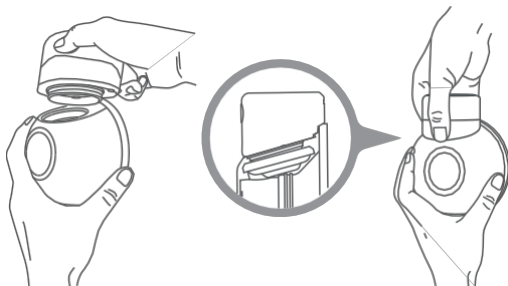

6. Odłącz wtyczkę przeciwpylową i podłącz kabel typu C, aby naładować silnik pompy.

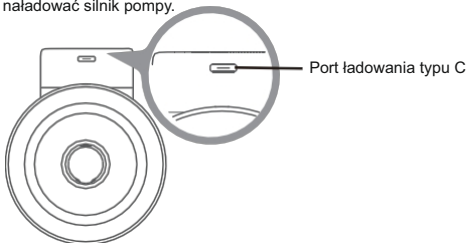

## Uwaga

Zasilacz jest standardowym akcesorium dostępnym na rynku.


Produkt ten nie jest dostarczany i w potrzeby można go zakupić osobno.

Specyfikacja zasilacza: 5V = 1A.


# ABY ROZPOCZĄĆ POMPOWANIE

---

1. Mocno dociśnij silikonowy kołnierz do piersi, nie pozostawiając żadnych szczelin i upewnij się, że sutki są wyśrodkowane. Trzymaj laktator w pozycji pionowej. Należy uważać, aby nie zmienić pozycji produktu i piersi, w przeciwnym razie laktator nie będzie ssał.

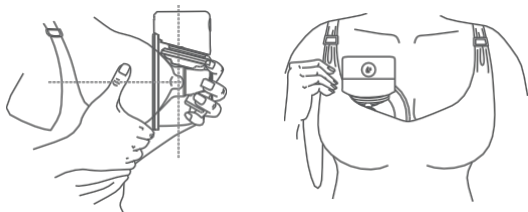


2. Lekko naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć laktator i włączyć wyświetlacz czasu. (Rysunek 1)

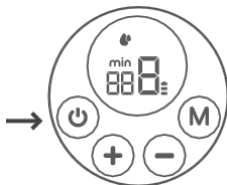


(Rysunek 1)

3. Lekko naciśnij przycisk "M", aby przełączyć tryb, na wyświetlaczu pojawi się "👤" dla trybu odciągania pokarmu. W tym trybie dostępnych jest 9 poziomów. Dotykając przycisków "+" i "-", można wybrać siłę ssania, która zapewnia komfort. Podczas karmienia piersią po porodzie mogą wystąpić dolegliwości piersi, takie jak obrzęk i guzki. Korzystanie z tego trybu może złagodzić problemy z piersiami.

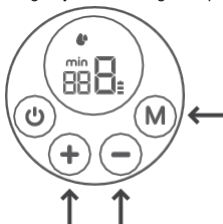

( Rysunek 2 )


4. Naciśnij ponownie przycisk "M", aby przejść do trybu masażu, na wyświetlaczu pojawi się "👤" dla trybu masażu. W tym dostępnych jest 9 poziomów. Każdy poziom obejmuje 9 cykli zasysania i zwalniania shofi oraz 1 cykl długiego zasysania i długiego zwalniania. Można nacisnąć przyciski "+" i "-", aby wybrać siłę ssania, która zapewnia wygodę. We wczesnym okresie po porodzie przewód piersiowy nie jest łatwy do przewodzenia, a pierś można stymulować, zmieniając tryb, aby promować wydzielanie mleka.

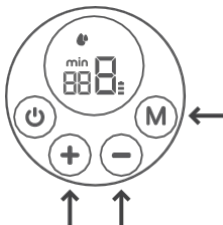

( Rysunek 3 )



5. Po zakończeniu odciągania pokarmu naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć laktator, a następnie ostrożnie zdejmij laktator z piersi.

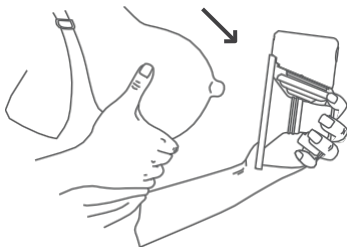

## POZYCJA SIEDZĄCA DO SSANIA

---


Rozluźnij ciało, usiądź na wygodnym krześle i pochyl się lekko do przodu (użyj poduszki do podparcia pleców). Laktator i kolektor mleka należy trzymać w pozycji pionowej.




# KLAMRA REGULACJI BIUSTONOSZA

---


Regulacja długości ramiączek biustonosza sprawi, że ssanie będzie wygodniejsze. Jeden koniec klamry do regulacji biustonosza jest zawieszony na wewnętrznej klamrze biustonosza do karmienia. Długość paska biustonosza można regulować, zmieniając klamrę biustonosza do karmienia na drugim końcu klamry do regulacji biustonosza.

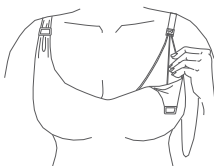

( Zdjęcie 1 )

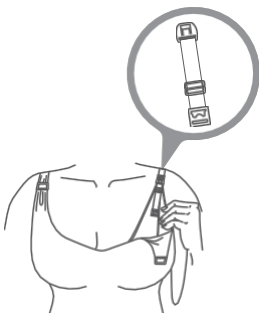

( Zdjęcie 2 )

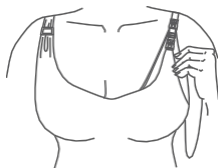

( Zdjęcie 2 )


# NALEWANIE MLEKA

---


Trzymaj laktator w pozycji pionowej i ostrożnie wyjmij silnik laktatora z korpusu laktatora, aby przełączyć mleko do butelki, upewnij się, że szczelina kolektora mleka przylega do wylotu butelki.



( Zdjęcie 1 )

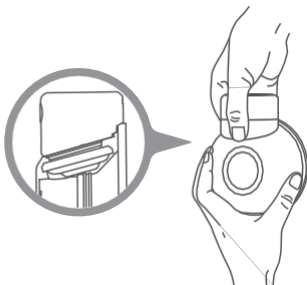

( Zdjęcie 2 )

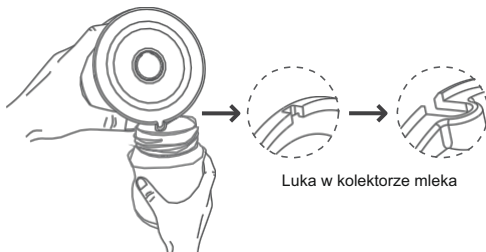

Luka w kolektorze mleka

( Zdjęcie 3 )

# PRZECHOWYWANIE MLEKA MATKI

---

## **Przechowywanie mleka matki**

Przechowuj mleko matki w czystej i wysterylizowanej torebce lub szczelnie zamkniętej butelce i natychmiast włóż je do zamrażarki.

-----

## **Odmrażanie mleka matki**

Umieść zamrożone mleko matki w lodówce, aby odmroziło się przez noc. W nagłych przypadkach można rozmrozić mleko w misce z gorącą wodą, trzymając butelkę pionowo, lub w podgrzewaczu do butelek, aby szybko podgrzać mleko.

-----

## **Wskazówki 1**

- \* Mleko matki należy przechowywać wyłącznie odciągnięte za pomocą wysterylizowanego laktatora.
  - \* Nie należy wielokrotnie zamrażać mleka matki
  - \* Nie mieszać świeżego mleka matki z mrożonym mlekiem matki
  - \* Po zakończeniu karmienia należy wyrzucić pozostałe mleko matki.
- 

## **Wskazówki 2**

- \* Pamiętaj! Zawsze sprawdzaj temperaturę mleka przed karmieniem.
- \* Nigdy nie podgrzewaj mleka matki w kuchence mikrofalowej, ponieważ może to zniszczyć cenne składniki odżywcze i przeciwciała.
- \* Nierównomierne podgrzewanie może doprowadzić do miejscowego przegrzania mleka, co może spowodować oparzenia.
- \* Nie zanurzać zamrożonej butelki we wrzącej wodzie, aby uniknąć jej pęknięcia lub rozerwania.

Oświadczenie FCC: To urządzenie jest zgodne z Pafi 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z art. 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

\*Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

\*Zwiększenie odległości między sprzętem a odbiornikiem.

\*Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

\*Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.