



## **Tylko krótka instrukcja obsługi Dream Sock**

**Użyj aplikacji do wstępnej konfiguracji**

Dział obsługi klienta firmy Owlet Baby Care

Numer bezpłatny: +1 (844) 334-5330

Adres e-mail: [contact@owletcare.com](mailto:contact@owletcare.com)

<https://support.owletcare.com/hc/en-us>

Data wydania: 22.01.2024

QRG-19.0316 Wersja 3





**OSTRZEŻENIE!** Zawsze przechowuj ten wyrób i akcesoria poza zasięgiem dzieci. Małe części, w tym czujnik i kable, stwarzają potencjalne ryzyko zadławienia. Umieść stację bazową co najmniej 1 metr od łóżeczka, ponieważ przewód może stwarzać zagrożenie uduszeniem.

---



**OSTRZEŻENIE!** Aplikacja mobilna nie jest przeznaczona do wykorzystania jako podstawowe źródło powiadomień. Stacja bazowa jest głównym źródłem powiadomień. Stacja bazowa musi zawsze znajdować się w zasięgu słuchu. Sprawdzaj, czy stację bazową słychać przy natężeniu hałasu obecnym w otoczeniu (na przykład: urządzenia emitujące hałas lub telewizory). Sprawdzaj, czy stacja bazowa nie jest zasłonięta, ponieważ może to stłumić dźwięki alarmowe.

---



**ABY PRAWIDŁOWO KORZYSTAĆ Z NASZYCH PRODUKTÓW I OPIEKOWAĆ SIĘ DZIECKIEM: NIEZWŁOCZNIE REAGUJ NA KAŻDE POWIADOMIENIE.**

---



**OSTRZEŻENIE! OWLET DREAM SOCK NIE ZASTĘPUJE NADZORU DOROSŁYCH, DOBRYCH PRAKTYK RODZICIELSKICH ANI PRAKTYK BEZPIECZNEGO SNU.**

---



Skarpetka Dream Sock nie jest przeznaczona do stosowania u dzieci/niemowląt z problemami zdrowotnymi. W przypadku dzieci z problemami zdrowotnymi należy skonsultować się z lekarzem, aby ustalić, czy skarpetka Owlet Dream Sock jest odpowiednia dla Twojego dziecka.

---



Skarpetka Owlet Dream Sock z powiadomieniami o stanie zdrowia przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci w wieku 0–18 miesięcy o masie ciała 2,5–13,6 kg.

# Początki

## Pobierz aplikację



Do konfiguracji użyj aplikacji Owlet Dream  
Twoja nowa wymarzona skarpetka.

Po pobraniu wykonaj kroki konfiguracji w  
aplikacji, która poprowadzi Cię przez proces:

- ✓ Tworzenie konta
- ✓ Potwierdzenie konta
- ✓ Konfiguracja urządzenia
- ✓ Łączenie z siecią Wi-Fi
- ✓ Rejestracja stacji bazowej
- ✓ Parowanie skarpetki
- ✓ Tworzenie profilu dziecka
- ✓ Wymagane szkolenie

## Czy skarpetka Owlet Dream Sock jest odpowiednia dla Ciebie i Twojego dziecka?

Od 0 do 18 miesięcy

Od 2,5 do 13,6 kg

- Stosowanie u dzieci w wieku co najmniej **0–18 miesięcy** i masie ciała od **2,5 do 13,6 kg**.
- Nie zastępuje nadzoru opiekuna.

## Omówienie wyrobu

Skarpetka utrzymuje czujnik na stopie dziecka. Czujnik zbiera odczyty dziecka i wysyła je do stacji bazowej, która przesyła je do Twojego inteligentnego wyrobu.



### Rozmiar skarpetek 1 i 2

prawa i lewa skarpetka dla  
każdego rozmiaru



Czujnik  
skarpetki




Stacja bazowa



Kabel zasilający i  
wtyczka USB



Zasilacz

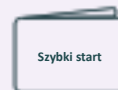

Skrócona instrukcja  
obsługi



Aplikacja  
Dream

# Rozmiar, dopasowanie i umiejscowienie skarpetki

Właściwy rozmiar, dopasowanie i umiejscowienie skarpetki mają kluczowe znaczenie dla wydajności skarpetek Dream Sock.

## 1. Wyjmij skarpetkę ze stacji bazowej

Po wyjęciu skarpetki z portu ładowania stacja bazowa zacznie pulsować na zielono, wskazując, że skarpetka oczekuje na odczyt dziecka. To czas, aby założyć dziecku skarpetkę.

## 2. Wybierz jeden z 2 rozmiarów skarpetek

W każdym pudełku znajdują się 4 skarpetki – po 2 rozmiary na lewą i prawą stopę. Skorzystaj z poniższego przewodnika, aby wybrać początkowy rozmiar skarpetki na podstawie masy ciała. Następnie zmień rozmiar skarpetki w oparciu o faktyczne dopasowanie.

Skarpetka lewa

Prawa skarpetka

### Rozmiar 1

Mniej niż 5,4 kg



### Rozmiar 2

5,4–13,6 kg



### Rozmiar 1

Mniej niż 5,4 kg



### Rozmiar 2

5,4–13,6 kg



**OSTROŻNIE.** dziecko szybko rośnie. Zaprzestań korzystania z systemu, gdy dziecko osiągnie masę ciała **13,6 kg** lub wyrośnie z największej skarpetki.

## 3. Włóż czujnik (jeśli nie jest już zamocowany)

Przymocuj czujnik do skarpetki, dopasowując wycięcie na czujniku do wycięcia w skarpetce. Naciągnij skarpetkę tak, aby otwór w skarpetce znalazł się nad czujnikiem.



## 4. Ułożenie skarpetki

Umieść skarpetkę na odpowiedniej stopie (lewej/prawej) tak, aby wycięcie znajdowało się na zewnętrznej stronie stopy, za małym palcem. Skarpetka **NIE** powinna dotykać palców u nóg. Słowo „TOP” (GÓRA) powinno być umieszczone na czubku stopy, w pobliżu palców, a nie przy kostce.



**OSTROŻNIE.** Nie rozciągaj pasków podczas zapinania. Rozciąganie pasków prowadzi do nadmiernego ich zaciśnięcia i zwiększonego zagrożenia powstaniem czerwonych śladów lub podrażnieniem skóry.


## 5. Sprawdź dopasowanie i umiejscowienie skarpetki



**OSTRZEŻENI** Niewłaściwe dopasowanie lub piciegnacja skarpetek

### Dopasuj skarpetkę do stopy

Sprawdź, czy lewa skarpetka jest założona na lewą stopę, a prawa skarpetka na prawą stopę. Każda skarpetka oznaczona jest napisem „R” (prawa) lub „L” (lewa).

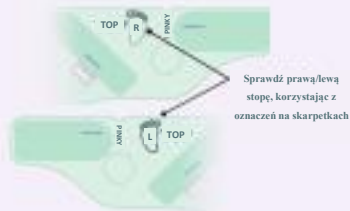

### Chroń wrażliwe części

- Sprawdź, czy szorstka część zapięcia nie dotyka skóry.
- Skarpetka nie powinna wystawać poza palce.



## Sprawdź rozmiar skarpetki

### Za mała skarpetka

Jeśli któryś z pasków nie dotrze w naturalny sposób do zapięcia, wypróbuj skarpetkę o większym rozmiarze. NIE rozciągaj pasków i nie zaciskaj skarpetki zbyt mocno, gdyż może to być niewygodne dla Twojego dziecka.

Za krótki pasek



Czerwona lub ściśnięta skóra

### Za duża skarpetka

Jeśli którykolwiek pasek przechodzi przez zapięcie, wypróbuj skarpetkę o mniejszym rozmiarze. Skarpetka i paski z rzepami powinny przylegać do stopy.

Za długi pasek



Luźno wokół stopy

### Sprawdź paski

Sprawdź, czy paski są prawidłowo wyregulowane. NIE dociągaj zbyt mocno. Paski powinny przylegać płasko do skóry, ale nie wciskać się w skórę. Nie rozciągaj pasków podczas zapinania – prowadzi to do ich nadmiernego naciągnięcia.

## 6. Sprawdzanie stacji bazowej

Gdy skarpetka jest założona, czas na sprawdzenie stacji bazowej. Gdy stacja miarowo pulsuje na zielono, oznacza to, że odczyty dziecka są odbierane i są w normie.

# Unikanie powstawania czerwonych śladów i podrażnień skóry

Nieprawidłowe użycie skarpetki może powodować dyskomfort, co może potencjalnie prowadzić do powstawania czerwonych śladów, odleżyn lub pęcherzy na stopie dziecka.

## Unikanie podrażnień skóry

- Zawsze używaj skarpetki w odpowiednim rozmiarze dla dziecka.
- Unikaj stosowania balsamów i pudrów pod skarpetkę. Utrzymuj skórę czystą i suchą.
- Sprawdź, czy skarpetka jest prawidłowo założona i wyregulowana.
- Sprawdzaj skórę co 4 godziny w pierwszym tygodniu stosowania oraz po zmianie rozmiaru skarpetki. Tymczasowe ślady powstałe w wyniku kontaktu ze skarpetką są normalne, jeśli zanikają w ciągu 8 godzin.
- Zmieniaj stopy przynajmniej co 8 godzin.
- Skarpetkę i czujnik pierz ręcznie co 2 tygodnie lub w przypadku zabrudzenia. Całkowicie wysusz przed użyciem.
- Przed każdym założeniem skarpetki sprawdź, czy stopy dziecka nie są podrażnione. NIE stosuj na stopie z podrażnieniem skóry.

## Co zrobić, jeśli skóra jest podrażniona?

- Przerwij stosowanie na stopie z podrażnioną skórą i zakładaj skarpetkę wyłącznie na zdrową stopę, aż do całkowitego ustąpienia podrażnienia.
- Jeśli podrażnienie nie ustąpi w ciągu 8 godzin, skontaktuj się ze swoim lekarzem, aby ustalić, czy potrzebny jest zapasowy pulsoksymetr.
- Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Owlet, aby uzyskać indywidualną pomoc, jak unikać pojawiania się czerwonych śladów.
- Co 4 godziny sprawdzaj skórę pod skarpetką na stopie z nieuszkodzoną skórą, aby upewnić się, że podrażnienie nie wystąpi ponownie.
- Jeśli na obu stopach pojawi się podrażnienie, zaprzestań stosowania skarpetki i skonsultuj się z lekarzem. Ponowne założenie skarpetki na podrażnioną skórę może spowodować większe uszkodzenia skóry.



# Czyszczenie skarpetki



Dbanie o tekstylną skarpetkę, czujnik i stację bazową sprawi, że skarpetka Dream Sock będzie służyć dłużej i będzie wygodniejsza dla dziecka. Zalecamy pranie skarpetki i mycie czujnika co najmniej co dwa tygodnie, a stacji bazowej co najmniej co 30 dni. Jeśli się zabrudzą, może zaistnieć potrzeba ich częstszego prania i mycia.

Zapoznaj się z rozdziałem 8 Instrukcji dla użytkownika: Czyszczenie, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia.

# Znajdowanie miejsca na stację bazową

Po skonfigurowaniu aplikacji konieczne będzie umieszczenie stacji bazowej w najlepszym miejscu w domu. Lokalizacja stacji bazowej w domu ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania i bezpieczeństwa. Skorzystaj z poniższego przewodnika, aby ustalić najlepsze miejsce na stację bazową.

## Umieszczanie stacji bazowej

- W zależności od domu, pokój dziecka może NIE być najlepszą lokalizacją. W ciągu dnia może być konieczne przeniesienie stacji bazowej, aby zawsze ją słyszeć.
- Stacja bazowa jest głównym źródłem wszystkich powiadomień, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych. Powinna być umieszczona w taki sposób, aby opiekun mógł słyszeć powiadomienia pomimo hałasu w tle. W razie potrzeby przenieś ją w ciągu dnia.
- Stacja bazowa powinna być tak zlokalizowana, aby budziła opiekunów podczas wysyłania powiadomień. Oświetlenie stacji bazowej zostanie automatycznie przyciemnione w ciemniejszych pomieszczeniach.
- Stacja bazowa musi znajdować się w zasięgu domowej sieci Wi-Fi.
- W większości przypadków czujnik i stacja bazowa muszą po prostu znajdować się w tym samym domu (w odległości nie większej niż 30 metrów od siebie), aby mogły się komunikować. Jednak rozmiar i układ domu mogą mieć wpływ na siłę sygnału, co wymaga umieszczenia stacji bazowej bliżej czujnika.



### OSTROŻNIE.


Ustaw stację bazową i ułóż przewód z dala od łóżeczka i poza zasięgiem dziecka, aby zmniejszyć ryzyko uduszenia przewodem.


**NIE** umieszczaj stacji bazowej w żadnym położeniu, które mogłoby spowodować jej upadek na dziecko. Upadek może spowodować uszkodzek na zdrowiu.

## Wskaźnik zasięgu Bluetooth (w aplikacji)

- Wskazuje jakość połączenia czujnika Bluetooth ze stacją bazową.
- Aby poprawić połączenie czujnika, przesuń stację bazową bliżej dziecka.

## Zalecane

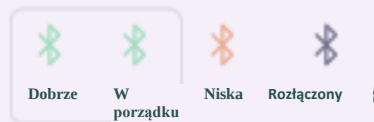

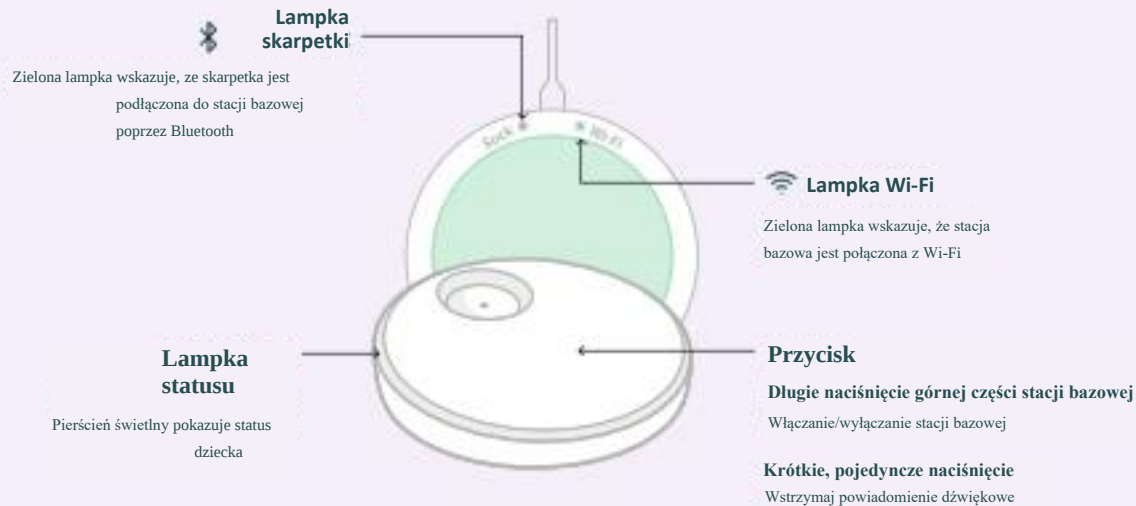

## Gdy nie używasz – wyłącz monitorowanie i naładuj czujnik



Umieść czujnik na stacji bazowej, aby przerwać korzystanie z urządzenia i naładować czujnik. Spowoduje to również wyłączenie wszystkich powiadomień do czasu usunięcia czujnika ze stacji bazowej.


Stacja bazowa będzie pulsować na biało podczas ładowania czujnika i będzie świecić stałym światłem białym, gdy czujnik będzie w pełni naładowany. Całkowite naładowanie czujnika trwa 90 minut, a ładowanie do 8 godzin pracy trwa 20 minut.

Możesz także nacisnąć i przytrzymać stację bazową, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zgaśnięcie lampka (monitorowanie zostanie wyłączone). Żadne powiadomienia nie będą emitowane, nawet jeśli czujnik jest przy dziecku. Szybkie dotknięcie ponownie włączy stację bazową i wznowi monitorowanie.



**NACIŚNIJ**

Lub użyj przełącznika bazy w aplikacji.

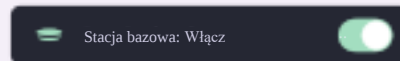

### Tryb odzyskiwania

Gdy stacja bazowa jest wyłączona, sesja monitorowania rozpocznie się automatycznie po 20 minutach, jeśli zostaną wykryte kolejne 4 minuty odczytów.

Tryb odzyskiwania można wyłączyć w centrum sterowania skarpetką na ekranie głównym aplikacji. Tryb ten zostanie automatycznie włączony po rozpoczęciu następnej sesji skarpetki.

Jeśli nie można włączyć trybu odzyskiwania, zostanie wysłane powiadomienie push.

| Wskaźnik stacji bazowej                                                                                                                        | Status                                        | Znaczenie (stan powiadomienia)                                                                                                                                                               | Co należy zrobić                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Lampka miga na czerwono – wysoki priorytet</b>          | Niskie tętno                                  | Tętno poniżej 50 bpm                                                                                                                                                                         | Natychmiast sprawdź, czy z dzieckiem wszystko jest w porządku. Sprawdź oddech i kolor                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                | Wysokie tętno                                 | Tętno powyżej 220 bpm                                                                                                                                                                        | skóry dziecka (czy dziecko jest sine lub blade), aktywność i czujność. Jeśli masz obawy, że z dzieckiem jest coś nie w porządku, uzyskaj pomoc medyczną.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                | Niskie nasycenie tlenem                       | Nasycenie tlenem jest poniżej 80%                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br><b>Lampka miga na żółto – średni priorytet</b>             | Trudności z otrzymywaniem odczytów            | Czujnik może być umieszczony nieprawidłowo i nie być w stanie dostarczać prawidłowych danych przez ostatnie 90 sekund bez ruchu LUB brak danych przez 240 sekund i występuje nadmierny ruch. | Sprawdź umiejscowienie czujnika i upewnij się, że dziecko nie porusza się lub nie porusza się nadmiernie (np. nie jest huśtane lub trzymane). Wyłączenie tego powiadomienia może zająć 10–20 sekund po zmianie położenia czujnika ORAZ gdy dziecko przestanie się poruszać. Wyłącz monitorowanie do momentu ustania ruchu. |
|                                                                                                                                                | Utrata zasilania                              | Stacja bazowa utraciła zasilanie i pracuje na akumulatorze zapasowym.                                                                                                                        | Sprawdź połączenia i przywróć zasilanie lub zaprzestań korzystania z wyrobu.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                | Problemy z łącznością                         | Czujnik został odłączony od stacji bazowej na 60 sekund, ponieważ znalazł się poza zasięgiem stacji bazowej, utracił zasilanie lub wystąpił problem wewnętrzny.                              | Przesuń stację bazową bliżej czujnika lub upewnij się, że nie nie blokuje sygnału między nimi. Sprawdź w aplikacji poziom naładowania akumulatora czujnika.                                                                                                                                                                |
| <br><b>Lampka świeci ciągle na niebiesko – niski priorytet</b> | Niski poziom naładowania akumulatora czujnika | Pozostało 50 minut pracy lub mniej akumulatora czujnika.                                                                                                                                     | Szybko umieść czujnik na ładowarce.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br><b>Lampka miga na lawendowo – powiadomienie</b>            | Asystent snu                                  | Dziecko porusza się nadmiernie lub porusza się przez dłuższy czas.                                                                                                                           | Sprawdź stan dziecka; może potrzebować pomocy w ponownym zaśnięciu.                                                                                                                                                                                                                                                        |

Wskaźnik stacji bazowej

Znaczenie (stan statusu)



Lampka pulsuje na zielono

Czujnik jest podłączony do stacji bazowej i odbiera odczyty



Szybkie rozproszone zielone światło lampki

Czujnik otrzymuje wstępne odczyty lub dziecko się porusza. Odczyty nie będą wyświetlane w aplikacji podczas dużego ruchu.



Stale białe światło lampki

Ładowanie czujnika na stacji bazowej jest zakończone



Pulsuje na białą

Trwa ładowanie czujnika na stacji bazowej



Lampka miga na białą

Ładowanie czujnika na stacji bazowej nie jest sparowane ze stacją bazową




Ładowanie czujnika na stacji bazowej jest sparowane z inną stacją bazową

# Powiadomienia o stanie zdrowia

Wyświetlaj na żywo częstość tętna i nasycenia tlenem podczas sesji snu, a także otrzymuj powiadomienia, jeśli tętno lub nasycenie tlenem wyjdą poza zadane zakresy


## Zakresy częstości tętna

Powiadomienie zostanie uruchomione, gdy tętno dziecka wyniesie:

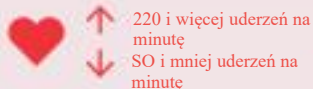

## Zakresy nasycenia tlenem

Powiadomienie zostanie uruchomione, gdy nasycenie tlenem dziecka wyniesie:

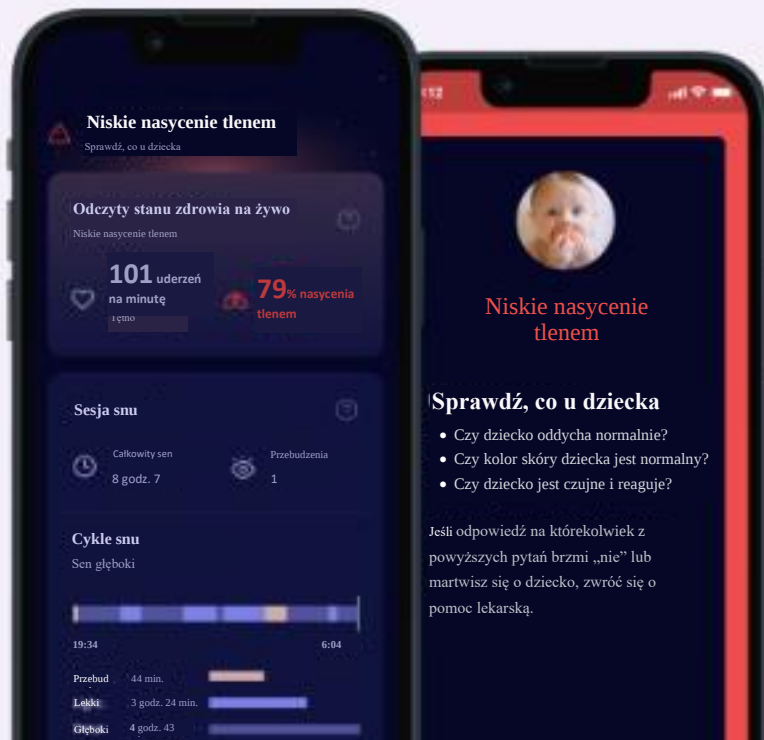



# Jak włączyć powiadomienia o stanie zdrowia

Włącz powiadomienia o stanie zdrowia w ustawieniach urządzenia.

## Włączanie powiadomień o stanie zdrowia

Aby włączyć Powiadomienia o stanie zdrowia, przejdź do ustawień skarpetki

Następnie włącz Powiadomienia o stanie zdrowia i ukończ wymagane szkolenie. Aby ukończyć szkolenie, konieczne będzie przetestowanie dźwięku czerwonego powiadomienia.

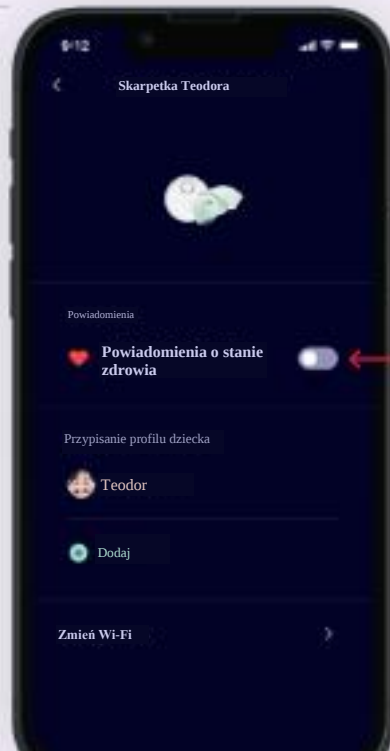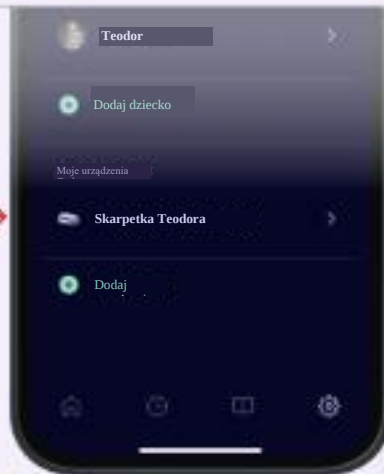

# Normalne zakresy odczytów na żywo

Po otrzymaniu czerwonego powiadomienia pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest sprawdzenie, czy z dzieckiem wszystko jest w porządku. Sprawdź oddech dziecka, kolor skóry (czy jest sina lub blada), aktywność i czujność. Jeśli masz obawy, że z dzieckiem jest coś nie w porządku, uzyskaj pomoc medyczną.

Więcej informacji na temat normalnych odczytów stanu zdrowia można znaleźć w rozdziale 7.2 Instrukcji dla użytkownika Dream Sock

## Tętno

Po włączeniu powiadomień o stanie zdrowia aplikacja będzie wyświetlać aktualną wartość tętna dziecka. To normalne, że dziecko ma niższe tętno podczas snu niż na jawie. Zmiany zachodzące podczas sesji, takie jak budzenie się i zasypianie, wiercenie się i zmiana boku, a nawet płacz, są normalne w przypadku dziecka. Zapraszamy na stronę [healthychildren.org](https://healthychildren.org) po więcej informacji; w razie wystąpienia problemów należy udać się do lekarza.

| Wiek           | Normalne tętno podczas snu | Normalne tętno po przebudzeniu |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| 0–3 miesiące   | 90–160 BPM                 | 100–205 BPM                    |
| 4–12 miesięcy  | 90–160 BPM                 | 100–180 BPM                    |
| 12–18 miesięcy | 80–120 BPM                 | 98–140 BPM                     |

## Nasylenie tlenem

To normalne, że nasylenie tlenem krwi dziecka obniża się podczas snu, a nawet ulega wahaniom podczas snu w różnych pozycjach i stanach snu. Normalny poziom nasycenia tlenem wynosi powyżej 90%, jednak często zdarza się, że u dziecka od czasu do czasu spada poniżej 90%. W przypadku długotrwałych lub częstych odczytów poniżej 90% sprawdź stan dziecka, gdyż może być konieczna konsultacja z lekarzem.

| Wiek             | Normalne Nasylenie tlenem |
|------------------|---------------------------|
| 0 do 18 miesięcy | 90–100%                   |

Jeśli uważasz, że powiadomienie o stanie zdrowia zostało wysłane przez pomyłkę, przyczyną może być jedno z następujących:

- Umieszczenie skarpetki
- Ruch lub płacz
- Karmienie/odbijanie się
- Zimne stopy

# Rozwiązywanie problemów

Skorzystaj z poniższego przewodnika rozwiązywania problemów, aby usunąć problemy związane z konfiguracją, połączeniem i obsługą.

Informacje na temat powiadomień dotyczących rozwiązywania problemów, w tym powiadomień technicznych, można znaleźć na poprzedniej

| Problem                                                                  | Możliwe przyczyny                                                                           | Działania                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podczas konfiguracji nie widać sieci Wi-Fi Owlet                         | Stacja bazowa nie jest włączona                                                             | Podłącz stację bazową do gniazdka ściennego.                                                                                                        |
|                                                                          | Już połączono z siecią Wi-Fi                                                                | Sprawdź, czy świeci zielona lampka Wi-Fi u dołu stacji dokującej. Jeśli tak, można pominąć ten krok i kontynuować konfigurowanie konta w aplikacji. |
| Domowa sieć Wi-Fi nie jest widoczna w aplikacji Owlet                    | Router domowy pracuje w paśmie 5,0 GHz (Owlet obsługuje tylko pasmo 2,4 GHz).               | Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest podłączone do sieci 2,4 GHz (większość routerów 5,0 GHz obsługuje również częstotliwość 2,4 GHz).              |
| Stacja bazowa nie łączy się z siecią Wi-Fi                               | Nieprawidłowe hasło                                                                         | Sprawdź dokładnie hasło do swojej sieci Wi-Fi.                                                                                                      |
|                                                                          | Stacja bazowa jest poza zasięgiem routera Wi-Fi                                             | W celu przeprowadzenia konfiguracji przesuń stację bazową bliżej routera Wi-Fi.                                                                     |
|                                                                          | Wi-Fi nie działa                                                                            | Ponownie uruchom urządzenie mobilne i ponownie połącz się z siecią Wi-Fi lub zresetuj router Wi-Fi.                                                 |
|                                                                          | Sieć Wi-Fi wymaga uwierzytelnienia przez przeglądarkę lub ma ograniczenia zapory sieciowej. | Wypróbuj inną sieć.                                                                                                                                 |
|                                                                          | Router domowy pracuje w paśmie 5,0 GHz (Owlet obsługuje tylko pasmo 2,4 GHz).               | Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest podłączone do sieci 2,4 GHz (większość routerów 5,0 GHz obsługuje również częstotliwość 2,4 GHz).              |
| Nie można zalogować się do aplikacji                                     | Nie pamiętasz hasła                                                                         | Zresetuj hasło. Patrz rozdział 10.2 Instrukcji dla użytkownika.                                                                                     |
| Czujnik nie łączy się ze stacją bazową                                   | Czujnik jest poza zasięgiem stacji bazowej                                                  | Przenieś stację bazową w inne miejsce.                                                                                                              |
|                                                                          | Inne urządzenia zakłócają działanie czujnika.                                               | Przenieś inne urządzenia elektroniczne bliżej czujnika lub stacji bazowej albo przenieś stację bazową w inne miejsce.                               |
| Stacja bazowa nie rejestruje się na Twoim koncie w aplikacji Owlet Dream | Stacja bazowa i urządzenie mobilne nie są w tej samej sieci Wi-Fi                           | Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, co stacja bazowa.                                                         |
|                                                                          | Stacja bazowa jest odłączona od sieci Wi-Fi.                                                | Sprawdź zieloną lampkę Wi-Fi u dołu stacji bazowej. Powinna być włączona. W przeciwnym razie ponownie połącz stację bazową z siecią Wi-Fi.          |

| Problem                                                       | Możliwe przyczyny                                                 | Działania                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stacja bazowa jest odłączona od Internetu.                    | Stacja bazowa jest poza zasięgiem routera Wi-Fi.                  | Przybliż do siebie stację bazową i router Wi-Fi. (UWAGA: ani przedłużacze zasięgu Wi-Fi, ani drugie routery nie pomogą.)           |
|                                                               | Twoje domowe Wi-Fi nie działa.                                    | Zresetuj router Wi-Fi.                                                                                                             |
| Resetowanie aplikacji i prośba o ponowną konfigurację systemu | Stacja bazowa została zarejestrowana na innym koncie użytkownika. | Stacja bazowa może być zarejestrowana tylko na jednym koncie w danym momencie. Korzystaj z jednego konta dla wszystkich opiekunów. |
|                                                               | Podczas logowania użyto innego konta.                             | Wyloguj się z aplikacji i zaloguj na właściwe konto.                                                                               |
| Nie można wylogować się z aplikacji                           | Konfiguracja jest niekompletna                                    | Zakończ konfigurację lub odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację.                                                               |

**Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących rozdziałach Instrukcji dla użytkownika:**

| ROZDZIAŁ | TYTUŁ ROZDZIAŁU                     | ROZDZIAŁ | TYTUŁ ROZDZIAŁU                     |
|----------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 1        | Informacje ogólne                   | 5        | Konfiguracja                        |
| 1.1      | Operator ekonomiczny                | 7        | Korzystanie z aplikacji Owlet Dream |
| 2        | Informacje dotyczące bezpieczeństwa | 6.3      | Powiadomienia i wskaźniki           |
| 4.3      | Stacja bazowa                       | 8        | Czyszczenie skarpetki i czujnika    |
| 4.4      | Czujnik                             | 11       | Rozwiązywanie problemów             |
| 4.5      | Skarpetka                           | 12       | Dane techniczne                     |

### Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy  
Owlet Baby Care  
Owlet Baby Care, Inc.  
3300 N Ashton Blvd., Suite 300  
Lehi, UT, 84043, USA  
[www.owletcare.com](http://www.owletcare.com)