


FairyWill

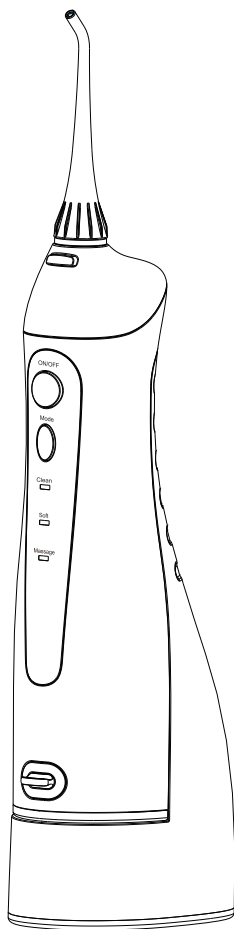

Irygator
F5020A

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu FairyWill. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej na przyszłość.

Środki bezpieczeństwa


Wszystkie informacje zawarte w tym rozdziale mają na celu powiadomienia użytkownika o prawidłowej i bezpiecznej obsłudze urządzenia, aby uniknąć obrażeń oraz szkód materialnych.

1. Dzieci, niemowlęta oraz osoby, które nie są w stanie obsługiwać urządzenia, nie powinny używać go samodzielnie. Prosimy również trzymać urządzenie z dala od dzieci i poza ich zasięgiem.
2. Nigdy nie próbuj demontować, naprawiać lub ingerować w urządzenie.
3. Nie umieszczaj ani nie trzymaj urządzenia w miejscu, w którym może ono upaść lub przypadkowo wpaść do wanny, czy innego wilgotnego miejsca.
4. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od zasilania. Nie wolno wyciągać urządzenia z wody, jeżeli nie jest odłączone od zasilania.
5. Nie używaj produktu podczas kąpieli.

Uwaga:

1. To urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru osoby dorosłej wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.
3. Należy wyłącznie używać zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.
4. Akumulator musi zostać wyjęty z urządzenia przed jego wyrzuceniem.
5. Podczas wyjmowania akumulatora, urządzenie musi być odłączone od źródła zasilania.
6. Należy zutylizować akumulator w bezpieczny sposób.
7. Informacje na temat usuwania akumulatora znajdują się w części "Utylizacja".
8. Nie należy napełniać zbiornika wodą o temperaturze wyższej niż 40°C.
9. W przypadku uszkodzenia zewnętrznego przewodu, powinien on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia jakiegokolwiek zagrożenia.
10. Należy trzymać przewód z dala od rozgrzanych powierzchni.
11. Prosimy nie używać urządzenia w przypadku zgubienia dyszy.
12. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
13. Nie należy używać do celów innych niż czyszczenie jamy ustnej.
14. Należy trzymać dyszę z dala od małych dzieci. Dysza posiada małe wymiary i może zostać połknięta lub utknąć w gardle.
15. Nie zaleca się stosowania płynu do płukania jamy ustnej, ponieważ może posiadać właściwości żrące i wpłynąć na żywotność irygatora.
16. Osoby, które doświadczają bólu zębów lub dziąseł powinny skonsultować się ze swoim dentystą przed użyciem produktu.
17. Nie należy zbyt mocno dociskać dyszy do zębów lub dziąseł, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.

Opis produktu

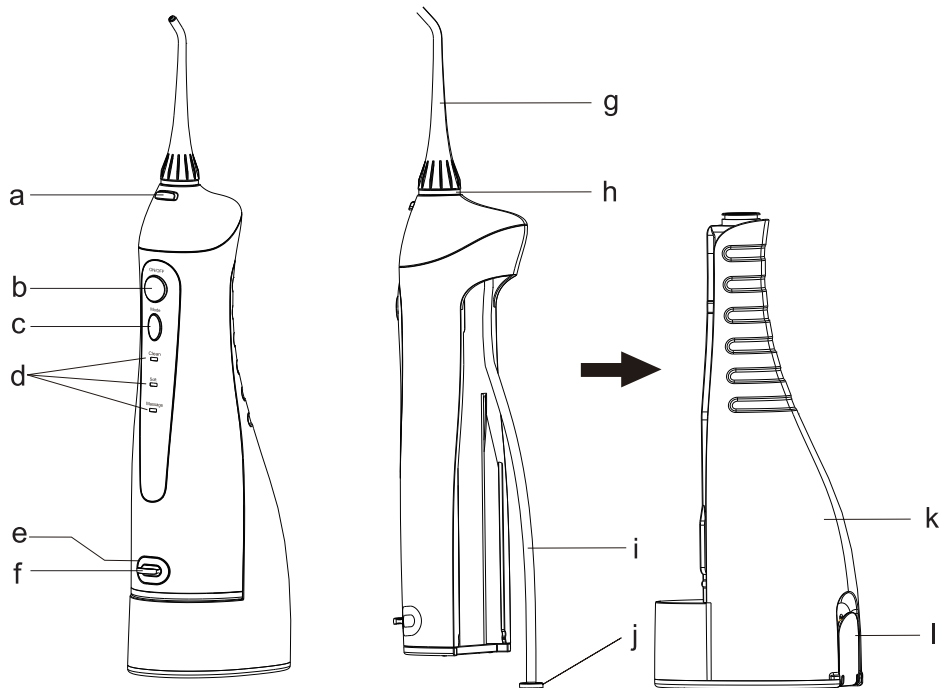

- a. Przycisk zwalniający dyszę
- b. Przycisk zasilający
- c. Przycisk „Mode”
- d. Wskaźnik trybu
- e. Port ładowania
- f. Pokrywa portu ładowania

- g. Dysza
- h. Pierścień dyszy
- i. Wężyk dyszy
- j. Filtrowy
- k. Pojemnik na wodę (260ml)
- l. Kork pojemnika na wodę

Uwaga:

Wewnątrz głównego urządzenia przed pierwszym użyciem mogą być widoczne pozostałości płynu (zbiornik, rurka zasysająca wodę, itp.). Jest to pozostała woda destylowana, która została użyta do testu wydajności (przepływu wody). Woda nie szkodzi Twojemu zdrowiu.

Sposób użytkowania


Ładowanie urządzenia (Rys. 1)

1. Prawidłowo załóż pokrywę pojemnika przed użyciem produktu, aby uniknąć wycieku wody.
2. Zdejmij pokrywę podstawy ładowarki i włóż urządzenie do gniazda (upewnij się, że we wtyczce urządzenia nie ma pozostałości płynu).

3. Włóż adapter ładowania do gniazdka elektrycznego.
4. Wskaźnik "CH" miga podczas prawidłowego ładowania urządzenia. Po całkowitym naładowaniu urządzenia wskaźnik powinien się wyłączyć.
5. Załóż pokrywę na podstawę ładowarki po zakończeniu ładowania.

Uwaga:


Jeśli wskaźnik "CH" miga w trakcie lub po zakończeniu irygacji, oznacza to, że należy naładować akumulator. Pełne naładowanie trwa około 4 godzin.

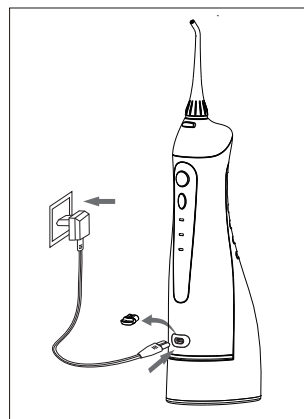

(Rys. 1)

Użytkowanie irygatora

1. Zamocuj dyszę na urządzeniu. (Rys. 2)
2. Otwórz pokrywę pojemnika na wodę, aby go napełnić. Temperatura wody nie powinna przekraczać 40°C. Następnie zamknij pokrywę. (Rys. 3)
3. Możliwe jest także zsuniecie pojemnika na wodę z urządzenia, napełnienie wodą o odpowiedniej temperaturze, a następnie zamocowanie pojemnika na urządzeniu. (Rys. 4)
4. Naciśnij przycisk „Mode”, aby wybrać żądany tryb. Podczas nawadniania można zmieniać tryb pracy. (Rys. 5)

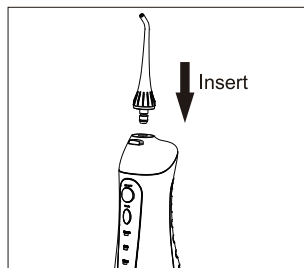


(Rys. 2)

Dostępne tryby pracy:

Clean: odpowiedni do normalnego czyszczenia, trwa około 90 s (+/-15 s).


Soft: przeznaczony do delikatnego czyszczenia wrażliwych dziąseł przez około 110 s (+/-15 s).

Massage: służy do czyszczenia i masowania dziąseł przez około 100 s (+/-15 s).

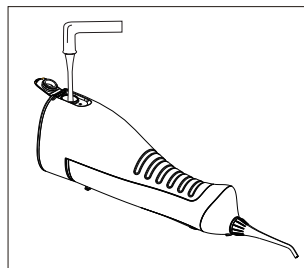


(Rys. 3)

5. Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej z końcówką dyszy skierowaną w stronę zębów.
 6. Trzymaj usta lekko otwarte, aby woda mogła swobodnie wypływać.
- Naciśnij przycisk zasilający, aby rozpocząć nawadnianie. (Rys. 6)

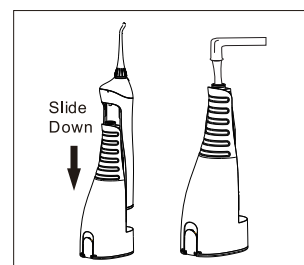


(Rys. 4)

- 1) Skieruj strumień wody pod kątem 90 stopni na zęby i dziąsła.
- 2) Powoli skieruj strumień wody wzdłuż zębów.
- 3) Skieruj strumień wody wzdłuż linii dziąseł, trzymając końcówkę dyszy pod kątem 90 stopni w stosunku do tkanki dziąsła.
- 4) Dokładnie wyczyść każdą strefę jamy ustnej oraz okolice aparatów ortodontycznych.

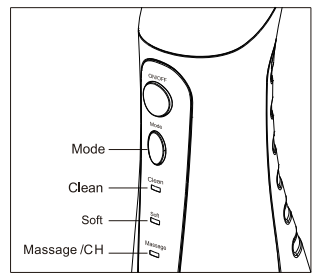

(Rys. 5)


7. Naciśnij przycisk zasilający, a następnie naciśnij przycisk zwalniający dyszę, aby w razie potrzeby wymienić dyszę na nową. (Rys.7)
8. Po zakończeniu irygacji należy ponownie nacisnąć przycisk zasilający, aby wyłączyć urządzenie.

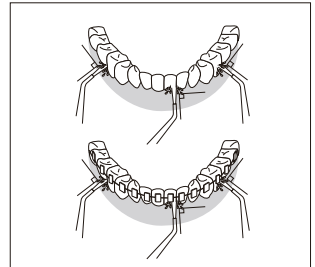

(Rys. 6)

Zakończenie pracy z urządzeniem (Rys.8)


1. Otwórz korek pojemnika na wodę i usuń wodę znajdującą się w zbiorniku.
2. Naciśnij przycisk zasilający, aby włączyć urządzenie i wylać wodę znajdującą się wewnątrz urządzenia.
3. Naciśnij ponownie przycisk zasilający, aby wyłączyć urządzenie i zamknij pokrywę pojemnika na wodę.
4. Wytrzyj urządzenie suchym ręcznikiem.

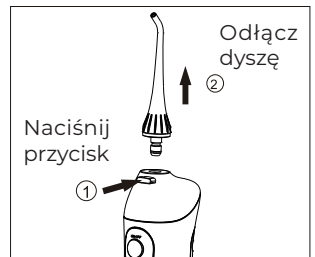

(Rys. 7)

Uwaga:

Aby zapobiec rozmnażaniu się bakterii, należy upewnić się, że wewnątrz urządzenia nie pozostała woda. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przed odłożeniem go do opakowania należy je jak najszybciej wytrzeć i dokładnie wysuszyć.

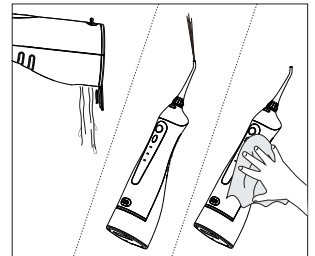

(Rys. 8)

Konserwacja

Urządzenie powinno być czyszczone wyłącznie wodą lub neutralnym środkiem czyszczącym. Nigdy nie używaj środków żrących lub ściernych (np. octu lub środków do usuwania kamienia), ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Do mycia nie należy używać gorącej wody o temperaturze powyżej 50°C. Urządzenie należy trzymać z dala od miejsc o wysokiej temperaturze i unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Główne urządzenie

- 1. Usuń zabrudzenia, używając czystego ręcznika z mydłem w płynie do czyszczenia urządzenia i suchego ręcznika do wysuszenia.
- 2. Podczas czyszczenia, urządzenia nie należy zanurzać w wodzie.
- 3. Po umyciu wodą urządzenie należy dokładnie wysuszyć.

Korek pojemnika na wodę

Zetrzyj ręcznikiem wszelkie zanieczyszczenia.

Dysza

- 1. Przepłucz wodą i wytrzyj miękką szmatką.
- 2. Dyszę należy wymieniać co 6 miesięcy.

Wężyk dyszy

- 1. Przepłucz wodą i wytrzyj miękką szmatką.
- 2. Nie należy zginać, ciągnąć ani skręcać wężyka.

Pojemnik

- 1. Przepłucz wodą i wytrzyj miękką szmatką.
- 2. Jeśli zbiornik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go dokładnie wysuszyć.






Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo.	Możliwe, że produkt jest rozładowany przed pierwszym użytkowaniem lub nie był użytkowany przez 3 miesiące.	Ładuj urządzenie przez co najmniej 4 godziny.
Urządzenie działa tylko przez kilka minut, nawet po naładowaniu.	Akumulator może być uszkodzony.	Skontaktuj się z centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.
	Czas ładowania był niewystarczający.	Ładuj urządzenie przez co najmniej 4 godziny.
Ciśnienie wody jest bardzo niskie.	W dyszy znajdują się zanieczyszczenia.	Wymień dyszę.
	Dysza jest zdeformowana.	
	W filtrze znajdują się zanieczyszczenia.	Wyczyść filtr.
Woda nie wypływa.	Pojemnik na wodę jest pusty.	Napełnij pojemnik.
	Urządzenie jest zbyt mocno przechylone podczas pracy.	Używaj produktu w pozycji pionowej.

Utylizacja

Akumulator znajdujący się wewnątrz urządzenia jest łatwy do wyjęcia w celu recyklingu. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu i przed jego utylizacją, należy wyjąć akumulator z uchwytu, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Podczas wykonywania poniższych czynności należy pamiętać o ochronie oczu, dłoni, palców i powierzchni, na której się pracuje.

1. Usuń dwa kawałki gumowych nóżek na spodzie uchwytu (jak w punkcie 1 na Rys. 9)
2. Włóż śrubokręt w szczelinę znajdującą się w dolnej części uchwytu i przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić dolną zaślepkę. (Jak w punkcie 2 na Rys. 9)
3. Zsuń zbiornik na wodę z urządzenia i odkręć dwie śruby znajdujące się obok wężyka (Rys. 10)
4. Otwórz górną pokrywę i umieść część wewnętrzną na zewnątrz urządzenia, a następnie odkręć wszystkie śruby części wewnętrznej (Rys. 11).
5. Odetnij przewód akumulatora i wyjmij go z części wewnętrznej (Rys. 12).

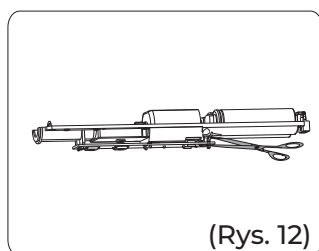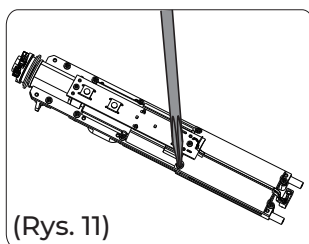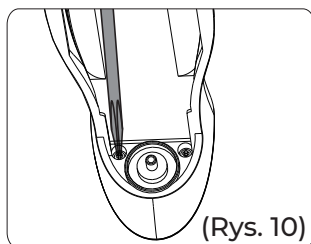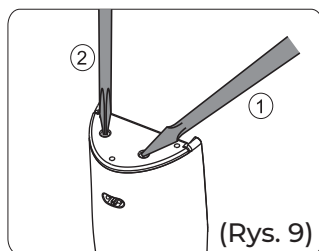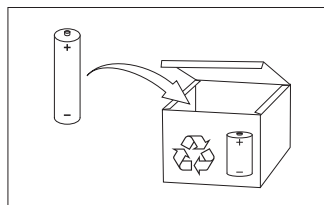

Jeśli masz pytania dotyczące recyklingu, skontaktuj się z lokalnym urzędem zajmującym się odpadami i recyklingiem.

 **Fairywill**
 www.fairywill.com
 support@fairywill.com



Wyprodukowano w Chinach

Dystrybutor: Zhuhai Zonghengyoupin Kuajingdianshang Youxianggongsi,
Zhuhai,
Guangdong, 519031, CN

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.