


Sposób stosowania

OSTRZEŻENIE

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować danych osobowych bez nadzoru.
- To urządzenie może być eksploatowane wyłącznie przy bezpiecznej, bardzo niskiej objętościąge zgodne z oznaczeniem na urządzeniu za pomocą dostarczonego zasilacza IVP1200-1500B.
- Jeśli przewód zasilający lub zasilacz AC/DC jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby umówić się na wymianę.
- NIE WOLNO używać tego urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Jeśli cierpisz na choroby skóry, przed użyciem skonsultuj się z dermatologiem.
- Nie stosować na obszarach, które były ostatnio operowane.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru. Zawsze odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane.
- ⚠ NIE WOLNO używać szpilek

UWAGA: Niniejsze instrukcje dotyczą zarówno masażera do stóp Comfort 360° Air, jak i masażera do stóp z pełną kompresją.

OPIS URZĄDZENIA

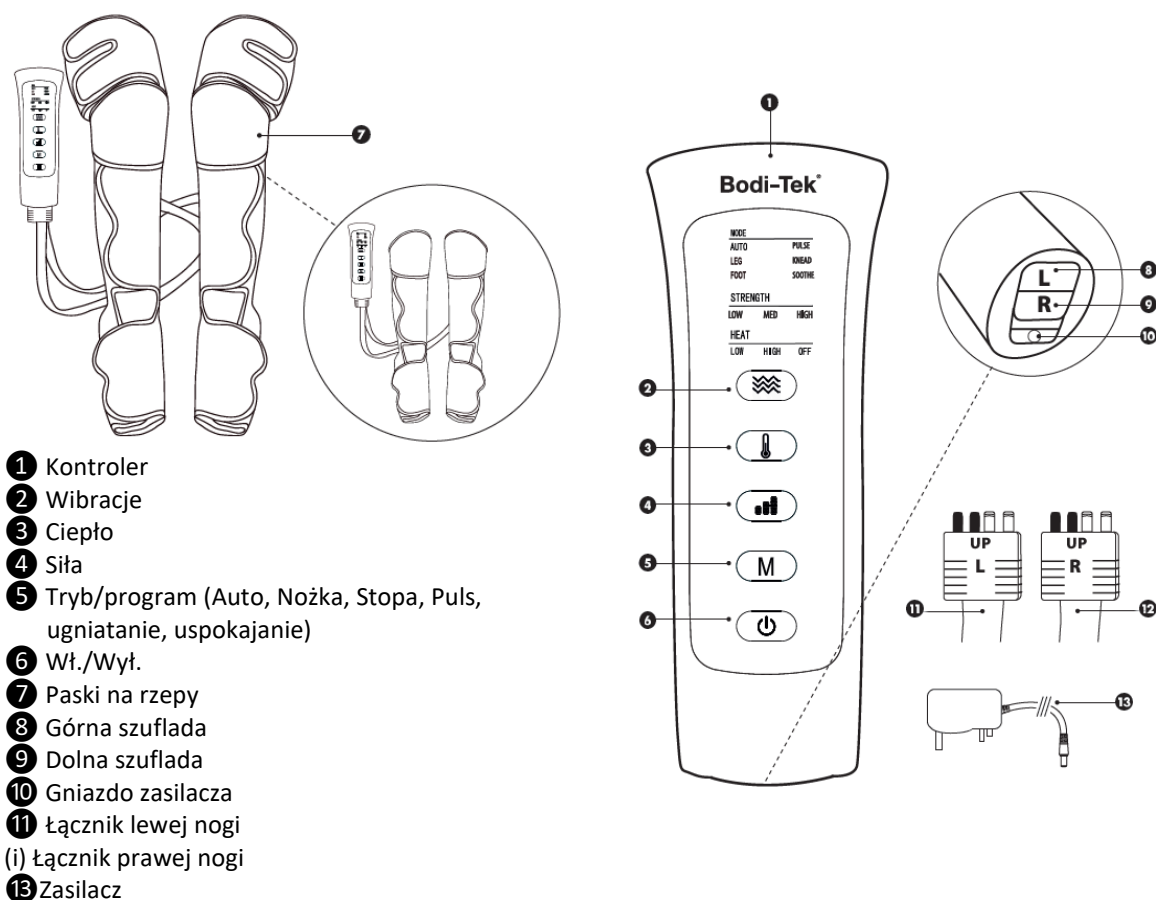

PRZED UŻYCIEM



Upewnij się, że siedzisz. Użyj pasków na rzepy, aby wyregulować rękawy dobrze pasują. Wymagane jest, aby rękawy nie były mocno zaciśnięte, a jedynie luźno. Podłącz do sterownika zarówno lewy, jak i prawy przewód złączy.

Włóż prawe złącze stopy do dolnego gniazda kontrolera tak, aby było skierowane do góry "do g



Włóż złącze lewej stopy do górnego gniazda na kontrolerze z napisem "UP" skierowanym do gó. Mocno wciśnij oba złącza do środka.

Podłącz zasilacz do gniazdka zasilacza i podłącz go do sieci.

UŻYWAĆ

- Włącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy.

Buty zaczną się kompresować.

Uwaga: Masażer do stóp posiada funkcję pamięci i uruchamia się ponownie z ostatnio używanym ustawieniem.

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy, aby go wyłączyć.



Programy / Tryby

Naciśnij przycisk M/Mode/Program, aby wybrać następujące opcje:

AUTO – Jednoczesna kompresja pulsująca przez stopy i nogi.

NOGI – Tylko kompresja nóg.

STOPY – Kompresja tylko stóp.

PULS

Uczucie stopniowego ściskania, które powoli się nasila

WYRABIANIA

Wyższy poziom kompresji, który się nasila, zaczynając od stóp do nóg

USTĘPSTW

Delikatny masaż relaksacyjny, który promieniuje do stóp i nóg



Wibracja

Naciśnij symbol wibracji, aby przetaczać się między:

Stać (biała)

Intensywny (zielony)

Przerywany (niebieski)

Poczujesz wibracje na łydkach.



Ciepło

Wybieraj spośród: Niski / Wysoki / Wyłączony

Wysoka temperatura - 49°C

Najniższa temperatura - 38°C

Masażer do stóp wyłączy się automatycznie po 20 minutach.

PO UŻYCIU

- Po użyciu skóra może wydawać się zaczerwieniona. To powinno szybko zniknąć.

- Twoje mięśnie również mogą trochę boleć. Jest to normalne i poprawi się przy regularnym korzystaniu z urządzenia.

Wskazówka: Upewnij się, że jesteś nawodniony, aby pomóc wypłukać wszelkie toksyny i skrócić czas regeneracji mięśni.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłączyć i wyczyścić urządzenie miękką, damp płótno.
- Nie zanurzać urządzenia/urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Przed przechowywaniem należy dokładnie wysuszyć urządzenie.



WAŻNE INFORMACJE

Wewnątrz urządzenia nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.

DYSPOZYCJI



Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2002/96/WE) została wprowadzona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technologii recyklingu w celu zmniejszenia wpływu na środowisko, oszczędzania energii i zasobów oraz zapobiegania rozlewaniu się materiałów niebezpiecznych na wysypiska.

Ten produkt jest klasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny, dlatego po zakończeniu jego eksploatacji należy upewnić się, że jest on prawidłowo utylizowany, zgodnie z wymaganiami władz lokalnych. Produktu NIE wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Poddaj recyklingowi w sposób odpowiedzialny:

1. Zapoznaj się z lokalnymi wytycznymi miejskimi
2. Oddziel elementy i zutylizuj je w odpowiedni sposób

SPECYFIKACJA

Modelu: BT-MAFL / BT-MAHL

Wejście: 12V  1500mAh 18W



Przeczytaj te instrukcje i zachowaj na przyszłość.



To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach używać.



Oznacza to, że urządzenie odpowiada prądowi przewodnictwa dotyczącego produktu leczniczych.



Środkowy sworzeń dodatni



Prąd stały



SKONTAKTUJ SIĘ Z CENTRUM SERWISOWYM:

Wyłączny importer i dystrybutor na Czechy i Słowację:

BORGY CZ, a. s.

Reklamacje / Serwis

Kampus RTK, Zápy 4, 250 01, Republika Czeska

E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz